



Artwork Info:

Artwork Ref:	16719
Previous/Base:	30825
Product Code:	N/A
Component:	IFU
Brand:	Iodosorb
Range:	Ointment
Product:	Cadexomer Ointment With Iodine
Quantity:	N/A
Barcode:	N/A
Dimensions:	295 x 310 mm
Version:	01
Artworker:	Ezra
Amend Date:	14/Nov/18

Tech Colours:

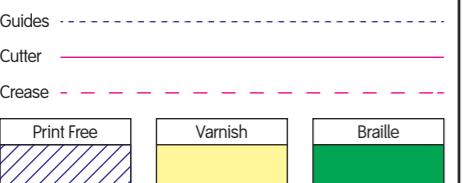

Artwork Colours:

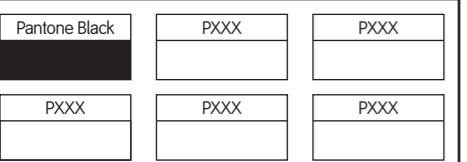

295mm


310 mm

ENG IODOSORB® OINTMENT Cadexomer Ointment with Iodine <p>STERILE A Aseptically processed. Single use only. Do not use contents if tube is opened or damaged or after the expiry date printed on the pack. Store in a dry place (<25°C).</p> <p>Description IODOSORB Ointment is a sterile dark brown ointment consisting of cadexomer (modified starch microbeads), polyethylene glycol, poloxamer and iodine. The cadexomer beads are biodegradable. IODOSORB Ointment will remove excess exudate and slough from the wound bed, and reduce bacteria at the wound surface. In doing this, it transforms into a soft moist gel.</p> <p>Indications IODOSORB Ointment is indicated for the topical treatment of chronic exuding wounds. IODOSORB Ointment can be used under compression therapy. IODOSORB Ointment may be used on infected wounds. Where the product is used on infected wounds the infection should be inspected and treated as per local clinical protocol.</p> <p>Contraindications IODOSORB Ointment should not be used on dry necrotic tissue, or on patients with a known sensitivity to iodine or any of the other components. Do not use IODOSORB Ointment on children, pregnant or lactating women or people with renal impairment or thyroid disorders (e.g. Hashimoto's thyroiditis or non toxic nodular goitre).</p> <p>Warnings There is a potential risk of interaction with lithium, resulting in an increased possibility of hypothyroidism. Do not use IODOSORB Ointment concomitantly with mercurial antiseptics or taurouridine. If the patient is about to undergo thyroid function tests, they should inform the doctor.</p> <p>Precautions for use</p> <ul style="list-style-type: none"> The contents of the tube should be used on one patient only. Do not use IODOSORB Ointment in the vicinity of the eyes, ears, nose or mouth. The product is for external use only. IODOSORB Ointment may cause a slight transient pain especially in the first hour after treatment. This is a sign that the product is beginning to clean the wound. Occasionally, IODOSORB Ointment may cause the skin around the wound edges to swell or redden. This will usually pass. If these symptoms persist or if the patient experiences any other symptoms, they should contact the doctor or nurse. Contact with the skin around the wound edges/intact skin should be minimised. It is possible for an adherent crust to form if the IODOSORB Ointment is allowed to dry out. A single application of IODOSORB Ointment should not exceed 50 g (equivalent to 5 x 10g tubes) and not more than 150g (equivalent to 15 x 10g tubes) applied in one week. The duration of treatment should not exceed 3 months. <p>Instructions for use</p> <p>Applying IODOSORB Ointment</p> <ol style="list-style-type: none"> Wash hands thoroughly before and after use. Using gloved hands, clean the wound and the surrounding area with either a gentle stream of water or saline. DO NOT DRY the wound surface. Apply sufficient IODOSORB Ointment to a sterile dressing to form a layer 3mm deep, which conforms to the shape of the wound. Place the IODOSORB Ointment covered dressing onto the wound. Alternatively, apply IODOSORB Ointment to the wound and smooth into place with a gloved finger, to the shape of the wound and depth of 3mm. Cover the wound completely with an appropriate secondary dressing. Apply compression bandaging when appropriate. After application, the remaining contents of the tube should be discarded due to loss of sterility. <p>Changing IODOSORB Ointment</p> <p>IODOSORB Ointment should be changed when it has become saturated with wound fluid and all the iodine has been released. This is indicated by loss of colour, usually two to three times a week. If the wound is discharging heavily, daily changes may be needed. If necessary, soak the dressing for a few minutes, and then remove.</p> <p>2. Gently remove the IODOSORB Ointment using a stream of water or saline.</p> <p>3. Gently blot any excess fluid, leaving the wound surface slightly moist, before re-applying IODOSORB Ointment.</p> <p>Product Availability</p> <p>Code 66001297 2 x 20g 66001298 4 x 10g 66001299 1 x 40g</p> <p>Manufacturer Made in Sweden for Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England. </p> <p>Trade Mark of Smith & Nephew 0086 ©Smith & Nephew Date of issue 09/2011 www.smith-nephew.com</p> <p>Fabricant Fabriqué en Suède pour Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN Angleterre. "Marque de Smith & Nephew" ©Smith & Nephew Date d'édition 09/2011 www.smith-nephew.com www.iodosorb.com</p> <p>EC REP Smith & Nephew Orthopaedics GmbH Alemannenstraße 14, 78532 Tuttlingen, Germany 0250203 - 16719</p>	F IODOSORB® OINTMENT Cadexomer crème à l'iode <p>STERILE A Fabriqué sous conditions aseptiques. Exclusivement à usage unique. Ne pas utiliser si le tube est ouvert ou endommagé ou après la date de péremption imprimée sur le conditionnement. Conserver dans un endroit sec (<25°C).</p> <p>Description IODOSORB Ointment se présente sous forme d'une pomade stérile brun foncé. Il contient du cadexomer (microsphères d'amidon modifié), du polyéthylène glycol, du poloxamer et de l'iode. Les sphères de cadexomer sont biodégradables. IODOSORB Ointment absorbe l'excès d'exsudat et de fibrine du lit de la plaie et réduit la charge bactérienne à la surface de la plaie. Ce faisant il se transforme en gel mou et humide.</p> <p>Indications IODOSORB Ointment est indiqué pour le traitement topique des plaies exsudatives chroniques. IODOSORB Ointment peut être utilisé pour un traitement sous contention. IODOSORB Ointment peut s'utiliser sur les plaies infectées. Dans ces cas, l'infection doit être surveillée et traitée conformément au protocole clinique local en vigueur.</p> <p>Contre-indications IODOSORB Ointment ne doit pas être utilisé sur des tissus nécrosés ou chez les patients avec une sensibilité à l'iode ou aux autres composants. Ne pas utiliser IODOSORB Ointment chez l'enfant, la femme enceinte ou qui allaite ou chez les personnes présentant des troubles thyroïdiens (ex: thyroïdite de Hashimoto ou goître nodulaire non toxique).</p> <p>Warnings Il existe un risque d'interaction avec le lithium, résultant en une augmentation de la possibilité de hypothyroïdie. Ne pas utiliser IODOSORB Ointment en conjonction avec des antiseptiques mercuriels ou de la taurouridine. Si le patient est sur le point de passer des tests concernant la fonction thyroïdienne, il doit en aviser le médecin.</p> <p>Précautions d'emploi</p> <ul style="list-style-type: none"> Le contenu du tube doit être utilisé pour un seul patient. Ne pas utiliser IODOSORB Ointment à proximité des yeux, des oreilles ou de la bouche. Le produit est uniquement à usage externe. IODOSORB Ointment peut causer une douleur passagère dans l'heure qui suit l'application. Elle indique que le produit commence à nettoyer la plaie. Parfois IODOSORB Ointment peut causer une enflure ou un rougeissement de la peau autour des bords de la plaie qui disparaît généralement. Le patient doit contacter un médecin ou une infirmière si ces symptômes persistent ou si le patient présente d'autres symptômes. Il convient de minimiser tout contact avec le pourtour de la plaie et la peau non lésée. Une croute adhérente peut se former si on laisse sécher IODOSORB Ointment. Ne pas dépasser 50 g (équivalent à 5 tubes de 10 g) par application IODOSORB Ointment et ne pas appliquer plus de 150 g (équivalent à 15 tubes de 10 g) par semaine. Le traitement ne doit pas se prolonger au-delà de 3 mois. <p>Instructions de use</p> <p>Appling IODOSORB Ointment</p> <ol style="list-style-type: none"> Se laver soigneusement les mains avant et après l'emploi. Avec les mains gantées, nettoyer la plaie et la région avoisinante au moyen d'un jet d'eau ou d'une solution saline. NE PAS SECHER la surface de la plaie. Appliquer IODOSORB Ointment en couche de 3 mm sur un pansement stérile qui épouse la forme de la plaie. Poser le pansement enduit IODOSORB Ointment sur la plaie ou sinon, appliquer IODOSORB Ointment sur la plaie et étaler avec un doigt ganté sur toute la surface de la plaie en couche de 3 mm. Recouvrir complètement la plaie avec un pansement secondaire adapté. Poser un bandage de contention si nécessaire. Après l'application, le reste du tube doit être éliminé en raisin d'une perte de stérilité. <p>Renouvellement de IODOSORB Ointment</p> <p>IODOSORB Ointment doit être remplacé lorsqu'il est saturé en liquide provenant de la plaie et lorsque la décoloration du pansement indique que la réserve d'iode est épuisée, soit deux à trois fois par semaine. Si la plaie est fortement exsudative, des changements quotidiens peuvent s'avérer nécessaires. Si nécessaire, tremper le pansement pendant quelques minutes, puis l'enlever.</p> <p>2. Enlever IODOSORB Ointment vorsichtig unter Verwendung von Wasser- oder Kochsalzlösung entfernen.</p> <p>3. Vor dem erneuten Auftragen von IODOSORB Ointment überschüssige Flüssigkeit vorsichtig abtupfen und die Wundoberfläche etwas feucht belassen.</p> <p>Présentations du produit</p> <p>Code 66001297 2 x 20g 66001298 4 x 10g 66001299 1 x 40g</p> <p>Fabrikant Fabricré en Suède pour Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN Inglaterra. "Marca registrada de Smith & Nephew" ©Smith & Nephew Fecha de emisión 09/2011 www.smith-nephew.com www.iodosorb.com</p>	D IODOSORB® OINTMENT Cadexomer Salbenverband mit Iod <p>STERILE A Aseptisch verarbeitet. Nur für die einmalige Verwendung. Den Inhalt bei offener oder beschädigter Tube oder nach Ablauf des auf der Verpackung aufgedruckten Haltbarkeitsdatums nicht verwenden. Trocken lagern (<25°C).</p> <p>Beschreibung IODOSORB Ointment ist eine sterile dunkelbraune Salbe, die aus Cadexomer [Mikropellets aus modifizierter Stärke], Polyethylenglycol, Poloxamer und Iod besteht. Cadexomer ist biologisch abbaubar, IODOSORB Ointment entfernt überschüssiges Exsudat und Zelltrümmer aus dem Wundbett und reduziert Bakterien auf der Wundoberfläche. Dabei nimmt sie den Zustand eines weichen feuchten Gels an.</p> <p>Indikationen IODOSORB Ointment ist für die topische Behandlung chronisch exsudierender Wunden indiziert. IODOSORB Ointment kann unter einem Kompressionsverband angewendet werden. IODOSORB Ointment kann zur Behandlung infizierter Wunden verwendet werden. In diesem Fall soll die Kontrolle und weitere Behandlung der Infektion in Übereinstimmung mit dem lokalen klinischen Protokoll erfolgen.</p> <p>Gegenanzeigen IODOSORB Ointment darf nicht auf trockenem nekrotischem Gewebe oder an Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen -Iod oder einen anderen Inhaltsstoffe angewendet werden.</p> <p>Contraindicaciones IODOSORB Ointment no debe usarse sobre tejido seco necrótico o en pacientes con sensibilidad conocida al yodo o a uno de sus componentes. No usar IODOSORB Ointment en etá pediatrica, en gravidanza o allattamento, o en personas con disturbios de la función tiroidea o renale (ad ejemplo tiroïdite de Hashimoto o gozo nodular no tóxico).</p> <p>Advertencias Hay riesgo posible de interacción con el litio, que da como resultado una posibilidad mayor de hipotiroidismo. No utilizar IODOSORB Ointment en combinación con glicopéptidos mercuriales o taurouridina. Wird eine Nierenfunktionsprüfung durchgeführt, soll der zuständige Arzt über den bisherigen Therapie-verlauf mit IODOSORB Ointment informiert werden.</p> <p>Vorsichtsmassnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Inhalt der Tube ist nur an einem Patienten zu verwenden. Neut nicht IODOSORB Ointment cerca de los ojos, oídos, nariz o boca. IODOSORB Ointment nicht in der Nähe der Augen, der Ohren, der Nase oder des Mundes verwenden. Das Produkt ist nur für die äußerliche Anwendung vorgesehen. IODOSORB Ointment kann in der ersten Stunde nach dem Auftragen eine leichten vorübergehenden Schmerz hervorrufen. Es ist ein Zeichen dafür, dass das Produkt beginnt die Wunde zu reinigen. Gelegentlich kann IODOSORB Ointment eine Schwellung oder Rötung der Haut an den Wundrändern verursachen. Diese Klingt meistens wieder ab. Falls diese Beschwerden auftreten oder andere Symptome unklarer Genese auftreten sollten umgehend ein Arzt konsultiert werden. Contact with the skin around the wound edges/intact skin should be minimised. It is possible for an adherent crust to form if the IODOSORB Ointment is allowed to dry out. A single application of IODOSORB Ointment should not exceed 50 g (equivalent to 5 x 10g tubes) and not more than 150g (equivalent to 15 x 10g tubes) applied in one week. The duration of treatment should not exceed 3 months. <p>Precauciones durante el uso</p> <ul style="list-style-type: none"> El contenido del tubo sólo debe utilizarse en un solo paciente. No usar IODOSORB Ointment en proximidad de ojos, oídos, nariz o boca. No utilizar IODOSORB Ointment cerca de los ojos, oídos, nariz o boca. El producto es para uso externo solamente. IODOSORB Ointment puede ocasionar un ligero dolor pasajero especialmente la primera hora después del tratamiento. Esto significa que la pomada está comenzando a limpiar la lesión. Ocasionadamente, IODOSORB Ointment puede hacer que la piel perilesional se hinche o enrojezca. Esta es una condición pasajera. Si los síntomas persisten o si el paciente experimenta otros síntomas, deberá contactar con el facultativo. El contacto con la piel perilesional/piel intacta debe reducirse al mínimo. Es posible que se forme una crosta si se dejá que IODOSORB Ointment se seque. Una sola aplicación de IODOSORB Ointment no debe superar los 50 g (equivalente a 5 tubos de 10g) y nunca debe aplicarse más de 150 g a la semana (equivalente a 15 tubos de 10g). La duración del tratamiento no debe ser superior a 3 meses. <p>Instrucciones de uso</p> <p>Aplicación de IODOSORB Ointment</p> <ol style="list-style-type: none"> Lavarse las manos bien antes y después del uso! Utilizando guantes, limpiar la lesión y el área de alrededor con un chorro suave de agua o solución salina. NO SECAR la superficie de la lesión. Aplicar una cantidad suficiente de IODOSORB Ointment sobre un apósito estéril hasta formar una capa de 3 mm de grosor, con la misma forma de la lesión. Colocar el apósito impregnado con IODOSORB Ointment sobre la lesión. De manera alternativa aplicar IODOSORB Ointment a la lesión y untarlo uniformemente sobre la misma utilizando un vendaje de compresión. Aplicar IODOSORB Ointment directamente sobre la ferita, por encima de la ropa. Siempre cubrir la ferita con un vendaje de compresión. Tapar la lesión completamente con un apósito estéril. Aplicar un vendaje de compresión si fuera apropiado. Despues de la aplicación debe tirarse el contenido sobrante del tubo debido a la pérdida de esterilidad. <p>Cambio de IODOSORB Ointment</p> <p>IODOSORB Ointment debe cambiarse cuando esté saturado con el líquido procedente de la lesión y haya liberado todo el yodo. Esto se indica mediante la pérdida de color, normalmente de dos a tres veces a la semana. Si la lesión exuda mucho, puede ser necesario realizar cambios diarios. Si fuera necesario, remojar el apósito durante unos minutos y luego retirarlo.</p> <p>2. Con cuidado retirar IODOSORB Ointment utilizando un chorro suave de agua o solución salina.</p> <p>3. Con cuidado absorber el exceso de líquido, de haberlo, dejando la superficie de la lesión ligeramente húmeda antes de volver a aplicar IODOSORB Ointment.</p> <p>Disponibilidad del producto</p> <p>Código 66001297 2 x 20g 66001298 4 x 10g 66001299 1 x 40g</p> <p>Presentaciones del producto</p> <p>Code 66001297 2 x 20g 66001298 4 x 10g 66001299 1 x 40g</p> <p>Hersteller Hergestellt in Schweden für Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN Inglaterra. "Marke registrada de Smith & Nephew" ©Smith & Nephew Fecha de emisión 09/2011 www.smith-nephew.com www.iodosorb.com</p>	E IODOSORB® OINTMENT Cadexomer Salbenverband mit Iod <p>STERILE A Fabricado mediante un proceso aseptico. Un solo uso. No utilizar el contenido si el tubo esté abierto o dañado o después de la fecha de caducidad impresa en el envase. Conservar en lugar seco (<25°C).</p> <p>Beschreibung IODOSORB Ointment ist eine sterile dunkelbraune Salbe, die aus Cadexomer [Mikropellets aus modifizierter Stärke], Polyethylenglycol, Poloxamer und Iod besteht. Cadexomer ist biologisch abbaubar, IODOSORB Ointment entfernt überschüssiges Exsudat und Zelltrümmer aus dem Wundbett und reduziert Bakterien auf der Wundoberfläche. Dabei nimmt sie den Zustand eines weichen feuchten Gels an.</p> <p>Indicaciones IODOSORB Ointment es una pomada estéril marrón oscuro que está compuesta de cadexomer (microperlas de almidón modificado), polietilenoglicol y yodo. Las perlas de cadexomer son biodegradables. IODOSORB Ointment suprimirá el exceso de exudado y estafelos del lecho de la lesión y reducirá las bacterias sobre la superficie de la lesión, transformándose en un gel blando y húmedo.</p> <p>Contraindicaciones IODOSORB Ointment es un producto estéril de color marrón oscuro constituido por cadexomer (microperlas de almidón modificado) con yodo, polietilenoglicol y poloxamer. Los perlas de cadexomer son biodegradables. IODOSORB Ointment suprimirá el exceso de exudado y estafelos del lecho de la lesión y reducirá las bacterias sobre la superficie de la lesión. Durante este proceso se transforma en un gel suave y húmedo.</p> <p>Indicaciones IODOSORB Ointment es indicado para el tratamiento local de feridas exudantes que exuden crónicamente. IODOSORB Ointment puede ser utilizado debajo de una terapia de compresión. IODOSORB Ointment puede utilizarse en úlceras infectadas. Cuando el producto se utiliza en úlceras infectadas, la ferita se limpia y se reduce la carga bacteriana de la ferita.</p> <p>Contraindicaciones IODOSORB Ointment no debe usarse sobre tejido seco necrótico o en pacientes con sensibilidad conocida al yodo o a uno de sus componentes. No usar IODOSORB Ointment en etá pediatrica, en gravidanza o allactamiento, o en personas con disturbios de la función tiroidea o renales (ad ejemplo tiroïdite de Hashimoto o gozo nodular no tóxico).</p> <p>Indicaciones IODOSORB Ointment es indicado para el tratamiento local de feridas exudantes que exuden crónicamente. IODOSORB Ointment puede ser utilizado debajo de una terapia de compresión. IODOSORB Ointment puede utilizarse en úlceras infectadas. Cuando el producto se utiliza en úlceras infectadas, la ferita se limpia y se reduce la carga bacteriana de la ferita.</p> <p>Contraindicaciones IODOSORB Ointment no debe usarse sobre tejido seco necrótico o en pacientes con sensibilidad conocida al yodo o a uno de sus componentes. No usar IODOSORB Ointment en etá pediatrica, en gravidanza o allactamiento, o en personas con disturbios de la función tiroidea o renales (ad exemplo tiroïdite de Hashimoto o gozo nodular no tóxico).</p> <p>Indicaciones IODOSORB Ointment es indicado para el tratamiento local de feridas exudantes que exuden crónicamente. IODOSORB Ointment puede ser utilizado debajo de una terapia de compresión. IODOSORB Ointment puede utilizarse en úlceras infectadas. Cuando el producto se utiliza en úlceras infectadas, la ferita se limpia y se reduce la carga bacteriana de la ferita.</p> <p>Contraindicaciones IODOSORB Ointment no debe usarse sobre tejido seco necrótico o en pacientes con sensibilidad conocida al yodo o a uno de sus componentes. No usar IODOSORB Ointment en etá pediatrica, en gravidanza o allactamiento, o en personas con disturbios de la función tiroidea o renales (ad exemplo tiroïdite de Hashimoto o gozo nodular no tóxico).</p> <p>Indicaciones IODOSORB Ointment es indicado para el tratamiento local de feridas exudantes que exuden crónicamente. IODOSORB Ointment puede ser utilizado debajo de una terapia de compresión. IODOSORB Ointment puede utilizarse en úlceras infectadas. Cuando el producto se utiliza en úlceras infectadas, la ferita se limpia y se reduce la carga bacteriana de la ferita.</p> <p>Contraindicaciones IODOSORB Ointment no debe usarse sobre tejido seco necrótico o en pacientes con sensibilidad conocida al yodo o a uno de sus componentes. No usar IODOSORB Ointment en etá pediatrica, en gravidanza o allactamiento, o en personas con disturbios de la función tiroidea o renales (ad exemplo tiroïdite de Hashimoto o gozo nodular no tóxico).</p> <p>Indicaciones IODOSORB Ointment es indicado para el tratamiento local de feridas exudantes que exuden crónicamente. IODOSORB Ointment puede ser utilizado debajo de una terapia de compresión. IODOSORB Ointment puede utilizarse en úlceras infectadas. Cuando el producto se utiliza en úlceras infectadas, la ferita se limpia y se reduce la carga bacteriana de la ferita.</p> <p>Contraindicaciones IODOSORB Ointment no debe usarse sobre tejido seco necrótico o en pacientes con sensibilidad conocida al yodo o a uno de sus componentes. No usar IODOSORB Ointment en etá pediatrica, en gravidanza o allactamiento, o en personas con disturbios de la función tiroidea o renales (ad exemplo tiroïdite de Hashimoto o gozo nodular no tóxico).</p> <p>Indicaciones IODOSORB Ointment es indicado para el tratamiento local de feridas exudantes que exuden crónicamente. IODOSORB Ointment puede ser utilizado debajo de una terapia de compresión. IODOSORB Ointment puede utilizarse en úlceras infectadas. Cuando el producto se utiliza en úlceras infectadas, la ferita se limpia y se reduce la carga bacteriana de</p>
--	--	--	--


Artwork Info:

Artwork Ref:	16719
Previous/Base:	30825
Product Code:	N/A
Component:	IFU
Brand:	Iodosorb
Range:	Ointment
Product:	Cadexomer Ointment With Iodine
Quantity:	N/A
Barcode:	N/A
Dimensions:	295 x 310 mm
Version:	01
Artworker:	Ezra
Amend Date:	14/Nov/18

Tech Colours:

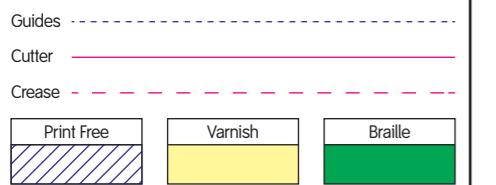

Artwork Colours:

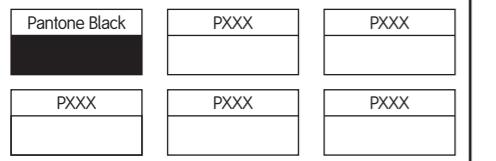

295mm

Iodosorb® Ointment

Cadexomer iod salve

STERILE A Aseptisk behandlet. Kun til engangsbrug. Må ikke bruges hvis tuben er åbenet eller beskadiget eller efter udløpsdatoen, der er trykt på pakningen. Oppbevares på tørt sted (<25°C).

Beskrivelse

Iodosorb Ointment er en steril mørkebrun salve, der indeholder cadexomer (modificerte mikrokuler af stivelse), polyetylenglykol, poloxamer og iod. Cadexomer-kulene er biomedtrydelige. Iodosorb Ointment vil absorber overskydende eksudat og hekroserester fra sårundersiden samtidigt med at reducere antal bakterier på såroverfladen. Ved kontakt med væske omdannes salven til en blød, fugtig gel.

Indikasjoner

Iodosorb Ointment indikeres til topisk behandling av kronisk eksuderende sår. Iodosorb Ointment kan anvendes under kompressionstherapi. Iodosorb Ointment kan anvendes på inficerede sår. Når den benyttes på slike sår skal infeksjonen inspiseres og behandles i henhold til lokal klinisk protokoll.

Kontraindikasjoner

Iodosorb Ointment bør ikke anvendes på tørt nefrotisk væv eller på patienter, der viser at være overfølsomme over iod eller de øvrige indholdsstoffer. Iodosorb Ointment må ikke anvendes på børn, gravide eller ammende kvinder eller mennesker med skjoldbruskkirtelidelser eller nryesvækkelse.

Advarsel

Der er en mulig risiko for interaksjon med litium, der kan medføre en øget risiko for hypothyreoidismus. Iodosorb Ointment må ikke anvendes samtidig med kviksølvholdige, antisepsiske midler eller taurolidin. Lægen bør informeres, hvis patienten skal gennemgå funktionstest af Thyroidea.

Forsiktigheidsregler ved bruk

- Iodosorb Ointment må ikke anvendes i nærværen af ærte, ærte, næse eller mund.
- Dette produkt er kun til udvortes bruk.
- Iodosorb Ointment kan forårsage en let forbølgende smerte især i den første time efter applikation. Dette er tegn på, at produktet begynder at rense såret. Det kan forekomme, at huden hæver eller bliver lidt rød i sárkanten med Iodosorb Ointment. Dette er som regel forbølgende. Hvis disse symptomer fortsætter eller hvis patienten oplever andre symptomer, bør lægen eller plejepersonalet kontaktes.
- Kontakt med huden omkring sárkanten/intakt hud bør reduseres til et minimum.
- Det er muligt, at der dannes en sár-skørpe, hvis Iodosorb Ointment får lov til at tørre ud.
- En enkelt applikation af Iodosorb Ointment bør ikke overstige 5 g (svarende til 5 tuber à 10g). Den samlede mængde, der anvendes, løbet af enuge, må ikke overstige 150 g (svarende til 15 tuber à 10g).
- Behandlingen varighed bør ikke overstige 3 måneder.

Brugsvejledning

Applikation af Iodosorb Ointment

1. Vask hænderne grundigt før og efter bruk. Brug handsker, når du renser såret og det omgivende område med enten en let vandsprølle eller saltvand. Sároverfladen må IKKE aftørres.

2. Tilstrekkelig Iodosorb Ointment påføres en steril forbindning, så den udgør et 3 mm dybt lag, som passer til sárets facion. Læg forbindningen med Iodosorb Ointment på såret. Alternativt kan Iodosorb Ointment påføres på plads med en behandsket finger, til det dækker såret og er 3 mm dybt.

3. Dæk såret fuldstændig med en passende sekundær forbindning.

4. Anlæg kompressionsbandage hvis relevant. Efter applikation bør det resterende indhold af tuben kasseres, da det ikke længere er sterilt.

Skift af Iodosorb Ointment

1. Iodosorb Ointment bør skiftes, når den er blevet mønstret med sárveske, og al iod er frigivet. Dette kan ses ved at salven mistrer farve. Skift bør som regel foretages til tre gange om ugen. Hvis såret eksudderer kraftigt, kan det blive nødvendigt at skifte dagligt. Efter behov gennemvædes forbindingen nogle minutter, inden den fjernes.

2. Fjern forsigtigt Iodosorb Ointment ved brug af en vandsprølle eller saltvand.

3. Dup forsigtigt evt. overskydende væske, så sároverfladen er let fugtig, før der påføres ny Iodosorb Ointment.

Produktprogram

Kode

66001297 2 x 20 g
66001298 4 x 10 g
66001299 1 x 40 g

Producent

Fremstillet i Sverige for Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England.
Varemærke ejet af Smith & Nephew
©Smith & Nephew Data for udgivelse 09/2011
www.smith-nephew.com www.iodosorb.com

Iodosorb® Ointment

Cadexomer salve med iodine

STERILE A Aseptisk teknikk brukt. Kun til engangsbruk. Innholdet må ikke brukes hvis tuben er åpenet eller skadd, eller etter utløpsdatoen som er vist på pakningen. Oppbevares på tørt sted (<25°C).

Beskrivelse

Iodosorb Ointment er en steril mørkebrun salve som består af cadexomer (modificerte mikrokuler av stivelse), polyetylenglykol, poloxamer og iod. Cadexomer-kulene er biomedtrydelige. Iodosorb Ointment vil absorber overskydende eksudat og hekroserester fra sárundersiden samtidigt med at reducere antal bakterier på sároverfladen. Ved kontakt med væske omdannes salven til en blød, fugtig gel.

Indikasjoner

Iodosorb Ointment indikeres til topisk behandling av kronisk eksuderende sår. Iodosorb Ointment kan anvendes under kompressionstherapi. Iodosorb Ointment kan benyttes på inficerede sår. Når den benyttes på slike sår skal infeksjonen inspiseres og behandles i henhold til lokal klinisk protokoll.

Kontraindikasjoner

Iodosorb Ointment bør ikke anvendes på tørt nefrotisk væv eller på patienter, der viser at være overfølsomme over iod eller de øvrige indholdsstoffer. Iodosorb Ointment må ikke anvendes på børn, gravide eller ammende kvinder eller mennesker med skjoldbruskkirtelidelser eller nryesvækkelse.

Advarsel

Der er en mulig risiko for interaksjon med litium, der kan resultere i økt mulighed for hypothyreoidismus. Ikke bruk Iodosorb Ointment samtidig med antisepsiske midler som inneholder kviksølv eller taurolidin. Lægen bør informeres, hvis patienten skal gennemgå funktionstest af Thyroidea.

Forsiktigheidsregler ved bruk

- Innholdet i tuben skal kun brukes av én pasient.
- Ikke bruk Iodosorb Ointment nær øyne, øre, næse eller mun.
- Produkten er kun til utvortes bruk.
- Iodosorb Ointment kan forårsake lett, forbølgende smerte den første timen etter behandling. Det er et tegn på at produktet starter å rense såret. Av og til kan Iodosorb Ointment få huden rundt sárkanten til å bli hoven eller rød. Det går vanligvis over. Dersom disse symptome nevderer eller hvis patienten opplever andre symptomer, bør lægen eller plejepersonalet kontaktes.
- Kontakt med huden omkring sárkanten/intakt hud bør reduseres til et minimum.
- Det er muligt, at der dannes en sár-skørpe, hvis Iodosorb Ointment får lov til å tørre ud.
- En enkelt applikasjon av Iodosorb Ointment bør ikke overstige 5 g (svarende til 5 tuber à 10g). Den samlede mængde, der anvendes, løbet av enuge, må ikke overstige 150 g (svarende til 15 tuber à 10g).
- Behandlingen varighed bør ikke overstige 3 måneder.

Brugsvejledning

Applikation af Iodosorb Ointment

1. Vask hænderne grundigt før og efter bruk. Brug handsker, når du renser såret og det omgivende område med enten en let vandsprølle eller saltvand. Sároverfladen må IKKE aftørres.

2. Tilstrekkelig Iodosorb Ointment påføres en steril forbindning, så den udgør et 3 mm dybt lag, som passer til sárets facion. Læg forbindningen med Iodosorb Ointment på såret. Alternativt kan Iodosorb Ointment påføres på plads med en behandsket finger, til det dækker såret og er 3 mm dybt.

3. Dæk såret fuldstændig med en passende sekundær forbindning.

4. Anlæg kompressionsbandage hvis relevant. Efter applikation bør det resterende indhold af tuben kasseres, da det ikke længere er sterilt.

Skift af Iodosorb Ointment

1. Iodosorb Ointment bør skiftes, når den er blevet mønstret med sárveske, og al iod er frigivet. Dette kan ses ved at salven mistrer farve. Skift bør som regel foretages til tre gange om ugen. Hvis såret eksudderer kraftigt, kan det blive nødvendigt at skifte dagligt. Efter behov gennemvædes forbindingen nogle minutter, inden den fjernes.

2. Fjern forsigtigt Iodosorb Ointment ved brug af en vandsprølle eller saltvand.

3. Dup forsigtigt evt. overskydende væske, så sároverfladen er let fugtig, før der påføres ny Iodosorb Ointment.

Produktprogram

Kode

66001297 2 x 20 g
66001298 4 x 10 g
66001299 1 x 40 g

Producent

Fremstillet i Sverige for Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England.
Varemærke ejet af Smith & Nephew
©Smith & Nephew Data for udgivelse 09/2011
www.smith-nephew.com www.iodosorb.com

Iodosorb® Ointment

Cadexomer iod salve

STERILE A Aseptisk behandlet. Kun til engangsbrug. Må ikke bruges hvis tuben er åbenet eller beskadiget eller efter udløpsdatoen, der er trykt på pakningen. Oppbevares på tørt sted (<25°C).

Beskrivelse

Iodosorb Ointment er en steril mørkebrun salve som består af cadexomer (modificerte mikrokuler av stivelse), polyetylenglykol, poloxamer og iod. Cadexomer-kulene er biomedtrydelige. Iodosorb Ointment vil absorber overskydende eksudat og hekroserester fra sárundersiden samtidigt med at reducere antal bakterier på sároverfladen. Ved kontakt med væske omdannes salven til en blød, fugtig gel.

Indikasjoner

Iodosorb Ointment indikeres til topisk behandling av kronisk eksuderende sår. Iodosorb Ointment kan anvendes under kompressionstherapi. Iodosorb Ointment kan benyttes på inficerede sår. Når den benyttes på slike sår skal infeksjonen inspiseres og behandles i henhold til lokal klinisk protokoll.

Kontraindikasjoner

Iodosorb Ointment bør ikke anvendes på tørt nefrotisk væv eller på patienter, der viser at være overfølsomme over iod eller de øvrige indholdsstoffer. Iodosorb Ointment må ikke anvendes på børn, gravide eller ammende kvinder eller mennesker med skjoldbruskkirtelidelser eller nryesvækkelse.

Advarsel

Der er en mulig risiko for interaksjon med litium, der kan resultere i økt mulighed for hypothyreoidismus. Ikke bruk Iodosorb Ointment samtidig med antisepsiske midler som inneholder kviksølv eller taurolidin. Lægen bør informeres, hvis patienten skal gennemgå funktionstest af Thyroidea.

Forsiktigheidsregler ved bruk

- Innholdet i tuben skal kun brukes av én pasient.
- Ikke bruk Iodosorb Ointment nær øyne, øre, næse eller mun.
- Produkten er kun til utvortes bruk.
- Iodosorb Ointment er kun til utvortes bruk.
- Iodosorb Ointment kan forårsake lett, forbølgende smerte den første timen etter behandling. Det er et tegn på at produktet starter å rense såret. Av og til kan Iodosorb Ointment få huden rundt sárkanten til å bli hoven eller rød. Det går vanligvis over. Dersom disse symptome nevnerer eller hvis patienten opplever andre symptomer, bør lægen eller plejepersonalet kontaktes.
- Kontakt med huden omkring sárkanten/intakt hud bør reduseres til et minimum.
- Det er muligt, at der dannes en sár-skørpe, hvis Iodosorb Ointment får lov til å tørre ud.
- En enkelt applikasjon av Iodosorb Ointment bør ikke overstige 5 g (svarende til 5 tuber à 10g). Den samlede mængde, der anvendes, løbet av enuge, må ikke overstige 150 g (svarende til 15 tuber à 10g).
- Behandlingen varighed bør ikke overstige 3 måneder.

Brugsvejledning

Applikation af Iodosorb Ointment

1. Vask hænderne grundigt før og efter bruk. Brug handsker, når du renser såret og det omgivende område med enten en let vandsprølle eller saltvand. Sároverfladen må IKKE aftørres.

2. Tilstrekkelig Iodosorb Ointment påføres en steril forbindning, så den udgør et 3 mm dybt lag, som passer til sárets facion. Læg forbindningen med Iodosorb Ointment på såret. Alternativt kan Iodosorb Ointment påføres på plads med en behandsket finger, til det dækker såret og er 3 mm dybt.

3. Dæk såret fuldstændig med en passende sekundær forbindning.

4. Anlæg kompressionsbandage hvis relevant. Efter applikation bør det resterende indhold af tuben kasseres, da det ikke længere er sterilt.

Skift af Iodosorb Ointment

1. Iodosorb Ointment skal byttes når den er blevet mønstret med sárveske, og al iod er frigivet. Dette vises ved at farven mistrer. Skift bør som regel foretages til tre gange om ugen. Hvis såret eksudderer kraftigt, kan det blive nødvendigt at skifte dagligt. Efter behov gennemvædes forbindingen nogle minutter, inden den fjernes.

2. Fjern forsigtigt Iodosorb Ointment ved brug af en vandsprølle eller saltvand.

3. Dup forsigtigt evt. overskydende væske, så sároverfladen er let fugtig, før der påføres ny Iodosorb Ointment.

Produktprogram

Kode

66001297 2 x 20 g
66001298 4 x 10 g
66001299 1 x 40 g

Producent

Fremstillet i Sverige for Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England.
Varemærke ejet af Smith & Nephew
©Smith & Nephew Data for udgivelse 09