


CE

ProFast

sensitive

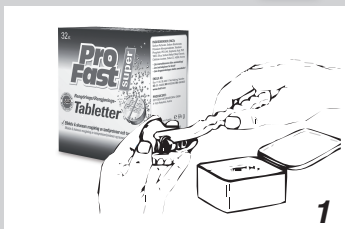

1



3



4

INGREDIENSER (INCI): Sodium Carboxymethylcellulose, Polyvinylacetate, Alcohol, Triacetin, Paraffinum Liquidum, Silica, Aloe Vera Gel, Commiphora Myrrha Extract

EKULF 2012-09-20

NORGE

Bruksanvisning

1. Rengjør og tørke protesen din nøye. ProFast Superfiksativ kan kun oppnå optimal feste når protesen er helt tørr.
2. Påfør ProFast Superfiksativ ved at forsiktig trykke ut fiksativet ur tuben. Hvis tuben er kald, kan den varmes i hånden således kan fiksativet lettere trykkes ut.
3. Påfør ProFast fiksativ slik en tynn streng eller i en serie prikker rundt om protesen. Viktig at fiksativet ikke kommer altfor nær protese-kanten. Vent 30 sekunder.
4. Etter 30 sekunder, sett inn protesen i munnen og bit sammen.
5. Sett på hetten umiddelbart etter bruk slik at fiksativet ikke tørker i åpningen av tuben.
6. For beste resultatet, vent 15 min før dere spiser eller drikker.

NB!
Oppbevares i romstemperatur og utilgjengelig for barn.

Tlf: 69 15 30 00
www.EKULF.com

SVERIGE

Bruksanvisning

1. Rengör och torka dina proteser noggrant. ProFast Superfixativ kan bara nå sin fullständiga vidhäftningsförmåga när proteserna är helt torra.
2. Applicera ProFast Superfixativ genom att försiktigt trycka ut fixativet ur tuben. Om tuben är kall, värm den i din hand så att fixativet lättare kan tryckas ut.
3. Applicera ProFast Superfixativ som i en sträng eller i en serie av prickar. Se till att fixativet inte kommer för nära kanten på protesen. Vänta i 30 sekunder.
4. Efter att 30 sekunder har gått, placera proteserna i munnen och bit ordentligt.
5. Stäng tuben omedelbart efter användning för att undvika igensättning av fixativet i tubens öppning. Försök alltid hålla munstycket på tuben helt rent från fixativ.
6. För bästa resultat, vänta 15 min innan du äter eller drikker.

OBS!
Förvaras i rumstemperatur och oåtkomligt för barn.

Tlf: 011-14 40 30
www.EKULF.com

DANMARK

Brugsanvisning

1. Rengør og tør din protese grundigt. ProFast Superfixativ når kun sin fulde klæbeevne når protesen er helt tør.
2. Påfør ProFast Superfixativ ved at forsigtigt trykke det ud af tuben. Hvis tuben er kold kan den varmes i din hånd, således kan fixativet lettere trykkes ud.
3. Påfør ProFast Superfixativ i en tynd streng eller i en serie af små prikker. Pas på at fixativet ikke kommer for tæt på kanten. Vent 30 sek.
4. Efter 30 sek., placere protesen i munden og bid sammen.
5. Luk tuben straks efter brug for at undgå at fixativet tørrer i tuben. Forsøg at holde åbningen på tuben fri fra fixativet.
6. For at få det bedste resultat, vent 15. min inden du spiser eller drikker noget.

OBS!
Opbevares ved stuetemperatur og utilgængeligt for børn.

Tlf: 45 82 08 22
www.EKULF.com