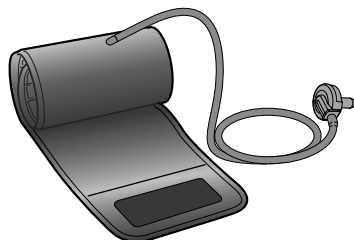


**OMRON****Intelli Wrap-manchet****HEM-FL31**

---

**• Brugervejledning**

---

**2****DA****All for Healthcare**

IM-HEM-FL31-E-01-08/2018

# OMRON

## HEM-FL31



Tak, fordi du har købt OMRON-manchet HEM-FL31. Armomkredsen for denne manchete er 22 til 42 cm. Se den originale brugsanvisning til dit blodtryksapparat.

**Følg denne brugervejledning nøje af hensyn til din sikkerhed.**

**Gem den til senere brug. KONTAKT DIN LÆGE for at få specifikke oplysninger om dit eget blodtryk.**

**⚠ Forsigtig:** Angiver en potentielt farlig situation, som - hvis den ikke undgås - kan forårsage mindre eller moderat tilskadekomst for brugeren eller patienten eller beskadige udstyret.

- Anvend kun det godkendte OMRON-blodtryksapparat til denne manchete.
- Brug den armmanchete, der er angivet på siden af produktet ved udtaget. Brug ikke en armmanchete af en anden type.
- Vask ikke manchetten, og gør den ikke våd.

### Brugsanvisning



Fjern tætsiddende tøj eller oprullede ærmer fra venstre overarm.


Anbring ikke manchetten uden på tykt tøj.

1. Sæt luftstikket forsvarligt i udtaget.

2. Placer armmanchetten på venstre overarm.

Ammanchettens nederste kant skal sidde 1 til 2 cm over albuen. Manchetten skal placeres på overarmen med luftslangen nedad mod din hånd.

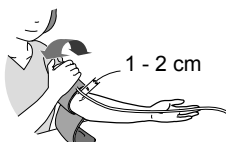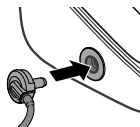

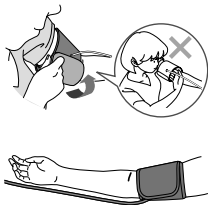

### 3. Sikker lukning med stofspænder.

#### Sådan foretager du målinger på højre arm

Luftslangen skal være på siden af albuen.

Pas på ikke at hvile armen på luftslangen.

Bemærk: Blodtrykket kan afvige mellem højre og venstre arm, og derfor kan de målte blodtryksværdier være forskellige. OMRON anbefaler, at du altid foretager målinger på samme arm. Hvis værdierne mellem armene afviger væsentligt, skal du spørge lægen, hvilken arm du skal bruge til målingen.

## Vedligeholdelse

- Brug en blød, tør klud eller en blød, fugtig klud og neutral sæbe til rengøring af armmanchetten.
- Brug ikke benzin, fortynder eller lignende opløsningsmidler til rengøring af armmanchetten.
- Opbevar ikke armmanchetten på steder med ekstreme temperaturer, fugtighed, direkte sollys, støv eller korrosive dampe.
- Luftslangen må ikke bøjes eller foldes for kraftigt.

DA




Denne manchete opfylder kravene i EF-direktiv 93/42/EØF (Direktiv om medicinsk udstyr) samt EN1060 Ikke-invasive blodtryksmålere Del 1: Generelle krav og Del 3: Tillægsbestemmelser for elektromekaniske blodtryksmålesystemer.

Dette OMRON-produkt er fremstillet i henhold til det strenge kvalitetssystem hos OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPAN.

## Specifikationer:

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeskrivelse            | Manchet til OMRON-blodtryksapparat                                      |
| Model                         | HEM-FL31                                                                |
| Armomkreds                    | 22 til 42 cm                                                            |
| Manchetmål                    | Højst 585 x 160 mm (ufoldet)                                            |
| Manchettens trykområde        | Tryk: 0 til 299 mmHg                                                    |
| Nøjagtighed                   | Tryk: $\pm 3$ mmHg                                                      |
| Klassifikation                | Klasse I                                                                |
| Anvendelsesforhold            | +10 til +40°C<br>15 til 90% RH (ikke-kondenserende)<br>700 til 1060 hPa |
| Opbevarings-/transportforhold | -20 til +60°C<br>10 til 95% RH (ikke-kondenserende)<br>700 til 1060 hPa |
| Vægt                          | Højst 179 g                                                             |
| Pakkens indhold               | Manchet, brugervejledning                                               |
| Levetid, garanti              | 1 år                                                                    |
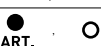
| Symbolbeskrivelse                                                                   |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    | CE-mærke                                                      |
|    | GOST-R-symbol                                                 |
|    | Partnr.                                                       |
|    | Temperaturbegrænsning                                         |
|    | Fugtighedsbegrænsning                                         |
|   | Begrænsning for atmosfærisk tryk                              |
|  | Identifikator for manchetter, der er kompatible med apparatet |
|  | Manchetplaceringsindikator for venstre arm                    |
|  | Områdemærke og justeringsposition for arteria brachialis      |
|  | Arteriemærke                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LATEX FREE</b>                                                                                                                                                                                                    | Indeholder ikke naturlig gummilatex                                          |
|                                                                                                                                     | Områdeindikator for armomkreds som hjælp til valg af korrekt manchettørrelse |
|                                                                                                                                     | Referencekatalognummer                                                       |
|                                                                                                                                     | Easy Cuff                                                                    |
|                                                                                                                                     | Intelli Wrap-manchet                                                         |
|                                                                                                                                     | Comfort-manchet                                                              |
|                                                                                                                                     | Teknologi og design, JAPAN                                                   |
|                                                                                                                                     | Teknologi og kvalitet, JAPAN                                                 |
|                                                                                                                                     | Produktionsdato                                                              |
|                                                                                                                                     | Læs brugervejledningen                                                       |
|                                                                                                                                     | Armomkreds                                                                   |
| <p>Produktionsdatoen på manchetten er indikeret i de første otte cifre i partinummeret, som er trykt på manchettens mærkat – "LOT YYYYMMDD*", hvor Y = produktionsår, M= produktionsmåned og D = produktionsdag.</p> |                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producent</b><br>                                                                                                                                                | <b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b><br>53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,<br>617-0002 JAPAN                                                                                         |
| <b>EU-repræsentant</b><br><div data-bbox="138 755 283 814" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">EC</div> <div style="padding: 0 5px;">REP</div> </div> | <b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b><br>Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,<br>HOLLAND<br><a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>                            |
| <b>Produktionsanlæg</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>OMRON DALIAN Co., Ltd.</b><br>No. 3, Song Jiang Road,<br>Economic and Technical Development Zone,<br>Dalian 116600, Kina                                                            |
| <b>Datterselskaber</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b><br>Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK<br><a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b><br>Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, TYSKLAND<br><a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b><br>14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANKRIG<br><a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>                  |
| <b>Distribueres af</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>MEDIQ DANMARK A/S</b><br>Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby<br>tlf. 36 37 92 00<br><a href="http://www.mediqdanmark.dk">www.mediqdanmark.dk</a>                                       |

Fremstillet i Kina