


## GB SKINOCARE® M3-Nitcomb Lice Comb

Instructions for SkinOcare M3-Nitcomb lice comb with three rows of teeth

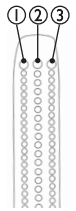


The SkinOcare M3-Nitcomb lice comb was developed by pharmacists and has three rows of fine and extra-fine, closely spaced teeth of stainless steel. This patented lice comb with three rows of teeth increases efficiency compared to combs with just one row of teeth. The outer rows of closely spaced teeth remove large head lice. The central row has teeth spaced even closer together, which facilitates the removal of small head lice, eggs and egg shells. The combination of narrow and wide spaces between the teeth doubles the efficiency. The teeth have rounded ends to avoid pulling the hair. The comb is designed with a special angle and a solid handle for easy combing.

### Combing with SkinOcare M3-Nitcomb lice comb

- Water facilitates combing and this method also counteracts tangled hair. Use the SkinOcare M3-Nitcomb lice comb in wet, conditioned hair to remove living and dead lice, eggs and egg shells. Shampoo and rinse. Massage plenty of conditioner into the hair and leave in place.
- Take a small amount of hair. Comb it gently and thoroughly from the root towards the ends. Repeat and comb the entire head of hair in sections, particularly behind the ears and along the back of the neck. You might be able to see fast-running grown lice, but this can be difficult, as they may have the same colour as the hair. It is easier to spot the small, white eggs and shells that are attached to the roots close to the warm scalp, where the female lice deposit their eggs.
- Rinse and clean the comb between the teeth during and after combing with hot, clean soap water using a nailbrush. Finish by rinsing and drying the comb carefully. Repeat combing every 3 to 4 days until the lice are gone.
- Examine the hair regularly. Head lice can easily transfer from one head to another amongst family members and friends in close contact, particularly when the scalp is clean and warm.

## DE SKINOCARE® M3-Nitcomb läuse-/nissenkamm

### Gebrauchsanweisung für den läuse-/nissenkamm M3

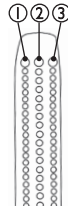

Der vom britischen Drogerie-Hersteller Shantys entwickelte Läuse-/Nissenkamm M3 hat drei Zahnreihen, die fein und extra fein sind. Dieses patentierte Design sorgt für weitaus höhere Effektivität, als ein einreihiger kamm beiten kann. Beim Gleiten durch das Haar fangen die äußeren Zahnreihen größere Läuse ein, während die extra feine Reihe kleine Läuse und Nissen (Eier) beseitigt.

Die Erkennung und Entfernung von Kopfläusen und Nissen kann sehr schwierig und frustrierend sein, da Nissen mit einer klebrigen Substanz fest an den Haaren haften. Wenn nicht alle Nissen entfernt werden, besteht die Gefahr eines erneuten Befalls, weil nach 7 bis 10 Tagen neue Läuse schlüpfen werden.

### Um Nissen effektiv zu erkennen und zu entfernen, befolgen Sie diese fünf einfachen Schritte:


- Haare waschen, gründlich ausspülen und flegespülung/Conditioner auf das nasse Haar auftragen. Am Oberkopf beginnend, eine 2 cm breite Haarsträhne hochheben.
- Die Zähne des Kamms tief ins Haar schieben, bis sie die Kopfhaut berühren.
- Fest und gleichmäßig von der Kopfhaut bis zu den Haarspitzen durchkämmen. Die Nissen mit einem Papiertuch vom Kamm abwischen.
- Mit weiteren Strähnen wiederholen, bis der ganze Kopf behandelt ist.
- Haare mit klarem Wasser spülen und mit einem Handtuch trockenreiben.

Während und nach dem Kämmen die Zahnreihen mit warmen Seifenwasser in einer feinen Nagelbürste säubern. Abschließend gut abspülen und abtrocknen und an einem trockenen Ort aufbewahren.

Sollten Zähne des Kamms beschädigt sein, ihn nicht benutzen.

## FI SKINOCARE® M3-Nitcomb -täikampa

### Kolmirivisen SkinOcare M3-Nitcomb -täikamman käyttöohje

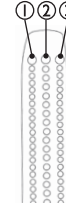

SkinOcare M3-Nitcomb -täikampa on farmaseuttien kehittämä, ja siinä on kolme tiheää riviä ohuita tai erityisohuita piikkejä, jotka ovat ruostumatonta terästä. Tämä kolmirivinen patentoitu täikampa on paljon yksirivistä kampaista tehokkaampi. Uloin tiheäpiikkinen rivi irrottaa suuret päättät, keskimäinen erityisen tiheä piikkirivi irrottaa pienet päättät, munat ja munankuoret. Piikkien kapeampien ja leveämpien välien yhdistelmä kaksinkertaistaa tehokkuuden. Piikkeissä on pyörätetyt päät, jotta ne eivät revi hiuksia. Kammassa on muotoiltu ja vanikka varsi, mikä tekee tukan läpikäynnin helposi.

### Kampaaminen SkinOcare M3-Nitcomb -täikamalla

- Vesi helpottaa kampaamista, ja tämä menetelmä tehoaa myös takkukseen tukkaa. Hiukset kammataan kosteina SkinOcare M3-Nitcomb -täikamalla, ja niihin hierotaan hoitoainetta elävien ja kuolleiden täiden, munien ja munankuorien poistamiseksi. Pese ja huuhtelee. Hiero hiuksiin runsaasti hoitoainetta, jota ei huuhdota pois.
- Ota pieni suurtuva. Kampaava varovasti ja huolellisesti hiusuuriasta hiusten latvoja kohti. Kampa koko pään alue, etenkin korvien takaa ja sekä kaulan ja niskan reunamilla. Nopeasti juoksevia aikuisia täitä on mahdollista nähdä, mutta se on vaikeaa, jos ne ovat samanvärisiä kuin hiukset. On helpompi löytää pienet valkoiset munat ja kuoret, jotka ovat tiiviisti kiinni hiusuuriassa lämpimässä hiusohjassa, johon naaraatit munivat munat.
- Huuhdo ja puhdistaa kammapiikkien välit jokaisen kampaamisen jälkeen lämpimällä ja puhtaalla saippuavedellä ja kynsiharjalla jäätään. Huuhtelee ja kuivaa kampa lopuksi. Toista kampausta joka 3–4. päivä, kunnes täit on saatu pois.
- Tutki hiukset säännöllisin välein. Täi vaeltaa päästä toiseen perheenjäsenten ja ystävien lähikontaktissa etenkin hiusohjan ollessa puhdas ja lämmin.

SKINOCARE® M3 NITCOMB®

Distributed by  
PharmaVest, DK-8600 Silkeborg, DENMARK.  
Tel: +45 7025 1116, www.pharmavest.com

M3-Nitcomb: Patent, ® Design © 2012, Property of Alpa and Hiten Pabari.  
Shantys Ltd, RM8 1HJ, UK

SKINOCARE® M3 NITCOMB®

Vertrieben von  
PharmaVest, DK-8600 Silkeborg, DENMARK.  
Tel: +45 7025 1116, www.pharmavest.com

M3-Nitcomb: Patent, ® Design © 2012, Property of Alpa and Hiten Pabari.  
Shantys Ltd, RM8 1HJ, UK


SKINOCARE® M3 NITCOMB®

Jakelija:  
PharmaVest, DK-8600 Silkeborg, TANSKA.  
Puh: +45 7025 1116, www.pharmavest.com

M3-Nitcomb: Patent, ® Design © 2012, Property of Alpa and Hiten Pabari.  
Shantys Ltd, RM8 1HJ, UK

## SE SKINOCARE® M3-Nitcomb luskam

Bruksanvisning till SkinOcare M3-Nitcomb luskam med 3 tandrader

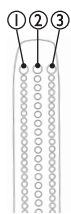

SkinOcare M3-Nitcomb luskam är utvecklad av farmaceuter och har 3 rader med fina och extra fina tättsittande tänder av rostfritt stål. Denna patenterade luskam med 3 rader ökar effektiviteten jämfört med en kam med en tandrad. Den yttersta raden med tättsittande tänder tar bort stora huvudlöss. Den mittersta raden har extra tättsittande tänder och tar bort små huvudlöss, ägg och äggskal. Kombinationen av smala och bredare mellanrum mellan tänderna fördubblar effektiviteten. Tänderna har rundade spetsar för att förhindra att de river i håret. Kammen är specialvinklad och har ett solitt handtag som gör det lätt att kamma igenom håret.

### Kamning med SkinOcare M3-Nitcomb luskam

- Vatten underlättar kamningen, och denna metod motverkar också trasligt hår. Med SkinOcare M3-Nitcomb luskam kammars håret vått och smörjs in med balsam för att ta bort levande och döda löss, ägg och äggskal. Tvätta och skölj. Gnid in håret i rikligt med balsam, som inte ska sköljas ut.
- Ta en liten hårlock. Kamma varsamt och noggrant. Börja vid hårrötterna och gå neråt mot hårspetsarna. Upprepa över hela huvudet, särskilt bakom öronen och i nacken. Man kan få öga på en vuxen lus som rör sig snabbt, men annars är lössen svåra att upptäcka eftersom färgen är samma som håret. Det är lättare att få öga på små vita ägg och döda, tomma äggskal, som sitter vid roten av hårlockarna närmare den varma hårbotten, där honlössen lägger sina ägg.
- Skölj och rengör kammen i tandmellanrummen med varmt, rent tvålvatten med hjälp av en fin nagelborste under och efter kamningen. Skölj och torka grundligt när du är färdig. Upprepa kammandet var 3-4 dag tills lössen är borta.
- Undersök håret med jämna mellanrum. Huvudlöss vandrar lätt från en familjemedlem eller vän till en annan. När huden rör vid varandra kan en lus vandra från ett huvud till ett annat, i synnerhet om hårbotten är ren och varm.


SKINOCARE® M3 NITCOMB®

Distributed by  
PharmaVest, DK-8600 Silkeborg, DENMARK.  
Tel +45 70251116, www.pharmavest.com

M3-Nitcomb: Patent, ® Design © 2012, Property of Alpa and Hiten Pabari.  
Shantys Ltd. RM8 1HJ, UK

## NO SKINOCARE® M3-Nitcomb lusekam

Bruksanvisning til SkinOcare M3-Nitcomb lusekam med 3 tannrekker

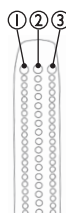

SkinOcare M3-Nitcomb lusekam er utviklet av farmasøytter og har 3 rekker av fine og ekstra fine tettstittende tenner av rustfritt stål. Denne patenterte lusekammen med 3 rekker er mer effektiv enn en kam med én tannrekke. De ytterste tannrekke med tettstittende tenner fjerner de store hodelusene. Den midterste tannrekken har ekstra tettstittende tenner og fjerner de små hodelusene, egg og eggeskall. Kombinasjonen av smale og bredere mellomrom mellom tennene gjør den dobbelt så effektiv. Tennene har avrundede spisser for å forhindre at de river i håret. Kammen er spesielt vinklet og har et solid håndtak som gjør det lett å gre gjennom håret.

### Kjemning med SkinOcare M3-Nitcomb lusekam

- Vann letter kjemningen, og motvirker floker i håret. Kjem håret med SkinOcare M3-Nitcomb lusekam når håret er vått, og gni det inn med balsam for å fjerne levende og døde lus, egg og eggeskall. Vask og skyl. Gni håret inn med rikelig med balsam, som ikke skal skylles ut.
- Løft opp en hårlock. Kjem lokken forsiktig og omhyggelig fra hårrøten mot hårtupene. Gjenta dette over hele hodet, og vær spesielt nøye med håret bak ørene og i nakkekanten. Det er mulig – men vanskelig – å få øye på lus i bevegelse, da de kan ha den samme fargen som håret. Det er lettere å oppdage egg og eggeskall, som sitter festet i hårrøttene tett ved den varme hodebunnen, hvor hunnlusen legger sine egg.
- Bruk en negleborste og varmt og rent såpevann til å skylle og rense kammen mellom tennene etter hver omgang. Avslutt med å skylle og tørke kammen grundig. Gjenta kjemningen hver tredje til fjerde dag til lusene er borte.
- Undersøk håret med jevne mellomrom. Hodelus vandrer lett fra ett hode til et annet – ikke minst mellom familjemedlemmer som har nærkontakt med hverandre, og der lusene finner en ren og varm hodebunn.

SKINOCARE® M3 NITCOMB®

Distributed by  
PharmaVest, DK-8600 Silkeborg, DENMARK.  
Tel +45 70251116, www.pharmavest.com

M3-Nitcomb: Patent, ® Design © 2012, Property of Alpa and Hiten Pabari.  
Shantys Ltd. RM8 1HJ, UK

## DK SKINOCARE® M3-Nitcomb lusekam

Bruksanvisning til SkinOcare M3-Nitcomb lusekam med 3 rækker tænder



SkinOcare M3-Nitcomb lusekam er udviklet af farmaceuter og har 3 rækker af fine og ekstra fine tættsiddende tænder af rustfrit stål. Denne patenterede lusekam med 3 rækker øger effektiviteten i forhold til en kam med 1 række tænder. De yderste rækker tænder med tættsiddende tænder fjerner de store hovedlús. Den midterste række af tænder har ekstra tættsiddende tænder og fjerner de små hovedlús, æg og æggeskaller. Kombinationen af smalle og bredere mellemrum mellem tænderne fordobler effektiviteten. Tænderne har afrundede spidser for at forhindre, at de river i håret. Kammen er vinklet specielt og har et solidt håndtag, der gør det nemt at rede håret igennem.

### Kæmning med SkinOcare M3-Nitcomb lusekam

- Vand letter kæmningen og denne metode modvirker også flittet hår. Med SkinOcare M3-Nitcomb lusekam kæmmes håret vådt og indsmøres i balsam for at fjerne levende og døde lus, æg og æggeskaller. Vask og skyl. Indgnid håret i rigelig balsam, som ikke skylles ud.
- Tag en lille lok hår. Kæm blidt og omhyggeligt fra hårrøden mod hårsiderne. Gentag kæmningen over hele hovedet, specielt bag ørene og i nakkekanten. Det er muligt at se hurtigt løbende voksne lus, men det er svært, da de kan have samme farve som håret. Det er lettere at opdage de små hvide æg og skaller fastgjort til hårrødderne tæt ved den varme hovedbund, hvor hunlusen lægger æggene.
- Skyl og rens kammen mellem tænderne under og efter hver kæmning med varmt og rent sæbevand, ved hjælp af en negleborste. Afslut med at skylle og tørre kammen grundigt. Gentag kæmningen hver 3-4. dag til lusene er væk.
- Undersøg håret med jevne mellemrum. Hovedlús vandrer let fra et hoved til et andet mellem familie og venner med nærkontakt, især hvis hovedbunden er ren og varm.

SKINOCARE® M3 NITCOMB®

Distributed by  
PharmaVest, DK-8600 Silkeborg, DENMARK.  
Tel +45 70251116, www.pharmavest.com

M3-Nitcomb: Patent, ® Design © 2012, Property of Alpa and Hiten Pabari.  
Shantys Ltd. RM8 1HJ, UK