

OPTI-FREE pure moist

Multi-Purpose Disinfecting Solution

DK Læs venligst denne indlægsseddel omhyggeligt, og gem den til senere brug.

OPTI-FREE® PureMoist®

Multi-Purpose Disinfecting Solution til silikonehydrogel og bløde kontaktlinser.

VIRKNING:

Ved korrekt brug virker **OPTI-FREE PureMoist Solution** på følgende måde:

- **Renser** ved at fjerne protein og fedt fra dine linser under desinfektion og opbevaring.
- **Desinficerer:** Biokompatible, dobbeltvirkende desinfektionsmidler, POLYQUAD® og ALDOX®, virker mod skadelige mikroorganismer (bakterier, svamp og akantamøbe).
- **Skyller:** Kan anvendes til at skylle og fugte dine kontaktlinser til hver en tid.
- **Opbevarer:** Er beregnet til at opbevare kontaktlinser i op til 30 dage efter desinfektion.
- **Giver komfort hele dagen pga. HydraGlyde® Moisture Matrix**, der fastholder fugt på dine kontaktlinser og holder dem fugtige hele dagen. Det efterlader en varig pude af fugt, som lader øjenlåget blinke over kontaktlinsens overflade uden at blive irriteret.

Separat enzymrengøring er ikke nødvendigt sammen med **OPTI-FREE PureMoist**, når det anvendes dagligt.

Du må ikke opbevare dine kontaktlinser i saltvandsopløsning i stedet for **OPTI-FREE PureMoist**. Saltvandsopløsning desinficerer ikke kontaktlinserne.

GENERAL VEJLEDNING:

- Fjern forseglingen rundt om flaskehalsen inden brug.
- Vask og skyl altid hænderne før håndtering af kontaktlinserne.
- Rengør, genfugt, skyl og desinficér dine kontaktlinser hver gang du tager dem ud.
- Håndtér altid kontaktlinserne i samme rækkefølge, højre eller venstre først, for at undgå forveksling.
- Tøm og skyl altid kontaktlinsetuet med **OPTI-FREE PureMoist Solution** efter brug og lad det lufttørre. Skyl ikke kontaktlinsetuet med vand.

FØLG DENNE VEJLEDNING FOR AT OPNÅ OPTIMALT RESULTAT:

1. **Fugt omhyggeligt** begge sider af kontaktlinserne med **OPTI-FREE PureMoist Solution**. Gnid kontaktlinserne i 20 sekunder.
2. **Skyll** hver side af kontaktlinsen i 10 sekunder med en konstant strøm af **OPTI-FREE PureMoist**.
3. **Fyld** dit ALCON® kontaktlinsetui med frisk **OPTI-FREE PureMoist**. Opbevar kontaktlinserne i det lukkede kontaktlinsetui natten over eller i mindst i 6 timer. Efter at have ligget i væsken, kan kontaktlinserne tages i brug.

Skyll kontaktlinserne med **OPTI-FREE PureMoist**, før du sætter dem i øjnene, hvis der er urenheder tilbage på kontaktlinserne.

Du kan opbevare dine kontaktlinser i op til 30 dage i et lukket kontaktlinsetui, der indeholder **OPTI-FREE PureMoist**. Herefter rengøres og desinficeres kontaktlinserne med **OPTI-FREE PureMoist** inden brug.

Følg altid din optikers vejledninger. Kontakt din optiker for du ændrer i rengøring af dine kontaktlinser eller skifter rensesveske.

BESKRIVELSE:

OPTI-FREE PureMoist Solution er en steril, bufferet, vandig opløsning, der indeholder natriumcitrat, natriumchlorid, borsyre, sorbitol, aminomethylpropanol, dinatriumedetat, to fugtningsmidler (TETRONIC® 1304† og HydraGlyde Moisture Matrix [EOBO 41*-polyoxyethylen-polyoxybutylen]) med POLYQUAD (polyquaternium-1) 0,001 % og ALDOX (myristamidpropyl dimethylamin) 0,0006 % som konserveringsmidler. HydraGlyde Moisture Matrix er en multifunktionel blok copolymer, som primært er udviklet til fugtning og smøring af silikonehydrogel kontaktlinser.

†TETRONIC® er et registreret varemærke, der tilhører BASF.

ANVENDELSESMÅDE (indikationer):

Til brug i den daglige rengøring, fugtning, skylning, fjernelse af proteinaflejringer, forebyggelse af fedtaflejringer, kemisk (ikke varme) desinfektion og opbevaring af silikonehydrogel og bløde (hydrofile) kontaktlinser, som anbefalet af din optiker.






KONTRAINDIKATIONER (Grunde til ikke at bruge den):

Du må ikke bruge produktet, hvis du er allergisk over for et eller flere af indholdsstofferne.

ADVARSLER:

Det er vigtigt, at du følger den vejledning, din optiker har givet, samt alle skrevne instruktioner for korrekt brug og pleje af dine kontaktlinser og kontaktlinse-plejeprodukter inklusiv kontaktlinsetui. Hvis du føler vedvarende ubehag i øjet, usædvanlig stor tåreproduktion, ændringer i synet eller øjet bliver rødt, skal du STRAKS tage kontaktlinserne ud og kontakte din optiker, da tilstanden kan blive alvorlig.

FORHOLDSREGLER:

- Brug altid frisk **OPTI-FREE PureMoist Solution**. Genbrug aldrig væsken i kontaktlinsetuet.
- **FORSEGLING:** Må ikke anvendes, hvis sikkerhedsforseglingen er ødelagt eller mangler, eller hvis skruelåget mangler .
- For at undgå forurening, må dråbespidsen aldrig berøre nogen overflade.
- Skru låget på efter brug.
- Må ikke opbevares under 15°C. Må ikke opbevares over 30°C .
- Hold flasken tæt lukket efter brug.
- Skal anvendes inden udløbsdatoen som angivet på emballagen .
- Kasser resterende væske 6 måneder efter flaskens åbning .
- Opbevares utilgængeligt for børn .
- Må ikke anvendes ved varmedesinfektion.

LEVERING:

OPTI-FREE PureMoist Solution, som er sterilfiltreret, leveres i plastflasker, der indeholder fra 60 ml til 480 ml. Flaske og karton er angivet med lotnummer og udløbsdato. 



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, 76134-2099, USA
a Novartis company

DISTRIBUTØR

Alcon Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Tlf: 3636 4300

* et Novartis varemærke.



Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR
Storbritannien



Les pakningsvedlegget nøje og ta vare på det til senere brug.

OPTI-FREE® PureMoist®

Multi-Purpose Disinfecting Solution for silikonhydrogel og myke kontaktlinser

FUNKSJON:

Ved riktig bruk virker **OPTI-FREE PureMoist Solution** på følgende måter:

- **Rengjør** ved å fjerne proteinbelegg og lipidbelegg fra linsene under desinfisering og oppbevaring.
- **Desinfiserer:** POLYQUAD® og ALDOX® er biokompatible, dobbeltvirkende desinfeksjonsmidler som virker mot skadelige mikroorganismer (bakterier, sopp og akantamøbe).
- **Skyller:** Kan brukes til skylling og smøring av silikonhydrogellinser og myke (hydrofile) kontaktlinser.
- **Oppbevaring:** Brukes til oppbevaring av linser i inntil 30 dager etter desinfisering.
- **Gir komfort hele dagen fordi HydraGlyde® Moisture Matrix** tilfører linsene dine fuktighet og holder linsene fuktige gjennom hele dagen. Den opprettholder et vedvarende lag av fuktighet som gjør at øyelokket glir over linseoverflaten uten irritasjon.

Det er ikke nødvendig å bruke rengjøringsmidler med enzymer hvis **OPTI-FREE PureMoist** brukes daglig.

Ikke opbevar linsene i saltvannsuppløsning i stedet for **OPTI-FREE PureMoist**. Saltvannsuppløsning desinfiserer ikke linsene.

GENERELLE RETNINGSLINJER:

- Fjern forseglingen rundt flaskehalsen helt før bruk.
- Vask og skyl alltid hendene før du håndterer linsene.
- Rengjør, smør, skyll og desinfiser linsene hver gang du tar dem av.
- Rengjør alltid samme linse først, høyre eller venstre, for å unngå at du bytter dem om.
- Tøm alltid etuiet etter bruk, skyll det med **OPTI-FREE PureMoist Solution**, og la det lufttørke. Ikke skyll etuiet med vann.

FOR OPTIMALT RESULTAT, FØLG DISSE ANVISNINGENE:

1. **Fukt** hver side av linsen omhyggelig med **OPTI-FREE PureMoist Solution**. Gni linsen i 20 sekunder.

W9012359-1015

2. **Skyll** hver side av linsen i 10 sekunder med en jevn strøm av **OPTI-FREE PureMoist**.
3. **Fyll** ditt ALCON®-linsetui med **OPTI-FREE PureMoist**. Lukk linsetuier og oppbevar linsene der natten over eller i minst seks timer. Etter at linsene har ligget i bløt, er de klare til bruk.

Hvis det fortsatt er smuss på linsene, må de skylles med **OPTI-FREE PureMoist** før du tar dem på. Du kan ha linsene i linsetuier med **OPTI-FREE PureMoist** i inntil 30 dager hvis du ikke åpner det. Etter denne perioden må du rengjøre og desinfisere linsene med **OPTI-FREE PureMoist** før du tar dem på.

Du må alltid følge instruksjonene fra optikeren. Ikke endre på hvordan du vedlikeholder linsene uten å snakke med optikeren.

BESKRIVELSE:

OPTI-FREE PureMoist Solution er en steril, bufret saltvannssoppløsning som inneholder natriumsitrat, natriumklorid, borsyre, sorbitol, aminometylpropanol, dinatriumedetat, to fuktighetsmidler (TETRONIC® 1304† og HydraGlyde fuktighetsmatrise [EOBO-41*-polyoksyetylen-polyoksybutylen]) med POLYQUAD (polyquaternium-1) 0,001 % og ALDOX (myristamidopropylidimetylamin) 0,0006 % som konserveringsmidler. HydraGlyde Moisture Matrix er en beskyttet multifunksjonell blokk-kopolymer som først og fremst er beregnet på å fukte og smøre silikonhydrogellinser.

†TETRONIC® er et registrert varemerke for BASF.

INDIKASJONER (bruksområder):

Brukes til daglig rengjøring, smøring, skylling, fjerning av proteinbelegg, forhindring av lipidbelegg, kjemisk desinfisering (ikke varmedesinfisering) og oppbevaring av silikonhydrogel og myke (hydrofile) kontaktlinser etter anvisninger fra optikeren.


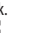


KONTRAIKASJONER:

Hvis du er allergisk mot et innholdsstoff i dette produktet, skal du ikke bruke det.

ADVARSLER:

Det er viktig at du følger retningslinjene fra optikeren samt all informasjon angitt på etiketten for riktig bruk av linsene og linseproduktene, inkludert linsetuier. Hvis du stadig føler deg sår i øynene eller du får økt tåreflod, synsforandringer eller røde øyne, må du ta ut linsene MED EN GANG. Ta kontakt med optikeren din for å unngå at problemet utvikler seg til noe mer alvorlig.

FORSIKTIGHETSREGLER:

- Du må alltid bruke frisk **OPTI-FREE PureMoist Solution**. Bruk aldri væsken i linsetuier flere ganger.
- FORSEGLING: Må ikke brukes dersom forseglingen er brutt eller mangler, eller hvis korken mangler ☹️
- For å unngå forurensning av innholdet i flasken, må dråpespissen aldri komme i kontakt med noen overflate.
- Skru korken på etter bruk.
- Oppbevares ikke under 15°C. Oppbevares ikke over 30°C 
- Flasken skal være lukket godt når den ikke er i bruk.
- Brukes for utløpsdatoen som vises på produktet 
- Kast eventuelt resterende væske seks måneder etter åpning av flasken 
- Oppbevares utilgjengelig for barn 
- Må ikke brukes sammen med varmedesinfisering (termisk).

LEVERINGSFORM:

OPTI-FREE PureMoist Solution, som er sterilisert ved filtrering, leveres i plastflasker i størrelser fra 60 ml til 480 ml. Flasker og kartong er merket med lot nummer og utløpsdato. [STERILE A](#)



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA
a Novartis company



Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR
Storbritannia

DISTRIBUTØR

Alcon Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Danmark
Tlf: + 45 3636 4300

*et Novartis varemerke



Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

OPTI-FREE® PureMoist®

Multi-Purpose Disinfecting Solution kaikille silikonihydrogeeli- ja pehmeille piilolinssseille.

VAIKUTUS:

Ohjeiden mukaan käytettynä **OPTI-FREE PureMoist Solution**:

- **Puhdistaa** ehkäisemällä lipidikertymiä ja irrottamalla piilolinssien proteiinikertymiä desinfiointiin ja säilytyksen aikana.

- **Desinfioi:** Kaksoisdesinfiointi biologisesti yhteensopivilla POLYQUAD*- ja ALDOX*-yhdisteillä vaikuttaa haitallisia mikro-organismeja (bakteerit, sienet ja Acanthamoeba) vastaan.
- **Huuhtelee:** Käytetään silikonihydrogeeli- ja pehmeiden (hydrofiilisten) piilolinssien huuhteluun ja hoitoon.
- **Säilyttää:** Voidaan käyttää piilolinssien desinfiointiin ja säilytykseen jopa 30 päivän ajan desinfiointin jälkeen.
- **HydraGlyde® Moisture Matrix** kostuttaa piilolinssijä ja **pitää linssit mukavina käyttää koko päivän**. Koska kosteus säilyy linssin pinnalla, silmäluomi pääsee liikkumaan ilman ärystystä.

Erillistä entsyymipuhdistusainetta ei tarvita, kun **OPTI-FREE PureMoist** -liuosta käytetään päivittäin. Älä säilytä piilolinssijä suolaliuoksessa **OPTI-FREE PureMoist** -liuoksen sijaan. Suolaliuos ei desinfioi piilolinssijä.

YLEISET KÄYTTÖOHJEET:

- Irrota turvasinetti pullon kaulasta kokonaan ennen käyttöä.
- Pese ja kuivaa kätesi aina ennen kuin käsittelet piilolinssijä.
- Puhdista, hoida, huuhtelee ja desinfioi piilolinssit aina kun poistat ne silmistä.
- Käsittelee piilolinssijä aina samassa järjestyksessä, jotta oikea ja vasen piilolinssi eivät sekaannu keskenään.
- Tyhjennä ja huuhtelee piilolinssiketelo **OPTI-FREE PureMoist Solution** -liuoksella aina käytön jälkeen, ja anna kuivua. Älä huuhtelee keteloa vedellä.

SAADAKSESI PARHAAT MAHDOLLISET TULOKSET:

1. **Kastele** piilolinssien kumpikin puoli huolella **OPTI-FREE PureMoist Solution** liuoksella. Hiero piilolinssiä 20 sekunnin ajan.
2. **Huuhtelee** piilolinssiä kummaltakin puolelta 10 sekunnin ajan juoksevan **OPTI-FREE PureMoist** -liuoksen alla.
3. **Täytä** ALCON®-piilolinssiketelosi **OPTI-FREE PureMoist** -liuoksella. **Säilytä** piilolinssijä suljetussa ketelossa yön yli tai vähintään 6 tunnin ajan. Voit laittaa piilolinssit silmiin suoraan ketelosta.

Jos piilolinssin pintaan jää epäpuhtauksia, huuhtelee se **OPTI-FREE PureMoist** liuoksella ennen kuin asetat piilolinssin silmään.

Voit säilyttää piilolinssijä avaamattomassa **OPTI-FREE PureMoist** -liuoksella täytetyssä piilolinssiketelossa enintään 30 päivän ajan. Tämän jälkeen piilolinssit tulee puhdistaa ja desinfioida **OPTI-FREE PureMoist** -liuoksella ennen käyttöä.

Noudata aina optikkosi ohjeita. Älä vaihda hoitomenetelmää tai hoitoliuosta neuvottelematta asiasta optikon kanssa.

KUVAUS:

OPTI-FREE PureMoist Solution on steriili, puskuroitu vesiliuos, joka sisältää natriumsitraattia, natriumkloridia, boorihappoa, sorbitolia aminometyylipropanolia, dinatriumedetaattia, kahta kostutusainetta (TETRONIC® 1304† ja HydraGlyde Moisture Matrix [EOBO-41*-polyoksiteeni-polyoksybuteeni]) ja säilöntäaineita POLYQUAD (polykvaternium-1) 0,001 % ja ALDOX (myristamidopropylidimetyyliamiini) 0,0006 %. HydraGlyde Moisture Matrix on patentoitu monitoiminen lohkokopolymeeri, joka on suunniteltu ensisijaisesti silikonihydrogeeli piilolinssien kostutukseen ja voiteluun.

†TETRONIC® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa BASF.

KÄYTTÖAIHEET (Käyttötarkoitukset):

Käytetään silikonihydrogeeli- ja pehmeiden (hydrofiilisten) piilolinssien päivittäiseen puhdistukseen, hoitoon, huuhteluun, lipidi- ja proteiinikertymien poistoon, lipidikertymien ehkäisyyn, kemialliseen desinfiointiin (ei lämpödesinfiointiin) sekä säilytykseen optikkosi antamien ohjeiden mukaan.



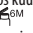
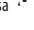
KONTRAIKKAATIOT (milloin ei tule käyttää):

Jos olet allerginen jollekin tämän valmisteen ainesosalle, älä käytä tätä valmistetta.

VAROITUKSET:

On tärkeää, että noudatat optikkosi ja kaikkien piilolinssien, hoitotuotteiden ja ketolon pakkausten ohjeita oikeasta käytöstä ja hoidosta. Jos silmissä ilmenee jatkuva epä mukavuuden tunnetta, voimakasta kyynelehtimistä, muutoksia näkökyvyssä tai silmien punoitusta, ota **VÄLITÖMÄSTI** piilolinssit pois silmistä ja ota yhteyttä optikkoosi, ettei tilanne pahenisi.

HUOMIOITAVAA:

- Käytä aina tuoretta **OPTI-FREE PureMoist Solution** -liuosta. Älä koskaan käytä uudelleen piilolinssiketelossa ollutta liuosta.
- **PAKKAUS ON SINETÖITY:** Älä käytä, jos turvasinetti on vahingoittunut tai puuttuu tai avaamattomuuden osoittava korkki puuttuu ☹️
- Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pulloon pääsisi epäpuhtauksia.
- Sulje korkki käytön jälkeen.
- Älä säilytä alle 15°C. Älä säilytä yli 30°C 
- Pidä pullo hyvin suljetuna, kun se ei ole käytössä.
- Käytä ennen pakkauksen merkittyä viimeistä käyttöpäivää 
- Hävitä käyttämättä jäänyt liuos kuuden kuukauden kuluttua ensimmäisestä avaamisesta 
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa 
- Älä käytä lämpödesinfiointiin.

PAKKAUKSET:

OPTI-FREE PureMoist Solution, joka steriloidaan suodattamalla, on saatavana 60–480 ml:n muovipulloissa. Pulloihin ja koteloihin on merkitty eränumero ja viimeinen käyttöpäivä. 



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, 76134-2099, USA

a Novartis company



Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR
Iso-Britannia

JAKELUJA:

Alcon Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
2300 Köpenhamina S
Tanska
Puh: + 45 3636 4300

*Novartisin tavaramerkki



Läs bipacksedeln noggrant och spara den för framtida bruk.

OPTI-FREE* PureMoist*

Multi-Purpose Disinfecting Solution för silikonhydrogel ja mjuuka kontaktlinser.

VERKAN:

OPTI-FREE PureMoist Solution verkar på följande sätt när lösningen används enligt föreskrifterna:

- **Rengör** genom att avlägsna proteinansamlingar och fettbeläggning från dina linser under desinfektion och förvaring.
- **Desinficerar:** Biokompatibla dubbelverkande desinfektionsmedlen POLYQUAD* och ALDOX* motverkar skadliga mikroorganismer (bakterier, svamp och Akantamöba).
- **Sköljer:** Kan användas för att skölja och återställa dina kontaktlinser.
- **Förvaring:** Har en sammansättning som används för desinfektion och förvaring av linserna i upp till 30 dagar efter desinfektion.
- **Ger god komfort hela dagen tack vare HydraGlyde* Moisture Matrix** som binder fukt på dina linser och håller linsen fuktig hela dagen. Den bibehåller ett kontinuerligt fuktskikt vilket gör att dina ögonlock kan glida över linsytan utan irritation.

Ingen separat enzymrengörare behövs tillsammans med **OPTI-FREE PureMoist** när lösningen används dagligen.

Förvara inte dina linser i saltlösning i stället för i **OPTI-FREE PureMoist**. Saltlösningen desinficerar inte linserna.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER:

- Ta bort den präglade förseglingen helt runt flaskans hals före användning.
- Tvätta och torka alltid händerna innan du handskas med dina kontaktlinser.
- Rengör, återställ, skölj och desinficera dina linser varje gång du tar ut dem.
- Hantera alltid samma lins först, höger eller vänster, för att inte blanda ihop dem.
- Tom alltid linseutiet efter användning, skölj sedan etuiet med färsk **OPTI-FREE PureMoist Solution** och låt det lufttorka. Tvätta inte linseutiet med vatten.

FÖR OPTIMALT RESULTAT, FÖLJ DESSA ANVISNINGAR:

1. **Vät** linsens båda sidor noggrant med **OPTI-FREE PureMoist Solution**. Gnugga linsen i 20 sekunder.
2. **Skölj** linsens båda sidor i 10 sekunder under ett stadigt flöde av **OPTI-FREE PureMoist**
3. **Fyll** ditt ALCON®-linsetui med ny **OPTI-FREE PureMoist**. Förvara linserna i det stängda linseutiet över natten eller i minst 6 timmar. Efter blötläggningen är linserna färdiga att användas.

Om något skräp kvarstår på kontaktlinserna skall de sköljas med **OPTI-FREE PureMoist** innan de sätts in. Du kan lämna dina linser i det öppnade linsetuiet fyllt med **OPTI-FREE PureMoist** i upp till 30 dagar. Därefter måste linserna rengöras och desinficeras med **OPTI-FREE PureMoist** innan de används.

Följ alltid din linstillpassares instruktioner. Ändra inte dina skötselregler för linserna eller linslösningen utan att rådfråga din linstillpassare.

BESKRIVNING:

OPTI-FREE PureMoist Solution är en steril, buffrad vattenlösning innehållande natriumcitrat, natriumklorid, borsyra, sorbitol, aminometylpropanol, dinatriumedetat, två vätmiddel (TETRONIC® 1304T och HydraGlyde Moisture Matrix [EOBO-41* polyoxyetylen-polyoxybutylen]) med POLYQUAD

(polyquaternium-1) 0,001 % och ALDOX (myristamidopropyl-dimetylamin) 0,0006 % som konserveringsmedel. HydraGlyde Moisture Matrix är en patentskyddad, multifunktionell blocksampolymer som främst är avsedd för vätning och smörjning av silikonhydrogellinser.

TETRONIC® är ett registrerat varumärke tillhörande BASF.

INDIKATIONER (användningsområden):

För användning vid daglig rengöring, rekonditionering, sköljning, avlägsnare proteinansamlingar, förebyggande av fettbeläggningar, kemisk desinfektion (ej värmedesinfektion) och förvaring av kontaktlinser av silikonhydrogel och mjuka (hydrofila) kontaktlinser enligt rekommendationer från din optiker.

KONTRAIKATIONER (när produkten ej bör användas):

Vid allergi mot någon beståndsdel i produkten skall den ej användas.

VARNINGAR:

Det är viktigt att du följer din optikers anvisningar och alla instruktioner på etiketter för korrekt användning och skötsel av linserna och linsvårdsprodukterna, inklusive linseutiet. Om du upplever bestående obehag i ögonen, ökad tårproduktion, synrubbningar eller rödögdhet ska du OMEDELBART ta ut linserna och kontakta din optiker, då problemet annars kan förvärras.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER:

- Använd alltid ny **OPTI-FREE PureMoist Solution**. Återanvänd aldrig lösningen i ditt linsetui.
- **GARANTIFÖRSEGLAD:** Använd inte om säkerhetsförseglingen är skadad eller saknas eller om korken saknas 
- För att undvika eventuell förorening skall du aldrig låta flaskans droppspets vidröra något.
- Sätt på locket efter användandet.
- Förvaras inte under 15°C. Förvaras inte över 30°C 
- Se till att förpackningen är ordentligt försluten när den inte används.
- Används före det utgångsdatum som finns på produkten 
- Kasta eventuell kvarvarande lösning 6 månader efter att flaskan öppnades 
- Förvaras oåtkomligt för barn 
- Skall ej användas i samband med värmedesinfektion (thermal).

FÖRPACKNING:

OPTI-FREE PureMoist Solution, som steriliseras genom filtrering, tillhandahålls i plastflaskor innehållande mellan 60 och 480 ml. Flaskor och kartonger är märkta med partinummer och utgångsdatum.



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, 76134-2099, USA

a Novartis company



Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR
Storbritannien

DISTRIBUTÖR

Alcon Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
2300 Köpenhamn S
Danmark
Tel: +45 3636 4300

*ett Novartis varumärke

© 2015 Novartis

