

Salvequick MED Wart Plaster Leaflet

Ref no: 602238
Material no: 985244-03
Old mat no: 985144-02
In. EAN13: -
Out. EAN13: -

Line drawing: -
Pack: -
Printer: Dilograf
Print: Offset

INFO FOR REPRO/PRINTER

This artwork may NOT be changed or adjusted without prior notice to Collabra. The graphics may NOT be printed without written approval from Collabra or Orkla.

DIGITAL PROOF (PDF) to proof@collabra.se

COLOR PROOF to Orkla AB
Mikaela Sköldberg
Box 1336
SE-171 26 Solna
Sweden



FONTS WILL NOT BE SUPPLIED WITH THIS ARTWORK; ALL TEXTS ARE VECTORIZED. ALL SPECIAL COLOURS SPECIFIED ARE FROM THE PANTONE® MATCHING SYSTEM UNLESS OTHERWISE STATED. THE LINKED IMAGES MAY BE LOW RESOLUTION FOR DECREASING FILE SIZE PURPOSES AND SHOULD BE REPLACED BY HIGH RESOLUTION IMAGES BEFORE PRINTING. THE COLOURS ON THIS PRINTOUT ARE NOT ACCURATE AND ARE INTENDED TO BE USED AS A GUIDE ONLY; DO NOT USE FOR MATCHING PURPOSES UNLESS OTHERWISE STATED. THIS ARTWORK DOES NOT CONTAIN ANY TRAP/GRIP/CHOKER INFORMATION.



Distributör Anger den enhet som distribuerar den medicintekniska produkten till platsen. **Distributör** Anger enheten som distribuerar den medicinske enheten i marketet. **Distributör** Anger den enhet, der distribuerer det medicinske udstyr. **Jakelija** Ilmaisee tahoa, joka toimii lääkinnällisen laitteen jakelijana paikallisella alueella. TAI Taho, joka toimii lääkinnällisen laitteen jakelijana paikallisella alueella.



Ompaketering För att identifiera att en ändring av den ursprungliga konfigurationen för medicinteknisk produkt har skett. **Ompakking** Angir at en modifikasjon/rekonfigurasjon av pakningen til den originale medicinske enheten er utført. **Ompakket** Identifierer, at modificering/konfigurering af den originale emballage af det medicinsk udstyr har fundet sted. **Uudelleenpakkaaminen** Tunnistaa, että alkuperäisen lääkinnällisen laitteen pakkauskokoonpanossa on tapahtunut muutos. TAI Alkuperäisen lääkinnällisen laitteen pakkauskokoonpanossa on tapahtunut muutos.



Importör Anger den enhet som importerar den medicintekniska produkten till platsen. **Importör** Angir enheten som importerer den medicinske enheten til marketet. **Importör** Angir den enhet, der importerer det medicinske udstyr. **Maahantuoja** Ilmaisee tahoa, joka maahantuo lääkinnällisen laitteen paikalliselle alueelle. TAI Taho, joka maahantuo lääkinnällisen laitteen paikalliselle alueelle.



Översättning För att identifiera att den ursprungliga informationen om medicintekniska produkten har genomgått en översättning som kompletterar eller ersätter den ursprungliga informationen. **Oversættelse** Angir at den originale informasjonen om den medicinske enheten har blitt oversatt, og at oversættelsen supplerer eller erstatter den originale informasjonen. **Oversættelse** Identifierer, at de originale informationer om medicinsk udstyr har gennemgået en oversættelse, der supplerer eller erstatter de oprindelige oplysninger. **Käännös** Tunnistaa, että lääkinnällisen laitteen tieto on käynyt läpi käännoksen, joka täydentää tai korvaa alkuperäistä tietoa. TAI Lääkinnällisen laitteen tieto on käynyt läpi käännoksen, joka täydentää tai korvaa alkuperäistä tietoa.



Medicinteknisk produkt. Medisinsk enhet. Medicinsk udstyr. Läkinnällinen laite.



Innehåller farliga ämnen Anger en medicinteknisk produkt som innehåller ämnen som kan vara cancerframkallande, mutagena, reprotoxiska (CMR) eller ämnen med hormonstörande egenskaper. **Inneholder farlige stoffer** Angir en medisinsk enhet som inneholder stoffer som kan være karsinogene, mutagene, reprotoxiske (CMR), eller stoffer med endokrine skadelige egenskaper. **Inneholder farlige stoffer** Angir et medicinsk udstyr, der indeholder stoffer, der kan være kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske (CMR) eller hormonforstyrrende. **Sisältää vaarallisia ainesosia** Ilmaisee lääkinnällistä laitetta, joka sisältää ainesosia, jotka voivat olla karsinogeenisiä, mutageenisia, lisääntymiselle vaarallisia (CMR), tai aineita, jolla on hormonoitointaa häiritseviä ominaisuuksia. TAI Lääkinnällinen laite, joka sisältää ainesosia, jotka voivat olla karsinogeenisiä, mutageenisia, lisääntymiselle vaarallisia (CMR), tai aineita, jolla on hormonoitointaa häiritseviä ominaisuuksia.




Webbsida med patientinformation. Nettsted for pasientinformasjon. Websted med patientinformationer. Potilaalle tietoa tarjoava verkkosivusto.



Tillverkningsland. Produksjonsland. Fremstillingsland. Valmistusmaa.



Återvinningsbar förpackning. Resirkulerbar emballasje. Genanvendelig emballage. Kierrätettävä pakkaus.

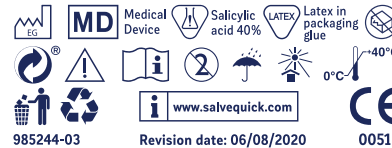

WART PLASTER
För fotvårter
For fotvorter
Til fodvorter
Jalkojen syyliin

Importer & Distributor contact in Europe:

Orkla Cederroth S.A.U.
Pol. Ind Can Barri, Calle D n° 11-12
ES-08415 Bigues i Riells, Barcelona, Spain.
For distributor in each country, please visit
www.salvequick.com

Pharmplast S.A.E
Amnia free zone 23512, Alexandria, Egypt.
www.pharmplast-online.com



E C Rep Ltd,
5 Fitzwilliam Square East,
Dublin 2, D02 R744, Ireland.
Tel: +353 1 2 544 944
Email: info@ecrep.ie

SV SKYDDANDE PLÅSTER MED SALICYLSYRA FÖR FOTVÅRTER.

EGENSKAPER:

- Plattorna med salicylsyra angriper vårtorna utan att påverka den omkringliggande huden.
- Hjälper till att ta bort vårtor utan smärta, snabbt och effektivt.

ANVÄNDARINSTRUKTION

1. Blötlägg vårten i varmt vatten i 5 minuter före applikation.
2. Se till att huden är ren och torr och fri från krämer och oljor.
3. Ta fram plåstret ur förpackningen och undvik att vidröra sidan med lim.
4. Säkerställ att hålet i mitten på plåstret är placerat direkt över vårten och säkerställ att kanterna är utjämnade.
5. Låt plåstret sitta kvar tills det börjar lossna. Ta bort plåstret efter max 48 timmar.
6. Blötlägg det behandlade området i 5 minuter innan du lossar huden
7. Upprepa behandlingen efter behov (tills vårten har försvunnit) i upp till 14 dagar.

KONTRAIKDIKATION

Använd inte om du har diabetes, nedsatt blodcirkulation eller om du är överkänslig mot salicylsyra.

Gravida och barn: använd endast efter rådgivning med läkare.

NO BESKYTTENDE PLASTER MED SALICYLSYRE FOR PLANTARVORTER.

FUNKSJONER:

- Salicylsyre-puter behandler vorter uten å påvirke huden rundt.
- Bidrar til å fjerne vorter uten smerte.
- Raskt og effektivt.

VEILEDNING FOR BRUK

1. Bløt opp vorten i varmt vann i 5 minutter før påføring.
2. Rengjør og tørk huden før bruk, og sørg for at det aktuelle området er fritt for krem og oljer.
3. Fjern baksiden, og unngå å berøre limsiden.
4. Legg på plasteret som er innsatt med salicylsyre sentrert over vorten, og sørg for at kantene glattes ut.
5. La det sitte på plass til det begynner å løsne. Etter maksimalt 48 timer skal du fjerne plasteret.
6. Bløt opp det aktuelle området i varmt vann i 5 minutter før du fjerner løs hud.
7. Gjenta denne prosedyren etter behov i opp til 14 dager.

KONTRAIKDIKASJON

Må ikke brukes hvis du er diabetiker eller er hypersensitiv for salicylsyre eller har dårlig blodsirkulasjon. Gravide kvinner og barn: bruk kun med legens godkjennelse.

DA BESKYTTENDE PLASTER MED SALICYLSYRE TIL FODVORTER PÅ FODSÅLEN.

FUNKTIONER:

- Salicylsyre-plasterne påvirker vorterne uden at påvirke den omkringliggende hud.
- Hjælper med at fjerne vorterne smertefrit.
- Hurtig og effektivt.

BRUGSVEJLEDNING

1. Blødgør vorten i varmt vand i 5 min. før plasteret sættes på.
2. Sørg for at huden er ren og tør og fri for creme og olie.
3. Fjern papiret fra plasteret og undgå at røre den klistrede overflade.
4. Påfør plasteret, så hullet i midten med salicylsyre er placeret direkte over vorten og sørg for at kanten rundt om er udjævnet.
5. Lad plasteret blive siddende til det selv begynder at løsne sig. Fjern plasteret efter max. 48 timer.
6. Blødgør det behandlede område i varmt vand i 5 min. inden den løse hud fjernes.
7. Gentag denne procedure om nødvendigt i op til 14 dage.

KONTRAIKDIKATION

Brug ikke, hvis du er diabetiker eller overfølsom over for salicylsyre eller lider af dårlig blodcirkulation. Gravide kvinder og børn: må kun bruges med lægens godkendelse.

FI SUOJAAVA SALISYYLIHAPPOA SISÄLTÄVÄ LAASTARI JALKAPOHJAN SYYLIIN.

OMINAISUUDET:

- Salisyylihappolaastaritynnyyt tehoavat syyliin vaikuttamatta ympäriöivään ihoon.
- Auttaa poistamaan syyliä ilman kipua.
- Nopea ja tehokas.

KÄYTTÖOHJEET

1. Liota syyliää lämpimässä vedessä 5 minuuttia ennen laastarin käyttöä.
2. Puhdista ja kuivaa iho ennen käyttöä varmistaen, että hoidettavassa kohdassa ei ole voiteita tai öljyä.
3. Poista suojaopaperi välttämättä kosketusta limapintaan.
4. Aseta laastari varmistaen, että salisyylihappo sisältävä pinta on täysin syyliän päällä. Varmista, että reunat ovat tasaisesti.
5. Pidä laastari paikoillaan, kunnes se alkaa irrota. Poista laastari viimeistään 48 tunnin käytön jälkeen.
6. Liota vaikuttanutta kohtaa lämpimällä vedellä noin 5 minuutin ajan ennen irronneen ihon poistamista.
7. Toista tämä menettely tarpeen mukaan korkeintaan 14 päivän ajan.

KONTRAIKDIKAAITOT

Älä käytä laastaria, mikäli olet diabeetikko, herkkä salisyylihapolle tai kärsit huonosta verenkierrosta. Raskaana olevat ja lapset: käyttö vain lääkärin luvalla.