

<b>Artwork Code:</b>	
<b>Repro Version:</b>	STAGE: 4 VERSION: 1
<b>Job No:</b>	6389045
<b>Cutter Ref:</b>	
<b>Job Title:</b>	ORKLA CARE AB. Salvequickmed 602238 SalvequickMed wart plaster leaflet
<b>Design Ref:</b>	DF 616232
<b>Printer:</b>	
<b>Contact:</b>	
<b>Supplier:</b>	ORKLA CARE AB.
<b>Contact:</b>	Tiina Auniola-Larsson
<b>SGS Contact:</b>	Sophie Thompson
<b>Operator:</b>	VK
<b>Modify Date:</b>	25-NOV-21 17:23:08
<b>Design Barcode:</b>	
<b>MySGS Barcode:</b>	NONE
<b>Magnification:</b>	
<b>BWR:</b>	0.000
<b>Print Process:</b>	Litho
<b>Profile:</b>	ECIO7 9900SM ECI Offset ISO Coated 39L
<b>Substrate:</b>	

<b>PANTONE 2757 C</b>	Varnish
Line -	Line -
5.89% - 1217mm <sup>2</sup>	100% - 20648mm <sup>2</sup>


**Total Ink Coverage:** 106.46%

**Supplier/Printer Sign Off:**  
Please sign and date against your appropriate title after checking proof and indicate clearly any comment or corrections.

<b>Supplier:</b>	
<b>Date:</b>	
<b>Comments:</b>	
<b>Printer:</b>	
<b>Date:</b>	
<b>Comments:</b>	

<b>SGS &amp; CO</b>	<b>INTERNAL USE ONLY APPROVED FOR DESPATCH</b>
<b>Content:</b>	<input type="checkbox"/> Signed:
<b>Colour:</b>	<input type="checkbox"/> Signed:
<b>Retoucher Check:</b>	<input type="checkbox"/> Signed:
	Date:


### Notes :

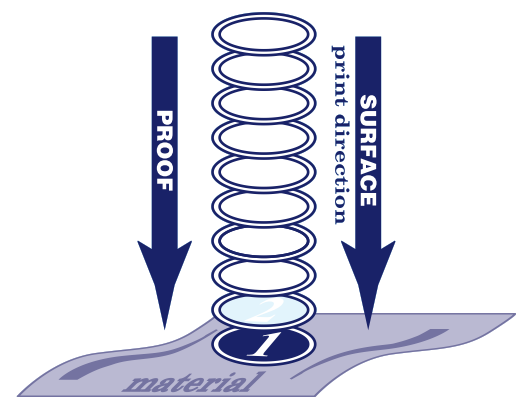

232 mm

<p><b>Distributör</b> Anger den enhet som distribuerar den medicintekniska produkten till platsen. <b>Distributör</b> Anger enheten som distribuerar den medicinske enheten i marketet. <b>Distributör</b> Anger den enhet, der distribuerer det medicinske udstyr. <b>Jakelija</b> Taho, joka toimii lääkinnällisen laitteen jakelijana paikallisella alueella.</p> <p><b>Ompaketing</b> För att identifiera att en ändring av den ursprungliga konfigurationen för medicinteknisk produkt har skett. <b>Ompaketing</b> Anger at en modifikasjon/rekonfigurasjon av pakningen til den originale medicinske enheten er utført. <b>Ompaketing</b> Identifierer, at modificering/konfigurering af den originale emballage af det medicinske udstyr har fundet sted. <b>Uudelleenpakkaaminen</b> Alkuperäisen lääkinnällisen laitteen pakkauskohtaan on tapahtunut muutos.</p> <p><b>Importör</b> Anger den enhet som importerar den medicintekniska produkten till platsen. <b>Importör</b> Anger enheten som importerer den medicinske enheten til marketet. <b>Importör</b> Anger den enhet, der importerer det medicinske udstyr. <b>Maahantuoja</b> Taho, joka maahantuo lääkinnällisen laitteen paikalliselle alueelle.</p> <p><b>Översättning</b> För att identifiera att den ursprungliga informationen om medicintekniska produkten har genomgått en översättning som kompletterar eller ersätter den ursprungliga informationen. <b>Översettelse</b> Anger at den originale informasjonen om den medicinske enheten har blitt oversatt, og at oversettelsen supplerer eller erstatter den originale informasjonen. <b>Översættelse</b> Identifierer, at de originale informationer om medicinske udstyr har gennemgået en oversættelse, der supplerer eller erstatter de oprindelige oplysninger. <b>Käännös</b> Lääkinnällisen laitteen tieto on käännetty lääkinnällisen, joka täydentää tai korvaa alkuperäistä tietoa. Medicinteknisk produkt. Medicinsk enhet. Medicinsk udstyr. Lääkinnällinen laite.</p>	<p><b>Webbsida med patientinformation. Nettsted for pasientinformasjon. Websted med patientinformationer.</b> Potillaalle tietoa tarjoava verkkosivusto.</p> <p><b>Tillverkningsland. Produksjonsland. Fremstillingsland. Valmistusmaa.</b></p> <p><b>Återvinningsbar förpackning. Resirkulerbar emballasje. Genanvendelig emballage. Kierrätettävä pakkaus.</b></p>	<div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <h3>WART PLASTER</h3> <p>För fotvårter For fotvorter Til fodvorter Jalkojen syyliin</p> </div> <div style="font-size: small; margin-top: 20px;"> <p>Importer &amp; Distributor contact in Europe: <b>Orkla Cederroth S.A.U.</b> Pol. Ind. Can. Bari, Calle D n° 11-12 ES-08415 Bigues i Riells, Barcelona, Spain. For distributor in each country, please visit <a href="http://www.salvequick.com">www.salvequick.com</a></p> <p>Pharmplast S.A.E. Amnia free zone 23512, Alexandria, Egypt. <a href="http://www.pharmplast-online.com">www.pharmplast-online.com</a></p> <p>EC REP Ltd. 5 Fitzwilliam Square East, Dublin 2, D02 R744, Ireland. Tel: +353 1 2 544 944 Email: info@ecrep.ie</p> </div>
<p><b>MD</b></p>	<p><b>MD</b></p> <p><b>985244-04</b></p> <p>Revision date: 24/11/2021</p> <p><b>0051</b></p>	<p><b>CE</b></p>

<p><b>SV SKYDDANDE PLÅSTER MED SALICYLSYRA FÖR FOTVÅRTER.</b></p> <p><b>EGENSKAPER:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plattorna med salicylsyra angriper vårtorna utan att påverka den omkringliggande huden.</li> <li>• Hjälper till att ta bort vårtor utan smärta.</li> <li>• Snabbt och effektivt.</li> </ul> <p><b>ANVÄNDARINSTRUKTION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Blöt lägg vartan i varmt vatten i 5 minuter före applikation.</li> <li>2. Se till att huden är ren och torr och fri från krämer och oljor.</li> <li>3. Ta fram plåstret ur förpackningen och undvik att vidröra sidan med lim.</li> <li>4. Säkerställ att hålet i mitten på plåstret är placerat direkt över vårtan och säkerställ att kanterna är utjämnade.</li> <li>5. Låt plåstret sitta kvar tills det börjar lossna. Ta bort plåstret efter max 48 timmar.</li> <li>6. Blöt lägg det behandlade området i 5 minuter innan du lossar huden.</li> <li>7. Upprepa behandlingen efter behov (tills vartan har försvunnit) i upp till 14 dagar.</li> </ol> <p><b>VARNING</b></p> <p>Använd inte om du har diabetes, nedsatt blodcirkulation eller om du är överkänslig mot salicylsyra.</p> <p>Gravida och barn: använd endast efter rådgivning med läkare.</p> <p>Hudskador kan uppstå om den friska huden kommer i kontakt med salicylsyra. Det skyddande plåstret innehåller 0,4 g/g (40%) salicylsyra. Släng plåstret direkt och försiktigt efter användandet, utan kontakt med frisk hud för att förhindra spridning av infektioner.</p>	<p><b>NO BESKYTTENDE PLASTER MED SALICYLSYRE FOR FOTVORTER.</b></p> <p><b>EGENSKAPER:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salicylsyreputer behandler vorter uten å påvirke huden rundt.</li> <li>• Bidrar til å fjerne vorter uten smerte.</li> <li>• Raskt og effektivt.</li> </ul> <p><b>VEILEDNING FOR BRUK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bløt opp vorten i varmt vann i 5 minutter før påføring.</li> <li>2. Rengjør og tørk huden før bruk og sørg for at det aktuelle området er fritt for krem og oljer.</li> <li>3. Fjern baksiden, og unngå å berøre limsiden.</li> <li>4. Legg på plasteret som er innsatt med salicylsyre sentrert over vorten, og sørg for at kantene glattes ut.</li> <li>5. La det sitte på plass til det begynner å løse. Etter maksimalt 48 timer skal du fjerne plasteret.</li> <li>6. Bløt opp det aktuelle området i varmt vann i 5 minutter før du fjerner løs hud.</li> <li>7. Gjenta denne prosedyren etter behov i opp til 14 dager.</li> </ol> <p><b>ADVARSEL</b></p> <p>Må ikke brukes hvis du er diabetiker eller er hypersensitiv for salicylsyre eller har dårlig blod sirkulasjon. Gravide kvinner og barn: bruk kun med legens godkjenning.</p> <p>Hudskader kan oppstå hvis den friske huden kommer i kontakt med salicylsyre. Kast plasteret umiddelbart og forsiktig etter bruk, uten kontakt med frisk hud for å forhindre spredning av infeksjoner.</p>	<p><b>DA BESKYTTENDE PLASTER MED SALICYLSYRE TIL FODVORTER.</b></p> <p><b>FUNKTIONER:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plasterne med salicylsyre behandler vorterne uden at påvirke den omkringliggende hud.</li> <li>• Hjælper med at fjerne vorterne smertefrit.</li> <li>• Hurtigt og effektivt.</li> </ul> <p><b>BRUGSVEJLEDNING</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Blødgør vorten i varmt vand i 5 min. før plasteret påsættes.</li> <li>2. Sørg for at huden er ren og tør før brug. Sørg for at området, der skal behandles, er fri for creme og olie.</li> <li>3. Fjern papiret fra plasteret og undgå at berøre den klæbende side.</li> <li>4. Påsæt plasteret, så hullet i midten med salicylsyre er placeret direkte over vorten, og sørg for at kanten rundt om udjævnet.</li> <li>5. Lad plasteret blive siddende til det selv begynder at løse sig. Fjern plasteret efter max. 48 timer.</li> <li>6. Blødgør det behandlede område i varmt vand i 5 min. inden den løse hud fjernes.</li> <li>7. Gentag denne procedure om nødvendigt i op til 14 dage.</li> </ol> <p><b>ADVARSEL</b></p> <p>Må ikke anvendes, hvis du er diabetiker eller overfølsom over for salicylsyre eller lider af dårlig blodcirkulation. Gravide kvinder og børn: må kun anvendes med lægens godkendelse.</p> <p>Huden kan tage skade, hvis sund hud kommer i berøring med salicylsyre. Beskyttende plaster der indeholder 0,4 g/g (40%) salicylsyre. Smid straks plasteret ud efter brug og undgå kontakt med den raske hud for at forhindre spredning af infektion.</p>	<p><b>FI SUOJAAVA SALISYYLIHAPPOA SISÄLTÄVÄ LAASTARI JALKAPOHJAN SYYLIIN.</b></p> <p><b>OMINAISUUDET:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salisyylihappolaastariynyrt tehoavat syyliin vaikuttamatta ympäröivään ihoon.</li> <li>• Auttaa poistamaan syyliä ilman kipua.</li> <li>• Nopea ja tehokas.</li> </ul> <p><b>KÄYTTÖOHJEET</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Liota syyliä lämpimässä vedessä 5 minuuttia ennen laastarin käyttöä.</li> <li>2. Puhdista ja kuivaa iho ennen käyttöä varmistaen, että hoidettavassa kohdassa ei ole voiteita tai öljyjä.</li> <li>3. Poista suojapaperi välttämättä koskettamatta liimapintaa.</li> <li>4. Aseta laastari varmistaen, että salisyylihappoa sisältävä pinta on täysin syyliin päällä. Varmista, että reunat ovat tasaisesti.</li> <li>5. Pidä laastari paikoillaan, kunnes se alkaa irrota. Poista laastari viimeistään 48 tunnin käytön jälkeen.</li> <li>6. Liota käsiteltäviä kohtia lämpimällä vedellä noin 5 minuutin ajan ennen irronneen ihoa poistamista.</li> <li>7. Toista tämä käsittely tarpeen mukaan korkeintaan 14 päivän ajan.</li> </ol> <p><b>VAROITUKSET</b></p> <p>Älä käytä laastaria, mikäli olet diabeetikko, yliherkkä salisyylihapolle tai kärsit huonosta verenkierrosta. Raskaana olevat ja lapset: käyttö vain lääkärin luvalla. Jos terve iho pääsee kosketuksiin salisyylihapon kanssa, voi ihmettä ihovaurioita. Tämä suojaava laastari sisältää 0,4 g/g (40%) salisyylihappoa. Hävitä laastari heti käytön jälkeen huolellisesti tervettä ihoa koskettamatta, jotta tulehdukset eivät leviä.</p>
---	---	---	---

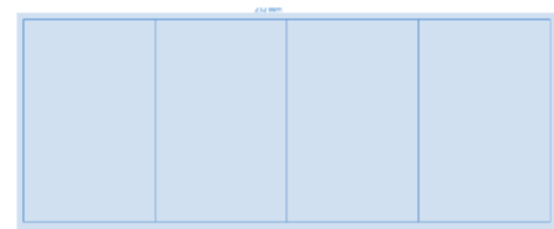

**Varnish - Separation  
REDUCED FOR VISUAL ONLY**



**Artwork Code:**

**Repro Version:** STAGE: 4 VERSION: 1

**Job No:** 6389045

**Cutter Ref:**

**Job Title:** ORKLA CARE AB, Salvequickmed 602238  
SalvequickMed wart plaster  
kallit

**Design Ref:** DF 616232

**Printer:**

**Contact:**

**Supplier:** ORKLA CARE AB

**Contact:** Tina Aunio-Larsson

**SGS Contact:** Sophie Thompson

**Operator:** VK

**Modify Date:** 25-NOV-21 17:23:08

**Design Barcode:**

**MySGS Barcode:** NONE

**Magnification:**

**BWR:** 880

**Print Process:** Ufo

**Profile:** EC07 99005M ECI Offset ISO Coated 39L

**Substrate:**

Varnish

Line

100%

**Total Ink Coverage:** 106.46%

**Supplier/Printer Sign Off:**  
Please sign and date against your appropriate title after checking proof and indicate clearly any comment or corrections.

**Supplier:**

**Date:**

**Comments:**

**Printer:**

**Date:**

**Comments:**


**INTERNAL USE ONLY**  
**APPROVED FOR DESPATCH**

**Content:**  Signed:

**Colour:**  Signed:

**Retoucher Check:**  Signed:

**Date:**

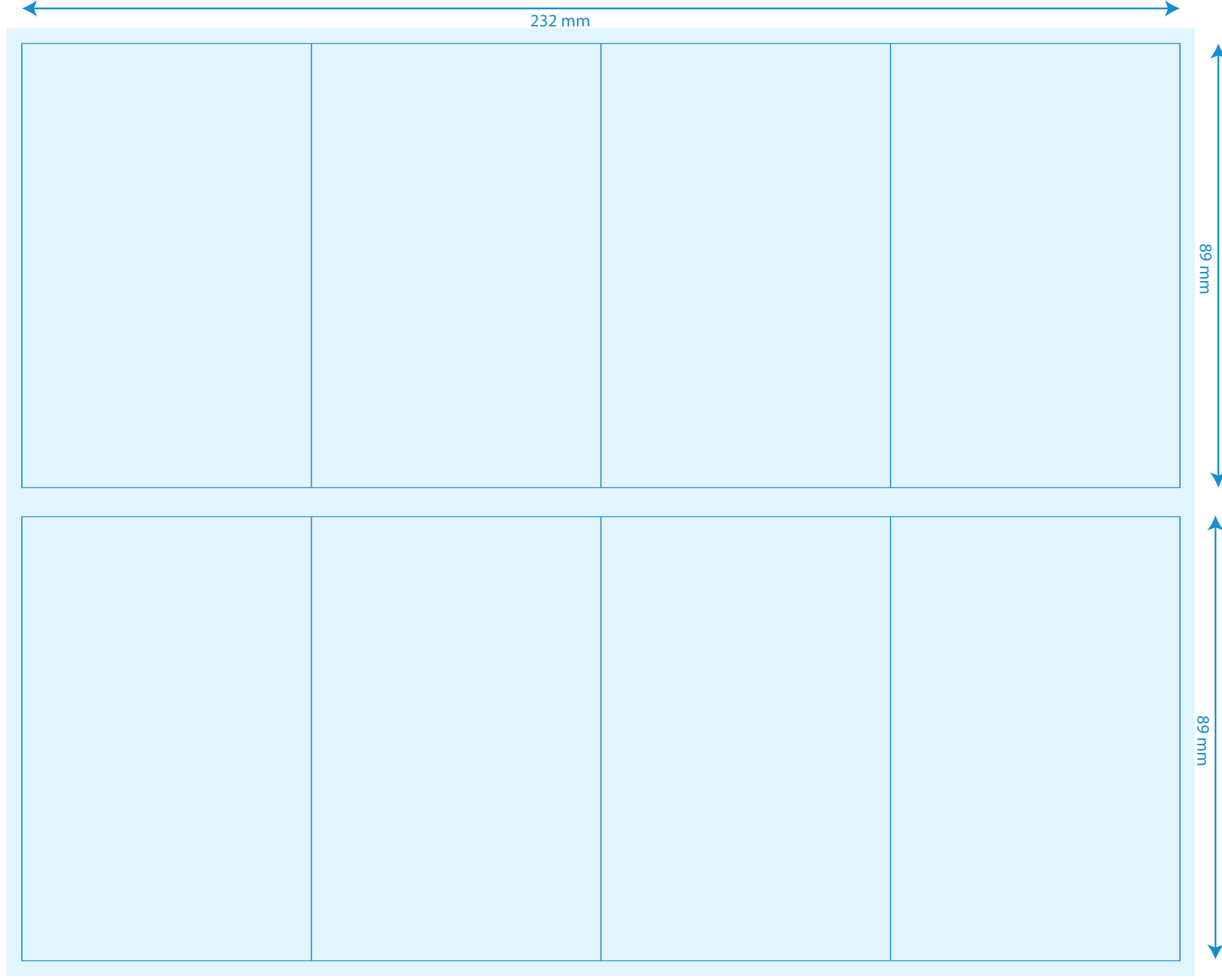

**Notes :**

