

FORHOLDSREGLER

1) Læs brugsanvisningen grundigt igennem før testen udføres. Testen kan udelukkende tolkes,

hvis instruktionerne er nøjagtigt overholdt.

2) Opbevarer utilgængeligt for børn.

3) Tag ikke testen hvis datoen er overskredet, eller hvis posen er beskadiget.

4) Følg nøj den indikerede tid, samt blod- og opløsningsmængder.

5) Opbevar mellem +4 °C og +30 °C. Må ikke fryses.

6) Kasseres efter brug. Testen kan kun anvendes én gang.

7) Udelukkende til udvortes brug. MÅ IKKE INDTAGES.

8) Denne test er udelukkende til brug for in vitro-diagnostik selvtest.

9) Anbefales ikke til brug af personer, der tager medicin som fortynder blodet

(antikoagulerende) eller af personer med sygdomme som f.eks. hæmofili.

10) Efter anvendelse kasser alle dele i overensstemmelse med lokale regler, søg råd hos

din apoteker.

FORSIKTHETSÅTÅRDER

1) Læs nøje igennem instruktionerne innan du utför testet. Testet kan bara tolkas om

alla instruktioner har följts noggrant.

2) Förvaras oåtkomligt för barn.

3) Skall ej användas efter det att utgångsdatumet på etiketten eller på den skyddande påsen

har passerats, eller om påsen är skadad.

4) Följ strikt den angivna tiden, samt angivna mängder för blod och spådningsmedel.

5) Förvaras mellan +4°C och 30°C. Får ej frysas.

6) Återanvänd inte kassetten eller lansetterna.

7) Endast för utvortes bruk FÅR EJ FÖRTÄRAS.

8) Självetestet är endast avsett för in vitro-diagnostisk användning.

9) Rekommenderas att ej användas av personer som tar mediciner som tunnar ut blodet

(antikoagulantia) eller av personer som lider av hemofili.

10) Efter användandet ska alla komponenter kasseras i överensstämmelse med lokale

- 2 sterile lancetter til blodprøve

1) plastikpipette

- 1 forseglet aluminiumpose indeholdende:

1 antifugpose

- 1 desinficerende serviet

* Ikke inkluderet materiale: Absorberende bomuld.

* Luk først den beskyttende pose op, når du er klar til at bruge testen.

- 1 desinfectionsserviet

- 1 dråbefåske indeholdende

1 ml opløsning af

Thyroid TSH Test

hvidt lag

blåt lag

INDHOLD

PAKKEN INDHOLDER ALT DET NØDVENDIGE, DER SKAL TIL FOR AT UDFØRE EN

THYROID-TSH TEST:

- 1 forseglet aluminiumpose indeholdende:

1 plastikpipette

1 antifugpose

- 1 desinfectionsserviet

- 1 dråbefåske indeholdende

1 ml opløsning af

Thyroid TSH Test

hvidt lag

blåt lag

1 Thyroid TSH Test kassette

1 plastikpipette

- 1 forseglet aluminiumpose indeholdende:

1 påse tørkmedel

- 1 desinfectionsserviet

- 1 brugsanvisning

- 2 sterile lancetter for blodprøvestagning

- 1 dråbefåske indeholdende 1 ml

spådningsmedel for

Thyroid TSH Test

blå kapsel

vit kapsel

- 1 dråbefåske indeholdende 1 ml

1 Thyroid TSH Test-kassette

1 muovisen pipetin

- 1 sineoidn aluminiumpipusin, joka sisältää:

1 kuivausainepussin

- 1 ohjelehtinen

- 1 desinfiointiainetyyny

* Tarvittava materiaali, joka ei sisälly pakkaukseen: vanu.

* Ava suojapussi vasta, kun olet valmis tekemään testiin.

* Kuivausainepussia ei saa käyttää.

INNEHÅLL

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER ALLT SOM BEHÖVS FÖR ATT UTFÖRA ETT THYROID-

TSH TEST:

- 1 förseglad aluminiumpåse innehållande:

1 påse tørkmedel

- 1 desinfectionsserviet

- 1 brugsanvisning

- 2 sterile lancetter for blodprøvestagning

- 1 dråbefåske indeholdende 1 ml

spådningsmedel for

Thyroid TSH Test

blå kapsel

vit kapsel

- 1 dråbefåske indeholdende 1 ml

1 Thyroid TSH Test-kassette

1 muovisen pipetin

- 1 sineoidn aluminiumpipusin, joka sisältää:

1 kuivausainepussin

- 1 ohjelehtinen

- 1 desinfiointiainetyyny

* Tarvittava materiaali, joka ei sisälly pakkaukseen: vanu.

* Ava suojapussi vasta, kun olet valmis tekemään testiin.

* Kuivausainepussia ei saa käyttää.

TSH-HORMONET OG SKJOLDBRUSKKIRTELLEN

PRIMA[®]
HOME TEST

RESULTAT/TULOS

Cut-off: 5 µIU/mL

P N

Dato / Datum / Päiväys

THYROID-TSH TEST THYROID-TSH TESTI

CE
0483

Hjemmetest til vurdering af det skjoldbruskkirtelstimulerende hormon Thyroid(TSH) i blodet

Självttest för bestämning av tyreoida-stimulerande hormon - TSH i blodet

Itse tehtävä testi tyreotropiinin (TSH:n) määrittelyyn verestä

BRUGSANVISNING
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJEET

TSH-HORMON OCH THYROID

Sköldkörtelrubbinningar är ett av de vanligaste medicinska tillstånden i världen, särskilt för kvinnor, med en allt snabbare takt av befolkningen som lider av aktiv sköldkörtel (hypotyreoos). Symptomen av hypotyreoos inkluderar trötthet och sömnet, torr hud och sprött hår, gämskhet och i vissa fall depression, frusenhet och bestående förtoppning samt oregelbunden menstruation hos kvinnor.

Thyroidstimulerande hormon (TSH), som utsöndras av hypofysen, reglerar och kontrollerar aktiviteten i sköldkörteln. Därför indikerar en förhöjd TSH nivå en aktiv sköldkörtel, och detta är den princip som thyroideestet är baserad på för upptäckten av hypotyreoos tillstånd.

THYROID-TSH TEST är ett snabbt immunologiskt test för att upptäcka förhöjda TSH-nivåerna och därmed för hypotyreoos screening från ett blodprov från fingertoppen.

- 1 dråbefåske indeholdende 1 ml

spådningsmedel for

Thyroid TSH Test

blå kapsel

vit kapsel

- 1 dråbefåske indeholdende 1 ml

1 Thyroid TSH Test-kassette

1 muovisen pipetin

- 1 sineoidn aluminiumpipusin, joka sisältää:

1 kuivausainepussin

- 1 ohjelehtinen

- 1 desinfiointiainetyyny

* Tarvittava materiaali, joka ei sisälly pakkaukseen: vanu.

* Ava suojapussi vasta, kun olet valmis tekemään testiin.

* Kuivausainepussia ei saa käyttää.

SISÄLTÖ

- 1 sineoidn aluminiumpipusin, joka sisältää:

1 Thyroid TSH Test -kassetti

- 1 tippapullo, joka sisältää 1 ml

Thyroid TSH Test liuotinta

valkoinen korkki

sininen korkki

TSH-HORMONI JA KIIPRAUHANEN

Kiipirauhassairaudet ovat yksiä yleisimmistä sairauksista maailmassa, erityisesti naisilla, ja kasava määrä väestöstä kärsii kiipirauhasesta (hypotyreoosista). Hypotyreoosin oireisiin kuuluu väsymyksen ja uneliaisuuden tunne, painonnousu, kuiva iho ja hauraat hiukset, astoiden unohdettu ja toisinaan masennus, paleleminen ja jatkuva ummetus sekä naisilla kuukautisten epäsäännöllisyys.

Thyrotropiini (TSH), jota erittää aivolisäkkeessä, säätelee ja ohjaa kiipirauhaseen aktiivisuutta. Siksi kohonneet TSH-arvot viittaavat kiipirauhaseen vajaatoimintaan, ja tämä on se periaate, jota kiipirauhaseesti käytetään kiipirauhaseen vajaatoiminnan havaitsemiseksi.

THYROID-TSH -TESTI on nopea immunologinen testi kohonneiden TSH-tasojen havaitsemiseksi ja täten hypotyreoosin seuloimiseksi sormenpäästä otettavasta verinäytteestä.

SYMBOLER / SYMBOLER / SYMBOLIT

IVD Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
Medicinteknisk produkt avsedd för in vitro-diagnostik
In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääknällinen laite

i Se brugsanvisningen
Läs bruksanvisningen
Katso käyttöohjetta

STERILE R Steriliseret med stråling
Steriliserad med bestrålning
Steriloitu säteilyttämällä

U Udløbsdato (sidste dag i måneden)
Används före (sista dagen i månaden)
Käytettävä viimeistään (kuukauden viimeinen päivä)

CONT Indhold
Innehåll
Sisältö

REF Bestillingsnummer
Listnummer
Luettelonumero

LOT Batchkode
Satsnummer
Eräkoodi

TC Temperaturbegrænsning
Temperaturbegrænsning
Lämpötilarajat

2 Må ikke genbruges
Får inte återvändas
Kertakäyttöinen

CE CE-mærkning
CE-märkning
CE-merkintä

CE Fabrikant
Tillverkare
Valmistaja

Helbredet i dine hænder Hälsan i dine händer Terveys käsissä

REF 100021DS

PRIMA LAB SA
Via Antonio Monti 7
6828 Balerna - SWITZERLAND

primahometest.com

100021_Ilu_29_1.0 - 05/2017

Registered trademarks.

10) Kaikki osat on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti, kysy neuvoa apteekista.

on taipumusta verenvuotoihin (esim. verenpuototauti eli hemofilia).

8) Tämä testi on tarkoitettu ainoastaan in vitro-diagnostiseen itzesuorittettavaan testaukseen.

7) Vain ulkoiseen käyttöön. EI SAA NIELLÄ.

6) Älä käytä kasettia ja lansetta uudelleen.

5) Säilytä +4 - +30 °C. Ei saa jäättyä.

4) Noudata tarkasti ilmoitettua aikaa sekä veren ja liuotinaisen määriä.

käyttöopäivämäärän jälkeen.







3) Älä käytä myyntipäällysmerkinnöissä ja suojapussissa mainitun viimeisen

2) Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Jos ohjeita on noudatettu huolellisesti.

1) Lue ohjeet huolellisesti ennen testiin suorittamista. Testi on tulkittavissa vain,

VAROTOIMET

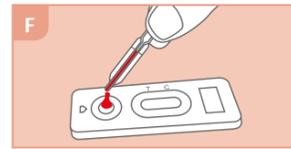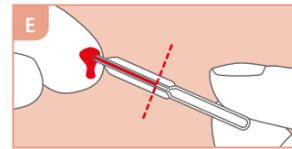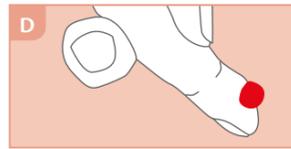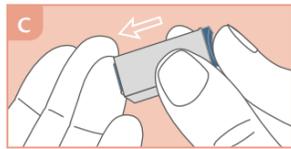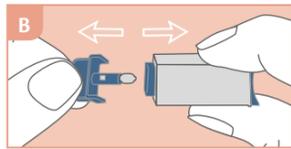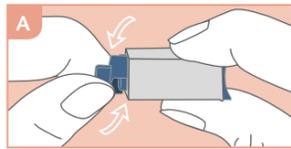

FREMGANGSMÅDE

- 1) Vask dine hænder med sæbe og skyl dem i rent varmt vand.
- 2) Riv den beskyttende pose itu (ved hakket) og tag udelukkende kassetten og pipetten ud. Antifugtposen kasseres.
- 3) Hold lancetten og roter forsigtigt den beskyttende hætte 360° uden at trække i den. - **FIG. A**
- 4) Udtræk og kassér den løsgjorte hætte. - **FIG. B**
- 5) Tryk lancetten på den side hvor hæften blev udtrukket, mod fingerspidsen (det anbefales at bruge siden af ringfingeren). - **FIG. C** spidsen trækker sig automatisk og sikkert tilbage.
- 6) Hold hånden ned, masser enden som blev prikket for at få en bloddråbe. - **FIG. D**
- 7) Dyp pipetten i blodet uden at trykke på den. Lad blodet løbe ind i pipetten, til det når den markerede linje. - **FIG. E** Hvis blodet ikke når helt op til linjen, massér da din finger igen, for at opnå mere blod. Undgå så vidt som muligt luftbobler.
- 8) Påfør det opsamlede blod med pipetten i prøvebeholderen på testkassetten, ved at trykke på pipettetoppen. - **FIG. F**
- 9) Vent indtil alt blodet fra pipetten er overført til prøvebeholderen. Skru den blå hætte af dråbeflasken (sørg for at den hvide hætte er skruet helt fast) og tilføj **5 dråber** af opløsningen til kassetens prøvebeholder. - **FIG. G**
- 10) Aflæs resultatet efter **10 minutter**.

AFLÆSNING AF RESULTAT


AFLÆS RESULTATET EFTER 10 MINUTTER.
AFLÆS IKKE RESULTATET EFTER 15 MINUTTER.

Intensiteten på stregens farve er ikke vigtig for tolkningen af testresultatet.



POSITIVT RESULTAT

Der fremkommer to farvede streger i displayet under markørerne T (Test) og C (Control). Intensiteten på T-stregen kan være større end intensiteten på C-stregen. Dette betyder at TSH-niveauet er højere end normen, og at du bør konsultere en læge.

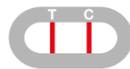


NEGATIVT RESULTAT

Der fremkommer kun en farvet streg under markøren C (Control). Dette resultat betyder, at TSH-niveauet er normalt.



UGYLDIGT RESULTAT

Der fremkommer ingen streg, eller der fremkommer en farvet streg under markøren T (Test), uden at der er nogen streg under markøren C (Control). I dette tilfælde er det ikke muligt at aflæse prøven, som skal anses for værende ugyldig. Det anbefales at gentage prøven med en ny **THYROID-TSH TEST** og en ny blodprøve.

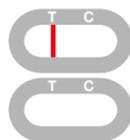

FAQ - SPØRGSMÅL OG SVAR

HVORDAN VIRKER SKJOLDBRUSKIRTTEL-TSH PRØVEN?
Det skjoldbruskirtelstimulerende hormon (TSH) aktiverer skjoldbruskirtlen. Derfor indikerer et TSH-niveau op over 5 µU/mL, i tilfælde af et positivt resultat, højst sandsynligt en underaktiv skjoldbruskirtel (hypothyroidisme).

HVORNÅR BØR TESTEN BRUGES?

I tilfælde af symptomer på hypothyroidisme, såsom træthed, depression, at fryse, vægtøgning, tør hud, tørt hår, forstoppelse eller uregelmæssigheder i kvinders cyklus, anbefales det, at der udføres en **THYROID-TSH TEST** screeningtest. **THYROID-TSH TEST** kan bruges når som helst på dagen. Men den kan og bør ikke udføres, hvis man er under medicinsk skjoldbruskhormonbehandling.

KAN RESULTATET VÆRE UKORREKT?

Resultatet er nøjagtigt, så længe vejledningen følges nøje. Ikke desto mindre kan resultatet være ukorrekt, hvis **THYROID-TSH TEST** bliver våd før udførelsen af prøven, eller hvis mængden af blod, der tilføres prøvebrønden, er utilstrækkelig, eller hvis antallet af dråber til fortynding er mindre end 4 eller mere end 5. Plastikpipetten, der medfølger i pakken, sørger for, at du kan sikre, at den opsamlede blodmængde er korrekt.

HVORDAN AFLÆSER MAN PRØVEN, HVIS FARVEN OG INTENSITETEN PÅ STREGERNE ER FORSKELLIG?

Farven og intensiteten på stregerne har ingen betydning for aflæsningen af resultatet. Stregerne skal bare være homogene og tydeligt synlige. Prøven bør anses for positiv, uanset hvad farveintensiteten på prøven er.

HVAD ER STREGEN, DER FREMKOMMER UNDER MARKØR-

REN C, BEREGNET TIL?

Når denne streg fremkommer, betyder det bare, at udførelsen af prøven er vellykket.

HVIS JEG AFLÆSER RESULTATET EFTER 15 MINUTTER, ER RESULTATET SÅ PÅLIDELIGT?

Nej. Resultatet bør aflæses senest 10 minutter efter tilsætning af fortynderen. Resultatet er pålideligt i op til 15 minutter.

HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS PRØVEN ER POSITIV?

Hvis resultatet er positivt, betyder det, TSH-niveauet i blodet er højere end normen (5 µU/mL), og at du bør konsultere en læge for at fremvise prøveresultatet. Derefter vil lægen beslutte, om der bør udføres yderligere prøver.

HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS PRØVEN ER NEGATIV?

Hvis resultatet er negativt, betyder det, TSH-niveauet er under 5 µU/mL, og er inden for normen. Men hvis symptomerne fortsætter, anbefales det at konsultere en læge.

HVOR NØJAGTIG ER THYROID-TSH TEST?

THYROID-TSH TEST er meget nøjagtig og er blevet anvendt i over 10 år af professionelle (sygehuse, laboratorier...) på området. Evalueringsrapporter viser en overordnet overensstemmelse på 98% i forhold til referencemetoder.

FÖRFARANDE

- 1) Tvätta händerna med tvål och skölj med rent varmt vatten.
- 2) Riv upp skyddspåsen (i skåran) och ta endast ut kassetten och pipetten. Kassera den lilla påsen med torkmedel.
- 3) Håll i lansetten och rotera skyddslocket försiktigt i 360° utan att samtidigt dra i det. - **FIG. A**
- 4) Dra ut och kassera det lösgjorda locket. - **FIG. B**
- 5) Tryck lansetten, med den sida som locket satt på, mot fingerspetsen (lämpligen mot ringfingerspetsen). - **FIG. C** lansettspetsen dras på ett säkert sätt automatiskt tillbaka efter användandet.
- 6) För att få ut en bloddroppe, håll handen nedåt och massera mot stället som blev stucket. - **FIG. D**
- 7) Utan att trycka på pipett-knoppen, placera pipetten mot bloddroppen, med hjälp av kapillärkraften kommer blodet att ledas in i pipetten, och upp till strecket på pipetten. - **FIG. E** Du kan fortsätta massera fingret för att få ut mer blod om det inte når upp till strecket. Undvik luftbubblor så långt det går.
- 8) Placera blodet som har samlats upp med pipetten i kassetens provbehållare genom att trycka på pipettknoppen. - **FIG. F**
- 9) Vänta tills blodet har överförts helt och hållet från pipetten till provbehållaren. Skruva av den blå kapsylen från droppflaskan (lämna den vita kapsylen ordentligt åtskruvad) och tillsätt **5 droppar** av förtunningsmedlet i kassetens provbehållare. - **FIG. G**
- 10) Läs av resultatet efter **10 minuter**.

TOLKNING AV RESULTATET


LÄS AV RESULTATET EFTER 10 MINUTER.
LÄS INTE AV RESULTATET EFTER 15 MINUTER.

Intensiteten på streckets färg har ingen betydelse för tolkningen av testresultatet.



POSITIVT RESULTAT

Två färgade linjer visas i fönstret under märkena T (Test) och C "Control" (Kontroll). Den intensiteten för T linjen kan vara klarare än intensiteten för linjen C. Detta resultat innebär att TSH nivån är högre än normen och att du bör konsultera en läkare.

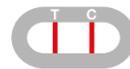


NEGATIVT RESULTAT

Endast en färgad linje visas under C märke "Control" (Kontroll). Detta resultat innebär att TSH nivån är normal.



EJ GILTIGA RESULTAT

Ingen linje framträder eller en färgad linje framträder under märket T (Test) utan streck under märket C "Control" (Kontroll). I detta fall är det inte möjligt att tolka testet, vilket måste betraktas som ogiltigt. Det rekommenderas att upprepa testet med ett nytt **THYROID-TSH TEST** och ett nytt blodprov.

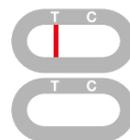

FAQ - FRÅGOR & SVAR

HUR FUNGERAR THYROID-TSH TESTET?

Den tyroïdstimulerande hormonen (TSH) aktiverar sköldkörteln. Därför indikerar en TSH nivå över 5 µU/ml i händelse av ett positivt resultat en sannolik aktiv sköldkörtel (hypotyreoos).

NÅR SKA TESTET ANVÄNDAS?

Vid hypotyreoos symtom såsom trötthet, depression eller regelbunden frusenhet, viktökning, torr hud, sprött hår, bestående förstoppning eller störningar i menstruationscykeln hos kvinnor; det är rekommenderat att utföra ett **THYROID-TSH TEST** screeningtest. **THYROID-TSH TEST** kan användas när som helst på dygnet. Det kan inte, och bör inte, utföras vid medicinsk behandling av hormonell sköldkörtel.

KAN RESULTATEN VARA INKORREKTA?

Resultatet är korrekt så länge som instruktionerna respekteras noggrant. Men resultatet kan bli felaktigt om **THYRON-TSH TEST** blir vått före utförande av testet eller om mængden blod som dispenseras i provbrunnen inte är tillräckligt, eller om antalet utspädningsdroppar är mindre än 4 eller fler än 5. Plastikpipetten i förpackningen säkerställer att den uppsamlade blodvolymen är korrekt.

HUR SKA MAN TOLKA TESTET OM FÄRGEN OCH INTENSITETEN AV LINJERNÄR ÄR OLIKA?

Färgen och intensiteten på linjerna har ingen betydelse för resultatets tolkning. Linjerna ska endast vara homogena och väl synliga. Testet bör betraktas som positiv oavsett vad färgintensiteten på testlinjen är.

VAD ÄR LINJEN SOM VISAS UNDER C (KONTROLL) MÄRKET TILL FÖR?

Den enda innebörd som denna linje visar är att testet utfördes bra.

OM JAG LÄSER RESULTATET EFTER 15 MINUTER, KOMMER RESULTATET ATT VARA TILLFÖRLITLIGT?

Nej. Resultatet ska avläsas inom 10 minuter efter att tillägg av utspädningsmedel. Resultatet är tillförlitligt upp till 15 minuter.

VAD MÅSTE JAG GÖRA OM RESULTATET ÄR POSITIVT?

Om resultatet är positivt, betyder det att TSH i blodet är högre än normen (5 µU/ml) och att du bör konsultera en läkare för att visa testresultatet. Då kommer läkaren besluta om ytterligare analyser ska utföras.

VAD MÅSTE JAG GÖRA OM RESULTATET ÄR NEGATIVT?

Om resultatet är negativt, innebär det att TSH-nivån är under 5 µU/ml och är inom normen. Men om symptomen kvarstår, är det rekommenderat att konsultera en läkare.

VAD ÄR SÄKERHETEN AV THYROID-TSH TESTET?

THYROID-TSH TEST är mycket exakt och har använts i mer än 10 år av professionella (sjukhus, laboratorier, ...) inom området. Utvärderingsrapporter visar en övergripande överenskomst på 98% med referensmetoder.

MENETTELY

- 1) Pese kädet saippualla ja huuhtele puhtaalla lämpimällä vedellä.
- 2) Repäise suojapussi (lovesta) auki ja ota ulos vain kasetti ja pipetti. Heitä pieni kuivausainepussi ros kiin.
- 3) Pidä lansetista kiinni ja käännä suojakorkkia varovasti 360° vetämättä sitä. - **KUVA A**
- 4) Irrota korkki ja heitä se ros kiin. - **KUVA B**
- 5) Paina lansetin se pää, josta korkki irrotettiin, sormenpäästä vasten (suositellaan nimetöntä). - **KUVA C**. Kärki vetäytyy automaattisesti ja turvallisesti käytön jälkeen.
- 6) Pidä käsi alhaalla ja hiero pistettyä sormenpäästä, jotta saat aikaan veripisaran. - **KUVA D**
- 7) Kosketa verta pipetillä puristamatta paljetta. Veri nousee pipetin putkea pitkin ylös merkkiviivaan asti. - **KUVA E** Voit hieroa sormenpäästä saadaksesi lisää verta, jos se ei yllä merkkiviivaan asti. Vältä ilmakuplia niin pitkälti kuin mahdollista.
- 8) Siirrä pipetillä kerätty veri kasetin näytelokeroon painamalla pipetin paljetta. - **KUVA F**
- 9) Odota, kunnes veri on levinnyt kaikkialle lokeroon. Avaa muovisen tippapullon sininen korkki (jätä valkoinen korkki paikalleen) ja lisää **5 tippaa** liuotinta kasetin näytelokeroon. - **KUVA G**
- 10) Lue tulos **10 minuutin** kuluttua.

TULOKSEN TULKINTA


LUE TULOS 10 MINUUTIN KULUTTUA.
ÄLÄ LUE TULOSTA 15 MINUUTIN KULUTTUA.

Viivan värin voimakkuudella ei ole merkitystä testitulosta tulkittaessa.




POSITIIVINEN TULOS

Ikkunaan ilmestyy kaksi värillistä viivaa merkien T (Testi) ja C (Varmistus) kohdalle. T-viivan voimakkuus saattaa olla selkeämpi kuin C-viivan voimakkuus. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavanomaista korkeampi ja että sinun tulisi ottaa yhteyttä lääkäriin.

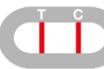


NEGATIIVINEN TULOS

Vain yksi värillinen viiva ilmestyy C-merkin (Varmistus) kohdalle. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH:n taso on normaali.

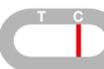

EPÄPÄTEVÄ TULOS

Viivoja ei ilmesty tai värillinen viiva ilmestyy T-merkin (Testi) kohdalle ilman, että C-merkin (Varmistus) kohdalle ilmestyy viivaa. Tässä tapauksessa testin tulkitseminen ei ole mahdollista, ja testi on pidettävä epäpätevänä. On suositeltavaa toistaa testi uudella **THYROID-TSH TESTILLÄ** ja uudella verinäytteellä.

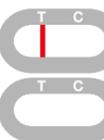

USEIN KYSYTTYÄ – KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

KUINKA THYROID-TSH TESTI TOIMII?

Tyreotropiini (TSH) aktivoi kilpirauhasta. Siten TSH-arvo, joka on yli 5 µU/ml positiivisessa tuloksessa, viittaa todennäköisesti kilpirauhasen vajaatoimintaan (hypotyreoosiin).

MILLOIN TESTIÄ TULISI KÄYTTÄÄ?

Jos esiintyy hypotyreoosin oireita, kuten väsymyksen, masentuneisuuden tai palelun tunnetta säännöllisesti, painonnousua, ihon kuivuutta, hiusten haurautta, jatkuvaa ummetusta tai naisilla kuukautiskierron epäsäännöllisyyttä, on suositeltavaa suorittaa **THYROID-TSH -TESTI**. **THYROID-TSH TESTIN** voi suorittaa mihin tahansa aikaan päivästä. Sitä ei kuitenkaan voi eikä pidä suorittaa, jos käytössä on hormonaalinen hoito kilpirauhasvaivoihin.

VOIKO TULOS OLLA VÄÄRÄ?

Tulokset ovat tarkkoja, kunhan ohjeita on noudatettu huolellisesti. Tulokset saattavat kuitenkin olla vääriä, jos **THYROID-TSH -TESTI** on kastunut ennen testin suorittamista tai jos näytekohtaan annostellun veren määrä ei ole ollut riittävä, tai jos laimennusainetippojen lukumäärä on ollut vähemmän kuin 4 tai enemmän kuin 5. Pakkauksen mukana tulevan muovipipetin avulla voidaan varmistaa, että kerätty verimäärä on oikea.

KUINKA TESTI PITÄISI TULKITA, JOS VIIVOJEN VÄRI JA VOIMAKKUUS OVAT ERILAISET?

Viivojen värillä ja voimakkuudella ei ole merkitystä tulosten tulkitsemisessä. Viivojen tulisi ainoastaan olla samanlaisia ja selkeästi näkyvillä. Testiä tulee pitää negatiivisena huolimatta testiviivan värin voimakkuudesta.

MITÄ VARTEN C-MERKIN (VARMISTUS) ALLE ILMESTYY VIIVA?

Kun tämä viiva näkyy, se tarkoittaa vain että testi toimii kuten pitääkin.

ONKO TULOS LUOTETTAVA, JOS LUEN TULOKSEN 15 MINUUTIN JÄLKEEN?

Ei. Tulos tulisi lukea 10 minuutin kuluttua laimennusaineen lisäämisestä. Tulos on luotettava 15 minuutin ajan.

MITÄ MINUN TULEE TEHDÄ, JOS TULOS ON POSITIIVINEN?

Jos tulos on positiivinen, se tarkoittaa, että TSH:n taso veressä on tavallista korkeampi (5 µU/ml) ja sinun tulisi ottaa yhteyttä lääkäriin ja näyttää testitulosta. Lääkäri päättää, tuleeko lisätutkimuksia tehdä.

MITÄ MINUN TULEE TEHDÄ, JOS TULOS ON NEGATIIVINEN?

Jos tulos on negatiivinen, se tarkoittaa, että TSH:n taso on alle 5 µU/ml ja on normaalin rajoissa. Jos oireet kuitenkin jatkuvat, on suositeltavaa ottaa yhteyttä lääkäriin.

KUINKA TARKKA THYROID-TSH -TESTI ON?

THYROID-TSH -TESTI on hyvin tarkka, ja sitä on käytetty yli 10 vuoden ajan alan ammattilaisten toimesta (sairaaloissa, laboratorioissa...). Arviointiraportit kertovat vähintään 95% yleisestä vastavuorudesta vertailumenetelmiin.