

FORHOLDSREGLER

1) Læs brugsanvisningen grundigt igennem før testen udføres. Testen kan udelukkende tolkes, hvis instruktionerne er nøjagtigt overholdt.

2) Opbevarer udløgstestet for børn.

3) Tag ikke testen hvis datoen er overskredet, eller hvis posen er beskadiget.

4) Følg nøje den indikerede tid, samt blod- og opløsningsmængder.

5) Opbevar mellem +4 °C og +30 °C. Må ikke fryses.

6) Kasseres efter brug. Testen kan kun anvendes én gang.

7) Udelukkende til udvortes brug. MÅ IKKE INDTAGES.

8) Denne test er udelukkende til brug for in vitro-diagnostik selvtest.

9) Anbefales ikke til brug af personer, der tager medicin som fortynder blodet

(antikoagulerende) eller af personer med sygdomme som f.eks. hæmofili.

10) Efter anvendelse kassér alle dele i overensstemmelse med lokale regler, søg råd hos

din apoteker.

FÖRSIKTIGHETSÅTÄRDER

1) Läs nogra igenom instruktionerna innan du utför testet. Testet kan bara tolkas om alla instruktioner har följts noggrant.

2) Förvaras oäkommigt för barn.

3) Skall ej användas efter det att utgångsdatumet på etiketten eller på den skyddande påsen har passerats, eller om påsen är skadad.

4) Följ strikt den angivna tiden, samt angivna mängder för blod och spådningsmedel.

5) Förvaras mellan +4 °C och 30 °C. Får ej frysas.

6) Återanvänd inte kassetten eller lansetterna.

7) Endast för utvärtes bruk FÅR EJ FÖRTÄRAS.

8) Självtestet är endast avsett för in vitro-diagnostisk användning.

9) Rekommenderas att ej användas av personer som tar mediciner som tunnar ut blodet (antikoagulantia) eller av personer som lider av hemofili.

10) Efter användandet ska alla komponenter kasseras i överensstämmelse med lokalt

gällande regler, rådfråga på ditt apotek.

INNHOLD


ÆSKEN INDEHOLDER ALT, DER ER NØDVENDIGT FOR AT UDFØRE 1 PRØVE FOR C-REAKTIVT PROTEIN:

- 1 forseglet aluminiumpose indeholdende:

1 plastpipette

1 antifugpose

- 2 sterile lancetter til blodprøve

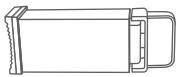

- 1 desinficerende serviet



* Ikke inkluderet materialer: Absorberende bomuld.

* Luk først den beskyttende pose op, når du er klar til at bruge testen.

* Antifugtposen skal ikke bruges.

INNEHÅLL

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER ALLA NÖDVÄNDIGHETER FÖR ATT UTFÖRA 1

C-REAKTIVT PROTEINTEST:

- 1 förseglad aluminiumpåse innehållande:

1 plaspipett

1 påse torkmedel

- 2 sterila lancetter för blodprovstagning



- 1 desinfektionsservett



* Ej inkluderat nödvändigt material: absorberande bomull.

* Öppna inte den skyddande påsen förrän du är klar att använda testet.

* Påsen med torkmedlet bör inte användas.

SISÄTTÖ

PAKKAUKSEEN SISÄLTYY KAIKKI MITÄ TARVITAAN C-REAKTIIVISEN PROTEIININ

TESTIN SUORITTAMISEEN

- 1 muovisen pipetin

1 kuivausainepussin

- 2 steriiliä lanseita verinäytteen ottoon



- 1 desinfiointiainetyyny



* Tarvittava materiaali, joka ei sisälly pakkaukseen: vanu.

* Avaa suojapussi vasta, kun olet valmis tekemään testin.

* Kuivausainepussia ei saa käyttää.

C-REAKTIIV PROTEIN

RESULTAT/TULOS

Cut-off: <8 / 8 - 40 / 40 - 100 / >100 mg/L

Dato / Datum / Päiväys

C-REAKTIIVT PROTEIN TEST
C-REAKTIIVT PROTEINTEST
C-REAKTIIVISEN PROTEIININ TESTI

Hjemme-test til påvisning af C-reaktive proteinniveauer i blodet
Självtest för detektion av C-reaktivt protein i blodet
Itse tehtävä testi C-reaktiivisen proteiinin tason selvittämiseksi verestä

BRUGSANVISNING
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJEET

C-REAKTIIVT PROTEIN

Helbredet i dine hænder
Hälsan i dine händer
Terveiden käsissä

REF 100034DS

PRIMA LAB SA

Via Antonio Monti 7

6828 Balerna - SWITZERLAND

primahometest.com

100034_Itu_29_1.0 - 05/2017

Registered trademarks.

C-Reaktivt Protein (CRP) är en icke specifik markör som huvudsakligen produceras i levern och används för att diagnostisera bakterierella infektionssjukdomar och inflammatoriska sjukdomar. CRP är en mycket känslig och snabbt uppträdande indikator som därför skulle kunna vara till hjälp för att besluta om en behandling med antibiotika. Beroende på CRP-koncentrationen, kommer olika linjer visas som tillåter semi-kvantitativ tolkning av testresultatet.

Hos friska patienter är CRP koncentration lägre än 8 mg/L, medan koncentrationsnivån kan vara högre än 100 mg/L vid svår infektion eller under inflammatoriska processen. Mellan nivåer, inom 8 och 100 mg/L, är samtidigt med mer eller mindre milt virus- eller bakterieinfektioner som lätt kan övervinas genom lämplig behandling som bestäms av din läkare.

C-reaktiivinen proteiini (CRP) on epäspesifinen markkeri, jota tuottaa lähinnä maksa ja jota käytetään bakteerien aiheuttamien tartuntatautiin ja tulehdussairauksien diagnosoimisiin. CRP on hyvin herkkä ja nopeasti ilmenevä indikaattori, joka voi siten olla hyödyksi antibiootihoidosta päätettään bakteerien aiheuttamien tartuntatautiin ja tulehdussairauksien diagnosoimisiin. CRP on hyvin herkkä ja nopeasti ilmenevä indikaattori, joka voi siten olla hyödyksi antibiootihoidosta päätett-

C-REAKTIIVINEN PROTEIINI

Desinfektionsserviet: 70 % alkohol
Desinfektionsservett: 70% alkohol
Desinfiointiainetynny: 70 % alkoholia

Vitrex Medical A/S

Vasekaer 6-8

DK-2730 Herlev Denmark

Lancet / Lansett / Lansetti

STERILE

10

Vitrex Medical A/S

Vasekaer 6-8

DK-2730 Herlev Denmark

SYMBOLER / SYMBOLER / SYMBOLIT

IVD

Medicinsk udstyn til in vitro-diagnostik
Medicinteknisk produkt avsedd för in vitro-diagnostik
In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinällinen laite

i

Se brugsanvisningen
Läs bruksanvisningen
Katso käyttöohjetta

STERILE

R

Steriliseret med stråling
Steriliserad med bestrålning
Steriloitu säteilyttämällä

Udløbsdato (sidste dag i måneden)
Används före (sista dagen i månaden)
Käytettävä viimeistään (kuukauden viimeinen päivä)

CONT

Innehåll
Innehåll
Sisältö

REF

Bestillingsnummer
Listnummer
Luettelonumero

LOT

Batchkode
Satsnummer
Eräkoodi

2

Må ikke genbruges
För inte återanvändas
Kertakäyttöinen

CE

CE-märkning
CE-märkning
CE-merkintä

Fabrikant
Tillverkare
Valmistaja









Temperaturbegränsning
Temperaturbegränsning
Lämpötilarajat

100034

PRIMA LAB SA

Via Antonio Monti 7

6828 Balerna - SWITZERLAND

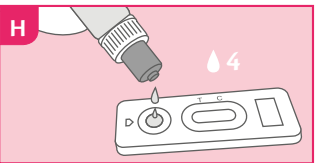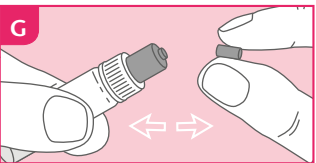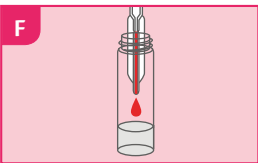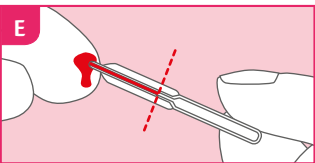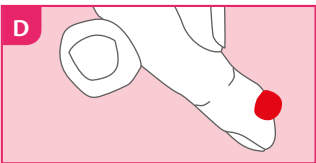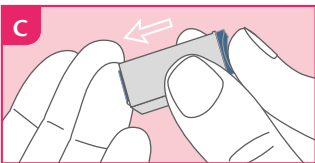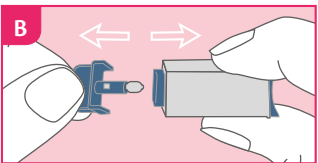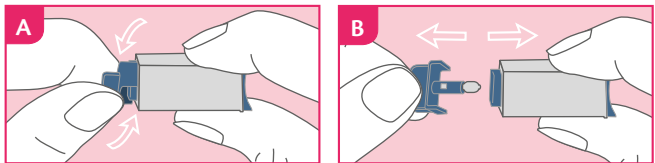

FREMGANGSMÅDE

- 1) Vask dine hænder med sæbe og skyl dem i rent varmt vand.
- 2) Riv den beskyttende pose itu (ved hakket) og tag udelukkende kassetten og pipetten ud. Antifugtposen kasseres.
- 3) Hold lancetten og roter forsigtigt den beskyttende hætte 360° uden at trække i den. - **FIG. A**
- 4) Udtræk og kassér den løsgjorte hætte. - **FIG. B**
- 5) Tryk lancetten på den side hvor hæften blev udtrukket, mod fingerspidsen (det anbefales at bruge siden af ringfingeren). - **FIG. C** spidsen trækker sig automatisk og sikkert tilbage.
- 6) Hold hånden ned, masser enden som blev prikket for at få en bloddråbe. - **FIG. D**
- 7) Dyp pipetten i blodet uden at trykke på den. Lad blodet løbe ind i pipetten, til det når den markerede linje. - **FIG. E** Hvis blodet ikke når helt op til linjen, massér da din finger igen, for at opnå mere blod. Undgå så vidt som muligt luftbobler.
- 8) Påfør det opsamlede blod med pipetten i prøvebeholderen på testkassetten, ved at trykke på pipettetoppen. - **FIG. F**
- 9) Placer blodet, der er blevet opsamlet med pipetten, i den åbnede flaske med dråbetæller ved at trykke på pipettesvibelen. Tryk på pipettesvibelen 2 eller 3 gange for at sikre, at hele blodprøven bliver tilsat prøvevæske. Derefter genplaceres skruelåget på dråbeflasken og prøven blandes grundigt. - **FIG. F**
- 10) **Knæk spidsen af dråbeflasken** med blodprøven - **FIG. G**, og tilsæt også 4 dråber af den fortyndede prøve i prøvebrønden - **FIG. H**
- 11) Af læs resultatet efter 5 minutter.

AFLÆSNING AF RESULTATET

AFLÆS RESULTATET EFTER 5 MINUTTER.
AFLÆS IKKE RESULTATET EFTER 10 MINUTTER.

Resultaterne skal tolkes på baggrund af intensiteten af farven på de 3 streger, der kan fremkomme i prøveenhedens display.



ET CRP-NIVEAU, DER ER UNDER 8 MG/L.

Der fremkommer kun to streger (ingen streg under markøren T (Test)). Dette resultat betyder, at der hverken er infektion eller inflammation.

ET CRP-NIVEAU PÅ MELLEM 8 OG 40 MG/L.

Der fremkommer tre farvede streger i displayet, men intensiteten på stregen under markøren T er mindre tydelig end de to andre streger. Dette resultat betyder, at der kan være en virusinfektion på vej. **Tal med din læge.**

ET CRP-NIVEAU PÅ MELLEM 40 OG 100 MG/L.


Der fremkommer tre farvede streger i displayet, og de tre stregers intensitet er mere eller mindre ens. Dette resultat betyder, at der er en viral eller bakteriel infektion på vej. **Du skal opsøge din læge.**

ET CRP-NIVEAU PÅ OVER 100 MG/L.

Der fremkommer tre farvede streger i displayet, men farveintensiteten på stregerne under markørerne T og C er stærkere end farveintensiteten på stregen i midten. I tilfælde af en meget høj CRP-koncentration vil stregen i midten også kunne forsvinde. Dette resultat betyder, at der er en alvorlig bakteriel infektion på vej. **Du skal opsøge din læge med det samme.**

UGYLDIGT RESULTAT.

Hvis der ikke opstår en streg under markøren C (Control), er det ikke muligt at aflæse prøven, og den skal anses for at være ugyldig, også selvom der er en synlig farvet streg under markøren T (Test), og/eller stregen i midten fremkommer. I tilfælde af dette anbefales det at gentage prøven med en ny C-REACTIVE PROTEIN TEST enhed.

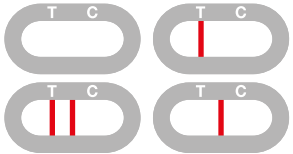

FAQ - SPØRGSMÅL OG SVAR

HVORDAN VIRKER PRØVEN FOR C-REAKTIVT PROTEIN?

Hvis der er CRP til stede i prøven, vil det interagere med anti-CRP antistofferne og CRPantigenet, der er tilsat prøven, hvilket får forskellige streger til at fremkomme, så der kan foretages en semikvantitativ måling af CRP-koncentrationen i blodprøven.

HVORNÅR KAN DENNE PRØVE UDFØRES?

C-REACTIVT PROTEIN TEST bør udføres i tilfælde af akutte infektionssymptomer som feberformelse, feber, hovedpine eller svaghed. Prøven kan udføres når som helst.

KAN RESULTATET VÆRE UKORREKT?

Resultaterne er nøjagtige, så længe instruktionerne følges nøje. Ikke desto mindre kan resultatet være ukorrekt, hvis C-REACTIVT PROTEIN TEST bliver våd før prøveudførelsen, eller hvis mængden af fortyndet blod, der tilsættes prøven, ikke er tilstrækkelig. Plastikpipetten, der følger med i æsken, sørger for, at man kan sikre, at den indsamlede blodmængde er korrekt og bliver korrekt fortyndet i fortynderflasken med dråbetæller.

HVORDAN AFLÆSER MAN PRØVEN, HVIS FARVEN OG INTENSITETEN PÅ STREGERNE ER FORSKELLIGE? Farveintensiteten på stregerne er vigtig for aflæsningen af prøveresultaterne. Så se venligst billederne og instruktionen under "Aflæsning af resultatet".

HVAD ER STREGEN, DER FREMKOMMER UNDER MARKØREN C (CONTROL), BEREGNET TIL?

Når denne streg fremkommer, betyder det bare, at prøven er vellykket.

HVIS JEG AFLÆSER RESULTATET EFTER 10 MINUTTER, VIL RESULTATET SÅ VÆRE PÅLIDELIGT?

Nej. Resultatet skal aflæses, inden der er gået 10 minutter. Resultatet er pålideligt i op til 10 minutter, men bør hellere aflæses 5 minutter efter blodprøven tilsættes.

HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS RESULTATET ER POSITIVT?

Hvis resultatet er positivt, og CRP-niveauet er højere end 8 mg/L, så følg venligst sektionen om aflæsning af resultatet, og giv din læge besked hurtigst muligt, da en akut antibiotikabehandling kan være nødvendig.

HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS RESULTATET ER NEGATIVT?

Hvis resultatet er negativt, og CRP-niveauet er på under 8 mg/L, betyder det, at der hverken er en bakteriel eller viral infektion på vej. Men hvis ikke symptomerne forsvinder, anbefales det, at du opsøger din læge.

HVOR NØJAGTIG ER C-REAKTIVT PROTEIN TEST?

C-REACTIVT PROTEIN TEST er nøjagtig og er blevet brugt i over 10 år af professionelle på området (sygehuse, laboratorier...). Evalueringsrapporter viser en nøjagtighed på mindst 98% med referencemetoden. Selvom denne test er pålidelig, kan der opstå falske positive eller falske negative resultater.

FÖRFARANDE

- 1) Vask dine hænder med sæbe og skyl dem i rent varmt vand.
- 2) Riv den beskyttende pose itu (ved hakket) og tag udelukkende kassetten og pipetten ud. Antifugtposen kasseres.
- 3) Hold lancetten og roter forsigtigt den beskyttende hætte 360° uden at trække i den. - **FIG. A**
- 4) Udtræk og kassér den løsgjorte hætte. - **FIG. B**
- 5) Tryk lancetten på den side hvor hæften blev udtrukket, mod fingerspidsen (det anbefales at bruge siden af ringfingeren). - **FIG. C** spidsen trækker sig automatisk og sikkert tilbage.
- 6) Hold hånden ned, masser enden som blev prikket for at få en bloddråbe. - **FIG. D**
- 7) Dyp pipetten i blodet uden at trykke på den. Lad blodet løbe ind i pipetten, til det når den markerede linje. - **FIG. E** Hvis blodet ikke når helt op til linjen, massér da din finger igen, for at opnå mere blod. Undgå så vidt som muligt luftbobler.
- 8) Påfør det opsamlede blod med pipetten i prøvebeholderen på testkassetten, ved at trykke på pipettetoppen. - **FIG. F**
- 9) Placera blodet som samlats upp med pipetten i den öppnade pipettampullen, genom att trycka på pipettens glödlampa. Tryck på lampen på pipetten 2 eller 3 gånger för att se till att hela blodprovet tillsätts i utspädningslösningen. Ersätt sedan skruvlocket på pipettampull och blanda väl. - **FIG. F**
- 10) **Bryt av spetsen av droppflaskan** som innehåller blodprovet - **FIG. G** och tillsätt 4 droppar av det utspädda provet i provenheten - **FIG. H**
- 11) Läs resultatet efter 5 minuter.

TOLKNING AV RESULTATET

LÄS AV RESULTATET EFTER 5 MINUTER.
LÄS INTE AV RESULTATET EFTER 10 MINUTER.

Resultaten måste tolkas beroende på intensiteten av färgen på 3 linjer som kan uppstå i enhetsfönstret.



CRP NIVÅN ÄR LÄGRE ÄN 8 MG/L.

Endast två linjer (ingen linje under märket T (Test)) visas. Detta resultat innebär ingen existens av varken infektion eller inflammation.

CRP NIVÅN I INTERVALLET 8 TILL 40 MG/L.

Tre färgade linjer visas i fönstret, men intensiteten för linjen i T-märkningen är svagare än intensiteten av de två andra linjerna. Detta resultat innebär att en viral infektion kan vara på väg. **Du bör konsultera din läkare**

CRP NIVÅN I INTERVALLET 40 TILL 100 MG/L


Tre färgade linjer visas i fönstret och intensiteten i 3 linjer är mer eller mindre lika. Detta resultat innebär att en viral eller bakteriell infektion är på väg. **Du måste kontakta din läkare.**

CRP NIVÅ ÖVER 100 MG/L.

Tre färgade linjer visas i fönstret, men färgintensiteten av de linjerna som är T och C märkta är starkare än färgintensiteten av mittlinjen. I fall av mycket hög CRP koncentration, kan den mellersta linjen till och med försvinna. Detta resultat innebär att en allvarlig bakteriell infektion är på väg. **Du måste kontakta din läkare snarast.**

IKKE GILTIGT RESULTAT.

Om ingen linje visas under märket C "Controll" (Kontroll), är det inte möjligt att tolka testet, som måste betraktas som ogiltigt även om en färgad linje syns under T (Test) märke och/eller mittlinjen visas. I detta fall är det lämpligt att upprepa testet med en ny C-REACTIVT PROTEINTEST enhet.

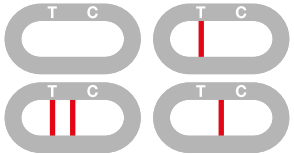

FAQ - FRÅGOR & SVAR

HUR FUNGERAR DET C-REACTIVA PROTEINTESTET?

Om närvarande i provet, kommer CRP interagera med anti CRP antikroppar såväl som med CRPantigenet placerat i testets olika producerade linjer som tillåter en semi-kvantitativ mätning av CRPkonzentrationen i blodprovet.

NÅR KAN TESTET UTFÖRAS?

C-REACTIVT PROTEIN testet bör utföras när det gäller akuta infektionssymtom såsom, feber, huvudvärk eller svagheter. Testet kan utföras när som helst.

KAN TESTET VARA INKORREKT?

Resultaten är korrekta så länge instruktionerna respekteras är noggrant. Ändå kan resultatet bli felaktigt om C-REAKTIVT PROTEINTEST blir våt före provutföring eller om mängden utspätt blod som dispenseras i provbrunnen inte är tillräckligt. Plastikpipetten i förpackningen gör att den uppsamlade blodvolymen är korrekt och korrekt utspädd i utspädningspipettampullen.

HUR KAN MAN TOLKA PROVET OM FÄRGINTENSITETEN AV LINJERNA ÄR OLIKA?

Färgintensiteten hos linjerna är viktiga för att tolka testresultatet. Vänligen se bilderna och anvisningarna i avsnittet "Resultat tolkning".

VAD ÄR LINJEN SOM VISAS UNDER C "CONTROL" (KONTROLL) MÄRKET TILL FÖR?

När denna linje visas, innebär det att testet fungerar bra. OM JAG LÄSER RESULTATET EFTER 10 MINUTER, KOM-

MER RESULTATET ATT VARA TILLFÖRLITLIGT?

Nej. Resultatet ska avläsas inom 10 minuter. Resultatet är tillförlitligt upp till 10 minuter, men bör bättre avläsas efter 5 minuter efter tillsats av provet.

VAD MÅSTE JAG GÖRA OM RESULTATET ÄR POSITIVT?

Om resultatet är positivt när CRP är högre än 8 mg/L, hänvisas till resultat tolkning och informera din läkare så snart som möjligt eftersom en antibiotikabehandling kan vara av stort behov.

VAD MÅSTE JAG GÖRA OM RESULTATET ÄR NEGATIVT?

Om resultatet är negativt när CRP är lägre än 8 mg/L, betyder det att varken bakterier eller någon virusinfektion är på väg. Men om symptomen kvarstår, är det rekommenderat att rådfråga din läkare.

VAD ÄR SÄKERHETEN AV ETT C-REACTIVT PROTEIN-TEST?

C-REACTIVT PROTEINTEST är korrekt och har använts för mer än 10 år av yrkesverksamma inom området (sjukhus, laboratorier ...). Utvärderingsrapporter visar att en övergripande överenskommelse om åtminstone 98% med referensmetod. Även om detta test är tillförlitligt, kan falskt positiva eller falskt negativa resultat erhållas.

MENETTELÝ

- 1) Pese kdet saippualla ja huuhtele puhtaalla lmpimll vedell.
- 2) Repise suojapussi (lovesta) auki ja ota ulos vain kasetti ja pipetti. Heit pieni kuivausainepussi ros kiin.
- 3) Pid lansetista kiinni ja knn suojakorkkia varovasti 360° vetmtt sit. - **KUVA A**
- 4) Irrota korkki ja heit se ros kiin. - **KUVA B**
- 5) Paina lansetin se p, josta korkki irrotettiin, sormenpt vasten (suositellaan nimetnt). - **KUVA C.** Krki vetytyy automaattisesti ja turvallisesti kytn jlkeen.
- 6) Pid ksi alhaalla ja hiero pistetty sormenpt, jotta saat aikaan veripisaran. - **KUVA D**
- 7) Kosketa verta pipetill puristamatta paljetta. Veri nousee pipetin putkea pitkin yls merkkiiviivaan asti. - **KUVA E** Voit hieroa sormenpt saadaksesi lis verta, jos se ei yll merkkiiviivaan asti. Vlt ilmakuplia niin pitklti kuin mahdollista.
- 8) Siirr pipetill keretty veri kasetin nytelokeroon painamalla pipetin paljetta. - **KUVA F**
- 9) Laita pipetill keretty veri avoimeen pipettipulloon painamalla pipetin paljetta. Paina pipetin paljetta 2 tai 3 kertaa varmistaaksesi, ett koko verinyte listn laimennusaineeseen. Sulje sitten pipettipullon kierrekorkki ja sekoita hyvin. - **KUVA F**
- 10) **Katkaise krki pipettipullostaa**, jossa verinyte on - **KUVA G** ja lis 4 tippaa laimennettua nytett laitteeseen - **KUVA H**
- 11) Lue tulos 5 minuutin kuluttua.

TULOKSEN TULKINTA

LUE TULOS 5 MINUUTIN KULUTTUA.
L LUE TULOSTA 10 MINUUTIN KULUTTUA.

Tulokset tulee tulkita laitteen ikkunaan mahdollisesti ilmaantuvan ensimmisen kolmen viivan voimakkuuden perusteella.



CRP-TASO ON MATALAMPI KUIN 8 MG/L.

Vain kaksi viivaa (ei viivaa T-merkin (Testi) alapuolella) ilmestyy. Tm tulos tarkoittaa, ett infektiota tai tulehdusta ei ole.

2. CRP-TASO ON VLILL 8–40 MG/L.

Kolme vrillist viivaa ilmestyy ikkunaan, mutta T-merkin alapuolisen viivan voimakkuus on heikompi kuin kahden muun viivan voimakkuus. Tm tulos tarkoittaa mahdollista virusinfektiota. **Sinun tulisi ottaa yhteytt lkriin.**

3. CRP-TASO ON VLILL 40–100 MG/L.


Kolme vrillist viivaa ilmestyy ikkunaan ja niden kolmen viivan voimakkuus on suurin piirtein samanlainen. Tm tulos tarkoittaa virus- tai bakteeri-infektiota. **Sinun tulee ottaa yhteytt lkriin.**

4. CRP-TASO ON YLI 100 MG/L.

Ikkunaan ilmestyy kolme viivaa, mutta T- ja C-merkkien alla olevien viivojen vrin voimakkuus on suurempi kuin keskimisen viivan vrin voimakkuus. **Erittin korkeissa CRP-konsentraatioissa keskiminen viiva saattaa jopa kadota.** Tm tulos tarkoittaa vakavaa bakteeri-infektiota. **Sinun tulee ottaa nopeasti yhteytt lkriin.**

EPPTEV TULOS.

Jos C-merkin (Varmistus) alle ei ilmestyy viivaa, testin tulkitseminen ei ole mahdollista ja testi on pidettv epptevn, vaikka T-merkin (Testi) alla nkyisi vrillinen viiva ja/tai keskiminen viiva olisi nkyviss. Tss tapauksessa on suositeltavaa toistaa testi uudella C-REAKTIIVISEN PROTEIINIIN TESTI

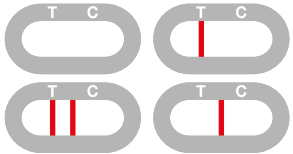

USEIN KYSYTTY – KYSYMYKSI JA VASTAUKSIA

KUINKA C-REAKTIIVISEN PROTEIINIIN TESTI TOIMII?

Jos nytteess on CRP:t, se reagoi testiin laitetuihin anti-CRP-asteineisiin sek CRPantigeeniin ja tuottaa erilaisia viivoja, jotka mahdollistavat verinytteen CRP-konsentraati-on semikvantitatiivisen mittaamisen.

MILLOIN TM TESTI VOIDAAN SUORITTAA?

C-REAKTIIVISEN PROTEIINIIN testi tulisi suorittaa, jos ilmenee akuutteja infekti-oireita, kuten kuumeisuutta, kuumetta, pnsrky tai heikotusta. Testin voi suorittaa milloin tahansa.

VOIKO TULOS OLLA VIRHEELLINEN?

Tulokset ovat paikkansapitv, jos ohjeita on noudatettu tarkasti. Siit huolimatta tuloksen saattaa olla virheellinen, jos C-REAKTIIVISEN PROTEIINIIN testiin kastuu ennen testin tekoa tai jos nytekohtaan annostellun laimennetun veren mr ei ole ollut riittv. Pakkauksen mukana tulevan muovipipetin avulla voidaan varmistaa, ett keretty verimr on oikea ja laimennettu laimennusainepipettipulloon oikealla tavalla.

KUINKA TESTI PITISI TULKITA, JOS VIIVOJEN VRI JA VOIMAKKUUS OVAT ERILAISET?

Viivojen vrin voimakkuus on trke testin tuloksen tulkitsemisessa. Katso kuvak ja ohjeet "Tuloksen tulkinta"-kappaleesta.

MIT VARTEN C-MERKIN (VARMISTUS) ALLE ILMESTYY VIIVA?

Kun tm viiva nkyy, se tarkoittaa vain ett testi toimii kuten pitkin.

ONKO TESTI LUOTETTAVA, JOS LUEN TULOKSEN 10 MINUUTIN JLKEEN?

Ei. Tulos pitisi lukea 10 minuutin kuluessa. Tulos on luotettava 10 minuuttia saakka, mutta se olisi parasta lukea 5 minuuttia nytteen lisamisen jlkeen.

MIT MINUN TULEE TEHD, JOS NYTE ON POSITIIVINEN?

Jos nyte on positiivinen kun CRP:t on yli 8 mg/L, ole hyv ja katso kappale tulosten tulkinnaasta ja ilmoita lkrille niin pian kuin mahdollista, sill antibioottihoitoa saatetaan tarvita pikaisesti.

MIT MINUN TULEE TEHD, JOS NYTE ON NEGATIIVINEN?

Jos nyte on negatiivinen kun CRP:t on alle 8 mg/L, se tarkoittaa, ett bakteeri- tai virusinfektiota ei ole. Jos oireet kuitenkin jatkuvat, on suositeltavaa ottaa yhteytt lkriin.

KUINKA TARKKA C-REAKTIIVISEN PROTEIINIIN TESTI ON?

C-REAKTIIVISEN PROTEIINIIN testi on tarkka, ja sit on kytetty yli 10 vuoden ajan alan ammattilaisten toimesta (sairaalossa, laboratorioissa...). Arviointiraportit kertovat vhintn 98 % yleisest vastaavuudesta vertailumenetelmiin. Vaikka tm testi on luotettava, virheellisi positiivisia tai virheellisi negatiivisia tuloksia voidaan saada.