



PROSTA-Check® Självtest

Ref. 8084BI
Självtest som indikerar förhöjda nivåer av prostataspecifikt antigen.

GENERELLT
Genom prostatan utsöndrar män prostataspecifikt antigen (PSA). Prostatan finns i anslutning till urinblåsan, prostatan har en viktig funktion för produktionen av sperma. Förhöjda nivåer av PSA kan indikera olika sjukdomar som prostatit eller cancer. När en man når cirka 50 år bör ett prostata-PSA-test utföras minst en gång om året. Om en eventuell sjukdom upptäcks i tid ökar chanserna för tillfrisknande avsevärt.

Vårt prostata-test markerar positivt när PSA-nivån är 4 ng/mL eller högre.

Observera - Läs instruktionerna noggrant före användning.

1. Testhåll
2. Testfönster
3. Pipett
4. Grå hatt
5. Avtryckare
6. Blå kork
7. Vit kork
8. Utspänningsvätska



Innehåll:

- 1 Aluminiumförpackning som innehåller:
- 1 st Testkassett
- 1 st Pipett för bloduppsamling
- 1 st Torkmedel (används ej)

- Öppna förpackningen när du är redo att utföra testet.
- 1 st Steril lansett (+ en extra)
- 1 st 1ml flaska med utspädning
- 1 st Manual

MANUAL SJÄLVTEST

PROSTA-Check® Självtest

SV

quicktest.se

SV

Avläs resultat

Styrka, färg eller intensitet i testfönstret har ingen inverkan eller betydelse för att utläsa testresultat. **T** och **C** är förkortningar för **T** (Test) och **C** (Control).

1. Negativt resultat

Endast en färgad linje framträder under C. Detta betyder att din PSA-nivå är normal.



2. Positivt resultat

Två färgade linjer framträder i testfönstret under T och C. Notera att intensiteten under T kan vara tydligare än under C. Detta betyder att dina PSA-nivåer är förhöjda eller högre än normalt. Du bör kontakta läkare.



3. Misslyckat resultat


Om ingen linje framträder eller om det endast framträder en linje under T så är testet misslyckat och bör kastas. Notera att självtestet då är förbrukat och kan inte återanvändas. Det rekommenderas att ett nytt test utförs.



SV

Varningsföreskrifter och viktig information

Detta är ett in-vitro självtest, endast för externt bruk. Får ej förtäras. Läs instruktionerna noggrant före användning. Resultatet kan endast utläsas när instruktionerna följs enligt direktiv. Följ samtliga instruktioner gällande handhavande, blodmängd och utspädning. Förvaras mellan +4° C till +30° C. Förvaras torr och skyddas mot solljus. Ska ej användas efter bäst före datum som anges på aluminiumförpackningen. Testet ska inte användas om aluminiumförpackningen är öppen. Självtesten ska inte återanvändas. Förvara denna produkt utom räckhåll för barn och djur. Ytterförpackning sorteras som kartong/wellpapp. Övrigt ska sorteras som restavfall.

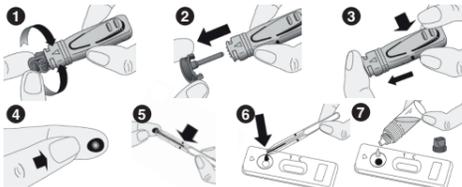

GÖR SÅ HÄR:

1. Tvätta händerna med tvål och vatten. Skölj och torka händerna noga.
2. Förbered för att genomföra testet: Ta ut testkassetten och pipetten ur aluminiumpåsen och placera testkassetten plant inom räckhåll. (Torkmedlet används ej).
3. Förbered lansetten. Detta görs genom att vrida om den grå delen (bild 1) på lansetten 2-3 varv till den lossnar HELT och sedan dra den grå delen rakt ut (bild 2), utan att trycka på avtryckaren.
4. Massera den valda fingertoppen med dina rengjorda fingrar.
5. Tryck lansetten **BESTÄMT** mot fingret och tryck på avtryckaren. (Nålen kommer automatiskt att dras in i lansetten).

SV

Frågor och svar

Vad betyder linjen under markeringen C?

Det betyder att självtestet fungerar normalt.

Kommer testet att vara tillförlitligt om jag avläser testet efter 15 minuter?

Nej. Testet ska avläsas inom 10 minuter efter utspänningsvätskan har droppats i testhålet. Efter 15 minuter är testet inte tillförlitligt och bör kastas.

Vad gör jag om testet är positivt?

Du ska då kontakta en läkare och förklara att du har gjort ett Quicktest Prostata PSA självtest och att resultatet blev positivt.

Vad gör jag om testet är negativt?

Du är med största sannolikhet fri från sjukdom. Misstänker du sjukdom eller har symptom ska du alltid konsultera läkare för vidare utredning.

Hur säkert är testet?

Quicktest Prostata PSA självtest är ansett som ett mycket säkert självtest. Tillförlitligheten är minst ca 88%.

SV

6. Pressa **HÄRT** på fingret för att få ut en droppe blod.
7. Pipetten placeras mot blodsdroppen, ett undertryck gör att blodet sugts upp. Låt endast den mängd blod som krävs flöda till markeringen (streck) av pipetten. Om mer blod behövs, massera fingret igen. Försök undvika att få in luftbubblor i pipetten. Notera att detta moment kan ta upp till 2 minuter att genomföra. Tryck inte på pipetten, blodet sugs in av kapillärkraft.
8. Pressa ut blodet från pipetten i testhålet (det runda hålet) genom att trycka på pipetten.
9. Om du inte lyckas med att låta blodet flöda in i pipetten - gör så här: Lagg bort pipetten, fortsatt att massera fingret hårt tills en droppe har formats - om möjligt; låt droppen falla fritt ner i testhålet. Om droppen inte vill lämna fingret; Låt droppen vidröra testhålet och flyta ut.
10. Vänta ca 30 sekunder för att låta blodet absorberas i testhålet. Skruva av det blå locket på utspänningsvätskan. Droppa sedan 4 droppar i testhålet med 2 sekunder mellan varje droppe.
11. Läs av resultatet efter 10 minuter. Tolka inte resultatet efter 15 minuter.

Vill du se hur det går till?
Scanna QR-koden med din mobiltelefon



SV

Frågor och svar

Hur fungerar testet?

Detta självtest indikerar vid förhöjda nivåer av PSA (prostataspecifikt antigen). Förhöjda nivåer behöver inte betyda att du är allvarligt sjuk, det kan bero på en del olika tillstånd. Därför är det viktigt att uppsöka en läkare vid ett positivt resultat. Vid symptom är det rekommenderat att uppsöka läkare - oavsett resultat på test.

Betyder ett positivt resultat att jag har cancer?

Nej. Faktum är att många prostatasjukdomar ger förhöjda PSA-nivåer som t.ex: godartad prostataförstoring (BPH). Inflammatoriska och infektiösa prostatasjukdomar (t ex prostatit).
Vi rekommenderar alltid att uppsöka läkare vid ett positivt resultat.

När kan detta test användas?

Quicktest Prostata PSA kan användas när som helst under dagen. Vid vissa sjukdomar och behandlingar rekommenderas det att avvakta en tid för att undvika felaktigt testresultat. Nedan följer våra rekommendationer:

- Cykling/ergometri 24h
- Utlösning 24h
- Prostatamassage 3 dygn
- Transrektalt ultraljud 3 dygn
- Cystoskopi 1 vecka
- Prostatabiopsi 4-6 veckor

Kan resultatet vara felaktigt?

Resultatet är korrekt om instruktionerna följs noggrant. Resultatet kan dock vara felaktigt om testet blir vått innan testet utförs, eller om den mängd blod som läggs i testkassetten inte är korrekt. Pipetten som medföljer säkerställer att blodvolymen blir korrekt.

Har linjernas intensitet i testfönstret någon betydelse?

Styrka, färg eller intensitet i kontrollstrecket har ingen inverkan eller betydelse för att utläsa testresultat. Om du kan urskilja en linje ska detta tolkas som en linje.

PROSTA-Check® Kotitesti

Ref. 8084BI

Kotitesti, joka osoittaa kohonneet eturauhasspesifinen antigeenin tasot.

YLEISESTI

Miehen eturauhanen erittää kehoon PSA:ta (prostataspesifinen antigeeni). Eturauhanen sijaitsee virtsarakon päässä, ja sillä on tärkeä rooli siemennesteen tuotannossa. Kohonnut PSA-arvo voi olla merkki eturauhasen sairauksista tai syövästä. Yli 50-vuotiaiden tulisi tehdä eturauhasen PSA-testaus vähintään kerran vuodessa. Jos sairaus havaitaan ajoissa, parantumisen mahdollisuudet ovat merkittävästi paremmat.

Eturauhastestimme antaa positiivisen tuloksen, kun PSA-taso on 4 ng/ml tai korkeampi.

Huom - Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

1. Testireikä
2. Tulosikkuna
3. Pipetti
4. Harmaa kupu
5. Laukaisin
6. Sininen korkki
7. Valkoinen korkki
8. Laimennusneste



Sisältö:

- 1 alumiinipakkaus, joka sisältää:
- 1 kpl Jossa on testikasetti
- 1 kpl Pipetti
- 1 kpl Sekä kuivausainetta (ei käyttöön).

Avaa pussi vasta, kun olet valmis tekemään testin.

- 1 kpl steriili lansetti (+ ylimääräinen)
- 1 kpl 1 ml pullo, jossa on laimennusainetta
- 1 kpl käyttöohje

Usein kysytyjä kysymyksiä

Miten testi toimii?

Tämä kotitesti havaitsee kohonneet PSA-arvot (prostataspesifinen antigeeni). Kohonneet arvot eivät välttämättä tarkoita, että olet sairas, vaan ne voivat johtua useista seikoista. Siksi on tärkeää ottaa yhteyttä lääkäriin positiivisen testituloksen jälkeen.

Tarkoitaaoko positiivinen tulos, että minulla on syöpä?

Ei. Itse asiassa monet eturauhassairaudet aiheuttavat kohonneita PSA-tasoja, kuten hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvu (BPH). Tulehdukselliset ja tartuttavat eturauhassairaudet (esim. eturauhastulehdus). Suosittelemme aina kääntymään lääkäriin puoleen, jos tulos on positiivinen.

Milloin testin voi tehdä?

Quicktest Prostata PSA:ta voidaan käyttää milloin tahansa päivän aikana. Joissakin sairauksissa ja hoidoissa on suositeltavaa odottaa jonkin aikaa virheellisten testitulosten välttämiseksi. Alla on suositukset:

- Pyöräily/ergometria 24h
- Siemensyöksy 24h
- Eturauhasen hieronta 3 päivää
- Transrektaalinen ultraääni 3 päivää
- Kystoskopia 1 viikko
- Eturauhasen biopsia 4-6 viikkoa

Voiko tulos olla virheellinen?

Tulos on oikea, jos käyttöohjeita on noudatettu tarkasti. Tulos voi kuitenkin olla virheellinen, jos testi on kastunut ennen testaamista tai veren määrä testikasetissa on väärä. Mukana olevaan pipettiin on merkitty verimäärä, joka testin tekoon tarvitaan.

Onko tulosikkunan viivojen vahvuudella merkitystä testitulokseen? Viivojen värillä tai intensiteetillä ei ole vaikutusta tai merkitystä tulokseen. Jos voit erottaa viivan, se tulkitaan viivaksi.


Mitä C-merkinnän alla oleva viiva tarkoittaa?

C-merkinnän alla oleva viiva tarkoittaa, että testi toimii normaalisti.

FI

Varoitukset ja tärkeää tietoa

Tämä on in vitro -menetelmällä tehtävä kotitesti, vain ulkoiseen käyttöön. Ei saa niellä. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Tulos vain ohjeiden mukaisella käytöllä. Noudata sovellettavia ohjeita käsittelystä, veren tilavuudesta ja laimennuksesta. Säilytys +4°C +30°C. Säilytettävä kuivassa paikassa suojassa auringonvalolta. Ei saa käyttää parasta ennen -päiväyksen jälkeen (merkattu myyntipakkaukseen ja suojujassiin). Älä käytä testiä, jos suojujassin on avattu. Ei saa käyttää uudelleen. Säilytä tuote lasten ja lemmikkieläimien ulottumattomissa. Myyntipakkaus laitetaan kartonkiin, muut osat sekajätteenä.

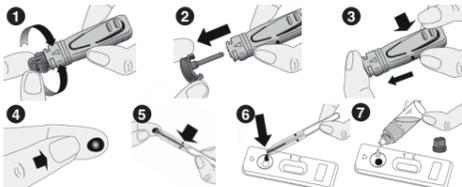

TEE NÄIN:

1. Pese kätesi huolellisesti saippualla ja vedellä. Kuivaa kädet.
2. Valmistele testi: Poista testikasetti ja pipetti suojujassista ja aseta testikasetti käden ulottuville. (Pussissa olevaa kuivausainetta ei tule käyttää.)
3. Valmistele lansetti. Tämä tehdään kääntämällä lansetin harmaata osaa (kuva 1) 2-3 kierrosta, kunnes se irtoaa **TÄYSIN**, ja vetämällä sitten harmaata osaa suoraan ulos (kuva 2) painamatta laukaisinta.
4. Hiero valitsemäsi sormen päätä puhdistetuilla sormilla.
5. Paina lansetti **KUNNOLLA** sormenpäähän ja paina laukaisinta. (Neula tulee vetäytymään automaattisesti takaisin lansettiin.)

FI

Usein kysytyjä kysymyksiä

Voiko testitulokseen luottaa, jos tarkistan sen 15 minuutin kuluttua?

Ei. Testitulos tulee tarkistaa 10 minuutin kuluttua siitä, kun liuos on laitettu näyteaukkoon. 15 minuutin kuluttua testi ei ole enää luotettava ja se pitää hävittää.

Mitä teen, jos testitulos on positiivinen?

Positiivinen testitulos tarkoittaa, että PSA-arvosii ovat korkeammat kuin 4 ng/ml. Ota yhteyttä lääkäriin ja kerro, että olet tehnyt Quicktestin Eturauhastestin ja saanut positiivisen tuloksen.

Mitä teen, jos testitulos on negatiivinen?

Negatiivinen testitulos tarkoittaa, että PSA-arvosii ovat alle 4ng/ml. Jos epäilet sairautta tai sinulla on oireita, sinun tulee aina ottaa yhteyttä lääkäriin jatkotutkimuksia varten. Turvallisuutesi vuoksi suosittelemme, että teet eturauhastestin vähintään kerran vuodessa!

Kuinka turvallinen testi on?

Quicktestin Eturauhastesti on yksi luotettavampia kotitestejä. Sitä on käytetty terveydenhuollossa kymmenen vuoden ajan. Testin luotettavuus on yli 88 %. C-merkinnän alla oleva viiva tarkoittaa, että testi toimii normaalisti.

FI

6. Purista **KOVAA** sormenpäätä saadaksesi esiin pisaran verta.
7. Aseta pipetti veripisaralle ja ime verta pipetin merkkiin asti. Jos verta ei tule heti tarpeeksi, hiero sormenpäätä uudelleen. Älä päästä ilmakuplia pipettiin. Tarvittava verimäärän saaminen pipettiin voi kestää jopa kaksi minuuttia.
8. Purista veri pipetistä näyteaukkoon (pyöreä reikä) painamalla pipetin pästä.
9. Jos et onnistu saamaan verta pipettiin - toimi seuraavasti: Laita pipetti pois, jatka sormen hieromista voimakkaasti, kunnes muodostuu verenpisara - jos mahdollista; anna pisaran pudota vapaasti testireikään. Jos pisara ei halua lähteä sormesta; Anna pisaran koskettaa testireikää ja valua ulos.
10. Odota 30 sekuntia, jotta veri ehtii imeytyä näyteaukkoon. Avaa laimennusneste (sininen kierrekorkki). Tiputa näyteaukkoon 4 pisaraa laimennusnestettä yksi kerrallaan 3 sekunnin välein.
11. Lue tulos 10 minuutin kuluttua. Älä tulkitse tulosta 15 minuutin jälkeen.

Haluatko nähdä, miten se toimii?

Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi



FI

Testitulokset

Tulosnäytön merkintöjen vahvuudella, värillä tai voimakkuudella ei ole vaikutusta tai merkitystä testitulokseen. **T**- ja **C**-merkinnät ovat lyhenteitä **T** = testaus (Test) ja **C** = kontrolli (Control).

1. Negatiivinen tulos

Tulosnäytöllä on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että PSA-arvo on normaali.



2. Positiivinen tulos

Tulosnäytöllä on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huomaa, että värin intensiteetti voi olla erilainen T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että PSA-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteyttä lääkäriin.



3. Epäonnistunut testitulos

Jos tulosnäytölle ei tule lainkaan viivaa tai viiva näkyy ainoastaan T-merkinnän kohdalla, testi on epäonnistunut ja se tulee hävittää. Huomaa, että kotitestiä ei voi käyttää uudelleen. Suosittelemme, että teet uuden testin.



SV

Rue de l'Expansion - ZAT du Loudu - Cerisé
BP 181 - 61006 ALENCON Cendex (France)

	Lue ohjeet ennen käyttöä		In vitro -diagnosti- seen käyttöön		Älä käytä uudelleen
	Säilytys +4° -> +30°C		Eränumero		Eräläntymispäivä
	Valmistaja	MD- 080020 m5 c - Tarkistettu 2022/01			



PROSTA-Check® Selvtest

Ref. 8084BI

Selvtest som indikerer for forhøede verdier av Prostataspesifikt antigen.

GENERELT

Gjennom prostata usondrer menn prostataspesifikt antigen (PSA). Prostata finnes i anslutning til urinblæren, prostataen har en viktig funksjon for produksjon av sædvæske. Forhøede verdier av PSA kan indikere ulike sykdommer som prostatitt eller kreft. Når en mann når ca 50 års alder, bør en prostata PSA-test utføres minst en gang i året. Hvis en mulig sykdom oppdages i tide, vil mulighetene for tilfriskning øke betydelig.

Vår prostatatest er positiv når PSA-nivået er 4 ng/mL eller høyere.

Merk - Les instruksjonene nøye før bruk.

1. Testhull
2. Resultatvindu
3. Pipette
4. Grå hatt
5. Utløser
6. Blå kork
7. Hvit kork
8. Fortynningsmiddel



Innhold:

- 1 aluminiumspose som inneholder:
 - 1 stk Testkassett
 - 1 stk Pipette for blodopsamling
 - 1 stk Tørkemiddel (brukes ej)

Åpne forpakningen når du er klar til å fullføre testen.

- 1 stk Steril lansett (+ en ekstra)
- 1 stk 1ml flaske med fortynning
- 1 stk Manual

MANUAL SELVTEST PROSTA-Check® Selvtest

NO

quicktest.no

Les av resultatet

NO

Styrke, farge eller intensitet i testvinduet har ingen effekt eller betydning for å kunne avlese testresultater. **T** og **C** er forkortelser for **T** (Test) og **C** (Control).

1. Negativt resultat

Bare en farget linje vises under C (Control). Det betyr at ditt PSA-nivå er normalt.



2. Positivt resultat

To fargede linjer vises i testvinduet under T (Test) og C (Control). Legg merke til at intensiteten under T kan være tydeligere enn under C. Dette betyr at dine PSA-nivåer er forhøede eller høyere enn normalt. Du bør konsultere en lege.



3. Misslykket resultat


Dersom ingen linje vises, eller hvis bare en linje under T vises, har testen feilet og bør kasseres. Merk at selvtesten er forbrukt og ikke kan gjenbrukes. Det anbefales at en ny test utføres.



Advarelsforskrifter og viktig informasjon

NO

Dette er en in-vitro selvtest, kun for ekstern bruk. Skal ikke konsumeres. Les instruksjonene nøye før bruk. Resultatet kan bare leses av når instruksjonene følges nøyaktig. Følg alle instruksjonene for håndtering, blodmengde og fortynning. Oppbevares mellom + 4° C til + 30° C. Må ikke fryses. Oppbevares tørt og beskyttet mot sollys. Skal ikke brukes etter utløpsdato merket med et timeglass på ytterforpakningen og aluminiumsforpakningen. Testen skal ikke brukes dersom aluminiumspakken er åpnet. Selvtesten skal ikke gjenbrukes. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og dyr. Ytteremballasje sorteres som kartong/papir. Øvrigt skal sorteres som restavfall.

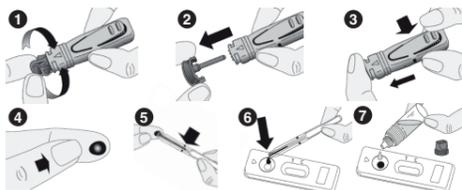

SLIK GJØR DU:

1. Vask hendene grundig med såpe og vann. Tørk hendene.
2. Forbered for å gjennomføre testen: Fjern testkassetten og pipetten ut av aluminiumsposen og plasser testkassetten flatt innenfor rekkevidde. (Tørkemidlet skal ikke brukes).
3. Klargjør lansetten. Dette gjøres ved å vri den grå delen (bilde 1) av lansetten 2-3 omdreininger til den løsner HELT, og deretter trekke den grå delen rett ut (bilde 2), uten å trykke på utløserknappen.
4. Masser valgt fingertupp med de rengjorte fingrene.
5. Trykk lansetten **BESTE**MT mot fingeren og trykk på utløserknappen. (Nålen trekkes automatisk inn i lansetten).

Spørsmål og svar

NO

Vil testen være pålitelig hvis jeg leser av testen etter 15 minutter?

Nei. Testen skal avleses innen 10 minutter etter at fortynningsmiddelet har droppet inn i testhullet. Etter 15 minutter er testen ikke pålitelig og bør kastes.

Hva betyr linjen under markeringen C (Control)?

Dette betyr at selvtesten fungerer normalt.

Hva gjør jeg hvis testen er positiv?

PSA-nivåene dine er høyere enn 4ng/ml. Du skal da kontakte en lege og forklare at du har gjort en Quicktest Prostata PSA selvtest og at resultatet ble positivt.

Hva gjør jeg hvis testen er negativ?

Hvis resultatet er negativt, betyr det at PSA-nivået i blodet ditt er under 4 ng/ ml. Hvis du mistenker sykdom eller har symptomer, skal du alltid kontakte lege videre undersøkelse. For din sikkerhet er det anbefalt at du utfører en prostatatest minst en gang i året.

Hvor pålitelig er testen?

Quicktest Prostata PSA selvtest betraktes som et veldig sikkert selvtest, det har blitt brukt i helsevesenet i ca 10 år. Påliteligheten er minst ca 88%.



Vil du se hvordan det går til?

Skann QR-koden med din mobiltelefon



Rue de l'Expansion - ZAT du Loudeu - Cerisé BP 181 - 61006 ALENCON Cendex (France)

	Les bruksanvisningen før bruk	IVD	For in vitro diagnostisk bruk		Må ikke gjenbrukes
	Lagres mellom +4° og +30°C	LOT	Batchnummer		Utløpsdato
	Produsent	MD- 080020 m5 c - Revidert 2022/01			



PYLORI-Screen® Selvtest

Ref. 8084BI

Selvtest, der indikerer forhøede nivåer av prostataspecifikt antigen.

GENERELT

Gjennom prostata usondrer mænd et prostataspecifikt antigen (PSA). Prostata er forbundet til urinblæren, prostataen har en viktig funksjon for produksjon av sædvæske. Forhøede verdier av PSA kan indikere forskjellige sykdommer som prostatitis eller kreft. Når en mand når ca 50 års alderen, bør en prostata PSA-test utføres minst en gang om året. Hvis en mulig sykdom oppdages i tide, vil mulighetene for helbredelse øges betydelig.

Vores prostatatest er positiv, når PSA-niveaue er 4 ng/mL eller høyere.

Bemerk - Les instruksjonene nøye før bruk.

1. Testhull
2. Provesvar
3. Pipette
4. Grå hette
5. Udløser
6. Blå hette
7. Hvid hette
8. Fortyndingsmiddel



Innehold:

- 1 aluminiumspose, som inneholder:
 - 1 stk testkassette
 - 1 stk pipette for blodopsamling
 - 1 stk Tørningsmiddel (anvendes ikke)

Åbn pakken, når du er klar til å utføre testen.

- 1 steril lancet (+ en ekstra)
- 1 ml flaske med fortynding
- 1 manual

MANUAL SELVTEST PROSTA-Check® Selvtest

DK

quicktest.dk

Aflæs resultatet

DK

Styrke, farve eller intensitet i testvinduet har ingen påvirkning eller betydning for aflæsning af testresultatet. **T** og **C** er forkortelser for **T** (Test) og **C** (Kontrol).

1. Negativt resultat

Kun en enkelt farvet linje vises under C (Control). Det betyder, at dit PSA-niveau er normalt.



2. Positivt resultat

To farvede linjer vises i testvinduet under T (Test) og C (Control). Læg mærke til, at intensiteten under T kan være tydeligere end under C. Dette betyder, at dine PSA-niveauer er forhøede eller højere end normalt. Du bør konsultere en læge.



3. Mislykket resultat


Hvis der ikke fremkommer en linje, eller hvis der kun vises en enkelt linje under T, er testen forfæjlet og bør kasseres. Bemærk, at selvtesten er opbrugt og ikke kan genbruges. Det anbefales, at der udføres en ny test.



Advarelsforskrifter og vigtig information

DK

Dette er en in-vitro selvtest, kun til udvortes brug. Må ikke indtages. Læs instruktionerne nøje før anvendelse. Resultatet kan kun aflæses, når instruktionerne følges nøjagtigt. Følg alle instruktioner for håndtering, blodmængde og fortynning. Opbevares mellem + 4° C til + 30° C. Må ikke fryses. Opbevares tørt og beskyttet mod sollys. Må ikke anvendes efter udløpsdato mærket med et timeglas på yderpakningen og aluminiumspakningen. Testen må ikke bruges, hvis aluminiumspakken har været åbnet. Selvtesten skal ikke gjenbruges. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og dyr. Yderemballage sorteres som karton/papir. Øvrigt affald skal sorteres som restaffald.

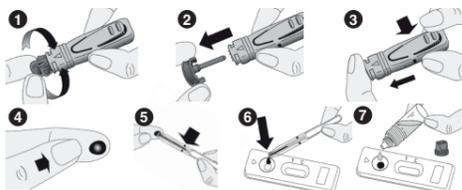

SÅDAN GØR DU:

1. Vask hænderne med sæbe og vand. Skyl og tør hænderne grundigt.
2. Tag testkassetten og pipetten ud af aluminiumsposen og placer testkassetten plant indenfor rækkevidde. (Tørningsmidlet skal ikke bruges).
3. Klargør lancetten. Dette gøres ved at dreje den grå del (billede 1) af lancetten 2-3 omgange, indtil den løsner sig HELT, og derefter trække den grå del lige ud (billede 2), uden at trykke på udløserknappen.
4. Massér den valgte fingerspids med de rengjorte fingre.
5. Tryk lancetten **HÅRDI** mod din finger, og tryk på udløserknappen. (Nålen trækkes automatisk ind i lancetten).

Spørgsmål og svar

DK

Hvad betyder linjen under markeringen C (Control)?

Den betyder, at selvtesten fungerer normalt.

Vil testen være pålidelig, hvis jeg aflæser testen efter 15 minutter?

Nej. Testen skal aflæses indenfor 10 minutter efter at fortyndingsmidlet er blevet droppet ned i testhullet. Efter 15 minutter er testen ikke pålidelig og bør kasseres.

Hvad gør jeg, hvis testen er positiv?

Dine PSA-niveauer er højere end 4ng/ml. Så skal du kontakte en læge og forklare, at du har foretaget en Quicktest Prostata PSA selvtest, og at resultatet blev positivt.

Hvad gør jeg, hvis testen er negativ?

Hvis resultatet er negativt, betyder det, at PSA-niveaue i dit blod er under 4ng/ml. Hvis du mistænker sygdom eller har symptomer, skal du altid kontakte lægen for nærmere undersøgelse. For din sikkerhed anbefales det, at du udfører en prostatatest mindst en gang om året.

Hvor pålidelig er testen?

Quicktest Prostata PSA selvtest betragtes som en yderst sikker selvtest, der er blevet brugt i sundhedsvæsenet i ca 10 år. Pålideligheden er mindst 88%.



Vil du se, hvordan det fungerer?

Scan QR-koden med din mobiltelefon



Rue de l'Expansion - ZAT du Loudeu - Cerisé BP 181 - 61006 ALENCON Cendex (France)

	Læs instruktionerne før brug	IVD	Til in vitro diagnostisk brug		Må ikke genbruges
	Opbevares mellem +4° og +30°C	LOT	Batchnummer		Udløbsdato
	Fabrikant	MD- 080020 m5 c - Revideret 2022/01			