

LA MACHINE	Product:	BLEPHADEMODEX 30Ling Pack4-(DAN)(NOR)-1172LG30L04		PI Théa's Code:	N1172LG30L04/X0118	■ Black
	Manufacturer:	CENTRAL DE ENVASADOS		PI Manufacturer's Code:	PR177B	■ Black 50 %
	Type of PI:	LEAFLET		Dimensions (WH):	200 x 210 mm	
	Remarks:			Théa's Template:	CENT-N-200x210-1013-2	
	Fonts:	Amœbia, Formata		Title size:	18 pt	
	Subtitle size:	10 pt	Text size:	8 pt	Interline size:	4pt
	Code size:	7 pt			Soft:	InDesign 8.0.2 (CS6)
	Global version:	X0118-3		Global version date:	2018-07-11	
	Customer version:	2		Customer version date:	2018-02-07	
	Technical version:	1		Technical version date:	2018-07-11	

Used colours

!! Customer approval !!	<p><b>This printing proof represents exactly the way the PI will be printed.</b></p> <p>This means that by putting your signature on it, you fully accept its design, texts and that anything comply on a regulatory point of view to your local requirements.</p>	!! Manufacturer approval !!	<p>Your signature on this pdf means that you guarantee that technicals aspects of this PI comply with the size of the PI, the cutting shapes, the margins, the codes and their positions, the reserved areas, the varnished areas, the braille and all the embossed elements and all the necessary marks in order to ensure that the finished product will look at what is shown below.</p> <p><b>You should not modify this pdf.</b></p>
	<p>Name:</p> <p>Date:</p> <p>Signature:</p>		<p>Name:</p> <p>Date:</p> <p>Signature:</p>

DA

# Blephademodex

**Sterile renseservietter**  
uden konserveringsmidler

## Anvendelse:

BLEPHADEMODEX anbefales til:

- daglig pleje af øjenlåg ved infektion forårsaget af *Demodex*,
- lindring af symptomer ved infektion eller inflammation på øjenlågene forårsaget af *Demodex*.

*Demodex* er den mest almindelige mikroskopiske hudparasit. *Demodex*-infektion kan medføre inflammation på øjenlåget (blefaritis). *Demodex* kan ikke fjernes med almindelige renseprodukter. Cylinderformet skæl ved øjenvippenes rødder er et tydeligt tegn på *Demodex*-infektion.

BLEPHADEMODEX fjerner skorpedannelse, skæl, urenheder og smitstoffer på øjenlåg og øjenvipper. BLEPHADEMODEX lindrer symptomer forbundet med *Demodex*-infektion, f.eks. kløe, svie, tørhed og inflammation på øjenlågskanten ved at fjerne *Demodex*-parasitten.

Rødme ved øjenlågskanten og følelsen af et fremmedlegeme i øjet mindskes.

Natriumhyaluronat, som er et naturligt fugtgivende stof, virker beroligende og regenererende på følsom hud.

BLEPHADEMODEX indeholder Terpinen-4-ol og plejer huden nænsomt, da det ikke indeholder rensmidler eller konserveringsmidler.

BLEPHADEMODEX indeholder ikke parfume, og dets friske duft skyldes indholdsstofferne i produktet. Duften forsvinder efter et par minutter. Farven på renseservietterne (lotion) kan variere. Det skyldes de naturlige planteekstrakter og er helt normalt.

## Dosis:

Milde til moderate symptomer: Anvendes en gang dagligt, helst om aftenen, i 4 uger.

Moderate til svære symptomer: Anvendes to gange dagligt, morgen og aften, i 4 uger.

Sundhedspersonalet vil muligvis tilpasse dosis og behandlingsvarighed til sværhedsgraden af dine symptomer.

Lige som ved lignende behandlinger mod blefaritis vil sundhedspersonalet muligvis anbefale, at du også anvender kunstige tårer.

BLEPHADEMODEX kan anvendes fra 18 år og derover.

## Brugervejledning:


**Hvis du bruger kontaktlinser:** Tag dine kontaktlinser ud, inden du bruger BLEPHADEMODEX.

Åbn et brev, og fold renseservietten ud.

Placer servietten på spidsen af din pegefinger og vinkel den rundt om fingeren.

Hold øjet lukket og rens nænsomt øjenlåg og vippekant med renseservietten.

Massér forsigtigt øjenlågene med små cirkelbevægelser, så skorpedannelse, skæl og sekreter fjernes.

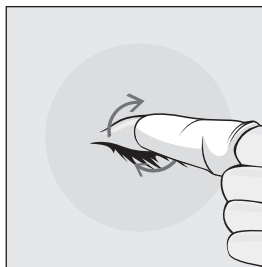

Tag en ny renseserviet, og gentag på det andet øje. BLEPHADEMODEX fedter ikke og skal ikke skylles af efter anvendelse.

Hold øjet lukket i 15 sekunder efter hver afrensning.

## Advarsler og forsigtighedsregler:

Kun til anvendelse på huden.

Undgå at få BLEPHADEMODEX i øjet, da det kan medføre en brændende fornemmelse. Hvis du får BLEPHADEMODEX i øjet, skal du skylle med sterilt vand eller saltvandsopløsning.

BLEPHADEMODEX er et sterilt produkt til **engangsbrug**. Du må ikke genbruge servietten, da renssevnen er forringet, og der er en øget risiko for infektion.

Du må ikke bruge renseservietten, hvis brevet er åbnet eller beskadiget.

Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på æsken og brevet. Udløbsdatoen henviser til produktet i intakt emballage og under korrekte opbevaringsbetingelser.

Smid renseservietten i skraldespanden efter brug. Stop med at bruge BLEPHADEMODEX, og kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis dine symptomer forværres, eller du får en allergisk reaktion.

## Anvend ikke BLEPHADEMODEX:

Hvis du er under 18 år, da der ikke findes oplysninger om behandling i denne aldersgruppe.

Hvis du er gravid eller ammer, da der ikke findes oplysninger om behandling i denne gruppe.

Hvis du er allergisk over for et eller flere af indholdsstofferne.

## Opbevares ved 8-25°C.

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.

## Bivirkninger:

Følgende bivirkninger er rapporteret: brændende fornemmelse efter brug.

Kontakt læge, øjenlægen, apotekspersonalet eller fabrikanten, hvis du får en bivirkning.

## Produktbeskrivelse:

Steril renseserviet, imprægneret med en lotion. Lotion indeholder: PEG-8, polysorbat 80, poloxamer 184, terpinen-4-ol, PEG-6 capryl/caprin-glycerider (macrogol 6 glycerol caprylocaprate), natriumhyaluronat, dikaliumphosphat, kaliumdihydrogenphosphat, rensed vand.

**Denne brugervejledning blev sidst ændret:**  
**December 2017**



## Fremstiller

Laboratoires THEA  
12, rue Louis Blériot  
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2  
Frankrig



Opbevares ved 8-25°C



Må ikke genanvendes



Må ikke anvendes, hvis emballagen (brevet) er beskadiget

**STERILE** R

Steriliseret ved hjælp af stråling



Se brugsanvisning før brug



Forsigtig!



Udløbsdato

**LOT**

Batch-nummer

**CE** 0459

NO

# Blephadmodex

## Sterile rengjøringservietter

uten konserveringsmiddel

### Tiltenkt bruk:

BLEPHADEMODEX anbefales:

- til daglig rengjøring av øyelokkene ved *Demodex*-infeksjon
- til symptomlindring ved øyelokksinfeksjon eller -betennelse forårsaket av *Demodex*.

*Demodex* er den vanligste mikroskopiske hudparasitten. *Demodex*-infeksjon bidrar til øyelokksbetennelse (blefaritt). *Demodex* fjernes ikke med vanlige rengjøringsssystemer til daglig bruk. Sylinderformet flass som sitter igjen innerst på øyevippene, er et klart tegn på *Demodex*-infeksjon.

BLEPHADEMODEX renser bort skorper, flass, urenheter og smittestoffer på øyelokk og øyevipper. BLEPHADEMODEX bedrer symptomer knyttet til *Demodex*-infeksjon, som kløe, svie, tørrhet og betennelse i øyelokksranden, ved å fjerne *Demodex*-parasitter.

Rødheten i øyelokksranden og følelsen av fremmedlegemer reduseres.

Sensitiv hud roes ned og regenereres av natriumhyaluronat, et naturlig bløtgjørende stoff. BLEPHADEMODEX lages med terpinen-4-ol og tåles godt da det ikke inneholder såpe eller konserveringsmiddel.

BLEPHADEMODEX har en sammensetning uten parfyme, og derfor kan det merkes en frisk duft fra komponentene. Dette forsvinner i løpet av noen få minutter.

Fargen på våtservietten (lotion) kan variere. Dette skyldes naturlige planteuttrekk og er normalt.

### Dose:

Milde til moderate symptomer: Brukes én gang daglig, fortrinnsvis om kvelden, i 4 uker.

Moderate til kraftige symptomer: Brukes to ganger daglig, morgen og kveld, i 4 uker.

Helsepersonell kan tilpasse doseringen og behandlingsvarigheten ut fra symptomenes alvorlighetsgrad.

Som ved bruk av andre tilsvarende blefarittbehandlinger, kan helsepersonell anbefale samtidig bruk av kunstig tårevæske.

BLEPHADEMODEX kan brukes fra 18 års alder.

### Bruksanvisning:


**Dersom du bruker kontaktlinser:** du må ta dem ut før bruk av BLEPHADEMODEX.

Åpne en pose og brett ut våtservietten.

Plasser våtservietten på tuppen av pekefingeren og pakk den rundt.

Hold øyet lukket, påfør forsiktig på øyelokket og innerst på øyevippene.

Masser øyelokkene forsiktig med små sirkelbevegelser, for å fjerne eventuelle skorper, flass eller puss skånsomt.

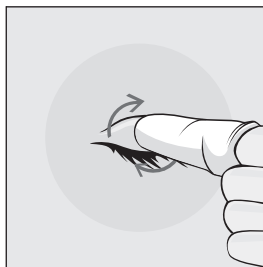

Gjenta på det andre øyet med en ny våtserviett. BLEPHADEMODEX inneholder ikke olje og trenger ikke skylles av etter bruk.

Hold øyet lukket i 15 sekunder etter påføring.

### Forsiktighetsregler og advarsler:

Kun til bruk på huden.

Unngå å få BLEPHADEMODEX i øyet, ellers kan du merke en sviende følelse. Skyll med sterilt vann eller saltvannsuppløsning hvis dette skjer.

BLEPHADEMODEX er et sterilt produkt **kun til engangsbruk**. Skal ikke gjenbrukes, da dette kan medføre mindre rengjørings effekt og kan øke infeksjonsfaren.

Bruk ikke våtservietten dersom posen er åpnet eller skadet.

Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på ytteresken og posen. Utløpsdatoen gjelder for produkt i intakt pakning, under riktige oppbevaringsbetingelser.

Etter bruk skal våtservietter kastes sammen med husholdningsavfall.

Slutt å bruke BLEPHADEMODEX og kontakt helsepersonell dersom symptomene dine forverres eller det oppstår allergiske reaksjoner.

### Kontraindikasjoner:

Skal ikke brukes dersom du er under 18 år, da det ikke foreligger data.

Skal ikke brukes dersom du er gravid eller ammer, da det ikke foreligger data.

Skal ikke brukes dersom du er allergisk overfor noen av komponentene.

### Oppbevares ved 8–25 °C.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

### Mulige bivirkninger:

Følgende bivirkninger er rapportert: sviende følelse etter bruk.

Kontakt fastlegen, øyelegen, apoteket eller tilvirkeren dersom du opplever bivirkninger.

### Produktbeskrivelse:

Sterile våtservietter, innsatt med en lotion.

Lotion inneholder: PEG-8, polysorbat 80, poloksamer 184, terpinen-4-ol, PEG 6 kapryl/kaprattglyserider (makrogol 6 glyserolkaprylokaprat), natriumhyaluronat, dikaliumfosfat, kaliumdihydrogenfosfat, renset vann.

**Dato for oppdatering av bruksanvisningen:**  
Desember 2017



**Tilvirker**

Laboratoires THEA

12, rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Frankrike



Oppbevares ved 8–25 °C



Skal ikke gjenbrukes



Skal ikke brukes dersom pakningen (posen) er skadet

**STERILE R**

Sterilisert ved bestråling



Les bruksanvisningen



Advarsel



Brukes innen

**LOT**

Batchnummer

**CE** 0459

**Théa**