

Bipackseddel

HERPOtherm®

Enkel | snabb | väl tolererad

Medicinteknisk produkt för symtomatisk behandling av herpes

Avsedd användning

HERPOtherm® är en patenterad medicinteknisk produkt för lokal behandling av symtom vid herpes (herpes simplex labialis), såsom sveda, stickningar, klåda eller spännings-känsla.

Vid användning i rätt tid kan HERPOtherm® som regel helt förhindra bildandet av herpesblåsor. Vid senare användning kan ett enklare förlopp eller en tidigare läkning uppnås. De första tecknen på ett herpesutbrott, så kallade prodromalsymtom, är vanligtvis klåda, sveda, stickningar eller spänningskänsla.

Verkningsmekanism

HERPOtherm® verkar uteslutande genom koncentrerad värme och således helt utan kemikalier.

HERPOtherm® är även lämpligt för gravida, allergiker och barn.


Användningen av koncentrerad värme (lokal hypertermi) är en fysikalisk verkningsprincip baserad på kort, koncentrerad värmeeffekt på en liten begränsad hudyta. Till och med en lokal begränsad värmetillförsel kan räcka för att lindra besvär som klåda, sveda eller spänningskänsla och vid användning i rätt tid som regel förhindra bildandet av herpesblåsor.

Användning

Det är mycket enkelt att använda HERPOtherm®:

- Ta av skyddslocket på instrumentet. Placera instrumentet med den kemiska kontaktytan på det hudområde som ska behandlas och tryck lätt.
- Tryck på knappen. Den keramiska kontaktytan värms upp till en temperatur på cirka 51 °C. Så snart denna temperatur uppnåtts tänds en LED-lampa. LED-lampan släcks när instrumentet stängs av automatiskt efter 3 sekunders användning. I början av uppvärmningsfasen och i slutet av behandlingen avges dessutom en ljud-signal.
- Sätt tillbaka skyddslocket på instrumentet.

Vid ihållande eller återkommande symtom går det att behandla samma hudområde flera gånger. Iaktta en behandlingspaus på minst 2 minuter mellan varje användning. Samma hudområde får behandlas maximalt 5 gånger per timme.

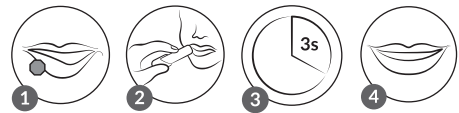


Tips om användning

HERPOtherm® är endast avsedd för egenanvändning av vuxna och barn från 12 år. Barn under 12 år ska bara behandlas med hjälp av en vuxen. Av hygieniska skäl och för att förhindra överföring av virus ska HERPOtherm® alltid bara användas av en person. Herpes är en virusjukdom som orsakas av herpes simplex-virus. Överföringen sker via droppsmitta samt direkt eller indirekt kontaktsmitta. Infektionen med herpes simplexvirus kan inte hävas.

Rengöringsanvisning:

Instrumentets keramiska kontaktyta kan rengöras med en vanlig rengöringsduk med alkohol. Alla övriga ytor kan rengöras med t.ex. en ren duk.

Byte av batterier:

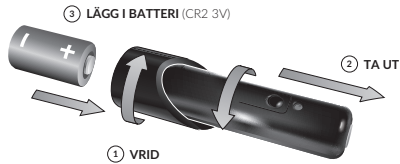

Vid batteribyte måste skyddslocket och batterilocket tas bort och sättas tillbaka efter inläggning av batteriet (se bild).

Ett nödvändigt batteribyte indikeras genom att LED-lampan blinkar 3 gånger och ljudsignalen avges 3 gånger. Använd inte uppladdningsbara batterier.

Varning

- HERPOtherm® får inte användas på, vid eller av
- ögon och ögonlock
 - slemhinnor
 - öppna sår, skadad hud (t.ex. öppna blåsor)
 - skållad eller brännskadad hud
 - förfrysning av huden
 - tunnfiberneuropati, allodyni, hyperalgesi

- tumörer och maligna hudförändringar
- personer med nedsatt känslighet på grund av kroppsliga eller medicinska besvär
- känsliga hudområden eller hudområden med dålig genombildning.

I följande fall ska råd från läkare inhämtas:

- Ihållande besvär under användning av HERPOtherm®.
- Besvär som försämras under användning av HERPOtherm®. Tills dessa har försvunnit ska produkten inte användas mer.

Dessutom ska instrumentet inte användas:

- Omedelbart efter applicering av salvor, krämer, lotioner osv. på det drabbade området
- På fuktig hud.

Behandlingstemperaturen kan upplevas som obehaglig beroende på känslighet.

Hos känsliga personer kan en kortvarig hudrodnad uppkomma efter användning. I sällsynta fall kan personer med känslig hudtyp drabbas av en hudirritation.

En funktionsstörning indikeras genom att LED-lampan blinkar 5 gånger och ljudsignalen avges 5 gånger. Detta kan uppkomma vid exempelvis felaktig användning, genom att instrumentet aktiveras och används i luften istället för på huden. Om felmeddelandet upprepas trots korrekt användning, kontakta tillverkaren eller distributören.

Använd inte instrumentet om det är skadat eller vid en uppbar felaktig funktion. Använd inte skadade eller fuktiga batterier. Skydda instrumentet mot fukt.

Förvaring

Skydda instrumentet mot direkt solljus och förvara det torrt. Använd inte batteriet efter det utgångsdatum som anges på detsamma. Om instrumentet inte ska användas under längre perioder ska batteriet tas ut för att förhindra en skada på Herpotherm® på grund av läckande batterisyra.



Tillverkare:

🏢 **mibeTec** GmbH
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Tyskland
Tel.: +49 (0) 800/162 35 09
Fax: +49 (0) 34954/247 271 79

Kontakt:

Sverige: contact-sweden.mibetec@dermapharm.com

www.herpotherm.eu

Kontakta tillverkaren eller distributören vid frågor om produkten respektive dess funktion.

Informationen uppdaterad: december 2018



Beakta bipacksedeln



Skydda instrumentet mot direkt solljus och förvara vara det torrt. Fukt-känsligt.



Lot, se instrumentet



Får inte kastas i hushållssoporna

Tekniska data:



CR2 3V
Batterityp/-spänning



Användningsdel typ BF enligt EN 60601-1

Brugsanvisning

HERPOtherm®

Nemt | hurtigt | tåles godt

Medicinsk produkt til symptomatisk behandling af herpes

Anvendelsesformål

HERPOtherm® er et patenteret medicinsk produkt til lokal behandling af symptomer, der opstår i forbindelse med herpes (herpes simplex labialis), såsom kløe, brændende og snurrende fornemmelse eller ømhed.

HERPOtherm® kan som regel ved rettidig anvendelse forhindre dannelse af herpes-blærer. Ved efterfølgende anvendelse kan der opnås et lettere forløb eller en tidlig heling. De første symptomer på et herpesudbrud, de såkaldte prodomal-symptomer kan generelt være kløe, brændende og snurrende fornemmelse eller ømhed.

Virkemåde

HERPOtherm® virker udelukkende ved koncentreret varme og er således fuldstændigt uden kemiske stoffer. HERPOtherm® er derfor også egnet til gravide, allergikere og børn.


Brug af koncentreret varme (lokal hypertermi) er et fysisk funktionsprincip, der er baseret på kort, koncentreret varmepåvirkning på et lille begrænset hudområde. Oven i købet en lokalt begrænset varmepåføring kan være tilstrækkelig til at lindre gener, såsom kløe, brændende og snurrende fornemmelse eller ømhed, eller det kan som regel forhindre et udbrud af herpes, hvis produktet anvendes rettidigt.

Anvendelse

HERPOtherm® er meget nemt at anvende:

- Tag beskyttelseshætten af stiftet. Anbring stiftet med den keramiske kontaktflade på det berørte hudområde, og tryk hermed forsigtigt mod huden.
- Tryk på knappen. Den keramiske kontaktflade opvarmes til en temperatur på ca. 51 °C. Så snart denne temperatur er nået, lyser en LED. LED'en slukker, når stiftet automatisk slukker efter en anvendelsestid på 3 sekunder. I begyndelsen af opvarmningsfasen og ved afslutningen af behandlingen udsendes et yderligere akustisk signal.
- Sæt beskyttelseshætten på stiftet igen.

Ved vedvarende eller genopblussende symptomer er det muligt med en gentagen behandling af det samme hudområde. Hold en behandlingspause på mindst 2 minutter mellem de pågældende anvendelser. Der foreskrives maksimalt 5 anvendelser på samme hudområde, som ikke må overskrides.

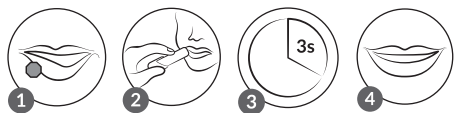

Anvisninger til brug


HERPOtherm® må kun anvendes af voksne og børn over 12 år. Børn under 12 år må kun anvende stiftet med hjælp fra en voksen.

For at undgå smitte og af hygiejniske årsager må HERPOtherm® kun anvendes af én og samme person. Herpes er en virus sygdom, som fremkaldes af en herpes-simplex-virus. Infektionen overføres ved dråbeinfektion, ved direkte eller indirekte kontakt. Infektionen med Herpes-simplex-virus kan ikke kureres.

Rengøringsvejledning:

Den keramiske kontaktflade på stiftet kan uden problemer rengøres med en almindelig desinfektionsklud baseret på alkohol. Alle andre udvendige flader kan rengøres med en ren klud.

Udskiftning af batterier:

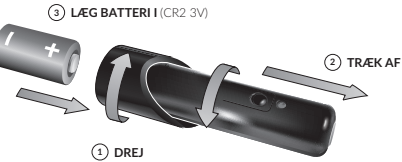

Til udskiftning af batteriet skal den beskyttende hætte og batterikappen fjernes og sættes på igen, når batteriet er lagt i (se illustrationen). Der skal foretages batteriskift, når LED-lampan blinker 3 gange, og der 3 gange udsendes et akustisk signal. Benyt ingen genopladelige batterier.

Advarsler

- Herpotherm® må ikke anvendes på
- øjne og øjenlåg
 - slimhinder
 - åbne sår, beskadiget hud (f.eks. åbne blister)

- skoldning eller forbrænding af huden
- forfrysning af huden
- small-fibre-neuropati, allodyni, hyperalgesi
- tumorer og ondartede ændringer i huden
- personer med begrænset følsomhed som følge af fysiske eller medicinske gener
- følsomme hudområder, eller hudområder med dårligt blodomløb.

I følgende tilfælde skal lægen kontaktes omgående:

- vedvarende gener ved brug af Herpotherm®.
- vorværrede gener ved brug af Herpotherm®. Produktet må ikke anvendes længere, indtil årsagen er klarlagt.

Desuden må apparatet ikke anvendes:

- umiddelbart efter påføring af salver, cremer, lotions på det pågældende område
- på fugtig hud.

Afhængig af følsomheden kan behandlingstemperaturen føles ubehagelig.

På personer med følsom hud kan der forekomme en kortvarig rødme af huden efter anvendelsen. I sjældne tilfælde kan der opstå hudirritation efter brug på personer med følsom hud.

Apparatet gør opmærksom på en funktionsfejl, når LED-lampen blinker 5 gange, og når der 5 gange udsendes et akustisk signal. Dette er muligt ved ukorrekt brug, hvis apparatet udløses og benyttes i luften i stedet for på huden. Såfremt denne fejlmelding forekommer på trods af, at anvendelsen udføres korrekt, bedes du henvende dig til producenten eller forhandleren. Stiftet må ikke anvendes, hvis den er beskadiget eller ved funktionssvigt. Beskadigede eller fugtige batterier må ikke anvendes. Beskyt stiftet mod fugt.

Opbevaringsanvisning

Produktet skal beskyttes mod direkte sollys og opbevares tørt.

Batteriet må ikke anvendes længere end den holdbarhedsdato, der står angivet. For at undgå en beskadigelse af HERPOtherm® som følge af batterisyre, der løber ud, skal batteriet tages ud, hvis produktet ikke benyttes i længere tid (brugspause).



Producent:

🏢 **mibeTec** GmbH
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 800/162 35 09
Fax: +49 (0) 34954/247 271 79

Kontakt:

Danmark: contact-denmark.mibetec@dermapharm.com

www.herpotherm.eu

Du bedes henvende dig til producenten eller forhandleren, hvis du har spørgsmål til produktet eller dets funktion.

Denne indlægsseddel blev senest godkendt: december 2018



Se brugsanvisning for yderligere information



Produktet skal beskyttes mod direkte sollys og opbevares tørt/beskyttes mod fugt.



Batch, se produktet



Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet

Tekniske data:



CR2 3V
Batteritype/-spænding



Brugerdel af type BF iht. EN 60601-1

Bruksinformasjon

HERPOtherm®

Enkelt | raskt | godt forlikelig

Medisinsk produkt til symptomatisk behandling av herpes

Indikasjon

HERPOtherm® er et patentert medisinsk produkt til lokal behandling av symptomer som følger med herpes (Herpes simplex labialis), f.eks. kløe, svie, kribling eller følelse av stram hud.

HERPOtherm® kan som regel ved bruk innen rimelig tid forhindre utbrudd av herpesblommer. Ved senere bruk kan man oppnå et lettere forløp eller tidligere heling. Første tegn på et herpesutbrudd, såkalte prodromalsymptomer, kan generelt være kløe, svie, kribling eller følelse av stram hud.

Virkemåte

HERPOtherm® virker utelukkende gjennom konsentrert varme, og dermed helt uten kjemiske stoffer. HERPOtherm® er også egnet for gravide, allergikere og barn.


Bruken av konsentrert varme (lokal hypertermi) er et fysikalsk virkningsprinsipp som er basert på kort, konsentrert varmepåvirkning på et sterkt avgrenset hudområde. Selv en lokalt begrenset varmepåføring kan være tilstrekkelig til å lindre problemer som kløe, svie, kribling eller følelse av spenning huden, hhv. ved bruk innen rimelig tid som regel forhindre en utvikling av herpesblommer.

Bruk

Det er svært enkelt å bruke Herpotharm®:

- Ta av verneheten fra apparatet. Plasser apparatet med den keramiske kontaktflaten på det aktuelle hudområdet og trykk lett.
- Betjen trykk tasten. Den keramiske kontaktflaten varmes opp til en temperatur på ca. 51 °C. Så snart denne temperaturen er nådd, tenner en LED. LED-en slukker etter at apparatet slås automatisk av etter brukstid på 3 sekunder. I tillegg lyder det et akustisk signal i begynnelsen av oppvarmingsfasen og ved behandlingens slutt.
- Sett beskyttelseskapen på apparatet igjen.

Ved varig eller gjentatt forekomst av symptomer er det mulig med en gjentatt behandling på samme hudsted. Overhold en behandlingspause på minst 2 minutter mellom de enkelte anvendelsene. Det maksimale antallet på 5 anvendelser per time på samme hudsted skal ikke overskrides.

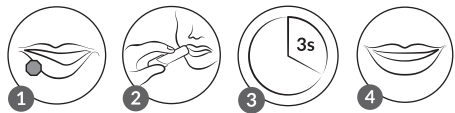

Merknader om bruk

HERPOtherm® er kun indikert til egen bruk av voksne og barn over 12 år. Bruk av barn under 12 år skal kun skje ved hjelp fra en voksen.

For å hindre overføring av virus, og av hygienegrunner, skal Herpotharm® alltid bare brukes av én person.


Herpes er en virussykdom som fremkalles av Herpes-simplex-viruset. Overføringen skjer gjennom dråpeinfeksjon, gjennom direkte kontakt eller som kontaktinfeksjon.

Infeksjon med Herpes-simplex-virus kan ikke gjøres ugjort.

Rengjøringsanvisning:

Den keramiske kontaktflaten på apparatet kan rengjøre problemfritt med en vanlig alkoholholdig desinfeksjonsklut, alle andre ytre flater for eksempel med en ren klut.

Batteribytte:

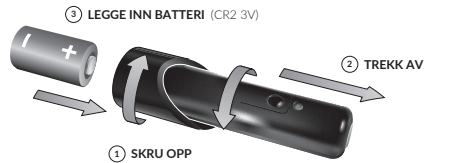

Når batteriet skal byttes, må beskyttelsesdekslet og batteridekslet tas av, og de må settes på igjen når batteriet er satt inn (se figuren).

Når det er nødvendig å bytte batteri, vises dette ved at lysdioden blinker 3 ganger, og ved at det akustiske signalet lyder 3 ganger.

Ikke bruk noen oppladbare batterier.

Advarsler

- HERPOtherm® skal ikke brukes f.eks. på
 - øyne og øyenlokk
 - slimhinner
 - åpne sår, skadet hud (f.eks. åpne blommer)
 - skålding eller forbrenning av huden
 - forfrysninger av huden
 - Small-Fibre-nevropati, allodyn, hyperalgesi

- tumorer og ondartede forandringer av huden
- personer med begrenset følsomhet på grunn av kroppslige eller medisinske problemer
- sensitive eller dårlig blodforsynte hudområder.

I følgende tilfeller skal det innhentes råd fra lege:

- Varige problemer ved bruk av HERPOtherm®.
- Problemer som forverres ved bruk av HERPOtherm®.
- Inntil en oppklaring skal du ikke fortsette å bruke produktet.

Utover dette skal apparatet ikke brukes:

- umiddelbart etter påføring av salver, kremer, lotion osv. på aktuelt sted
- på fuktig hud.

Behandlingstemperaturen kan oppleves som ubehagelig, avhengig av følsomhet.

Hos ømfintlige personer kan det oppstå kortvarig rødhet på huden etter bruk. I sjeldne tilfeller kan det oppstå hudirritasjon hos brukere med ømfintlig hudtype.

Apparatet viser en funksjonsfeil ved at lysdioden blinker 5 ganger, og ved at det akustiske signalet lyder 5 ganger. Dette er f.eks. mulig ved feilaktig bruk, der apparatet brukes i luften i stedet for på huden. Hvis denne feilmeldingen skulle oppstå gjentatte ganger til tross for riktig bruk, henvend deg til produsenten eller distributøren.

Ikke bruk apparatet ved skade eller tydelig feilfunksjon. Ikke bruk noen skadede eller fuktige batterier. Beskytt apparatet mot fuktighet.

Merknad om oppbevaring

Apparatet skal oppbevares beskyttet mot sollys og tørt. Ikke bruk apparatet utover holdbarhetsdatoen som er angitt på batteriet. For å hindre at HERPOtherm® får skader på grunn av lekket batterisyre, bør batteriet tas ut når apparatet ikke brukes i en lengre periode (brukspause).



Produsent:

🏢 **mibetec** GmbH
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 800/162 35 09
Faks: +49 (0) 34954/247 271 79

Kontakt:

Norge: contact-norway.mibetec@dermapharm.com

www.herpotharm.eu

Hvis du har spørsmål om produktet hhv. dets funksjon, henvend deg til produsenten eller distributøren.

Status for informasjonen: desember 2018



Overhold bruksinformasjonen



Apparatet skal oppbevares beskyttet mot sollys og tørt, og det må beskyttes mot fuktighet.



Parti, se apparatet



Skal ikke kastes i husholdningsavfallet

Tekniske spesifikasjoner:



CR2 3V
Batteritype/-spenning



Anvendt del av typen BF iht. EN 60601-1

Kåttøhje

HERPOtherm®

Helppo | nopea | hyvin siedetty

Lääkinnällinen laite herpesen oireenmukaiseen hoitoon

Kåttötarkoitos

HERPOtherm® on patentoitu lääkinällinen laite herpesen (Herpes simplex labialis) liittyvien oireiden, kuten kutinan, kuumuotuksen, kihelmöinnin ja kiristysentunteen paikalliseen hoitoon.

HERPOtherm®-laitteen oikea-aikainen käyttö voi yleensä estää herpesrakkuloiden muodostumisen. Myöhemmin käytettynä se voi lievittää herpesen etenemistä ja nopeuttaa sen paranemista. Herpesen puhkeamisen ennakko-oireita (nk. prodroma-oireet) voivat olla yleinen kutina, kuumuutus, kihelmöinti tai kiristuksen tunne.

Vaikutusmekanismi

Herpotharm®-laitteen vaikutus perustuu yksinomaan keskitettyyn lämpöön eikä se siten sisällä lainkaan kemiallisia vaikuttavia aineita.

Herpotharm® sopii sen vuoksi myös raskaana oleville naisille, allergikoille ja lapsille.


Keskitetyn lämmön (paikallisen hypertermian) käyttö on fysikaalinen vaikutustapa, joka perustuu siihen, että pienelle rajatulle alueelle kohdennetaan lämpöä keskitetysti lyhyen aikaa. Paikallisesti rajattu lämpökäsittely voi yleensä riittää lievittämään oireita kuten kutinaa, kuumuutusta, kihelmöintiä tai kiristuksen tunnetta sekä samalla oikea-aikaisessa käytössä estämään herpesrakkuloiden muodostumista.

Kåttö

HERPOtherm®-laitteen käyttö on todella helppoa:

- Poista laitteen suojakuori. Aseta laitteen keraaminen kosketuspinta hoidettavan ihoalueen päälle ja paina sitä kevyesti kyseistä ihoaluetta vasten.
- Paina painiketta. Keraaminen kosketuspinta lämpenee noin 51 °C: n lämpötilaan. Kun lämpötila on saavutettu, laitteen LED-valo syttyy. Kun laitetta on käytetty 3 sekuntia, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja samalla LED-valo sammuu. Kuumennusvaiheen alussa ja lopussa kuuluu myös äänimerkki.
- Aseta laitteen suojakuori takaisin paikalleen.

Oireiden jatkuessa tai uusiutuessa saman ihoalueen voi käsitellä useita kertoja. Pidä käsittelykertojen välillä vähintään 2 minuutin tauko. Saman ihokohdan saa käsitellä enintään 5 kertaa tunnissa.

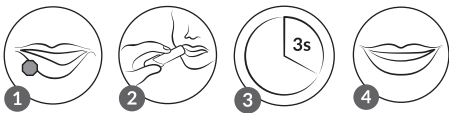

Kåttöä koskevia ohjeita

HERPOtherm® on tarkoitettu yksinomaan aikuisten ja vähintään 12-vuotiaiden lasten omatoimiseen käyttöön. Alle 12-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta ainoastaan aikuisen avulla.

Viruksen leviämisen estämiseksi ja hygieniasyistä yhtä HERPOtherm®-laitetta saa käyttää vain yksi henkilö.

Herpes on virussairaus, jonka aiheuttaa Herpes simplex-virus. Virus leviää pisaratartuntana, lähikosketuksessa tai kosketustartuntana.

Herpes simplex-viruksen tartuntaa ei voi parantaa.

Puhdistusohje:

Laitteen keraamisen kosketuspinnan voi puhdistaa ongelmitta tavanomaisella alkoholilla sisältävällä desinfiointiliinalla. Kaikki muut ulkopinnat voidaan puhdistaa esimerkiksi puhtaalla liinalla.

Pariston vaihto:



Pariston vaihtoa varten suojakuori ja paristolokero on poistettava. Sulje ne jälleen pariston vaihtamisen jälkeen (katso kuva).

Kun paristo on vaihdettava, laitteen LED-valo vilkkuu 3 kertaa ja laitteesta kuuluu 3 kertaa äänimerkki. Älä käytä akkuja tai uudelleenladattavia paristoja.

Varoitukset

HERPOtherm®-laitetta ei saa käyttää

- silmissä ja silmäluomissa
- limakalvoilla
- avohaavoissa, vahingoittuneella iholla (esim. avoimissa rakkuloissa)
- ihon palovammoissa

- ihon paleltumisissa
- ohutsäieniuropatiassa, allodynassa, hyperalgesiassa
- kasvaimissa ja pahanlaatuisissa ihon muutoksissa
- henkilöillä, joilla tuntoaisti on heikentynyt ruumiillisten tai lääketieteellisten vaivojen seurauksena
- herkillä tai sellaisilla ihoalueilla, joilla verenkierto on heikkoa.

Seuraavissa tapauksissa on hakeuduttava lääkäriin hoitoon:

- oireiden jatkuminen Herpotharm®-laitteen käytöstä huolimatta
- oireiden paheneminen Herpotharm®-laitteen käytöstä huolimatta. Älä käytä tuotetta ennen lääkärin selvitystä.

Lisäksi tuotetta ei saa käyttää:

- heti voiteiden, rasvojen tai muiden ihonhoitotuotteiden levittämisen jälkeen kyseiseen kohtaan
- kostealla iholla.

Lämpö voi joidenkin mielestä tuntua epämukavalta, mikä johtuu ihmisten erilaisesta herkkyytasosta.

Herkkäihoisille käsittely saattaa aiheuttaa ohimenevää ihopunoitusta. Harvinaisissa tapauksissa herkün ihon käsittely saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.

Kun laitteessa on toimintahäiriö, laitteen LED-valo vilkkuu 5 kertaa ja laitteesta kuuluu 5 kertaa äänimerkki. Tämä on mahdollista esim. virheellisessä käytössä, kun laite käynnistetään ja sitä käytetään ihon sijasta ilmassa. Jos tämä virheilmoitus ilmenee oikeasta käytöstä huolimatta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on ilmeinen toimintahäiriö. Älä käytä vaurioituneita tai kosteita paristoja. Suojaa laite kosteudelta.

Varastointiohjeet

Laitetta on suojattava suoralta auringonvalolta ja säilytettävä kuivassa.

Älä käytä paristoa paristoon merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Jotta paristosta valuva happo ei vahingoita HERPOtherm®-laitetta, paristo on irrotettava, jos laitetta ei käytetä (laite on poissa käytöstä) pitkään aikaan.



Valmistaja:

🏢 **mibetec** GmbH
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Saksa
Puh.: +49 (0) 800/162 35 09
Faksi: +49 (0) 34954/247 271 79

Kosketus:

Suomi: contact-finland.mibetec@dermapharm.com

www.herpotharm.eu

Ota tuotteeseen ja sen toimintaan liittyvissä kysymyksissä yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Tiedot päivitetty: joulukuuta 2018



Noudata käyttöohjetta



Laitetta on suojattava suoralta auringonvalolta ja kosteudelta sekä säilytettävä kuivassa.



Erä, katso laite



Ei saa hävittää talousjätteen mukana

Tekniset tiedot:



CR2 3V
Akkutyyppi/-jännite



BF-tyypin käyttölaite, EN 60601-1

