



Sikkerhed for tandprotesen med Protefix®.

Protefix® Fastholdelses Creme PREMIUM
Ekstra stærk med langvarende klæbekraft. Effektiv på våd protese.

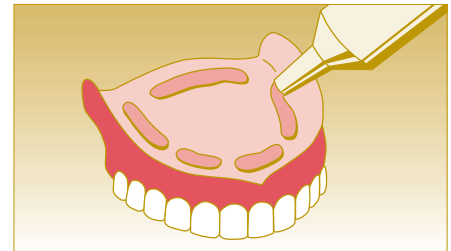

Protefix®

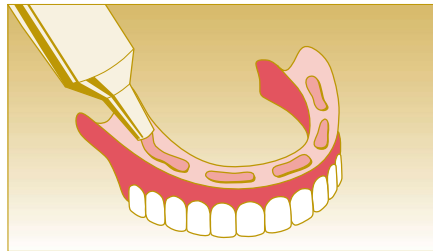

Anvendelse: Protefix® Fastholdelses Creme PREMIUM til fastholdelse af tandproteser.

Dosering og anvendelsesmåde: Dosering og anvendelsesmåde: Daglig dosis: Op til 0,8 g fastholdelses creme. Rengør protesen og mundslimhinderne for evt. klæberester, og påfør Protefix® Fastholdelses Creme PREMIUM i et tyndt lag på våd tandprotese med mellemrum (i fordybningen på over- eller underkæbeprotesen, der skal ligge an på kæben). Ved behov kan De smøre en stribe Protefix® Fastholdelses Creme PREMIUM på den bagerste del af ganedelen til overkæbeprotesen. Derefter anbringer De tandprotesen i munden og trykker den fast til kæben i nogle sekunder. Vent ca. 5 minutter, før De spiser eller drikker. De bør kun bruge Protefix® Fastholdelses Creme PREMIUM sparsomt, da overdosering kan mindske klæbekraften. For at undgå at cremen udskiller olie, bør man massere tuben godt før brug. Efter brug skal tuben lukkes grundigt, så åbningen holdes ren og tør. Det kan føre til hærdning af fastholdelsescremen, hvis der trænger fugt ind i tuben. Eventuelle klæberester kan let fjernes med en vatrondel, der er vædet med spiseolie. I visse tilfælde kan der trænge olie ud, hvilket ikke har indflydelse på cremens klæbeevne. Fjern blot olien fra protesen.

Fastholdelsescremen ændrer ikke mærkbart på bidehøjden.

Kontraindikationer: Overfølsomhed over for et af klæbemidlets komponenter. Må ikke anvendes i tilfælde af sår eller sygdom i slimhinderne.

Bivirkninger: I enkelte tilfælde kan overfølsomhedsudløste reaktioner i mundslimhinderne eller i hele kroppen ikke udelukkes. Er der mistanke om overfølsomhedsudløste reaktioner, bedes De kontakte Deres tandlæge. Alle bivirkninger i forbindelse med produktet skal rapporteres til producenten og de kompetente myndigheder.

⚠ Vær venligst opmærksom på følgende vigtige informationer:

- Brug af fastholdelsescremen bør være midlertidig.
- Få Deres tandproteses hold checket regelmæssigt.
- Brug ikke efter udløbsdatoen.
- Opbevares uden for små børns rækkevidde.

Ingredienser: Protefix® Fastholdelses Crème PREMIUM indeholder: Cellulose Gum (27 %), Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer (26 %), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Silica, Chamomilla Recutita, Tocopheryl Acetate, Commiphora Myrrha, Salvia Officinalis, Menthyl Lactate, Mentha Crispa, CI 14720.

7^X effekt

1. **Effektiv på våde tandproteser:** Kan bruges direkte på våde proteser.
2. **Ekstra stærk:** Langvarende klæbekraft
3. **Plejefaktor:** Vitamin E beskytter cellerne
4. **Krummesikker:** Effektiv forsejling forhindret krummer i at komme ind under protesen
5. Brugervenlig, takket være elastiske polstring mellem gumme og protese
6. **Urtekraft:** Med myrra, salvie og kamille.
7. **Mild friskhed:** Behagelig mild og frisk mintsma

Örugg festing fyrir gervitannur með Protefix®.

Protefix® Tannlím PREMIUM

Extra sterkt og með langa tímalega viðloðun. Má setja á rakar gervitennur.



Notkun: Protefix® Tannlím PREMIUM til notkunnar á gervitennur.

Magn og notkun: Magn og notkun: Daglegur skammtur: mest 0,8 gr af tannlími. Hreinsið gervitennurnar og slímhúðin munnsins af óheindum og Smyrjið Protefix® Tannlím PREMIUM þunnt í dýpsta hluta gervitannanna sem liggur á kjálkanum. Efir þörfum má einnig setja þunna rönd Protefix® Tannlím PREMIUM á aftasta hluta efrigóms tannanna. Síðan er tanngómurinn settur í munninn og og ýtt á í nokkar sekúndur. Bíðið síðan í 5 mínútur áður en neytt er matar eða drykkjar.

Notið ekki of mikið af Protefix® Tannlím PREMIUM, þar sem festigetan getur minnkað. Til að koma í veg fyrir vökvamyndun, kreistið túbuna vel fyrir notkun. Eftir notkun, lokið vandlega, haldið opinu hreinu og þurru, ef raki kemst í túbuna getur tannlímið harnað í túbunni. Tannlímsrestar nást auðveldlega af með bómull vættum í matarolíu.

Tannlímið breytir bithæðinni óverulega.

⚠ Vinsamlega athugið eftirfarandi:

- Geymist þar sem börn ná ekki til.
- Notkun á tannlími á að vera tímabundin.
- Látið fylgjast reglulega með setu gervitanna.
- Notist ekki eftir að varan er útrunnin.

Innihaldslýsing: Protefix® Tannlím PREMIUM inniheldur: Cellulose Gum (27 %), Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer (26 %), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Silica, Chamomilla Recutita, Tocopheryl Acetate, Commiphora Myrrha, Salvia Officinalis, Menthyl Lactate, Mentha Crispa, CI 14720.

7^X

1. **Rök viðloðun:** Má setja á blautar gervitennur.
2. **Extra sterkt:** Gervitanna festa endist lengi.
3. **Heilsusamlegt:** Vitamin E verndar frumurnar.
4. **Lokun:** Nægjanleg lokun til að mataragnir komist ekki undir gervitanna.
5. **Þægileg notkun:** virkar sem mjúkur púði milli slímhúðargóms og gervitanna.
6. **Lífræn orka:** myrra, salvía, kamilla.
7. **Milt bragð:** þægilegt milt og frískandi myntu bragð.

Fabrikant:

Queisser Pharma
GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg, Germany
www.protefix.dk

Distributør i Danmark:

MaxiPharma A/S
Søren Nymarks Vej 25
DK-8270 Højbjerg
www.maxipharma.dk
V. Nr. 223991

Medicinsk udstyr/Lækningavara

Made in Germany

