



**PURALID™
LIPOGEL**

P
U
R
A
L
I
D

P
U
R
A
L
I
D

P
U
R
A
L
I
D

P
U
R
A
L
I
D

P
U
R
A
L
I
D

P
U
R
A
L
I
D

Brugsanvisning

Puralid™ Lipogel til brug ved Blepharitis eller Blepharoconjunctivitis

Hvad er Puralid Lipogel?

Puralid Lipogel er et oftalmologisk produkt, som lindrer og rensrer øjenlåg og det periokulære område. Det indeholder liposomer, tetræsolie, A-vitamin, xanthangummi, ferulasyre, E-vitamin TPGS og Alfa-Bisabolol.

Liposomer, der dannes af et dobbeltlag af fosfolipider, er kendt for deres lindrende og blødgørende egenskaber samt indeholder virksomme ingredienser.

Tetræsolie, der udvindes fra *Melaleuca alternifolia*, er kendt for dens bakteriedræbende egenskaber.

A-vitamin styrker og beskytter huden ved at regulere epitellagets funktion. Det er også en antioxidant, som sammen med **Xanthangummi**, **ferulasyre** og **E-vitamin TPGS**, fungerer i synergi med liposomer for at beskytte øjenlågets overflade mod den oxidative påvirkning fra frie radikaler og UV-stråler.

Alfa-Bisabolol er hovedbestanddelen af æterisk kamilleolie. Den har lindrende egenskaber, reducerer rødme og inflammation, selv i tilfælde med særdels sart hud. Den er kendetegnet ved god hudtolerance.

Hvad anvendes Puralid Lipogel til?

Puralid Lipogel anvendes til at blødgøre og fjerne rester af skæl på øjenlåget ved lidelser med inflammation, såsom blepharitis eller blepharoconjunctivitis.

Hvor ofte skal jeg bruge Puralid Lipogel?

Brug produktet to gange om dagen eller mere, hvis det er anbefalet af din læge.

Sådan anvendes Puralid Lipogel

1. Vask hænderne grundigt.




2. Pres en lille mængde Puralid Lipogel på dine fingerspidser.



3. Fordel det forsigtigt på øjenlågene med cirkulære bevægelser.



4. Lad den sidde i et par minutter. Tør eventuelle flager af med en ren serviet eller vatrondel.

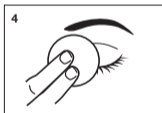

Læs hele indlægssedlen grundigt, inden du begynder at bruge dette produkt.

Gem denne indlægsseddel; du kan få brug for at læse den igen.

Hvis du har yderligere spørgsmål, så spørg din læge eller på dit apotek.

Hvis symptomerne fortsætter eller du oplever alvorlige bivirkninger, skal du kontakte din læge.

Hvad er de mulige bivirkninger?

HVIS DU BEMÆRKER NOGEN FORM FOR BIVIRKNINGER, DER IKKE ER NÆVNT PÅ DENNE INDLÆGSSEDEL, BØR DU INFORMERE DIN LÆGE ELLER DIT APOTEK.

Opbevaring af Puralid Lipogel

- Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C
- Må ikke nedfryses
- Holdes væk fra varme, fugt og direkte sollys
- Opbevares utilgængeligt for børn

Sammensætning:

Fosfolipider S80 (af NIOLip) 1%, Bisabolol 0,1%, tetræsolie 0,05%, A-vitamin palmitat 0,01%, E-vitamin TPGS 0,045%, ferulasyre 0,04%, xanthangummi 1%, EDTA dinatrium dihydrat, kaliumsorbat, natriumbenzoat, natrium hydroxymethylglycinat, citronsyremonohydrat, kaliumcitrat tribasisk monohydrat, destilleret vand.

Advarsler

- Kun til ekstern brug
- Stop behandlingen, hvis du er overfølsom
- Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der er angivet på emballagen
- Brug ikke produktet, hvis emballagen er beskadiget
- Brug produktet indenfor 8 uger fra første applikation (15 ml flaske)
- Brug produktet indenfor 24 timer fra første applikation (1 ml mini-beholder)

Præsentationer:

Kommercielt - 15 ml flaske

Prøve - strimmel med 5 mini-beholdere med 1 ml

For yderligere oplysninger bedes du kontakte din læge eller dit lokale Santen kontor på www.santen.eu



OFFHEALTH SpA, Via G. Paisiello 10, 50144 Firenze, Italien

Denne indlægsseddel blev godkendt i april 2020.

Symbol							
Symbol-betydning	Skal beskyttes mod sollys	Skal beskyttes mod fugt	Følg brugsanvisningen	Producent af medicinsk udstyr	Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C	Anvendes ikke, hvis emballagen er beskadiget	Anvendes inden

Käyttöohjeet

Puralid™-lipogeeeli luomituulehdukseen tai luomi-sidekalvotulehdukseen

Mitä Puralid-lipogeeeli on?

Puralid-lipogeeeli on valmiste, joka rauhoittaa ja puhdistaa silmäluomia ja silmänypärsysoha. Sen sisältämät aineet ovat liposomit, teepuuöljy, A-vitamiini, ksantaanikumi, ferulihappo, E-vitamiinin TPGS ja alfa-bisabololi.

Liposomit muodostuvat kaksinkertaisesta fosfolipidikerroksesta ja tunnetaan rauhoittavista ja pehmentävistä ominaisuuksistaan sekä kyvystään kuljettaa toimivat ainesosat perille.

Teepuuöljy uutetaan *Melaleuca alternifolia* -puusta ja tunnetaan mikrobeja torjuvista ominaisuuksistaan.

A-vitamiini vahvistaa ja ylläpitää ihoa sääntelemällä epiteelin toimintaa. Se on samalla antioksidantti ja vaikuttaa yhdessä **ksantaanikummin**, **ferulihapon** ja **E-vitamiinin TPGS:n** kanssa synergisesti liposomien kanssa suojaan silmäluomen pintaa vapaiden radikaalien ja UV-säteiden haittavaikutukselta.

Alfa-bisabololi on kamomillan eteerisen öljyn pääkomponentti. Sillä on rauhoittava vaikutus, ja se vähentää punoitusta ja tulehdusta myös erityisen aralla ihollla. Sille on leimallista hyvä ihon sietoisuus.

Mihin Puralid-lipogeeeliä käytetään?

Puralid-lipogeeeliä käytetään pehmentämään ja irrottamaan hiutaleimaista eritettä silmäluomesta tulehdussairauksien, kuten luomituulehduksen tai luomi-sidekalvotulehduksen, yhteydessä.

Miten usein Puralid-lipogeeeliä käytetään?


Käytä valmistetta kahdesti päivässä tai lääkärin ohjeen mukaan.

Miten Puralid-lipogeeeliä käytetään?


1. Pese kätesi huolellisesti.



2. Annotele pieni määrä Puralid-lipogeeeliä sormenpäihisi.

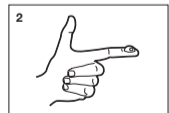

3. Levitä se varovasti silmäluomille pyörivin liikkein.

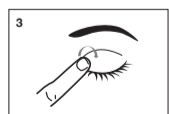

4. Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Pyyhi hiutaleet puhtaalla kasvopyyhkeellä tai vanutupolla.



Lue koko seloste huolellisesti, ennen kuin ryhdyt käyttämään valmistetta.

Säilytä tämä seloste; voit tarvita sitä uudelleen. Jos sinulle on muuta kysyttävää, tiedustele lääkäritäisi tai farmaseutilla.

016665

Jos oireet jatkuvat tai saat haitallisia sivuvaikutuksia, käänny lääkärisi puoleen.

Mitä sivuvaikutuksia voi esiintyä?

JOS HUOMAAT SIVUVAIKUTUKSIA, JOITA EI OLE MAJINITTU TÄSSÄ SELOSTEESSA, ILMOITA NIISTÄ LÄÄKÄRILLESII TAI FARMASEUTILLE.

Miten Puralid-lipogeeleä säilytetään?

- Säilytä alle 25 °C
- Ei saa jäätyä
- Varjeltava lämmöltä, kosteudelta, suoralta auringonvalolta
- Ei lasten ulottuville eikä näkyville

Koostumus:

S80-fosfolipidit (valmistaja NIOlip) 1 %, bisabololi 0,1 %, teepuuöljy 0,05 %, A-vitamiinipalmiitaatti 0,01 %, E-vitamiinin TPGS 0,045 %, ferulihappo 0,04 %, ksantaanikumi 1 %, EDTA-dinatriumdihydraatti, kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti, natriumhydroksimetyylglysinaatti, sitruunahapon monohydraatti, kaliumsitraatin kolmiemäksinen monohydraatti, tislattu vesi.

Varoitukset

- Vain ulkoiseen käyttöön
- Keskeytä hoito yliherkkyyden ilmetessä
- Älä käytä valmistetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen
- Älä käytä valmistetta, jos pakkaus on vahingoittunut
- Käytä tuote 8 viikon kuluessa ensimmäisestä annostelusta (15 ml:n pullo)
- Käytä tuote 24 tunnin kuluessa ensimmäisestä annostelusta (1 ml:n pienoissäiliö)

Pakkauskoost:

Kaupallinen – 15 ml:n pullo
Näyte – 5 kpl 1 ml:n minisäiliötä sisältävä repäisy pakkaus
Jos tarvitset lisätietoja, käänny lääkärisi tai paikallisen Santen-toimipaikan puoleen, ks. www.santen.eu



OFFHEALTH SpA, Via G. Paisiello 10, 50144 Firenze, Italia

Tämä seloste on vahvistettu huhtikuussa 2020.

Symboli							
Symbolin merkitys	Suojattava auringonvalolta	Suojattava kosteudelta	Lue käyttöohjeet	Lääkinnällisen laitteen valmistaja	Säilytä alle 25 °C	Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut	Viimeinen käyttöpäivä

Bruksanvisning

Puralid™ Lipogel för användning vid blefarit och blefarokonjunktivit

Vad är Puralid Lipogel?

Puralid Lipogel är en oftalmisk produkt som lindrar och rengör ögonlocken och det perikulära området. Den innehåller liposomer, tea tree-olja, vitamin A, xantangummi, ferulasyra, vitamin E alfa-tokoferyl-polyetylen glykol 1000-succinat och alfa-bisabolol.

Liposomer – som är utformade av ett dubbelt lager fosfolipider – är kända för sina lindrande och hudmjukgörande egenskaper, samt förmågan att effektivt tillföra verksamma ingredienser.

Tea tree-olja, som extraheras från melaleuca alternifolia, är känd för sina antimikrobiella egenskaper.

Vitamin A stärker och underhåller huden genom att reglera den epiteliska funktionen. Det är också en antioxidant som tillsammans med **xantangummi**, **ferulasyra** och **vitamin E alfa-tokoferyl-polyetylen glykol 1000-succinat** verkar i synergi med liposomer för att skydda ögonlockets yta från oxidativ påverkan av fria radikaler och UV-strålar.

Alfa-bisabolol är huvudkomponenten i eterisk kamomillolja. Den har lindrande egenskaper, minskar rodnad och inflammation, även vid speciellt känslig hud. Den karakteriseras av att tolereras väl av hud.

Vad används Puralid Lipogel för?


Puralid Lipogel används för att mjukgöra huden på ögonlocken samt avlägsna hudflagor från ögonlocket som kan ha uppkommit vid inflammation, t.ex. blefarit eller blefarokonjunktivit.

Hur ofta ska jag använda Puralid Lipogel?


Använd produkten två gånger dagligen eller oftare om det rekommenderas av din läkare.

Hur används Puralid Lipogel


1. Tvätta händerna noggrant.

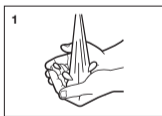

2. Tryck ut en liten mängd Puralid Lipogel på fingerspetsen.

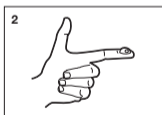

3. Sprid varsamt ut gelen på ögonlocken med cirkulära rörelser.

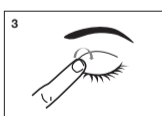

4. Låt verka i fem minuter. Torka bort eventuella flagor med en ren kompress eller en bomullsrandell.



Varningar

- Endast för utvärtes bruk
- Avbryt behandlingen om du är överkänslig
- Använd inte produkten efter utgångsdatumet som anges på förpackningen
- Använd inte produkten om förpackningen är skadad
- Använd inom 8 veckor efter att produkten har öppnats (15 ml flaska)
- Använd inom 24 timmar efter att produkten har öppnats (1 ml minibeållare)

Förpackningar:

Försäljning – 15 ml flaska
Prov – rad med 5 minibeållare med 1 ml
För ytterligare information kontakta läkare eller din lokala Santen-avdelning på www.santen.eu



OFFHEALTH SpA, Via G. Paisiello 10, 50144 Florens, Italien

Denna bipacksedel kontrollerades i april 2020.

Symbol							
Symbolen betyder	Utsätt inte för direkt solljus	Förvaras torr	Läs bruksanvisningen	Tillverkare av medicinteknisk produkt	Förvaras vid högst 25 °C	Använd inte om förpackningen är skadad	Sista användningsdatum

Santen



MARVACO OY
PELTOTIE 20,
FIN-28400 **ULVILA**, FINLAND
repro@marvaco.fi
marvaco.fi • marvaco.se

20.05.2020

Proof No. 5

Santen

Part No: 3441-01

Leaflet Puralid Lipogel

Item No: 016600,016601

Dimensions: 130x360 mm

Fonts/Size:
Helvetica Neue 7,5-16 pt

Country: DK, FI

Component code:
016665

Colors:



Black



Technical

PLEASE, CHECK THE SPOT COLORS FROM PANTONE® COLOR GUIDE.