








LEGEND:

-  CUT
-  FOLD
-  NO TEXT
-  ALCON DWG. NO. & CONTROL DATE - DIRECTION DETERMINED BY COPY.
-  NO TEXT, COLOR OR COATING
-  RESERVED FOR BAR CODE

DRAWING INFORMATION	
DWG NUMBER:	L00002 REV: 1
DWG DESC.:	INSVND, 130MMX360MM, FOLDED TO 130MM X 27MM
DWG DATE:	27/01/12
REV DESC.:	REVISED TO SHOW METRIC AND IMPERIAL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
TOLERANCE: ±1/32" /± 0.80MM

5 2 7 2



Systane™

ULTRA

komfortøjedråber

BRUGSANVISNING

da Denne brugsanvisning inneholder viktige opplysninger om produktets anvendelse og sikkerhet. Les brugsanvisningen omhyggelig, og gem den til senere bruk.

PRODUKTNAVN:
SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråber

BESKRIVELSE:
SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråber er en steril oppløsning, der inneholder polyetylen glycol 400, propylenglycol, hydroxypropylguar, sorbitol, aminometylpropanol, borsyre, kaliumklorid, natriumklorid, POLYQUAD™ (polyquaternium-1) 0,001% konserveringsmiddel og rensset vann. Øjedråberne kan inneholde saltsyre og/eller natriumhydroxid til justering af pH.

KLINISKE FORDELE:
Når SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråber anvendes som anvist, har de følgende egenskaber:

- Beskytter øjets overflate
- Lindrer symptomer på tørre øyne og forbedrer synet
- Giver midlertidig lindring av tørre øyne i forbindelse med bruk af kontaktlinser
- Smører/genfukter kontaktlinser.

FORMÅL:
SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråber er beregnet til at smøre øjets overflate og genfukte bløde kontaktlinser (herunder silikonhydrogel-kontaktlinser).

TILSIGTEDE BRUGERE/MÅLGRUPPE:
Voksne (18 år og derover), der har symptomer på tørre øyne, inklusiv kontaktlinsebrugere, og som er i stand til at forstå og følge anvisningerne og brugsanvisningen (eller har en omsorgsperson, der kan hjelpe).

INDIKATIONER (anvendelse):
SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråber gir midlertidig lindring av svie og irritasjon hos personer, der har symptomer på tørre øyne.

EGENSKAPER:
Basert på den samlede evidens fra kliniske undersøkelser, publisert klinisk litteratur og klinisk erfaring (overvåking etter markedsføring) virker SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråber etter hensikten til midlertidig lindring av svie og irritasjon hos personer, der har symptomer på tørre øyne.

ANVISNINGER:

- Omrystes grundigt før bruk.
- SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråber kan anvendes etter behov hele dagen igjennom til at lindre symptomer på tørre øyne.
- Dryp 1 - 2 dråber i øyet etter behov, og blink.
- Hvis der oppstår mild irritasjon, ubehag eller sløret syn under bruk af kontaktlinser, dryp da 1-2 dråber i øyet, og blink 2-3 gange.

KONTRAINDIKATIONER (grunde til ikke at bruke produktet):
Personer, der er allergiske over for et eller flere af indholdsstoffene i SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråber, skal ikke anvende produktet.

ADVARSLER:
For korrekt bruk af produktet er det viktig, at du følger anvisninger fra sunhedsfagligt personale samt alle instruksjoner på emballagen. Hvis du oplever vedvarende ubehag i øyet, tåreflåd, synsændringer, eller hvis øjet bliver rødt, skal du stoppe med at bruge SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråber og kontakte sunhedsfagligt personale, da problemet kan blive mere alvorligt. Dine kontaktlinser må ikke lagges i blød eller desinifiseres i SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråber på grund af risikoen for øjenirritation.

Midlertidigt sløret syn eller andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til at føre motorkøretøjet eller betjene maskiner. Hvis dit syn bliver sløret, efter du har dryppet øjnene, må du ikke føre motorkøretøjet eller betjene maskiner, før dit syn er klart igen.

FORHOLDSREGLER:

- Kun til anvendelse i øjet.
- FORSEGLING: Må ikke anvendes, hvis forseglingen er bruddet eller mangler, eller hvis hættten er beskadiget.
- Fjern den løse sikkerhedsring omkring hættten, når flasken åpnes først gang.
- Må ikke anvendes, hvis forpakningen eller flasken (den sterile emballage) er beskadiget.
- For at undgå forurening må flaskens dråbespids aldrig berøre andre overflater.
- Søg lægehjelp i tilfælde af inntagelse.
- Hvis øjedråberne ændrer farve eller bliver uklare, må de ikke anvendes.
- Skrut hættten på etter bruk.
- Flasken skal være lukket helt til, når den ikke er i bruk.
- Dette produkt inneholder en mengde af borsyre, som er sikker at anvende, når produktet anvendes i henhold til anvisningerne.
- Skal anvendes inden utløpsdatoen, som er angivet på emballagen.
- Når flasken har været åpnet, skal resterende øjedråber kasseres etter 6 måneder.
- Oppbevares mellom 15 °C og 30 °C.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

BIVIRKNINGER (mulige problemer og hva du bør gjøre):
Hvis du oplever vedvarende ubehag i øyet, økt tåreflåd, synsforandringer eller hvis øyet blir rødt, skal du avslutte bruken av SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråber og kontakte helsepersonell da problemet kan bli mer alvorlig.

Rapportering av alvorlige hendelser:
Alle alvorlige hendelser som er relatert til bruken av dette produktet, skal rapporteres til Alcon Laboratories Inc.:
Kontakt din lokale Alcon-distributør
E-post: qa.complaints@alcon.com

Alvorlige hendelser skal også rapporteres til Statens legemiddelverk.

LEVERING:
SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråber leveres i plastflasker i størrelsene 3 ml og 10 ml.

STERILE A Sterilisert ved bruk av aseptiske teknikker.

Systane™

ULTRA

komfortøjedråper

BRUGSANVISNING

no Denne brugsanvisningen inneholder viktig informasjon om produktets bruk og sikkerhet. Les brugsanvisningen grundig, og ta vare på den for fremtidig bruk.

PRODUKTNAVN:
SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråper

BESKRIVELSE:
SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråper er en steril oppløsning som inneholder polyetylen glycol 400, propylenglykol, hydroxypropylguar, sorbitol, aminometylpropanol, borsyre, kaliumklorid, natriumklorid, POLYQUAD™ (polyquaternium-1), konserveringsmiddel 0,001 % og rensset vann. Øyedråperne kan inneholde saltsyre og/eller natriumhydroksid for justering av pH.

KLINISKE FORDELE:
Når SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråper brukes som anvist:

- Beskytter øyets overflate
- Lindrer symptomer på tørre øyne og forbedrer synet
- Gir midlertidig lindring av tørre øyne som følge av bruk av kontaktlinser
- Smører/fukter kontaktlinserne.

TILTENKT FORMÅL:
SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråper er beregnet på å smøre øyets overflate og fukte myke kontaktlinser (inkludert silikonhydrogel-kontaktlinser).

TILTENKTE BRUKERE / MÅLGRUPPE:
Voksne (18 år og eldre) med symptomer på tørre øyne, inkludert brukere av kontaktlinser, som er i stand til å forstå og følge brugsanvisningen (eller som har en omsorgsperson som kan hjelpe).

INDIKASJON (Bruk):
SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråper er indisert for midlertidig lindring av svie og irritasjon hos personer som opplever symptomer på tørre øyne.

EGENSKAPER:
Basert på den totale evidens fra kliniske undersøkelser, publisert klinisk litteratur og overvåking etter markedsføring, yter SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråper som tiltenkt for midlertidig lindring av svie og irritasjon hos personer som opplever symptomer på tørre øyne.

BRUGSANVISNING:

- Ristes godt før bruk.
- SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråper kan brukes ved behov gjennom hele dagen for å lindre symptomer på tørre øyne.
- Drypp 1 - 2 dråper i øyet etter behov, og blunk.
- Hvis det oppstår lettere irritasjon, ubehag eller tåkesyn ved bruk av kontaktlinser, skal det dryppes 1-2 dråper i øyet og blunkes 2-3 ganger.

KONTRAINDIKASJONER (grunner til å unngå bruk):
Personer som er allergiske overfor noen av indholdsstoffene i SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråper, skal ikke bruke produktet.

ADVARSLER:
Det er viktig at du følger retningslinjene fra helsepersonell samt alle instruksjoner angitt på emballasjen for riktig bruk av produktet. Hvis du opplever vedvarende ubehag i øyet, økt tåreflåd, synsforandringer eller hvis øyet blir rødt, skal du avslutte bruken av SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråper og kontakte helsepersonell da problemet kan bli mer alvorlig. Ikke legg kontaktlinser i, ei heller desinifiser kontaktlinserne, med SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråper på grunn av risikoen for irritasjon i øynene.

Midlertidig uskarpt syn og andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved uskarpt syn etter drypping må du vente til synet ditt er klart før du kjører bil eller bruker maskiner.

FORHOLDSREGLER:

- Kun til bruk i øynene.
- FORSEGLING: Må ikke brukes dersom forseglingen er skadet eller mangler, eller hvis korken er skadet.
- Hvis remsen på forseglingen er løs etter at korken er skrudd av, må den fjernes før produktet tas i bruk.
- Må ikke brukes hvis emballasjen eller flasken (den sterile emballasjen) er skadet.
- For å unngå forurensning må dråpespissen aldri komme i kontakt med andre overflater.
- Ta kontakt med lege ved utilsiktet svelging.
- Dersom øyedråperne endrer farge eller blir uklare, skal de ikke brukes.
- Skrut korken på etter bruk.
- Flasken skal være godt lukket når den ikke er i bruk.
- Dette produktet inneholder borsyre i en mengde som er trygg når produktet brukes i henhold til instruksjonene.
- Brukes før utløpsdatoen som vises på emballasjen.
- Kast eventuell gjenværende øyedråper 6 måneder etter at flasken er åpnet første gang.
- Oppbevares mellom 15 °C og 30 °C.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

BIVIRKNINGER (mulige problemer og hva du bør gjøre):
Hvis du oplever vedvarende ubehag i øyet, økt tåreflåd, synsforandringer eller hvis øyet blir rødt, skal du avslutte bruken av SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråper og kontakte helsepersonell da problemet kan bli mer alvorlig.





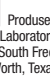
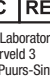

Rapportering av alvorlige hendelser:
Alle alvorlige hendelser som er relatert til bruken av dette produktet, skal rapporteres til Alcon Laboratories Inc.:
Kontakt din lokale Alcon-distributør
E-post: qa.complaints@alcon.com

Alvorlige hendelser skal også rapporteres til Statens legemiddelverk.

LEVERING:
SYSTANE™ ULTRA komfortøjedråper leveres i plastflasker i størrelsene 3 ml og 10 ml.

STERILE A Sterilisert ved bruk av aseptiske teknikker.

SYMBOLFORKLARING



Symbol	Definisjoner
	Viktig
	Se brugsanvisningen/elektronisk brugsanvisning
	Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet. Se brugsanvisningen
	Produksjonsdato
	Inneholder farlig stoff
	Et sterilt barriersystem
	Medisinsk utstyr

Producent
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA

EC REP Autorisert representant i Det europeiske fellesskap
Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgia

Distributør
Alcon Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Danmark
Tlf.: 32771133

© 2023 Alcon Inc.
www.ifu.alcon.com
Oppdatert: 2023-07

FRONT SIDE

Alcon
Print-Ready PDF

By Martinez, Alejandro

11:51 am, Aug 01, 2023

Alcon PACKAGING

ENABLE OVERPRINT PREVIEW!

FILE NAME: 300061500-0723 I SYSULT 10mL D6	ARTIST: Martinez, Alejandro	ART REV: B	DATE: 01.08.2023
SPECIAL INSTRUCTIONS: SPECIAL INSTRUCTIONS GO HERE			

VENDORS PLEASE READ BELOW

COATING = 38 – 60 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.
HIGH GLOSS COATING = No less than 75 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.
MATTE COATING = No greater than 25 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.

V-QMIS-0052809

Systane™

ULTRA

komfort-ögondroppar

BRUKSANVISNING

sv Denna bruksanvisning innehåller viktig information om produktanvändning och säkerhet. Läs bruksanvisningen noga och spara den för framtida bruk.

PRODUKTNAMN:

SYSTANE™ ULTRA komfort-ögondroppar

BESKRIVNING:

SYSTANE™ ULTRA komfort-ögondroppar är en steril lösning som innehåller polyetylen glykol 400, propylen glykol, hydroxypropylguar, sorbitol, aminometylpropanol, borsyra, kaliumklorid, natriumklorid, konserveringsmedlet POLYQUAD™ (polyquaternium-1) 0,001 % och renat vatten. Ögondropparna kan innehålla saltsyra och/eller natriumhydroxid för pH-justerings.

KLINISKA FÖRDELAR:

När SYSTANE™ ULTRA komfort-ögondroppar används enligt anvisningarna:

- Skyddar ögats yta
- Lindrar symtom på torra ögon och förbättrar synen
- Ger tillfällig lindring av symtom på torra ögon i samband med användning av kontaktlinser
- Smörjer/återfuktar kontaktlinserna.

ANVÄNDNING:

SYSTANE™ ULTRA komfort-ögondroppar är avsedda att smörja ögats yta och återfukta mjuka kontaktlinser (inklusive silikonhydrogel-kontaktlinser).

AVSEDDA ANVÄNDARE/MÅLPOPULATION:

Vuxna (18 år och äldre) med symtom på torra ögon, inklusive kontaktlinseanvändare, som kan förstå och följa bruksanvisningen (eller har en vårdgivare som kan hjälpa).

INDIKATION (användning):

SYSTANE™ ULTRA komfort-ögondroppar är avsedda för tillfällig lindring av sveda och irritation hos personer med symtom på torra ögon.

EGENSKAPER:

De sammanlagda belägen från kliniska undersökningar, publicerad klinisk litteratur och erfarenhet efter marknadsintroduktion visar att SYSTANE™ ULTRA komfort-ögondroppar har avsedd effekt för tillfällig lindring av sveda och irritation hos personer med symtom på torra ögon.

ANVISNINGAR:

- Omskakas väl före användning.
- SYSTANE™ ULTRA komfort-ögondroppar kan användas efter behov under dagen för att lindra symtom på torra ögon.
- Droppa 1–2 droppar i ögat vid behov och blinka.
- Om mindre irritation, obehag eller dimsyn uppstår när du använder kontaktlinser, droppa 1–2 droppar i ögat och blinka 2–3 gånger.

KONTRAINDIKATIONER (skäl att inte använda ögondropparna):

Personer som är allergiska mot något innehållsämne i SYSTANE™ ULTRA komfort-ögondroppar ska inte använda denna produkt.

VARNINGAR:

Det är mycket viktigt att du följer anvisningar från vårdpersonal och alla instruktioner på förpackningen om rätt användning av produkten. Om du upplever ihållande obehag i ögonen, ökat tårflöde, synförändringar eller rodnad i ögonen ska du sluta använda SYSTANE™ ULTRA komfort-ögondroppar och kontakta vårdpersonal eftersom problemet kan förvärras. Blötlägg eller desinficera inte kontaktlinserna i SYSTANE™ ULTRA komfort-ögondroppar på grund av risken för ögonirritation.

Tillfällig dimsyn eller andra synstörningar kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Om dimsyn uppstår efter att du har droppat med ögondropparna, vänta mat framföra fordon eller använda maskiner tills synen klarnar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Endast för användning i ögonen.
- FÖRSEGLAD: Använd inte om förseglingen är skadad eller saknas eller om korken är skadad.
- Om säkerhetskragen är lös när korken har avlägsnats ska den tas bort innan ögondropparna används.
- Använd inte om förpackningen eller flaskan (steril förpackning) är skadad.
- För att undvika förorening får inga ytor vidröras med flaskans droppspets.
- Uppsök läkare om ögondropparna sväls.
- Använd inte ögondropparna om de ändrar färg eller blir grumliga.
- Sätt på korken efter användning.
- Håll flaskan ordentligt stängd när den inte används.
- Denna produkt innehåller en mängd av borsyra som är ofarlig vid användning enligt anvisningarna.
- Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.
- När flaskan är öppnad ska kvarvarande ögondroppar kasseras efter 6 månader.
- Förvaras mellan 15 °C och 30 °C.
- Förvaras utom räckhåll för barn.

BIVERKNINGAR (eventuella problem och möjliga lösningar):

Om du upplever ihållande obehag i ögonen, ökat tårflöde, synförändringar eller rodnad i ögonen ska du sluta använda SYSTANE™ ULTRA komfort-ögondroppar och kontakta vårdpersonal eftersom problemet kan förvärras.

Rapportering av allvarliga incidenter:

Alla allvarliga incidenter i samband med användning av denna produkt ska rapporteras till Alcon Laboratories, Inc.:

Kontakta den lokala Alcon-distributör
E-post: qa.complaints@alcon.com

Allvarliga incidenter ska även rapporteras till Läkemedelverket.

FÖRPACKNING:

SYSTANE™ ULTRA komfort-ögondroppar levereras i plastflaskor på 3 ml och 10 ml.

STERILE A

Steriliserad med aseptiska tekniker.

ORDLISTA FÖR SYMBOLER

Symbol	Definitioner
	Viktigt
	Se bruksanvisningen/elektronisk bruksanvisning
	Får inte användas om förpackningen är skadad. Se bruksanvisningen
	Tillverkningsdatum
	Innehåller farligt ämne
	Ett sterilt barriärsystem
	Medicinteknisk produkt

Tillverkare

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA

EC REP

Auktoriserad representant i EU

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgien

Distributör

Alcon Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
2300 Köpenhamn S
Danmark
Tel: (0) 31722 6610

© 2023 Alcon Inc.

www.ifu.alcon.com

Uppdaterad: 2023-07

Alcon

CE 0123

300061500-0723

Systane™

ULTRA

voitelevat silmätipat

KÄYTTÖOHJE

ti Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa valmisteen käytöstä ja turvallisuudesta. Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhemmä käyttöä varten.

KAUPPANIIMI:

SYSTANE™ ULTRA voitelevat silmätipat

KUVAUS:

SYSTANE™ ULTRA voitelevat silmätipat on steriili liuos, jonka valmistusaineet ovat polyeteeniglykoli 400, propyleeniglykoli, hydroksiipropyyliguar, sorbitoli, aminometyylipropanoli, boorihappo, kaliumkloridi, natriumkloridi, POLYQUA™ (polykvaternium-1) 0,001 % säilöntäaine ja puhdistettu vesi. Saattaa sisältää kloorivetyhappoa ja/tai natriumhydroksidia pH:n säätelyä varten.

KLIINISET HYÖDYT:

Ohjeiden mukaan käytettynä SYSTANE™ ULTRA voitelevat silmätipat:

- Suojaavat silmän pintaa
- Lievittävät kuivusilmaisyyden oireita ja parantavat näkökykyä
- Lievittävät tilapäisesti piiloinsien käyttöön liittyvää silmien kuivuutta
- Pitävät piiloinsit kosteina.

KÄYTTÖTARKOITUS:

SYSTANE™ ULTRA voitelevat silmätipat on tarkoitettu silmän pinnan voiteluun ja pehmeiden piiloinsien (myös silikonihydrogeellinsien) kostutukseen.

KÄYTTÖTARKOITUS/KOHDERYHMÄ:

Aikuisille (yli 18-vuotiaalle), joilla on kuivusilmaisyyden oireita ja jotka ymmärtävät käyttöohjeet ja osavat noudattaa niitä (tai joiden hoitaja pystyy hoitamaan asian heidän puolestaan).

KÄYTTÖAIHEET (käyttö):

SYSTANE™ ULTRA voitelevat silmätipat on tarkoitettu silmien kirvelyn ja ärsytyksen tilapäiseen lievitykseen kuivusilmaisyyden oireita kokeville henkilöille.

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET:

Kliinisten tutkimusten kokonaisnäytön, julkaistun kliinisen kirjallisuuden ja myyntiin tulon jälkeisen seurannan perusteella SYSTANE™ ULTRA voitelevat silmätipat vastaavat käyttötarkoitustaan kirvelyn ja ärsytyksen tilapäisessä lievittämisessä henkilöillä, jotka kokevat kuivusilmaisyyden oireita.

OHJEET:

- Ravista hyvin ennen käyttöä.
- SYSTANE™ ULTRA voitelevia silmätippoja voidaan käyttää koko päivän ajan kuivusilmaisyyden oireiden lievitykseen.
- Tiputa 1 tai 2 tippaa silmään tarpeen mukaan ja räpäytä.
- Jos piiloinsien käytön aikana esiintyy lievää ärsytystä, epämukavuuden tunnetta tai näön samentumista, tiputa 1-2 tippaa hoidettavaan silmään (tai silmiin) ja räpäytä 2–3 kertaa.

KÄYTÖN VASTA-AIHEET (tilanteet, joissa tuotetta ei saa käyttää):

Älä käytä tätä valmistetta, jos olet allerginen jollekin SYSTANE™ ULTRA voitelevien silmätippojen aineosalle.

VAROITUKSET:

On erittäin tärkeää, että noudatat terveydenhuollon ammattilaisen ja tämän pakkauksen ohjeita valmisteen oikeasta käytöstä. Jos sinulla ilmenee silmissä jatkuva epämukavuuden tunnetta, voimakasta kymelehtimistä, muutoksia näkökyvyssä tai silmien punoitusta, lopeta SYSTANE™ ULTRA voitelevien silmätippojen käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, ettei tilanne pahenisi.

Älä liota tai desinfioi linsejä SYSTANE™ ULTRA voitelevilla silmätippoilla, sillä ne voivat aiheuttaa silmä-ärsytystä.

Tilapäinen näön hämärtyminen ja muut näköhäiriöt voivat heikentää kykyä ajaa autoa tai käyttää koneita. Jos silmätippojen käyttö aiheuttaa näön hämärtymistä, älä aja autoa äläkä käytä koneita ennen kuin näkö on kirkastunut.

VAROITTEET:

- Vain silmään.
- TURVASINETINTI: Älä käytä, jos turvasinetti on vahingoittunut tai puuttuu tai jos korkki on vahingoittunut.
- Kun olet poistanut korkin ja turvasinetin sisältävä irrotuskalaus on löysällä, irrota se ennen valmisteen käyttämistä.
- Älä käytä jos pakkaus tai pullo (steriili pakkaus) on vaurioitunut.
- Älä koskaan kosketa pullon tippakärjellä mihinkään, ettei valmistukseen pääse epäpuhtauksia.
- Jos valmistetta niellään, on hakeuduttava lääkäriin.
- Älä käytä liuosta, jos siinä on värimuutoksia tai se näyttää samealta.
- Sulje korkki käytön jälkeen.
- Pidä pullo tiiviisti suljettuna, kun se ei ole käytössä.
- Tuote sisältää boorihappoa määrinä, jotka ovat turvallisia, kun tuotetta käytetään pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
- Käytä ennen pakkauksen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.
- Hävität jäljellä olevat silmätipat 6 kuukauden kuluttua pullon avaamisesta.
- Säilytä 15–30 °C.
- Ei lasten ulottuville.

HAITTAVAIKUTUKSET (mahdolliset ongelmat ja ohjeet ongelmien varalle):

Jos sinulla ilmenee silmissä jatkuva epämukavuuden tunnetta, voimakasta kymelehtimistä, muutoksia näkökyvyssä tai silmien punoitusta, lopeta SYSTANE™ ULTRA voitelevien silmätippojen käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, ettei tilanne pahenisi.

Vakavia tapauksia koskevat ilmoitukset:

Tämän lääkinällisen laitteen käyttöön liittyvistä vakavista tapauksista pitää ilmoittaa Alcon Laboratories, Inc. -yhtiölle:

Ota yhteys paikalliseen Alconin jakelijaan
Sähköposti: qa.complaints@alcon.com

Nämä tapaukset on ilmoitettava myös FIMEAlle.

PAKKAUKSET:

SYSTANE™ ULTRA voitelevat silmätipat toimitetaan 3 ml ja 10 ml muovipulloissa.

STERILE A

Steriloitu aseptista tekniikkaa käyttäen.

KÄYTETTYJEN SYMBOLIEN SELITYKSET

Symboli	Symboli
	Huomio
	Lue käyttöohjeet/lue sähköiset käyttöohjeet
	Älä käytä, jos pakkaus ei ole ehjä. Lue käyttöohjeet
	Valmistuspäivämäärä
	Sisältää haitallisia aineita
	Yksinkertainen steriili estojärjestelmä
	Lääkinällinen laite

Valmistaja

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, Yhdysvallat

EC REP

Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgia

Jakelija

Alcon Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
2300 Köpenhamn S
Tanska
Puh: (0) 20340000

© 2023 Alcon Inc.

www.ifu.alcon.com

Päivitetty: 2023-07

Alcon

BACK SIDE