

			
Kunde:	Export - URSAPHARM Nordic	Lackierung:	/
Produkt:	PB HYLO NIGHT 5 G AGSA SE/NO/DK/FI/IS	Lackausparung:	<input type="checkbox"/> /
Art.-Nr.:	90.4326	Pharmacode:	1901
Format:	420 x 148 mm, 1x vorgefalzt auf 210 x 148 mm	Zusatzspezifikation:	nach Falzung Codes außen
Blindenschrift (FS):	JA / NEIN	Sonstiges:	/
Material:	Primabrite Brilliant / 40 g/qm	Kleinste Schriftgröße:	8 pt
Kleber (ET):	/	Farbtoleranz vorhanden:	JA / NEIN Nr.: FTK_UPH_
Farbe 1:	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz (1/1-fbg.)	Farbtoleranz fertigen:	JA / NEIN Nr.: FTK_UPH_
Farbe 2:	<input type="checkbox"/> /	(6-fache Ausfertigung)	
Farbe 3:	<input type="checkbox"/> /		
Farbe 4:	<input type="checkbox"/> /		
Farbe 5:	<input type="checkbox"/> /	Korrekturabzug Nr.:	3
Farbe 6:	<input type="checkbox"/> /	Erstellt:	29.04.2024 C. Wunsch
Farbe 7:	<input type="checkbox"/> /	Freigabe Kunde:	
		Endfreigabe/Gut zum Druck:	



Bruksanvisning

Läs noga igenom denna information.

Den förklarar hur du använder HYLO NIGHT® på rätt sätt.

HYLO NIGHT®

Retinopalmitat

För förbättring av tårfilmen och skydd av ögonytan.

Ögonsalva innehållande Vitamin A utan konserveringsmedel.

Vad är HYLO NIGHT®?

HYLO NIGHT® är en steril ögonsalva, som innehåller vitamin A, för användning i ögat.

Innehåll:

1 g HYLO NIGHT® innehåller 250 I.E. retionalpalmitat (vitamin A), tjockflytande paraffin, lättflytande paraffin, ullfett (lanolin) och vitt mjukt vaselin.

En tub innehåller 5 g ögonsalva.

Vad används HYLO NIGHT® för?

HYLO NIGHT® förbättrar tårfilmen och skyddar ögonytan.

HYLO NIGHT® är en särskilt mjuk och smidig ögonsalva som sprider sig mycket bra på ögats yta. Ingrediensen Vitamin A som också finns naturligt i tårvätskan gör att salvan är vältolererad och säkerställer att salvan blandar sig med den naturliga tårvätskan. Därmed lindras obehaget med svidande/brännande känsla, torra eller trötta ögon. Ögonlocken glider lätt/obehindrat över horn- och bindehinna.

När ska HYLO NIGHT® användas?

När man har symtom som brännande känsla, kliande eller torra ögon samt vid känslan av att ha något i ögat. Dessa symtom kan orsakas och påverkas av klimatanläggningar, t.ex. i bil eller flygplan, av vind, kyla, stark solstrålning, dålig luft eller tobaksrök.

Även vid ett koncentrerat seende, t.ex. vid långvarigt bildskärmsarbete, TV-tittande eller bilkörning nattetid kan dessa besvär uppträda. Om man dessutom använder kontaktlinser ökar risken för symtom/obehag ännu mer.

HYLO NIGHT® lindrar dessa symtom och bildar en skön lång-tidsverkande skyddande film på ögat. Den fettrika konsistensen hos salvan kan ge dimsyn en kort stund. Därför rekommenderas HYLO NIGHT® i första hand att användas vid sänggåendet.

(SE)

HYLO NIGHT® smörjer för att lindra obehag från ögonen och besvär med att öppna ögonen på morgonen.

Hur ska HYLO NIGHT® användas?

Undvik att tubspetsen kommer i kontakt med ögat eller huden i ansiktet. Använd endast HYLO NIGHT® om förseglingen på asken är intakt första gången du använder den (🚫).

(SE)



Luta huvudet något tillbaka, drag försiktigt ner nedre ögonlocket med ett finger.



Med den andra handen håller du tuben upprätt ovanför ögat. Tryck försiktigt ut en liten sträng salva i den ficka som bildas mellan öngogloben och nedre ögonlocket.



Stäng ögat försiktigt och blinka normalt.

Efter användning skruva på korken ordentligt.

Vilka ytterligare rekommendationer bör följas vid användning?

Om du använder HYLO NIGHT® under dagen kommer dimsyn förekomma tillfälligt på grund av konsistensen hos den fettrika salvan. Då ska du inte efter användningen av ögonläkemedlet.

Var god applicera ögonsalvan genom att trycka försiktigt på tuben utan att rulla ihop den. Utifrån den kunskap och dokumentation som finns kan barn, gravida och ammande kvinnor också använda HYLO NIGHT®.

Endast en och samma person ska behandlas med en tub HYLO NIGHT® (🚫).

I mycket sällsynta fall har det rapporterats om överkänslighetsreaktioner, såsom röda, brännande, kliande ögon och extremt tårflöde, vilket förbättrades direkt när man slutade använda HYLO NIGHT®.

Om en allvarlig incident inträffar under användningen av denna medicin-

tekniska produkt eller till följd av dess användning, vänligen rapportera det till tillverkaren (🏠).

Hur ofta och hur länge ska HYLO NIGHT® användas?

Användningsfrekvensen beror på dina personliga besvär och vanor. HYLO NIGHT® kan användas i tillägg till smörjande ögondroppar och en gång per dag före sänggående.

I de fall med svårare symtom av mycket torra ögon kan HYLO NIGHT® användas 3 gånger om dagen i varje öga. Tala med din läkare om du känner att du vill använda HYLO NIGHT® oftare.

Det finns inga begränsningar av användningstidens längd.

När ska HYLO NIGHT® inte användas?

Vid överkänslighet mot någon av ingredienserna ska HYLO NIGHT® inte användas.

HYLO NIGHT® ska inte användas medan man bär kontaktlinser. HYLO NIGHT® ska inte användas direkt efter kirurgiska ingrepp i ögat eller vid akuta skador i ögat, då det inte finns kliniska studier som stödjer detta.

Vad behöver du veta om förvaring av HYLO NIGHT®?

Förvaras inte över 25 °C (🌡️ 25 °C). HYLO NIGHT® kan användas i 6 månader efter första öppnandet. Använd inte efter utgångsdatum (📅). Förvaras utom räckhållför barn.

Kassera denna medicintekniska produkt via hushållsavfallet i enlighet med nationell lagstiftning. Denna åtgärd bidrar till att skydda miljön.

Datum för senaste uppdatering:

Mars 2021

Bruksanvisning

Läs denne information grundigt, så du anvender HYLO NIGHT® korrekt.

HYLO NIGHT®


Retinopalmitat

Til forbedring af tårefilmen og beskyttelse af øjets overflade. Øjensalve med vitamin A uden konserveringsmidler.

Hvad er HYLO NIGHT®?

HYLO NIGHT® er en steril øjensalve med vitamin A til anvendelse i øjet.

Freigabe Vertriebspartner Released Sales Partner	<input type="text" value="Name"/>	<input type="text" value="Datum/Date"/>	<input type="text" value="Unterschrift/Signature"/>
Freigabe Exportabteilung (inkl. Barcode-Nummern) Released Export Department (incl. Barcode number)	<input type="text" value="Name"/>	<input type="text" value="Datum/Date"/>	<input type="text" value="Unterschrift/Signature"/>
Freigabe Zulassung Released Regulatory Affairs	<input type="text" value="Name"/>	<input type="text" value="Datum/Date"/>	<input type="text" value="Unterschrift/Signature"/>

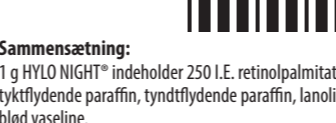

Sammensætning:

1 g HYLO NIGHT® indeholder 250 I.E. retinolpalmitat (vitamin A), tyktflydende paraffin, tyndtflydende paraffin, lanolin (uldfedt) og hvid blød vaseline.

Hver tube indeholder 5 g øjensalve.

Hvad anvendes HYLO NIGHT® til?

HYLO NIGHT® forbedrer tårefilmen og beskytter øjets overflade. HYLO NIGHT® er en ekstra blød og homogen øjensalve, som fordeles meget nemt på øjenoverfladen. Vitamin A er en naturlig bestanddel af tårefilmen, som bidrager til, at salven er veltolereret og blandes med den eksisterende tårefilm uden problemer. Dermed lindres følelsen af at have brændende, tørre eller trætte øjne, og øjenlågene glider hen over øjets bindehinde og hornhinde uden problemer.

Hvornår anvendes HYLO NIGHT®?

Det er ofte, når man udsættes for klimaanlæg/aircondition, f.eks. i bil eller fly, eller vind, kulde, stærk sol, dårlig luft eller cigaretrøg, at man får brændende, kløende eller tørre øjne eller en fornemmelse af at have ”grus” i øjenene.

Også koncentreret anvendelse af synet, hvor man ”stirrer”, for eksempel ved længerevarende arbejde ved computer, når man ser TV eller ved bilkørsel om natten, kan forårsage disse symptomer. Brug af kontaktlinser øger også risikoen for disse symptomer.

HYLO NIGHT® lindrer symptomerne og danner en behagelig beskyttelses-film på øjnene med langvarig virkning. Salvens fede konsistens giver let sløret syn. Derfor anbefales det at påføre HYLO NIGHT® ved sengetid.

HYLO NIGHT® smører for derved at lindre ubebehag i øjnene om morgenen.

Hvordan anvendes HYLO NIGHT®?

Ved anvendelse af øjensalve skal det undgåes, at tubespidsen kommer i kontakt med ansigtets hud eller med øjnene. HYLO NIGHT® må kun anvendes, hvis foldeæskens forsegling er intakt før første brug af salven (🚫).

Fjern låget, som dækker tubens spids.

Læg hovedet lidt bagover, og træk det nederste øjenlåg lidt væk fra øjet ved at bruge en finger.



Med den anden hånd holdes tuben lodret over øjet. Tryk forsigtigt på tuben, og læg én stribe salve i området mellem øje og øjenlåg.



Luk øjet forsigtigt, og blink derefter normalt.

Sæt låget på tuben igen.

Hvilke andre hensyn bør man tage?

HYLO NIGHT® giver midlertidigt sløret syn på grund af salvens fede konsistens. Efter påføring af HYLO NIGHT® bør man ikke køre bil, deltagte aktivt i trafikken, betjene maskiner eller udføre arbejde uden sikring, før synet igen er klart.

HYLO NIGHT® må ikke anvendes samtidig med øjenpræparater.

I stedet bør man påføre HYLO NIGHT® ca. 30 minutter efter brugen af øjenpræparaterne.

Når man påfører øjensalven, skal man trykke forsigtigt på tuben uden at knække den eller rulle den sammen.

Ud fra det, vi ved i dag, kan børn, gravide og ammende også bruge HYLO NIGHT®.

HYLO NIGHT® er kun beregnet til én person og må ikke deles med andre (🚫).

I meget sjældne tilfælde er der rapporteret om overfølsomhedsreaktioner såsom røde, brændende, kløende øjne eller øget tåreflåd, som forsvandt efter afbrydelse af behandlingen med HYLO NIGHT.

Skulle der opstå en alvorlig hændelse under brug af dette medicinske udstyr eller som følge af dets anvendelse, bedes det rapporteret til producenten (🏠).

Hvor ofte og hvor længe må HYLO NIGHT® anvendes?

Hvor ofte du skal anvende produktet, afhænger af dine øjenproblemer og vaner. HYLO NIGHT® kan anvendes sammen med smørende øjendråber og anvendes én gang dagligt ved sengetid.

I tilfælde af alvorlige symptomer på tørre øjne kan HYLO NIGHT® anvendes op til 3 gange dagligt i hvert øje.

Hvis du ønsker at anvende HYLO NIGHT® oftere, bør du rådføre dig med din læge.

Det findes ingen begrænsninger for, hvor længe du må anvende HYLO NIGHT®.

Hvornår må HYLO NIGHT® ikke anvendes?

Hvis man er allergisk overfor et af indholdsstofferne, må man ikke bruge HYLO NIGHT®. HYLO NIGHT® må ikke anvendes samtidig med kontakt-linser.

HYLO NIGHT® må ikke anvendes lige efter kirurgiske indgreb i øjet eller ved akutte øjenskader, da der ikke findes kliniske undersøgelser, som understøtter disse formål.

Hvad skal du vide om opbevaring af HYLO NIGHT®?

Må ikke opbevares over 25 °C (🌡️ 25 °C). HYLO NIGHT® kan anvendes i 6 måneder efter første åbning. Må ikke bruges efter udløbsdatoen (📅). HYLO NIGHT® opbevares utilgængeligt for børn.

Bortskaf dette medicinske udstyr via husholdningsaffaldet i henhold til din nationale lovgivning. Denne foranstaltning vil bidrage til at beskytte miljøet.

Dato for sidste opdatering:

Marts 2021

Bruksanvisning

Les nøye gjennom denne informasjonen.

Den vil hjelpe deg å bruke HYLO NIGHT® på riktig måte.

HYLO NIGHT®

Retinopalmitat

Til forbedring av tårefilmen og beskyttelse av øyeoverflaten. Øyesalve med vitamin A uten konserveringsmiddel.

Hva er HYLO NIGHT®?

HYLO NIGHT® er en steril øyesalve for bruk i øyet.

Innhold:

1 g HYLO NIGHT® inneholder 250 I.E retinolpalmitat (vitamin A), tykt-flytende parafin, tyntflytende parafin, ullvoks og hvit myk vaselin. En tube inneholder 5 g øyesalve.

Hva brukes HYLO NIGHT® til?

HYLO NIGHT® forbedrer tårefilmen og beskytter øyeoverflaten. HYLO NIGHT® er en ekstra myk og smidig øyesalve som fordeles svært lett på øyeoverflaten. Vitamin A er en naturlig bestanddel av tårefilmen som bidrar til at salven tåles godt og blandes med tårene uten problemer.



Dermed lindres følelsen av brennende, tørre eller trette øyne. Øyelokkene glir over hornhinne og bindevev uten problemer.

Når bør HYLO NIGHT® brukes?

Når man utsettes for klimaanlegg, f.eks. i bil eller fly, vind, kulde, sterk sol, dårlig luft eller sigarettøyk, får man ofte brennende eller irriterte øyne med følelsen av tørrhet eller “rusk” i øyet.

Også konsentrert stiring, f. eks. ved arbeid ved dataskjerm over lenger tid, TV-titting eller nattkjøring med bil kan medføre ubehag. Bruken av kontaktlinser øker risikoen for disse plagene.

HYLO NIGHT® lindrer symptomene og danner en behagelig beskyttelsesfilm på øynene med langvarig virkning. Salvens fete konsistens gir lett tåkesyn. Derfor bør HYLO NIGHT® helst påføres når man legger seg om kvelden.

HYLO NIGHT® smører for å lindre såre øyne om morgenen.

Hvordan brukes HYLO NIGHT®?

Ved bruk av øyesalve bør man forhindre at tubespissen kommer i kontakt med ansiktshud eller med øyet.

Bruk kun HYLO NIGHT® om forseglingen på esken var intakt før første gangs bruk (☞).

Skru av korken.



Bøy hodet bakover og trekk forsiktig ned nedre øyelokk ved bruk av en finger på den ene hånden.



Med den andre hånden holder du tuben rett over øyet. Press forsiktig på tuben for å få ut en liten stripe med øyesalve, som føres ned i spalten mellom øyet og øyelokket.



Lukk øynene langsomt og blunk normalt.

Etter bruk skrur korken godt på tuben.

Hvilke andre hensyn bør man ta?

HYLO NIGHT® gir midlertidig sløret syn på grunn av salvens fete konsistens. Etter påføring av HYLO NIGHT® bør man ikke kjøre bil, delta aktivt i trafikken, betjene maskiner eller utføre arbeid uten sikring, før tåkesynet har gått seg.

HYLO NIGHT® bør ikke brukes samtidig med øyemedikamenter. I slike tilfeller bør man påføre HYLO NIGHT® tidligst ca. 30 minutter etter bruken av øyemedikamenter.

Når man bruker øyesalven, skal man trykke forsiktig på tuben uten å knekke eller rulle den sammen.

Ut fra det vi vet i dag, kan barn, gravide og ammende også bruke HYLO NIGHT®.

En tube HYLO NIGHT® bør kun brukes til en og samme person (☞).

I veldig sjeldne tilfeller har overfølsomhetsreaksjoner som røde, brennende, kløende og rennende øyne blitt rapportert. Disse reaksjonene forsvant umiddelbart etter avsluttet behandling med HYLO NIGHT®. Hvis alvorlige komplikasjoner oppstår ved bruk, eller som følge av bruk av dette medisinske utstyret skal dette rapporteres til produsenten (☞).

Hvor ofte og hvor lenge bør HYLO NIGHT® brukes?

Hvor ofte du skal bruke produktet, avhenger av dine plager og vaner. HYLO NIGHT® kan brukes i tillegg til smørende øyendråper og brukes normalt én gang om dagen, før man legger seg.

Dersom problemene med tørre øyne oppleves som mer alvorlig, påføres HYLO NIGHT® vanligvis tre ganger pr. dag i hvert øye.

Hvis du ønsker å bruke HYLO NIGHT® oftere, bør du rådføre deg med din lege/optiker.

Det finnes ingen begrensninger for anvendelsestiden.

Når bør HYLO NIGHT® ikke brukes?

Om man er allergisk mot noen av ingrediensene, bør man ikke bruke HYLO NIGHT®.

HYLO NIGHT® må ikke brukes samtidig med kontaktlinser.

HYLO NIGHT® skal ikke brukes rett etter operative inngrep i øyet eller ved akutte øyeskader, da kliniske studier for slik bruk ikke er gjennomført.

Hva trenger du å vite om oppbevaring av HYLO NIGHT®?

Skal ikke oppbevares over 25 °C (☞).

HYLO NIGHT® kan brukes i 6 måneder etter første åpning.

Skal ikke brukes etter utløpsdatoen (☞).

HYLO NIGHT® oppbevares utilgjengelig for barn.

Kast dette medisinske utstyret i husholdningsavfallet i henhold til nasjonal lovgivning. Dette tiltaket vil bidra til å beskytte miljøet.

Dato for siste oppdatering:

Mars 2021

Käyttöohje

Lue nämä tiedot huolellisesti, koska ne auttavat sinua käyttämään HYLO NIGHT® -valmistetta oikealla tavalla.

HYLO NIGHT®

Retinolipalmiitaattia

Kyynelkalvon parantamiseen ja silmän pinnan suojaamiseen.

A-vitamiinia sisältävä säilöntäaineeton silmävoide.

Mitä HYLO NIGHT® on?

HYLO NIGHT® on steriili silmävoide.

Koostumus:

1 g HYLO NIGHT® -silmävoidetta sisältää 250 I.U. retinolipalmiitaattia (A vitamiini), nestemäistä parafiinia, lanoliinia ja valkovaaleliinia.

Yksi voideputki sisältää 5 g silmävoidetta.

Mihin HYLO NIGHT® -silmävoidetta käytetään?

HYLO NIGHT® vahvistaa kyynelkalvoa ja suojaa silmän pintaa.

HYLO NIGHT® on silmän pinnalle erittäin hyvin levittyvä pehmeä ja notkea silmävoide, jonka sisältämä A-vitamiini on kyynelnesteen luonnollinen ainesosa. Voide on sen vuoksi hyvin siedetty ja voidetta helppo käyttää ja se sekoittuu hyvin silmän luonnolliseen kyynelneesteeseen. Siten kirvelevien/polttavien, kuivien tai väsyneiden silmien aiheuttama epämukavuus lievittyy. Silmäluomet liukuvat sitä käytettäessä esteettä sarveis- ja sidekalvon päällä.

Milloin HYLO NIGHT® -silmävoidetta käytetään?

Ilmastointilaitteet (esim. autoissa ja lentokoneissa), tuuli, kylmyys, voimakas auringonpaiste, ilmansaasteet ja tupakansavu aiheuttavat silmissä usein kirvelyä, kutinaa ja ros kantunnetta. Oireita voi ilmetä myös pitkäaikaisen tarkkuutta vaativan pääätetyön, tv:n katselun tai pimeässä ajon jälkeen. Piilolasien käyttäjillä oireet ovat tavallisempia kuin muilla.

HYLO NIGHT® lievittää näitä oireita muodostaen silmän pinnalle pitkään pysyvän miellyttävän ja suojaavan kalvon. Voiteen rasvainen koostumus voi hieman sumentaa näköä, minkä vuoksi HYLO NIGHT® -voidetta tulee käyttää mieluiten nukkumaan mennessä. HYLO NIGHT® voitelee aamuisin ärtyneitä silmiä.

Kuinka HYLO NIGHT® -silmävoidetta käytetään?

Silmävoiteita käytettäessä on varottava, ettei voideputken kärki kosketa silmää tai kasvoja.

Freigabe Vertriebspartner Released Sales Partner	Name	Datum/Date	Unterschrift/Signature
Freigabe Exportabteilung (inkl. Barcode-Nummern) Released Export Department (incl. Barcode number)	Name	Datum/Date	Unterschrift/Signature
Freigabe Zulassung Released Regulatory Affairs	Name	Datum/Date	Unterschrift/Signature

Käytä HYLO NIGHT® -silmävoidetta vain, jos rasian sinetti on ehjä ensimmäisen kerran kun käytät sitä (☞).

Kierrä korkki auki.



Taivuta päät hieman taaksepäin, vedä sormella varovasti alaluomea alaspäin.



Pidä toisella kädellä voideputkea pystyasennossa silmän yläpuolella. Purista kevyesti voideputkesta vähän voidetta silmän ja silmäluomen väliin jäävälle alueelle.



Sulje silmä varovasti ja räpyttele sitten normaalisti.

Kierrä korkki tiukasti kiinni käytön jälkeen.

Mitä muuta on otettava huomioon valmistetta käytettäessä?

Käytettäessä HYLO NIGHT® -silmävoidetta päivisin, voiteen rasvainen koostumus saattaa tilapäisesti sumentaa näköä. Sen vuoksi on syytä välttää esimerkiksi autolla ajoa, liikkumista liikenteessä, koneiden käsittelyä ja muita tarkkuutta vaativia tehtäviä, jos mahdollisesti tarvittavaa apua ei ole saatavilla.

HYLO NIGHT® -silmävoidetta ei pidä käyttää samanaikaisesti muiden silmä lääkkeiden kanssa. HYLO NIGHT® annostellaan silmään vähintään 30 minuuttia mahdollisen muun silmä lääkkeen käytön jälkeen. Annostelet silmävoide silmään puristamalla voideputkea kevyesti. Älä väännä putkea tai kierrä sitä rullalle.

Olemassa oleviin tietoihin perustuen HYLO NIGHT® soveltuu myös lasten, raskaana olevien ja imettävien naisten käyttöön.

Yhtä HYLO NIGHT® -putkiloa tulee käyttää vain yksi henkilö (☞).

Erittäin harvinaisissa tapauksissa yliherkkyyttä kuten silmien punaisuutta, poltetta, kutinaa tai runsasta silmien vuotamista on raportoitu. Oireet loppuvat, kun HYLO NIGHT® -tuotteen käyttö lopetetaan.

Jos tämän lääkinällisen laitteen käytön aikana tai sen käytön seurauksena on sattunut vakava vaaratilanne, ilmoita siitä valmistajalle (☞).

Kuinka usein ja kuinka pitkään HYLO NIGHT® -silmävoidetta voi käyttää?

Hoitokertojen tiheys riippuu oireistasi ja tavoitastasi. HYLO NIGHT® -silmävoidetta voidaan käyttää myös voitelevien silmätippojen lisäksi ja kerran päivässä ennen nukkumaan menoa.

Erittäin vaikeissa oireissa HYLO NIGHT® -silmävoidetta annostellaan kolme kertaa päivässä molempiin silmiin. Jos haluat käyttää HYLO NIGHT® -silmävoidetta useammin, käänny lääkärisi puoleen. Hoidon kesto ei ole rajoitettu.

Milloin HYLO NIGHT® -silmävoidetta ei tule käyttää?

Älä käytä HYLO NIGHT® -silmävoidetta, jos tiedät olevasi yliherkkä valmisteen jollekin ainesosalle. Älä käytä HYLO NIGHT® -silmävoidetta samanaikaisesti piilolinssien kanssa.

HYLO NIGHT® -silmävoidetta ei tule käyttää silmäkirurgisen toimenpiteen jälkeen tai akuutin silmävamman yhteydessä, koska niistä ei ole klinisiä tutkimuksia.

Mitä HYLO NIGHT® -valmisteen säilytyksestä on tarpeen tietää?

Ei saa säilyttää yli 25 °C (☞).

Avattua HYLO NIGHT® -putkiloa voidaan käyttää 6 kuukauden ajan.

Älä käytä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (☞).

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Hävitä tämä lääkinällinen laite kotitalousjätteen mukana kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tämä toimenpide auttaa suojelemaan ympäristöä.

Viimeisimmän päivityksen päivämäärä:

Maaliskuun 2021

☞ : URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Germany

☞ : URSAPHARM NORDIC AB,
Jungmansgatan 12, 211 11 Malmö, Sweden,
Tel: +46 19 141 191, E-mail/E-post: info@ursapharm.se

Symbol / Symboli:	Förklaring / Forklaring / Selitys
	Tillverkare / Tilvirker / Produsent / Valmistaja
	Distributör / Distributør / Jakelija
MD	Medicinteknisk produkt / Medicinsk udstyr / Medisinsk utstyr / Lääkinnällinen laite
CE	CE-märkning / CE-mærkning / CE-merking / CE-merkintä
STERILE A	Steriliseras med aseptisk behandlingsteknik. / Steriliseret med/ved hjælp af aseptiske behandlingsteknikker. / Steriloitu käyttäen aseptisia käsittelytekniikoita.
	Använd inte produkten om den yttre förpackningen är skadad. / Må ikke anvendes, hvis den ytre emballasjen er skadet/ydre emballage er beskadiget. / Älä käytä jos ulkopakkaus on vaurioitunut.
LOT	LOT
	EXP [YYYY-MM]
	Läs bruksanvisningen / Læs brugsanvisning / Les bruksanvisning / Lue käyttöohjeet
	Förvara inte över 25 °C. / Må ikke oppbevares/ oppbevares over 25 °C. / Älä säilytä yli 25 °C.
	Åvsedd att användas flera gånger på en patient / Flergangsbrug til én enkelt patient / Til flergangsbruk på kun én pasient / Tarkoitettu useaan käyttökertaan yhdellä potilaalla