

**Multi-Gyn
FloraPlus
SE-FI-DK**

karo

Reason for change: Regulatory [MDR]
Correction round: v4 Date: 03-07-2024
Status: **IN PROGRESS**


KARO code: 2003807_1
Previous code: -
CMO code: -
Component type: Leaflet
Language: Swedish, Finnish, Danish
Pharma code: -

Dimensions (HxW): 340 x 150 mm
Machine drawing ID: -
Material: ?


Print colours:



Onlay:

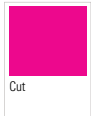

ATTENTION: If this supporting colour swatch is present it means **the artwork is still in progress** and therefore its content and technical specs are not ready for reproduction.

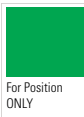

SE VÄNLIGEN LÄS DENNA INFORMATIONSBROSCHYR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER MULTI-GYN FLORAPLUS OCH HÅLL DEN TILL HANDS FÖR REFERENS.

Multi-Gyn FloraPlus lindrar symtom på vaginal svamp

- Behandlar symtom på vaginal svamp
- Effektiv och snabb lindring från symtom efter första appliceringen¹
- Lindrar brännande känsla, klåda, irritation
- Minskar vit, smulig flytning

Indikationer

Multi-Gyn FloraPlus behandlar effektivt symtom på vaginal svamp och relaterade obehag, såsom brännande känsla, klåda, irritation och vit, smulig flytning. Och det verkar snabbt – det är kliniskt bevisat att ge lindring från symtom inom 10 minuter efter första appliceringen! Multi-Gyn FloraPlus är formulerad med naturlig 2QR-komplex, mjölksyra och prebiotika. Gelen har optimalt pH-värde.

¹ Lindring inom 10 minuter efter första applicering från brännande känsla, klåda, irritation

Innehåll i förpackningen

5 singeldos tuber om 5 ml vardera + Användarmanual

Användarinstruktioner

För att lindra symtom på vaginal svamp, använd 1 singeldos tub före sänggåendet i 5 dagar i följd.

Multi-Gyn FloraPlus bör inte användas under längre än 30 dagar i följd. Detta möjliggör att den vaginala floran reglerar sig själv utan stöd.

Varning

Om dina besvär kvarstår eller återkommer, kontakta din läkare.

Multi-Gyn FloraPlus är baserad på naturliga ingredienser

Multi-Gyn FloraPlus är baserad på det naturliga 2QR-komplexet i kombination med prebiotika. Denna unika sammansättning är fri från hormoner, ingredienser av animaliskt ursprung eller parfym.

Ingredienser

2QR-komplex* (60%), Natriumbensoat, Citronsyra, Kaliumsorbat, Aqua, Mjölksyra, Glycerin, Natriumlevulinat, Natriumanisat, Natriumhydroxid, Xantangummi, Fructo-oligosackarider (FOS), Lactitol, Hydroxypropylmetylcellulosa, Kaprylyl Glykol.
*Renad från Aloe Barbadensis bladextrakt.

Allergiinformation

Allergier mot ingredienserna i Multi-Gyn FloraPlus är mycket sällsynta. Avstå från att använda Multi-Gyn FloraPlus om du är allergisk mot någon av ingredienserna.

Observera

Om du upplever en brännande och/eller stickande känsla efter applicering – oroa dig inte. Detta är normalt och går snabbt över.

Biverkningar och Kontraindikationer

Multi-Gyn FloraPlus har en optimal surhet (lågt pH) för slidan och kan minska aktiviteten av spermier, som är alkaliska (høgt pH).

Därför rekommenderar vi att du inte använder Multi-Gyn FloraPlus under din ägglossningsperiod om du önskar att bli gravid.

Tänk på att denna produkt varken behandlar eller förhindrar sexuellt överförbara sjukdomar.

Interaktion med medicin

Multi-Gyn FloraPlus har inga kända interaktioner med medicin.

Graviditet och amning

Det finns inga kända kontraindikationer för användningen av Multi-Gyn FloraPlus under graviditet och amning. Diskutera alternativen med din läkare.

Användning med kondomer och pessarer

Effekten av Multi-Gyn FloraPlus på pessarer och kondomer är okänd.

Användning med tamponger och vaginalsköljningar


Det rekommenderas inte att använda Multi-Gyn FloraPlus samtidigt med tamponger och vaginalsköljningar. De kan ta bort (del av) Multi-Gyn FloraPlus från slidan och därmed minska produktens effekt.

Förvaring

Förvara Multi-Gyn FloraPlus vid en temperatur mellan 10°C och 25°C (rumstemperatur). Förvara Multi-Gyn FloraPlus utom räckhåll för barn. Använd inte Multi-Gyn FloraPlus efter utgångsdatumet.

Hur du använder Multi-Gyn FloraPlus

Multi-Gyn FloraPlus är en prebiotisk vaginalgel som appliceras direkt i slidan. Varje tub är avsedd för en engångsapplicering. Ritningarna nedan visar hur du använder singeldos tuben. Släng tuben efter användning av hygieniska skål.

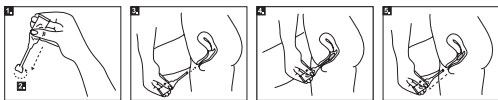

1. Skaka innehållet i tuben mot spetsen av tuben.
2. Bryt av spetsen på tuben genom att vrida den.
3. Försiktigt sätt in den tunna änden av applikatorn (av tuben) i slidan.
4. Tryck försiktigt på tuben för att applicera gelen i slidan.
5. Fortsätt trycka på tuben samtidigt som du tar bort den.

Observera: Tuben är utformad för att applicera den rekommenderade mängden gel. När den används enligt anvisningarna kan en liten mängd gel vara kvar i tuben.

Vid allvariga händelser, var vänlig informera tillverkaren och den nationella kompetenta myndigheten i det land där du bor.

Avfallshantering: Denna produkt kan kasseras med vanligt hushållsavfall. Se även efter dina lokala regler för mer information.

FI LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MULTI-GYN FLORAPLUS -GEELIN KÄYTTÖÄ JA SÄILYÄ OHJE. SAATAT TARVITA SITÄ MYÖHEMMIN.

Multi-Gyn FloraPlus lievittää emättimen hiivaoireita

- Hoitaa emättimen hiivaoireita
- Lievittää oireita tehokkaasti ja nopeasti heti ensimmäisen käyttökerran jälkeen¹
- Lievittää kirvelyä, kutinaa ja ärsytystä
- Vähentää vaaleaa, kookkareista vuotoa

Käyttötarkoitukset

Multi-Gyn FloraPlus on tehokas hoito emättimen hiivaoireisiin ja -vaivoihin, kuten kirvelyyn, kutinaan, ärsytykseen ja vaaleaan, kookkareiseen vuotoon. Tuote vaikuttaa nopeasti – oireet lievittyvät klinisesti todistetusti 10 minuutin kuluessa ensimmäisestä käyttökerrasta¹. Multi-Gyn FloraPlus sisältää luontaista 2QR-kompleksia, maitohappoa ja prebiootteja. Geelillä on optimaalinen pH-arvo.

¹ Lievittää kirvelyä, kutinaa ja ärsytystä 10 minuutin kuluessa ensimmäisestä käyttökerrasta

Pakkauksen sisältö

Viisi 5 ml:n kerta-annostuubia + käyttöohjeet

Käyttöohjeet

Emättimen hiivaoireiden lievitykseen: käytä 1 kerta-annostuubi ennen nukkumaanmenoa 5 peräkkäisen päivän ajan.

Multi-Gyn FloraPlus -geeliä saa käyttää enintään 30 peräkkäisenä päivänä. Tämä mahdollistaa emättimen bakteeritasapainon normaalin toiminnan.

Varoitukset

Jos vaivat jatkuvat tai uusiutuvat, ota yhteys lääkäriin.

Multi-Gyn FloraPlus perustuu luontaisiin ainesosiin

Multi-Gyn FloraPlus perustuu luontaisten 2QR-kompleksin ja prebioottien yhdistelmään. Ainutlaatuinen koostumus ei sisällä hormoneja, eläinperäisiä aineita eikä hajusteita.

Ainesosat

2QR-kompleksi¹ (60 %), natriumbentsoaatti, sitruunahappo, kaliumsorbaatti, vesi, maitohappo, glyseroli, natriumlevulinaatti,

natriumanisaatti, natriumhydroksidi, ksantaanikumi, frukto-oligosakkaridit (FOS), laktioli, hydroksiopropyyliimetyyliselululoosa, kaprylyylglykoli.

¹Puhdistettu *Aloe barbadensis* -kasvin lehtiututeesta

Allergiatiedot

Multi-Gyn FloraPlus -geelin ainesosat aiheuttavat erittäin harvoin allergisia reaktioita. Älä käytä Multi-Gyn FloraPlus -geeliä, jos olet allerginen jollekin geelin sisältämälle aineelle.

Huomioitavaa

Käytön jälkeen saattaa tuntua kirvelyä ja/tai kihelmöintiä. Tämä on normaalia ja menee ohi nopeasti.

Haittavaikutukset ja käytön esteet

Multi-Gyn FloraPlus -geelin happamuus on emättimelle optimaalinen (matala pH). Geeli voi vähentää siittiöiden liikkuvuutta, koska siemenneste on emäksistä (korkea pH). Sen vuoksi Multi-Gyn FloraPlus -geelin käyttöä ei suositella ovulaation aikana, jos yrität tulla raskaaksi.

Muista, että tuotteella ei voida hoitaa eikä ehkäistä sukupuolitauteja.

Yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa

Multi-Gyn FloraPlus -geelillä ei ole tunnettuja yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa.

Raskaus ja imetus

Multi-Gyn FloraPlus -geelin käytölle raskauden ja imetyksen aikana ei ole tunnettuja esteitä. Keskustele vaihtoehtoista lääkärin kanssa.

Käyttö kondomin tai pessarin kanssa

Multi-Gyn FloraPlus -geelin vaikutusta pessariin ja kondomeihin ei tunneta.

Käyttö tamponin tai emätinhuuhteen kanssa


Multi-Gyn FloraPlus -geelin käyttöä samanaikaisesti tamponien tai emätinhuuhteen kanssa ei suositella. Ne saattavat poistaa Multi-Gyn FloraPlus -geelin (tai osan siitä) emättimestä, mikä saattaa heikentää tuotteen vaikutusta.

Säilytys

Multi-Gyn FloraPlus -geeli on säilytettävä 10–25 °C:ssa (huoneenlämmössä). Säilytä Multi-Gyn FloraPlus -geeli lasten ulottumattomissa. Älä käytä Multi-Gyn FloraPlus -geeliä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Miten Multi-Gyn FloraPlus -geeliä käytetään

Multi-Gyn FloraPlus on prebioottinen emättingeeli, joka annostellaan suoraan emättimeen. Jokainen tuubi sisältää kerta-annoksen. Katso kerta-annostuubin käyttöohjeet seuraavasta kuvasarjasta. Hävitä tuubi käytön jälkeen hygieniasyistä.

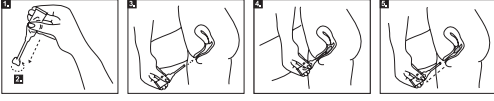

1. Ravista tuubin sisältö tuubin kärkeä kohti.
2. Väännä tuubin kärki irti.
3. Vie asettimen (tuubin) kepea pää varoen emättimeen.
4. Annostelee geeliä emättimeen puristamalla tuubia kevyesti.
5. Purista tuubia edelleen, kun poistat sen emättimestä.

Huom.: Tuubi on suunniteltu niin, että siitä saa geeliä suositellun määrän. Ohjeiden mukaan käytettäessä tuubiin voi jäädä pieni määrä geeliä.

Jos ilmaantuu vakava vaaratilanne, ilmoita asiasta valmistajalle ja asuinpaikkasi kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Hävittäminen: Tuote voidaan hävittää tavallisten talousjätteiden mukana. Lisätietoa saa paikallisista määräyksistä.

DK

LÆS DENNE INFORMATIONSBRØCHURE GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU BRUGER MULTI-GYN FLORAPLUS, OG GEM BRØCHUREN TIL SENERE BRUG.

Multi-Gyn FloraPlus lindrer symptomer på skedevamp

- Behandler symptomer på skedesvamp
- Effektiv og hurtigt lindring af symptomer straks efter første anvendelse¹
- Lindrer svie, kløe, irritation
- Reducerer forekomsten af hvidt, grynet udlåd

Indikationer

Multi-Gyn FloraPlus behandler effektivt symptomer på skedesvamp og dertilhørende ubehag, herunder svie, kløe, hudirritation og hvidt, grynet udlåd. Og produktet virker hurtigt – gelens evne til at lindre symptomerne inden for 10 minutter efter første anvendelse er klinisk dokumenteret!¹ Multi-Gyn FloraPlus indeholder et naturligt 2QR-kompleks, mælkesyre og præbiotika. Gelen har en optimal pH-værdi.

¹ Lindrer svie, kløe og irritation inden for 10 minutter efter første anvendelse

Pakkens indhold

5 tuber med en enkelt dosis på 5 ml i hver + brugsanvisning

Anvendelse

Til lindring af symptomer på skedesvamp påføres 1 hel tube før sengetid i 5 sammenhængende dage.

Multi-Gyn FloraPlus bør ikke bruges i længere tid ad gangen end 30 sammenhængende dage. Dette giver vaginalfloraen tid til at genfinde sin naturlige balance uden udefrakommende assistance.

Advarsel

Hvis smerterne fortsætter eller bliver ved med at vende tilbage, skal du søge lægehjælp.

Multi-Gyn FloraPlus er baseret på naturlige ingredienser
Multi-Gyn FloraPlus er baseret på det naturlige 2QR-kompleks i kombination med præbiotika. Denne unikke formel indeholder hverken hormoner, ingredienser af animalsk oprindelse eller parfume.

Ingredienser

2QR-kompleks* (60 %), natriumbenzoat, citronsyre, kaliumsorbat, vand, mælkesyre, glycerin, natriumlevulinat, natriumanisat, natriumhydroxid, xanthangummi, fructo-oligosachharider (FOS), lactitol, hydroxypropyl-methylcellulose, caprylyl glycol.

*Udvundet af bladekstrakt fra aloe barbadensis

Allergiinformation

Allergier over for ingredienserne i Multi-Gyn FloraPlus er meget sjældne. Du bedes undlade at bruge Multi-Gyn FloraPlus, hvis du er allergisk over for en eller flere af ingredienserne.

Bemærk venligst

Bliv ikke urolig, hvis du mærker en sviende og/eller prikkende fornemmelse efter påføring af gelen. Dette er helt normalt og går hurtigt over igen.

Bivirkninger og kontraindikationer

Multi-Gyn FloraPlus har en optimal surhedsgrad (lav pH) i forhold til den vaginale flora, men kan samtidig reducere sædcellernes aktivitetsniveau, idet sæd er basisk (høj pH-værdi). Vi fraråder derfor

brugen af Multi-Gyn FloraPlus i ægslingsperioden, hvis du ønsker at blive gravid.

Bemærk venligst, at dette produkt hverken behandler eller forebygger kønssygdomme.

Interaktion med lægemidler

Multi-Gyn FloraPlus har ingen kendte interaktioner med andre lægemidler.

Graviditet og amning

Der er ingen kendte kontraindikationer for brugen af Multi-Gyn FloraPlus under graviditet og amning. Har du spørgsmål til dette, bedes du henvende dig til din læge.

Anvendelse sammen med kondom og pessar

Hvordan Multi-Gyn FloraPlus påvirker pessar og kondom vides ikke.

Anvendelse sammen med tamponer og midler til vaginal udskylning


Vi anbefaler ikke brugen af Multi-Gyn FloraPlus sammen med tamponer og midler til vaginal udskylning. Disse kan fjerne (en del af) Multi-Gyn FloraPlus fra skeden og dermed reducere effekten af produktet.

Opbevaring

Opbevar Multi-Gyn FloraPlus ved temperaturer på mellem 10° C og 25° C (stuetemperatur). Opbevar Multi-Gyn FloraPlus uden for børns rækkevidde. Brug ikke Multi-Gyn FloraPlus efter udløbsdatoen.

Sådan anvendes Multi-Gyn FloraPlus

Multi-Gyn FloraPlus er en præbiotisk vaginalgel, der påføres skeden indvendigt. Hver tube indeholder en fuld behandlingsdosis. Tegningerne nedenfor viser dig, hvordan du anvender tuben. Af hygiejniske årsager skal tuben bortskaffes efter brug.

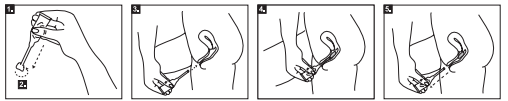

1. Ryst tuben, så indholdet bevæger sig ned mod spidsen af tuben.
2. Bræk tubespidsen af ved at dreje den rundt.
3. Før forsigtigt den tynde ende af applikatoren (dvs. af tuben) ind i skeden.
4. Klem forsigtigt på tuben for at fordele gelen i skeden.
5. Fortsæt med at klemme tuben, mens du tager den ud.

Bemærk: Tuben er designet til at afgive den anbefalede mængde gel. Ved korrekt brug kan der godt være en smule gel tilbage i tuben efterfølgende.

I tilfælde af en alvorlig uønsket hændelse som følge af brug af produktet, bedes du informere producenten og den ansvarlige myndighed i dit bopælsland.

Bortskaffelse: Dette produkt kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Se også affaldsbestemmelserne i din lokale kommune for flere informationer.

APPROVED by michel.fonville on 02-Aug-2024 10:34.

Username	Full Name	Status	Date/Time (UTC)
birgitte.blomberg	birgitte blomberg	Approved	11-Jul-2024 10:09
diana.sahyzadeh	diana sahyzadeh	Approved	11-Jul-2024 10:59
suvi.lappalainen	suvi lappalainen	Approved	16-Jul-2024 16:34
jasmine.vinnfall	Jasmine Vinnfall	Approved	23-Jul-2024 07:32
phil.hinckley	Phil Hinckley	Approved	01-Aug-2024 14:41
phil.hinckley	Phil Hinckley	Approved	01-Aug-2024 14:42
phil.hinckley	Phil Hinckley	Approved	01-Aug-2024 14:43