



Duocité B - Allée de la Mandallaz
74370 Metz-Tessy
France
Office: +33 (0)4 50 05 39 43
contact@b-ad.fr

Date: 11/05/2025
Operator: VA

ID Client: Cooper

B-ad Number: VE12984

B-ad Version: v3

Product Name: EndWarts DUO POWER Leafle
CE symbol following the manufacturer guidelines

Software: IND

Size: 210 x 450 mm

ID Number: 100CA2.CO.NO.DK.I.00

Number of Colors: 2

Countries:
DK
NO

Languages:
DK
NO

Process Colors:



PMS:

Tech. description:

Louise Kjellerup

Signature:

Date:

Last Name, First Name:

VorteFri[®]

DUO POWER

LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIG FØR BRUG. FØR EN VELYKKET BEHANDLING SKAL DU FØLGE HVERT TRIN I VEJLENINGEN. BEHOLD BRUGSANVISNINGEN DA DU KAN FÅ BEHOV FOR AT LÆSE DEN IGEN. KONTAKT LÆGEN ELLER APOTEKET HVIS DU ER I TVIVL.

Hvordan virker VorteFri DUO POWER?

VorteFri[®] DUO POWER indeholder to enheder: en frysepen ❄️ og en gelsyrepen 💧. Frysepennen er baseret på den frysemetode, der normalt anvendes af praktiserende læger, som fjerner vorten ved hurtigt at fryse vortens kerne. Gelsyrepennen indeholder en koncentreret kaustisk formulering med trichloreddikesyre, der har en eksfolierende effekt på vorten. Under behandlingen bliver huden mørkere og begynder at skalle, og der dannes en sårskorpe. Eksfoliering er en naturlig proces og fortsætter i 1 til 2 uger efter behandlingen.

Hvad er vorter?

Almindelige vorter (verruca vulgaris) og plantarvorter (verruca plantaris) vises på huden som små, ru «blomkålslignende» gevækster, forårsaget af virusinfektion med humant papillomavirus (HPV). Vorter forekommer oftest på hænder, fingre eller fødder. Plantar vorter forekommer oftest på fodsåler eller hæle og har en tendens til at være flade, hårde, og er ofte ømme/smertefulde, når de udsættes for tryk (går eller står på vorten). Vorter er meget smitsomme og påvirker tre ud af fire mennesker i løbet af deres liv. Hvis du ikke er helt sikker på, om hudforandringen er en vorte, skal du kontakte din læge, apoteket eller fodterapeut, før du bruger VorteFri[®] DUO POWER.

Det skal du vide. Før du begynder at bruge VorteFri[®] DUO POWER

⚠️ Anvend ikke VorteFri[®] DUO POWER:

- Til børn under 4 år.
- Andre steder end på hænder og fødder.
- På rask hud (hud uden vorter).
- Hvis vorten og/eller huden omkring bløder eller er åben, er irriteret, kløende, betændt eller rød.
- På åbne sår.
- På modernærker, mørke pletter på huden, fregner, eller eksfolieret hud.
- På væskefyldte blærer på huden (kaldet molluscum contagiosum/mollusker eller vandvorter) eller andre blærer og blister.
- På skønhedspletter, ligtorne, vabler eller andre hudskader, eller noget, der kan være hudkræft (melanoma).
- På vorter større end 5 mm, rådfør dig med din læge.
- Hvis pakken er beskadiget.

Vær ekstra forsigtig:

Hvis der er flere vorter tæt på hinanden (inden for 1 cm), skal du vente, indtil huden er normaliseret, før du behandler endnu en vorte (dette kan tage op til 6 uger). Hold ikke frysepenen eller gelsyrepennen tæt på dit ansigt. Brug den ikke samtidig med andre vortebehandlinger. De to penne kan bruges som beskrevet, da anvendelsen er blevet klinisk tested. Frysepenen indeholder en trykbeholder, der kan briste, hvis den opvarmes. Hold væk fra varme, varme overflader, gnister, åbne ild eller andre glødende materialer og andre antændelseskilder. Udsæt ikke produktet for temperature over 50°C. Holdes væk fra direkte sollys. Sprøjt ikke på åben ild eller anden antændelseskilde. Beholderen må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug - der er højt tryk i beholderen, og den kan ikke åbnes. Ryg ikke og hav ikke tændte cigaretter i nærheden, da produktet er ekstremt brandfarligt. Frysemidlet må ikke inhaleres. Forkert brug af produktet kan medføre ardannelse, forbrændinger, nerveskade eller blindhed. Hold ikke pennene tæt på tøj, smykker, møbler eller andre materialer, da det kan skade dem.

Rådfør dig med din læge:

Før brug ved graviditet eller amning. Hvis du er diabetiker, har dårlig blodcirkulation eller en hudsygdomme. Hvis du bruger blodfortyndende medicin. Hvis du er usikker på, om det du har er en vorte. Hvis du er overfølsom overfor nogen af indholdsstofferne. **Hvis du oplever irritation, rødme eller smerter, skal du afbryde behandlingen.** Hvis vorten ikke er forsvundet efter 3 behandlinger. Hvis du vil fjerne en vorte som er større end 5 mm.


Sådan skal du bruge VorteFri[®] DUO POWER FØR BEHANDLINGEN

Før at sikre en vellykket behandling, skal du nøje følge hvert trin i vejledningen. Hvis vejledningen ikke følges nøje, kan det føre til brandsår eller ar.

Begynd kun at behandle en anden vorte, hvis du ikke oplever nogen bivirkninger (normalt inden for 5 dage).

Hvis der er flere vorter tæt på hinanden (inden for 1 cm), skal du vente, indtil huden er normaliseret, før du behandler endnu en vorte (dette kan tage op til 6 uger).

Ved behandling af en vorte, der er dækket af hård hud, sæt området med vorten i blød i lunkent vand i 5 minutter og fjern forsigtig overliggende hud med en pincet inden behandlingen. Hvis du har svært ved at anvende behandlingen på f.eks. fodsålen, bed om hjælp.

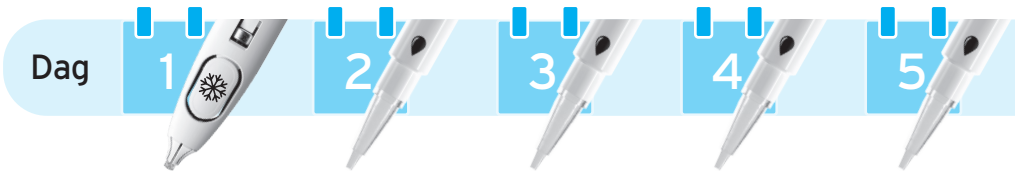

❄️ Anvend kun frysepenen på vorten. Hvis du rammer med frysepenen på den raske hud omkring vorten, kan der opstå en stikkende, mild brændende eller smertefuld fornemmelse af det behandlede område, hvilket kan forårsage hudskader. Hvis den stikkende, brændende eller smertefulde fornemmelse fortsætter indtil næste påføring, bør behandlingen afbrydes og lægehjælp søges. Huden kan midlertidigt blive hvid. Overeksponering kan forårsage skade på de øverste hudlag, hvilket resulterer i ardannelse og/eller kan føre til nerveskader. I nogle tilfælde kan der opstå en stor blære, hvilket kan være smertefuldt. I så fald skal du kontakte din læge og afbryde behandlingen.

💧 Gelen i påføringspenen er ætsende. Påfør kun en dråbe på vorten. Må ikke påføres på den raske hud. Hvis du ved et uheld kommer til at spilde gelen på den raske hud, skal du øjeblikkeligt skylle huden med rigeligt koldt vand for at mindske skader på huden. Hvis gelen ved et uheld kommer i kontakt med øjne eller slimhinder, skal du straks skylle med koldt vand og søge lægehjælp.

Behandling af voksne og børn over 12 år:

Dag 1: Anvend frysepenen én gang.
Dag 2, 3, 4, 5: Anvend gelsyrepennen 2 gange dagligt.

🚫 Behandling af børn i alderen 4-11 år:

Dag 1: Anvend frysepenen én gang.
Dag 2, 3, 4, 5: Anvend gelsyrepennen 1 gang dagligt.
Børn bør altid behandles af en voksen.

👤 VorteFri[®] DUO POWER bør kun anvendes af én person, for at opretholde den personlig hygiejne.

BEHANDLINGSVEJLEDNING

DAG 1: START MED FRYSEBEHANDLINGEN




TRIN 1 Vend toppen af pennen nedad. Tryk hårdt 5 gange på sideknapperne med logo. Metalapplikatoren vil blive fyldt med kold væske, og der dannes kondens (frostagtigt udseende).




TRIN 2 Tryk let spidsen mod vorten i maks. 20 sekunder. Tryk let spidsen mod vorten i 40 sekunder på tykkere eller forhornet hud, såsom fodsålen eller hælen. Frysebehandlingen kan give en smerte og/eller kløe og/eller prikkende følelse.

DAG 2: START MED GELSYREBEHANDLINGEN

Du kan bruge en salve, såsom vaseline, til at beskytte det omkringliggende område, før du påfører gelen.

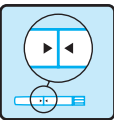

TRIN 3.1 For at Fjerne hættten: Roter hættten indtil lågets pil er på linje pilen på pennen.

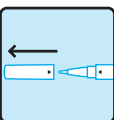

TRIN 3.2 Træk forsigtigt hættten af pennen.



TRIN 3.3 Hold pennen lodret med spidsen nedad. Når den bruges første gang, skal du prime pennen ved at lade gelen fylde spidsen. Det kan tage op til 8 omgange (klik) med uret at afgive den første dråbe gel (dette for at opbygge tilstrækkeligt tryk til at bryde den lufttætte forsegling og frigive gelen i spidsen).



TRIN 3.4 Vent, indtil gelen kommer ud af spidsen.



Ved hver anvendelse: Drej langsomt skiven på toppen af pennen med uret (ét klik).



Med 3-5 sekunder mellem hvert klik.



TRIN 3.5 Påfør forsigtigt en dråbe (ét klik) behandlingsgel, på vorten.
TRIN 3.6 Hvis gelen ved et uheld kommer i kontakt med den raske hud, skal du vaske hele området med koldt vand og sæbe for at forhindre irritation eller brændende fornemmelse i huden.



TRIN 3.7 Lad gelen tørre i 10-15 minutter, før du tager strømper, sko eller handsker på.

TRIN 3.8 Tør forsigtigt spidsen af med et stykke papir for at fjerne eventuelt overskydende gel. For at lukke pennen, sæt hættten på pennen, og låget drejes til lukket position (pilene skal ikke være på linje). Små rester af gel kan sidde tilbage på pennen. Forsigtighed anbefales ved lukning og åbning.

💧 DAG: 3, 4, 5 Gentag TRIN 3

TRIN 4 Hvis vorten, eller dele af vorten, ikke forsvinder, kan behandlingen gentages efter 7 dage. Behandlingen kan gentages 3 gange. Bortskaf de tomme penne efter de lokale regler for bortskaffelse af affald.

EFTER BEHANDLINGEN

Udsæt ikke det behandlede område for sollys, før huden er normaliseret igen. Dette kan tage 4 til 6 uger. Hyper- eller hypopigmentering af huden kan forekomme på grund af udsættelse for sollys.

- Pil ikke i den behandlede hud.
- Hold det behandlede område rent.
- Svømning og badning er tilladt.
- Beskyt om nødvendigt blisteren med et plaster, punkter den ikke.

Mulige bivirkninger

💧 Ved brug på rask hud kan der opstå stikkende, mild brændende eller smertefuld fornemmelse af det behandlede område, hvilket kan forårsage sår eller ar. Hvis du oplever en bivirkning, skal behandlingen stoppes med det samme. Vask huden med rigeligt koldt vand og sæbe for at forhindre irritation. Komplikationer er sjældne. Det er yderst sjældent, at der opstår et permanent mærke eller ar. Dette kan for det meste være relateret til en abnormitet såsom heldbredslielse eller infektion. Hvis dette er tilfældet, skal du afbryde behandlingen og kontakte din læge.

❄️ I nogle tilfælde kan der komme en stor vabel, som kan være smertefuld. I sådan et tilfælde kontakt lægen og afbryd behandlingen.

Indhold

Frysepen: (frysemiddel:) 1,1-difluorethan, propan, isopentan.
Gelsyrepen: (kaustisk gel:) Vand, Trichloreddikesyre, Carbopol.

Hvordan skal VorteFri DUO POWER opbevares?

👤 Opbevares utilgængeligt for børn. Produktet skal opbevares ved stuetemperatur (15-25°C) på et tørt og mørkt sted. Ikke i nærheden af varmekilder eller direkte sollys.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er trykt på pennene og på æsken. Holdbarhed efter åbning er 6 måneder.

Hvordan rapporterer du hændelser/bivirkninger?

Rapportér en formodet bivirkning (uønsket hændelse) til Conaxess Trade Denmark +45 44 57 07 57.

En pakning indeholder

1 frysepen indeholdende 10 ML ^e frysemiddel.
1 gelsyrepen indeholdende 1,5 g kaustisk gel.
Brugsanvisning vedlagt.

Bortskaf pennene efter behandling. Rester skal bortskaffes som farligt affald.

	Material	Forkortelser	Indsamlingsvejledning
Frysepen	Polypropylen, aluminium, metal	C/PP 90	Tjek dine lokale kommunale retningslinjer
Gelsyrepen	Polypropylen	PP 5	
Yderboks	Pap	PAP 21	
Brugsanvisning	Papir	PAP 22	
Aluminumsbeholder stadig med indhold/udløbet: Bortkaffes som farligt affald			

🏠 Conaxess Trade Denmark A/S
Stamholmen 151, 4. sal
2650 Hvidovre

❄️	Frysebehandling	👤🚫	Opbevares utilgængeligt for børn.
💧	Gelsyrebehandling	15°C🔥	Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C)
⚠️	Advarsel	🏭	Producent
🕒	Fra 4 år	🏠	Distributør
👤	En bruger - flere behandlinger	MD	Medicinskudstyr
⚡	Ætsende	LOT	LOT
🔥	Brandbart	⌚	EXP
🚫	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget	👤	Hænder & fødder
3	Overhold kravene i ADD	☀️	Holdes væk fra direkte sollys
📖	Læs brugsanvisningen		
CE CE-mærkning med det firecifrede identifikationsnummer for det bemyndigede organ, der er involveret i overensstemmelsesvurderingsproceduren. CE-mærkningen er producentens erklæring om, at produktet opfylder kravene i den gældende europæiske forordning.			



LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK. FOR EN VELLYKKET BEHANDLING MÅ DU FØLGE HVERT TRINN I VEILEDNINGEN. TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN, DU KAN FÅ BEHOV FOR Å LESE DEN IGJEN. KONTAKT LEGE ELLER APOTEK HVIS DU ER I TVIL.

Hvordan fungerer VorteFri® DUO POWER?
VorteFri® DUO POWER inneholder to enheter: en frysepenn ❄️ og en gelsypenn 💧. Frysepennen er basert på frysemetoden som vanligvis brukes av allmennleger, som fjerner vorten ved å raskt fryse kjernen av vorten. Gelsypennen inneholder en konsentrert etsende formulering med trikloreddiksyre, som har en eksfolierende effekt på vorten. Under behandlingen blir huden mørkere og begynner å flasse, og det dannes sårskorpe. Eksfoliering er en naturlig prosess og fortsetter i 1 til 2 uker etter behandling.

Hva er vorter?
Vanlige vorter (verruca vulgaris) og plantarvorter (verruca plantaris) vises på huden som små, grove «blomkållignende» utvekster, forårsaket av virusinfeksjonen med humant papillomavirus (HPV). Vanlige vorter forekommer oftest på hender, fingre eller føtter. Plantarvorter forekommer oftest på fotsålene eller hælene og har en tendens til å være flate og harde. Plantarvorter er ofte ømme/smertefulle når de utsettes for trykk (å gå eller stå på vorten). Vorter er svært smittsomt og rammer tre av fire personer i løpet av livet. Hvis du ikke er helt sikker på om hudtilstanden er en vorte, kontakt lege, apotek eller en fotterapeut før du bruker VorteFri® DUO POWER.


Dette bør du vite før du begynner å bruke VorteFri® DUO POWER

- ⚠️ Bruk ikke VorteFri® DUO POWER:**
- På barn under 4 år.
 - På andre steder enn hender og føtter.
 - På sunn hud (hud uten vorter).
 - Hvis vorten og/eller huden omkring blør, er irritert, klør eller viser tegn til inflammasjon som rødhet eller hevelse.
 - På åpne sår.
 - På skintags, føflekker, mørke flekker på huden, fregner, vannvorter (molluscum), seboreisk keratise (verruca seborrheica) eller eksfoliert hud.
 - På væskefylte blemmer på huden, også kjent som vannvorter eller andre blemmer eller sår.
 - På fødselsmerker, nylige vaskulariserte og uregelmessige vekster, eller noe som kan være hudkreft (melanom).
 - Ved vorter større enn 5 mm, kontakt legen.
 - Hvis pakken er skadet.

Vær ekstra forsiktig:
Hvis det er flere vorter tett sammen (innen 1 cm), bør du vente til huden har normalisert seg før du behandler en annen vorte (dette kan ta opptil 6 uker). Ikke hold frysepennen og gelsypennen inntil ansiktet ditt.
Bruk ikke samtidig med andre vortebehandlinger.
De to pennene kan brukes som beskrevet, da bruken er klinisk testet.
Frysepennen inneholder en trykkbeholder som kan sprekke ved oppvarming. Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild eller andre glødende materialer og andre antennelseskilder.
Ikke utsett produktet for temperaturer over 50°C. Beskytt mot sollys.
Ikke spray på åpen ild eller annen antennelseskilde. Ikke punkter eller brenn beholderen, selv etter bruk - det er høyt trykk i beholderen og den kan ikke åpnes. Ikke røyk eller ha antente sigaretter i nærheten da produktet er ekstremt brannfarlig.
Ikke inhaler kjølemediet.
Feil bruk av produktet kan føre til arrdannelse, brannskader, nerveskade eller blindhet.
Ikke oppbevar pennene i nærheten av klær, smykker, møbler eller andre materialer da dette kan skade dem.

Rådfør deg med legen din:
Før bruk under graviditet eller amming.
Hvis du er diabetiker, har dårlig blodsirkulasjon, en hudsykdom eller hvis du bruker blodfortynnende medikamenter. Hvis du er usikker på om du har en vorte. Hvis du er overfølsom overfor noen av ingrediensene.
Hvis du opplever irritasjon, rødhet eller smerte, avbryt behandlingen.
Hvis vorten ikke har forsvunnet etter 3 behandlinger. Hvis du ønsker å fjerne en vorte som er større enn 5 mm.

Slik bruker du VorteFri® DUO POWER FØR BEHANDLING
Før å sikre vellykket behandling må du følge hvert trinn i bruksanvisningen nøye. Hvis veiledningen ikke følges nøye, kan det føre til brannskader eller arr.
Begynn kun å behandle en annen vorte hvis du ikke opplever bivirkninger (vanligvis innen 5 dager). Hvis det er flere vorter tett sammen (innen 1 cm), bør du vente til huden har normalisert seg før du behandler en annen vorte (dette kan ta opptil 6 uker). Når du behandler en vorte dekket av hard hud, bløtlegg området med vorten i lunken vann i 5 minutter og fjern forsiktig den overliggende huden med en pinsett før behandling. Hvis du har problemer med å anvende behandlingen på f.eks. fotsålen, be om hjelp.

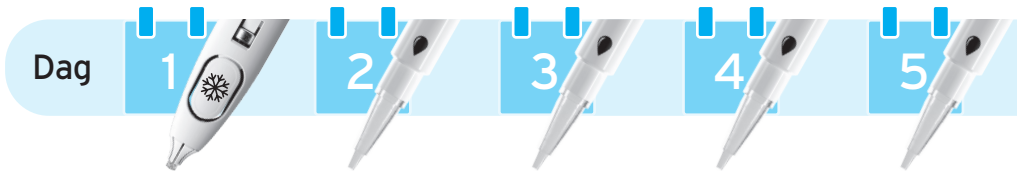

❄️ Bruk frysepennen kun på vorten. Hvis du treffer frisk omkringliggende hud med frysepennen, kan det oppstå en stikkende, mild brennende eller smertefull følelse i det berørte området, noe som kan forårsake hudskade. Hvis den stikkende, brennende eller smertefulle følelsen fortsetter til neste påføring, bør behandlingen avbrytes og lege kontaktes. Huden kan midlertidig bli hvit. Overeksponering kan forårsake skade på de øvre hudlagene, noe som resulterer i arrdannelse og/eller kan føre til nerveskader. I noen tilfeller kan det utvikles en stor blemme, noe som kan være smertefullt. I dette tilfellet bør du kontakte legen din og avbryte behandlingen.

💧 Gelen i gelsypennen er etsende. Påfør kun én dråpe på vorten. Ikke påfør på frisk hud. Hvis du ved et uhell søler gelen på frisk hud, skyll umiddelbart med rikelig kaldt vann for å redusere skader på huden. Hvis gelen ved et uhell kommer i kontakt med øyne eller slimhinner, skyll umiddelbart med kaldt vann og oppsøk legehjelp.

Behandling av voksne og barn over 12 år:
Dag 1: Bruk frysepennen én gang.
Dag 2, 3, 4, 5: Bruk gelsypennen to ganger daglig.

🚫👶 **Behandling av barn i alderen 4-11 år:**
Dag 1: Bruk frysepennen én gang.
Dag 2, 3, 4, 5: Bruk gelsypennen én gang daglig.
Barn skal alltid behandles av en voksen.

👤 **VorteFri® DUO POWER bør kun brukes av én person for å opprettholde personlig hygiene.**

BRUKSVEILEDNING

DAG 1: START MED FRYSEBEHANDLINGEN

TRINN 1 Vend tuppen av pennen ned. Trykk hardt på sideknappen med logo 5 ganger. Metallapplikatoren vil bli fylt med kald væske og kondens vil dannes (frostaktig utseende).

TRINN 2 Trykk spissen lett mot vorten i maks. 20 sekunder. Trykk spissen lett mot vorten i 40 sekunder på tykkere eller hard hud, som fotsålen eller hælen. Frysebehandlingen kan gi en sårhet og/eller kløe og/eller prikkende følelse.

DAG 2: START MED GELSYREBEHANDLINGEN
Du kan bruke en salve, for eksempel vaselin, for å beskytte området rundt før du påfører gelen.

TRINN 3.1 Fjern hetten ved å rotere hetten til pilen er på linje med pilen på pennen.

TRINN 3.2 Trekk forsiktig hetten av pennen.

TRINN 3.3 Hold pennen vertikalt med spissen vendt ned. Når den skal brukes for første gang, klargjør du pennen ved å la gelen fylle spissen. Det kan ta opptil 8 hele omdreininger med klokken å dispense den første dråpen gel (dette er for å bygge opp nok trykk til å bryte den lufttette forseglingen og slippe gelen inn i spissen).

TRINN 3.4 Vent til gelen kommer ut av spissen.

Før hver bruk: Vri sakte skiven på toppen av pennen med klokken (ett klikk).

Med 3-5 sekunder mellom hvert klikk.

TRINN 3.5 Påfør forsiktig en dråpe (ett klikk) behandlingsgel på vorten.
TRINN 3.6 Hvis gelen ved et uhell kommer i kontakt med frisk hud, vask hele området med kaldt vann og såpe for å unngå irritasjon eller brennende følelse på den friske huden.

TRINN 3.7 La gelen tørke i 10-15 minutter før du tar på sokker, sko eller hansker.

TRINN 3.8 Tørk forsiktig av spissen med et stykke papir for å fjerne overflødig gel. For å lukke pennen settes hetten på pennen og skrues til lukket posisjon (pilene er ikke på linje). Små mengder gel kan bli igjen på pennen. Forsiktighet anbefales ved lukking og åpning.

💧 **DAG: 3, 4, 5 Gjenta TRINN 3**

TRINN 4 Hvis vorten ikke forsvinner helt, kan behandlingen gjentas etter 7 dager. Behandlingen kan gjentas 3 ganger. Kast pennene etter behandling i henhold til instruksjonene for avfallshåndtering.

ETTER BEHANDLINGEN
Ikke utsett det behandlede området for sollys før huden har normalisert seg. Dette kan ta 4 til 6 uker. Hyper- eller hypopigmentering av huden kan oppstå på grunn av eksponering for sollys.
- Ikke berør eller klø den behandlede huden;
- Hold det behandlede området rent.
- Svømming og bading er tillatt;
- Beskytt om nødvendig blemmen med et plaster; ikke punkter den.

MULIGE BIVIRKNINGER

💧 Når behandlingen brukes på frisk hud, kan det oppstå en stikkende, mild brennende eller smertefull følelse i det behandlede området, noe som kan forårsake sår eller arr. Hvis du opplever en bivirkning, bør behandlingen avbrytes umiddelbart. Vask huden godt med kaldt vann og såpe for å unngå irritasjon. Komplikasjoner er sjeldne. Det er ekstremt sjelden at et permanent merke eller arr oppstår. Dette kan for det meste være relatert til en abnormitet som en helsetilstand eller infeksjon. Hvis dette er tilfelle, avbryt behandlingen og kontakt legen din.

❄️ I noen tilfeller kan det utvikles en stor blemme, noe som kan være smertefullt. I et slikt tilfelle, kontakt legen din og avbryt behandlingen.

Hva er ingrediensene?
Frysebehandling: 1,1-difluoretan, propan, isopentan. Syrebehandlingspenn: (etsende gel:) Vann, Trikloreddiksyre, Carbopol.

Hvordan bør VorteFri DUO POWER oppbevares?
👤📦 Oppbevares utilgjengelig for barn. Produktet bør oppbevares i romtemperatur (15-25°C) på et tørt og mørkt sted. Unngå varmekilder og direkte sollys.

Må ikke brukes etter utløpsdatoen som står trykket på pennene og esken. Holdbarhet etter åpning er 6 måneder.

Hvordan rapporterer du hendelser/bivirkninger?
Rapportér en eventuell bivirkning (uønsket hendelse) til Conaxess Trade Norge +47 96 00 31 51

Én pakke inneholder
1 frysepenn inneholder 10 ML ^e frysemiddel.
1 gelsypenn inneholder 1,5 g kaustisk gel.
Bruksanvisning vedlagt.

Kast pennene etter behandling.
Rester skal kastes som farlig avfall.

	Materiell	Forkortelser	Innsamlingsveiledning
Frysepenn	Polypropylen, aluminium, metal	C/PP 90	Sjekk dine lokale retningslinjer
Gelsypenn	Polypropylen	PP 5	
Emballasje	Papp	PAP 21	
Bruksanvisning	Papir	PAP 22	
Aluminiumsbeholder med innhold/utløpt: Kastes som farlig avfall			

📦 Conaxess Trade Norge
Karenslyst Allé 2,
0278 Oslo

❄️ Frysebehandling	👤📦 Oppbevares utilgjengelig for barn.
💧 Gelsyrebehandling	15°C 25°C Oppbevares i romtemperatur (15-25°C)
⚠️ Advarsel	🏭 Produsent
🚫👶 Fra 4 år	📦 Distributør
👤🔄 Én bruker - flere behandlinger	MD Medisinsk utstyr
🔹 Etsende	LOT LOT
🔥 Brannfarlig	⌚ EXP
🚫📦 Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet.	👤👣 Hender og føtter
3 Overhold kravene til ADD	💡 Holdes unna direkte sollys
📖 Les bruksanvisningen	
CE CE-merking med det firesifrede identifikasjonsnummeret til det meldte organet som er involvert i prosedyren for samsvarsvurdering. CE-merkingen er produsentens erklæring om at produktet oppfyller kravene i gjeldende europeiske regelverk.	