

**Mabs Supportive Braces
Tennis Elbow Black
SE-NO-DK-FI**

karo

Reason for change: Relaunch of Mabs Support
Correction date: 20-02-2025
Artworker: Sissan

Proof version
3

Print version
X


COM code: COM-7734-01
Artwork No: 2005009_1
Previous Artwork No: -
SKU No: 1003316
CMO: -
CMO code: -
EAN No: -
Pharma No: -
Component Type: Leaflet
Language: English, Swedish, Norwegian, Danish, Finnish

Dimensions (WxH): 210 x 297 mm
Material: -
Machine Drawing ID: -
Font: -
Minimum Point Size: -
Print Process: Offset printing

Print Colours: Colourmatch to Pantone Matching System.




Technical (Non Printing).

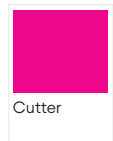

OVERPRINT PREVIEW **NO**

Karo Healthcare AB owns this artwork and is not responsible for any changes made by the CMO/printing house. Changes must be communicated with us and we will supply a new print PDF file. Both CMO and printing house are responsible for the printed end result to match the intended colours.

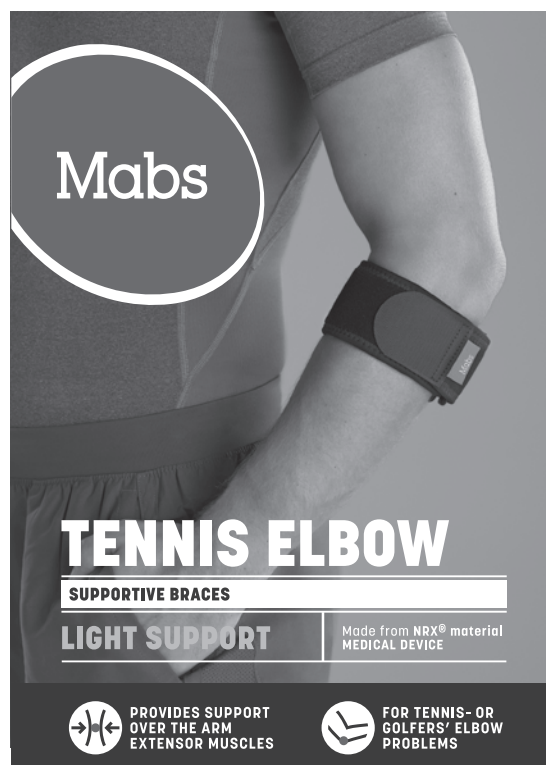

UK General information

This Mabs product has been designed to support your elbow, follow the instructions below. Always consult a doctor or therapist if your problem has not improved within a week. If you suffer from poor circulation, reduced sensibility, or diabetes, be observant on pressure marks or local swelling when you use the product. If your condition gets worse or if you experience discomfort when using the product, discontinue the use and contact a doctor. Follow the washing instructions on the product label and package. If you have material allergies, always use caution the first time wearing the product and be observant of skin reactions. You can find the material composition on the product label.

Instruction

This brace has been designed for tennis- or golfers' elbow problems. The pad in the brace should be placed over the highest position of the muscle, approx. 5 cm below the elbow crease. If you have tennis elbow, the pad should be placed on the upper part of the arm. If you have golfers' elbow, place the pad on the lower side of the arm. Open the Velcro strap. Position the pad and then adjust the strap.

For more information, visit www.mabs.se

SE Allmän information

Denna Mabs produkt har designats för att stödja din armbåge, följ instruktionerna nedan. Konsultera alltid en läkare eller terapeut om ditt problem inte blir bättre inom en vecka. Om du lider av dålig cirkulation, nedsatt sensibilitet eller diabetes, var uppmärksam på tryckmärken eller lokal svullnad när du använder produkten. Skulle ditt besvär försämrats eller om du upplever obehag när du använder produkten skall du avbryta användningen och kontakta en läkare. Följ tvättanvisningen på etiketten på produkten. Om du har materialallergi, var alltid försiktig första gången du använder produkten och var uppmärksam på hudreaktioner. Du kan hitta materialkompositionen på produktens etikett.

Instruktioner

Detta skydd är designat för tennisarmbåge eller golfarmbåge. Dynan ska placeras över den högsta delen av muskeln, cirka 5 centimeter nedanför armveckets böjning. Om du har tennisarmbåge ska dynan placeras på den övre delen av armen. Om du har golfarmbåge, placera dynan på den nedre delen av armen. Öppna kardborrbandet. Placera dynan och justera sedan remmen.

För mer information besök www.mabs.se



mabscompression.com

NO Generell informasjon

Dette Mabs produktet er utviklet for å støtte albuen din, følg instruksjonene nedenfor. Rådfør deg alltid med lege eller terapeut hvis problemet ikke har bedret seg i løpet av en uke. Hvis du lider av dårlig sirkulasjon, nedsatt følsomhet eller diabetes, må du være oppmerksom på trykkmerker eller lokal hevelse når du bruker produktet. Hvis tilstanden din forverres eller hvis du opplever ubehag når du bruker produktet, må du slutte å bruke det og oppsøke lege. Følg vaskeanvisningene på produktetiketten. Hvis du har materialallergi, må du alltid være forsiktig første gang du bruker produktet og være oppmerksom på hudreaksjoner. Du finner materialsammensetningen på produktetiketten.

Instruksjoner for bruk

Denne beskyttelsen er utviklet for tennisalbue eller golfalbue. Puten skal plasseres over den høyeste delen av muskelen, ca. 5 cm under bøyningen av armfolden. Hvis du har tennisalbue, skal puten plasseres på den øvre delen av armen. Hvis du har golfalbue, plasserer du puten på den nedre delen av armen. Åpne borrelåsstroppen. Plasser puten og juster deretter stroppen.

For mer informasjon, besøk www.mabs.se

DK Generel information

Dette Mabs produkt er designet til at støtte din albue, følg instruktionerne nedenfor. Kontakt altid en læge eller terapeut, hvis dit problem ikke er blevet bedre inden for en uge. Hvis du lider af dårligt blodomløb, nedsat følsomhed eller diabetes, skal du være opmærksom på trykmærker eller lokal hævelse, når du bruger produktet. Hvis din tilstand forværres, eller hvis du oplever ubehag, når du bruger produktet, skal du stoppe med at bruge det og kontakte en læge. Følg vaskeanvisningerne på produktets etiket og emballage. Hvis du har materialeallergi, skal du altid være forsigtig første gang, du bruger produktet, og være opmærksom på hudreaktioner. Du kan finde materialesammensætningen på produktetiketten.

Instruktion

Denne bandage er designet til problemer med tennis- eller golfalbuer. Pudnen i bøjlen skal placeres over musklens højeste punkt, ca. 5 cm nedenfor albuefolden. Hvis du har tennisalbue, skal pudnen placeres på den øverste del af armen. Hvis du har golfalbue, skal pudnen placeres på undersiden af armen. Åbn velcroremmen, placer pudnen, og juster derefter stroppen.

For mere information, besøg www.mabscare.dk

FI Yleistä tietoa

Tämä Mabs-tuote on suunniteltu tukemaan kyynärpäätäsi. Noudata alla olevia ohjeita. Jos kärsit huonosta verenkierrasta, heikentyneestä tuntoherkkyydestä tai diabeteksestä, tarkkaile painejälkiä tai paikallista turvotusta tuotetta käytettäessä. Jos vaivasi pahenee tai koet epämukavuutta tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin. Noudata tuotteen etiketissä olevia pesuohjeita. Jos olet allerginen tuotteen materiaaleille, ole varovainen ensimmäisellä käyttökerralla ja tarkkaile iho-oireita. Materiaalikoostumus löytyy tuotteen etiketistä.

Ohjeet

Tämä tuki on suunniteltu tenniskyynärpään tai golfkyynärpään hoitoon. Tyynyn sijoitus tulee olla lihaksen korkeimman kohdan päällä, noin 5 senttimetriä kyynärtaipeen alapuolella. Jos sinulla on tenniskyynärpää, sijoita tyyny käsivarren yläosaan. Jos taas kyseessä on golfkyynärpää, sijoita tyyny käsivarren alaosaan. Avaa tarranauha. Aseta tyyny paikoilleen ja säädä sen jälkeen hihna sopivaksi.

Lisätietoja on osoitteessa www.mabs.se

Tennis Elbow Black - Universal size (20–32 cm)



APPROVED by haresh.ladha on 07-Mar-2025 09:41.

Username	Full Name	Status	Date/Time (UTC)
tove.nylén	tove nylén	Approved	24-Feb-2025 12:42
louise.wiklund	louise wiklund	Approved	24-Feb-2025 14:30
louise.wiklund	louise wiklund	Approved	24-Feb-2025 14:31
louise.wiklund	louise wiklund	Approved	24-Feb-2025 14:32
birgitte.blomberg	birgitte blomberg	Approved	26-Feb-2025 19:46
louise.wiklund	louise wiklund	Approved	07-Mar-2025 08:14
louise.wiklund	louise wiklund	Approved	07-Mar-2025 08:15