

**Mabs Supportive Braces  
Universal Wrist Black  
SE-NO-DK-FI**

**karo**

Reason for change: Relaunch of Mabs Support  
Correction date: 05-03-2025  
Artworker: Sissan

Proof version  
**5**

Print version  
**X**


COM code: COM-7756-01  
Artwork No: 2005003\_1  
Previous Artwork No: -  
SKU No: 1003312  
CMO: -  
CMO code: -  
EAN No: -  
Pharma No: -  
Component Type: Leaflet  
Language: English, Swedish, Norwegian, Danish, Finnish

Dimensions (WxHxD): 210 x 297 mm  
Material: -  
Machine Drawing ID: -  
Font: -  
Minimum Point Size: -  
Print Process: Offset printing

Print Colours: Colourmatch to Pantone Matching System.



Technical (Non Printing).

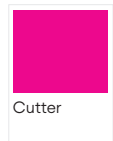

**OVERPRINT PREVIEW** **NO**

Karo Healthcare AB owns this artwork and is not responsible for any changes made by the CMO/printing house. Changes must be communicated with us and we will supply a new print PDF file. Both CMO and printing house are responsible for the printed end result to match the intended colours.



### **UK General information**

This Mabs product has been designed to support your wrist, follow the instructions below. Always consult a doctor or therapist if your problem has not improved within a week. If you suffer from poor circulation, reduced sensibility, or diabetes, be observant on pressure marks or local swelling when you use the product. If your condition gets worse or if you experience discomfort when using the product, discontinue the use and contact a doctor. Follow the washing instructions on the product label and package. If you have material allergies, always use caution the first time wearing the product and be observant of skin reactions. You can find the material composition on the product label.

### **Instruction**

This model can be used for both left or right by switching the splint position in the pocket. The default splint position from the factory is for the right hand. To switch the splint, remove it from the pocket and insert it into the other pocket. Open all the hook straps, slide it over the wrist and position the thumb in the hole. Close the two straps over the main body, attaching the front hook last. If needed, trim the length of the hook straps.

**For more information, visit [www.mabs.se](http://www.mabs.se)**

### **SE Allmän information**

Denna Mabs produkt har designats för att stödja din handled, följ instruktionerna nedan. Konsultera alltid en läkare eller terapeut om ditt problem inte blir bättre inom en vecka. Om du lider av dålig cirkulation, nedsatt sensibilitet eller diabetes, var uppmärksam på tryckmärken eller lokal svullnad när du använder produkten. Skulle ditt besvär försämrats eller om du upplever obehag när du använder produkten skall du avbryta användningen och kontakta en läkare. Följ tvättanvisningen på etiketten på produkten. Om du har materialallergi, var alltid försiktig första gången du använder produkten och var uppmärksam på hudreaktioner. Du kan hitta materialkompositionen på produktens etikett.

### **Instruktioner**

Denna modell kan användas för både vänster eller höger genom att byta skenans läge i fickan. Standard skenposition från fabriken är för höger hand. För att byta skenan, ta bort den från fickan och för in den i andra fickan. Öppna alla kardborrband, skjut den över handleden och placera tummen i hålet. Stäng de två remmarna över huvudkroppen, fäst det främre kardborrfästet sist. Om det behövs, klipp av längden på kardborrbandet.

**För mer information besök [www.mabs.se](http://www.mabs.se)**



## **NO Generell informasjon**

Dette Mabs produktet er utviklet for å støtte håndleddet ditt, følg instruksjonene nedenfor. Rådfør deg alltid med lege eller terapeut hvis problemet ikke har bedret seg i løpet av en uke. Hvis du lider av dårlig sirkulasjon, nedsatt følsomhet eller diabetes, må du være oppmerksom på trykkmerker eller lokal hevelse når du bruker produktet. Hvis tilstanden din forverres eller hvis du opplever ubehag når du bruker produktet, må du slutte å bruke det og oppsøke lege. Følg vaskeanvisningene på produktetiketten. Hvis du har materialallergi, må du alltid være forsiktig første gang du bruker produktet og være oppmerksom på hudreaksjoner. Du finner materialsammensetningen på produktetiketten.

### **Instruksjoner for bruk**

Denne modellen kan brukes for både venstre og høyre hånd ved å endre skinnens posisjon i lommen Standard-innstillingen fra fabrikken er for høyre hånd. For å endre skinnen tar du den ut av lommen og setter den inn i den andre lommen. Åpne alle borrelåsstroppene, skyv den over håndleddet og plasser tommelen i hullet. Lukk de to stroppene over hoveddelen, og fest den fremre borrelåsen sist. Klipp av lengden på borrelåsen om nødvendig.

**For mer informasjon, besøk [www.mabs.se](http://www.mabs.se)**

## **DK Generel information**

Dette Mabs-produkt er designet til at støtte dit håndled, følg instruktionerne nedenfor. Kontakt altid en læge eller terapeut, hvis dit problem ikke er blevet bedre inden for en uge. Hvis du lider af dårligt blodomløb, nedsat følsomhed eller diabetes, skal du være opmærksom på trykmærker eller lokal hævelse, når du bruger produktet. Hvis din tilstand forværres, eller hvis du oplever ubehag, når du bruger produktet, skal du stoppe med at bruge det og kontakte en læge. Følg vaskeanvisningerne på produktets etiket og emballage. Hvis du har materialeallergi, skal du altid være forsigtig første gang, du bruger produktet, og være opmærksom på hudreaktioner. Du kan finde materialesammensætningen på produktetiketten.

### **Instruktion**

Denne model kan bruges til både venstre og højre hånd ved at skifte skinnens position i lommen Standardpositionen for skinnen fra fabrikken er til højre hånd. For at skifte skinnen skal du tage den ud af lommen og sætte den ind i den anden lomme. Åbn alle krogstroppe, skub den over håndleddet, og placer tommelfingeren i hullet. Luk de to stropper over hoveddelen, og fastgør den forreste krog til sidst. Trim om nødvendigt længden på krogstroppe.

**For mere information, besøg [www.mabscare.dk](http://www.mabscare.dk)**

## **FI Yleistä tietoa**

Tämä Mabs-tuote on suunniteltu tukemaan rannettasi. Noudata alla olevia ohjeita. Jos kärsit huonosta verenkierrasta, heikentyneestä tuntoherkkydestä tai diabeteksestä, tarkkaile painejälkiä tai paikallista turvotusta tuotetta käyttäessäsi. Jos vaivasi pahenee tai koet epämukavuutta tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin. Noudata tuotteen etiketissä olevia pesuohjeita. Jos olet allerginen tuotteen materiaaleille, ole varovainen ensimmäisellä käyttökerralla ja tarkkaile iho-oireita. Materiaalikoostumus löytyy tuotteen etiketistä.

### **Ohjeet**

Tätä mallia voidaan käyttää sekä oikeassa että vasemmassa kädessä vaihtamalla lastan paikka taskussa. Tehtaalta tuleva vakioasento on oikeaa kättä varten. Vaihtaaksesi lastan, poista se taskusta ja aseta toiseen taskuun. Avaa kaikki tarranauhat, vedä tuki ranteen yli ja aseta peukalo aukkoon. Sulje kaksi hihnää pääosan yli ja kiinnitä lopuksi etummainen tarrakiinnike. Leikkaa tarranauhan pituutta sopivaksi tarvittaessa.

**Lisätietoja on osoitteessa [www.mabs.se](http://www.mabs.se)**

### **Universal Wrist Support Left (12-21 cm)**



### **Universal Wrist Support Right (12-21 cm)**



APPROVED by haresh.ladha on 07-Mar-2025 10:06.

| Username       | Full Name      | Status   | Date/Time (UTC)   |
|----------------|----------------|----------|-------------------|
| louise.wiklund | louise wiklund | Approved | 07-Mar-2025 09:34 |
| louise.wiklund | louise wiklund | Approved | 07-Mar-2025 09:35 |
| louise.wiklund | louise wiklund | Approved | 07-Mar-2025 09:48 |
| louise.wiklund | louise wiklund | Approved | 07-Mar-2025 09:50 |
| louise.wiklund | louise wiklund | Approved | 07-Mar-2025 09:52 |
| louise.wiklund | louise wiklund | Approved | 07-Mar-2025 09:52 |
| louise.wiklund | louise wiklund | Approved | 07-Mar-2025 09:53 |