



Þetta produkt er medicinsk udstyr.

Les indlægsedlen før brug.

Gem indlægsedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

1. ANVENDELSE

THEALOZ GEL anvendes som beskyttende, fugtende og smørende behandling af moderat til meget tørre øjne.

Til anvendelse i øjet.

2. MÅ ANVENDES AF

- Voksne,
• Børn: Forældre eller omsorgspersoner bør dryppe barnets øjne,
• Gravidt og ammende kvinder, baseret på den nuværende viden.

3. SÆRLIGE ADVARSLER

Brug ikke THEALOZ GEL, hvis du er allergisk over for et eller flere af indholdsstofferne (se produktbeskrivelsen).

4. PRODUKTBEKRÆFTELSE

THEALOZ GEL er en øjengel, der indeholder trehalose (3 %), hyaluronsyre (som natriumhyaluronat 0,15 %), carbomer (Carbopol 974P, 0,25 %), sorbitol, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

THEALOZ GEL er en steril, hypotonisk, pH-neutral gel uden fosfat.

THEALOZ GEL leveres i en herdosisflaske, der er nem at bruge.

Dette konserveringsglas system opretholder gelens sterilitet og forhindrer bakteriel kontaminering under hele behandlingen.

THEALOZ GEL er skånsom for øjnene, da den ikke indeholder konserveringsmidler. Det beskytter øjenvævet og forårsager ingen reaktioner hos brugere, der er følsomme over for konserveringsmidler.

5. EGENSKABER

THEALOZ GEL anbefales ved ubehag, svien, fremmedlegemefølelse i øjet eller irritation i øjet. Disse symptomer kan skyldes:

- ydre faktorer som f.eks. blæst, røg, luftforurening, støv, solrige eller koldt vejrforhold, tør varme, klimaændring, flyrejser, længerevarende arbejde foran en computerskærm,
• øjenkirurgi, f.eks. refraktiv kirurgi og katarakt operation (operation for grå stær).

THEALOZ GEL giver en behagelig følelse i øjnene, langvarig lindring af symptomer på tørre øjne. Det bidrager til at reparere skader på øjets overflade og lindrer ubehag på øjenoverfladen efter øjengrebetorer.

Hovedindredielse i THEALOZ GEL er trehalose, hyaluronsyre og carbomer (Carbopol 974P).

Trehalose er et naturligt forekommende stof i mange planter og dyr, som lever i ekstremt tørre miljøer. Stoffet har beskyttende og fugtgivende egenskaber.

Hyaluronsyre, der findes naturligt i det menneskelige øje, har vandbindende egenskaber, der fugter og smører øjets overflade. Hyaluronsyren gør, at THEALOZ GEL hæfter bedre til øjets overflade, hvilket sikrer langvarig lindring og hurtigere ophealing af øjets overflade.

Carbomer gør, at THEALOZ GEL bliver længere på øjets overflade, hvilket giver langvarig lindring af symptomer på tørre øjne.

Den særlige kombination af trehalose, hyaluronsyre og carbomer i THEALOZ GEL giver langvarig beskyttelse, fugtning og smørelse af øjets overflade.

6. GENERELLE ANBEFALINGER

Dosering: 1 dråbe i hvert øje, 1-4 gange dagligt.

Da det er en gel, er THEALOZ GEL særligt velegnet til brug om aftenen, lige inden sengetid.

Der kræves ingen særlig træning for at bruge THEALOZ GEL.

Hvis du bruger kontaktlinser, skal de altid fjernes, før du bruger THEALOZ GEL.

Vent mindst 30 minutter efter brug, før du sætter linserne i igen.

Vask hænderne grundigt før brug.

Brug ikke noget værktøj til at åbne flasken.

Når du bruger produktet for første gang, skal du først øve dig i at bruge dråbeflasken ved at klemme langsomt på den, så der kommer en dråbe væk fra øjet.

Når du er sikker på, at du kan give en dråbe ad gangen, skal du vælge den stilling, som du synes er mest behagelig at give dråberne i (du kan sidde ned, ligge på ryggen eller stå foran et spejl).

7. FORSIGTHEDSREGLER

Produktet kan anvendes flere gange til en enkelt patient.

Det ikke flasker med andre for at undgå krydstamning.

Kontrolér, at emballagen er intakt før første brug; brug kun flasken, hvis den er uåbnet og ubeskadiget. Kontrolér, at den forseglede ring på hæften ikke er brudt.

For at undgå kontaminering må flaskens spids ikke komme i kontakt med nogen overflade.

Kontakt lægen, hvis dine symptomer bliver værre eller ikke forbedres.

8. ADVARSLER

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke injiceres eller indlægges.

Efter brug må du ikke køre bil eller bruge maskiner, hvis dit syn er støret. Vent et par minutter, indtil dit syn er tydeligt igen.

Vent mindst 15 minutter mellem brug af to forskellige øjenprodukter. THEALOZ GEL skal bruges sidst.

THEALOZ GEL må ikke fortyndes eller blandes med andre opløsningsmidler.

Hvis flasken udsættes for lavt atmosfærisk tryk efter åbning, kan den blive utæt.

9. BIVIRKNINGER

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret med lignende præparater: kløende øjne, sløret syn, allergiske reaktioner (såsom overfølsomhed, hævelse af øjenlåg, udslæt), udfald fra øjnene, sjældent risiko for øjenirritation, øjensmerter og rødme i øjnene.

Når du bruger øjengel, kan du kortvarigt opleve irriterings symptomer såsom brændende eller stikkende følelse og fremmedlegemefølelse i øjet.

Hvis du oplever bivirkninger eller unormal fornemmelse efter brug af dette produkt, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet og indberette det til den lokale distributør, til fremstilleren eller til sundhedsmyndighederne (se kontaktoplysninger i slutningen af denne indlægsæddel).

10. OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE

Opbevares ved temperaturer mellem 2 °C og 25 °C.

Må ikke udsættes for direkte sollys eller fugt.

Anvendes inden for 3 måneder efter første åbning. Derefter skal al overskydende produkt bortskaffes på forsvarlig vis. Brug

ikke produktet efter den udløbsdato, der står på flasken og yderkartonen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned, såfremt emballagen er intakt og er blevet opbevaret korrekt.

Produktet skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer (flasken bortskaffes som husholdningsaffald, yderkartonen og indlægsedlen kan genanvendes).

Dato for seneste ændring og version af indlægsæddel: Ver. 3 – 06/2025

Fremstillere: Laboratoires Théa

12 rue Louis Braille

CS317 Clamont-Ferrand Cedex 2 Frankrig

www.laboratoires-thea.com

Afsnittet «Contact us»

Distributør: Théa Nordic AB

Försundavägs Allé 1

169 70 Solna, Sverige

www.thea-nordic.com

Sundhedsmyndigheder: Lægemiddelstyrelsen, Axel Hejres Gade 1, 2300 København

Tel. +45 72 22 74 00 - Fax +45 44 88 95 99

e-post: med-udstyr@tdna.dk,

den@tdna.dk - www.medicinskudstyr.dk

© 2024, Laboratoires Théa, Alle rettigheder forbeholdes.

THEALOZ® er et varemærke tilhørende Laboratoires Théa.

CE 0459



Þessi vara er lækningsgæði.

Lesið leiðbeiningarnar fyrir notkun.

Geymið þennan fylgisséðil. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

1. ÁBENDINGAR

THEALOZ GEL er ætlað til að vernda, gefa raka og mjúka augun með meðhöfnum til svæðisnum til svæðisnum augnþrúki.

Engingú er notkun í augu.

2. HENTAR FYRIR

- Fullorðna,
• Børn: Forældre eller umrúnunaraðilar eiga að gefa augndropana,
• Þungþáar konur og konu með barn á brjósti samkvæmt fyrirgjáandi þekkingu.

3. FRÁBENDINGAR

Ekki má nota THEALOZ GEL ef um er að ræða óþæmi fyrir einhverju af innihaldsefnum þess (sjá Lýsing á Lækningsgæði).

4. LÝSING Á LÆKNINGATÆKI

THEALOZ GEL er augnþlaup sem inniheldur trehalósa (3 %), hyaluronsýru (sem natriumhyaluronat 0,15 %), karbómer (Karbópol 974P, 0,25 %), sorbitól, natriumhýdroxíð og vatn fyrir stungulyf.

THEALOZ GEL er dauðheimsað, fosfatfrítt, vanþrýsið, fjótandi þlaup með hlutfaust sýrustu.

THEALOZ GEL kemur í fjökammita glasi sem auðvelt er að nota. Þetta kerfi án rotnaefna hefur dauðheimsað hlautsins og kemur í vög fyrir bakteríumengun meðan á meðhöfnum stendur. THEALOZ GEL er þægilegt fyrir augun þar sem það er án rotnaefna. Það að rotnaefni séu ekki til staða verndar augnvef og leðir ekki til viðbráða hjá þeim sem eru viðkvæmir fyrir rotnaefnum.

5. ÁVINNINGUR, VIRKNI OG VERKUNARHÁTTUR

Háblágt er að nota THEALOZ GEL við þvægindum, svða, tífningu um ábskotahlut eða ertingu í augu. Þessi einkenni geta verið vegna:

- útanákomandi þátta svo sem vind, ryks, mengunar, ryks, sólris eða kalds umhverfis, þurr hiti, loftkeiðing, flugferða, langvarandi vinnu fyrir framan tölvuskjá,
• aðgerðar á augu svo sem sjónlagságerðar eða við skjá á augasteini.

THEALOZ GEL veitir betri líðan í augum og langvarandi línu einkenna augnþrúks. Það styður við endurnýjun skemmda á yfirborði augans og línar þvægindi í augu sem koma fram eftir augnþvægingu.

Aðalinnihaldsefni THEALOZ GEL eru trehalósi, natriumhýdroxýsýra og karbómer (Karbópol 974P). Trehalósi er náttúrulegt efni sem finnst í mörgum plöntum og dýrum, sem geta lífað við mjög þurr skilyrði. Það hefur verndandi og rakagefandi eiginleika.

Natriumhýdroxýsýra finnst í augum hjá mönnum, bindur vatn og getur þannig raka og mjúkt yfirborði augans. Það hefur þlaupinu á yfirborði augans og veitir þannig betri líðan til lengri tíma og styttr þann tíma sem það tekur yfirborði augans að jafna sig.

Karbómer gerir THEALOZ GEL kleift að haldast lengur á yfirborði augans og veita þannig langvarandi línu á ummerkjum um og einkennum augnþrúks.

Þessi sérstaka samsetning trehalósa, natriumhýdroxýsýru og karbómers í THEALOZ GEL veitir vernd, raka og mjúkingu á yfirborði augna til lengri tíma.

6. ALMENNAR RÁÐLEGGINGAR FYRIR NOTKUN

Skammtur: 1 dropi í hvert augu, 1 til 4 sinnum á dag.

Þar sem þetta er þlaup, er THEALOZ GEL sérstaklega hentugt til notkunar að kvöldi, rétt fyrir svefn.

Ekki er þörf á sérstaki þjálfun til þess að nota THEALOZ GEL. Ef þú notar augnlínur: þarf að fjarlægja þær áður en THEALOZ GEL er notað.

Eftir notkun skal láta í að minnsta kosti 30 mínútur áður en Insurnar eru settar aftur í augun.

Þvöld hendur vö fyrir notkun.

Notið ekki áhönd til að opna glasið.

Þegar þú notar dropaglasið í fyrsta skipti ættir þú fyrst að æfa þig í að nota það með því að kresta hlaut út einn dropa sem fer ekki í augað, áður en dropi er settur í augað.

Þegar þú ert viss um að þú getir gefið einn dropa í einu skaltu velja þá stöðu sem þér finnst þægilegust fyrir dropaglöfina (þú getur sest niður, legið á bakinu eða staðið fyrir framan spegli).

1) Skrifðu lokað af.

Til að koma í vög fyrir mengun, má stúturinn á glasiu ekki komast í snertingu við neitt.

2) Setjið einn dropa undir neðra augnlokk með því að kresta glasið, draga augnlokk þværingu niður og hafa upp á sama tíma.

Athugaðu að það geta lítið nokkrar sekúndur á milli þess að kresta er og þar til dropinn kemur út. Ekki kresta af mikið. Lokaðu auganu varlega eftir dropaglöfina. Endurtekið fyrir hitt augað.

3) Eftir hvern notkun og áður en lokað er sett aftur á skal hrsta glasið kröfulega til að losna við alla lausa sem eftir er á stút glasiinu. Þetta er nauðsynlegt til að tryggja góð á dropum söðar meir.

4) Skrifðu lokað á glasið.

7. VARÐARREGLUR FYRIR NOTKUN

Fjlnota vara fyrir einn sjúkling.

Ekki nota sama glas fyrir fleiri en einn einstakling þar sem það getur valdið krossmengun.

Athugið hvort þakkingin sé óskemmd fyrir fyrstu notkun: notið engingú ef glasið og stúturinn eru óþvöð og óskemmd.

Gakktu úr skugga um að innsiglið hringurinn á hettunni hafi ekki verið rullinn.

Til að koma í vög fyrir mengun, má stúturinn á glasiu ekki komast í snertingu við neitt.

Ef einnennirn versna eða lagast ekki skaltu hafa samband við heilbrigðisráðgjafarmann.

8. VARNABARÖR

Geymið þar sem böm hvorki ná til né sjá.
Ekki sprautu og ekki fyllgja.
Eftir notkun skal hvorki aka né nota vélar ef sjónin er óklár, bíddu í nokkrar mínútur þangað til sjónin verður skýr aftur. Láttu ljóða að minnsta kosti 15 mínútur á milli ef þu notar hvær mismunandi augnvrúur. Nota skal THEALÖZ GEL sjóðst. Þynnið ákveit THEALÖZ GEL eða blandið því saman við aðrar lausnir.
Glasíð getur leikið eftir fyrstu notkun ef það verður fyrir lágum loftþryggingi.

9. AUKAVEKANIR

Fyrir sambærilegar vörur hefur verið greint frá eftirfarandi aukavekanum: sláttuból auga, þokasjúki, óþemissvöðug (svo sem ofnæmi, þroti í augnkló, útblót, augnþvottur, mjög sjálfgefið erling í augum, augnveikur og augntröð).
Við notkun augnþlups getur þú fundið fyrir óþægilegum einkennum, t.d. brunatflínungu, stingjum og tilfíningu um aðskotahlut í auga í skamman tíma.
Ef þú finnur fyrir aukavekanum eða óþægindum eftir notkun þessara vöru skaltu hafa samband við heilbrigðisstarfsmann og tilkynna þessar upplýsingar til dreifingarabíla, framleiðanda eða Lyfjastofnunar (sjá upplýsingar um tengilið í lok fylgiseðlisins).

10. GEYMSLUKLYRÐI OG FÖRGUN

Geymið við 2 °C til 25 °C.
Verjið vöruna gegn beinu sólarljósi eða raka.
Hægt er að nota vöruna í lofti að 3 mánuði eftir að glasíð er fyrst opnað. Að þeim tíma lönnum skal vörnunni fargað jafnvel þó svo eitthvað sé eftir.
Notið ekki eftir fyllingardagsetninguna sem tilgreind er á glasinu og ytri ísláginu.
Fyllingardagsetningin vísar til síðasta dags mánaðarins sem þér kemur fram svo lengi sem þakningin er óskemmd og hefur verið geymið við rétt skilyrði.

Fargið á ábyrgan hátt og í samræmi við staðbundnar leiðbeiningar (glasinu skal henda með heimilissopni en ytri eskin og fylgiseðlinn eru endurvinnanleg).
Dagsetning og útgáfunúmer fylgiseðlisins:
Útg. 3 – 06/2025

Framleiðandi:

Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Frankríki
www.laboratoires-thea.com
+Tengiliða- vafi
Dreifingararði:
Provision ehf. Heildverslun,
Grandagarði 13,
101 Reykjavík
Heilbrigðisfyrirvald:
Lyfjastofnun,
Vinklandið 14,
113 Reykjavík
lyfjastofnun@lyfjastofnun.is – www.lyfjastofnun.is
© 2024, Laboratoires Théa, Öll réttindi áskilnin.
THEALÖZ® er vörumerki Laboratoires Théa.

CE 0459



1. INDIKASJONER
THEALÖZ GEL er indisert til á beskytja, fukt og smær eynene ved behandling av moderat til svært tørre øyne.
Til brúk í eynene.

2. EGNET FOR

- Vokse
- Barn: Forældre eller omsorgspersoner skal drøppe produktet
- Kvinner som er gravide eller ammer, basert på gjeldende kunnskap

3. KONTRAINDIKASJONER
Brúk ekki THEALÖZ GEL hvis du er allergisk overfor noen av innholdsstoffene (se Utstyrsbeskrivelse).

4. UTSTYRSBESKRIVELSE
THEALÖZ GEL er en øyegel som består av trehalose (3 %), hyaluronreys (som natriumhyaluronat) 0,15 %, karbomer (karbopol 974P, 0,25 %), sorbitol, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.

THEALÖZ GEL er en steril, kosafri, hypoton og pH-neutrale flytandi gel.
THEALÖZ GEL leveras i en brúkenveitt flerdosaflecke. Dette systemet uten konserveringsmiddel opprettholder gelens sterilitet og forhindrer bakteriekontaminering under behandlingens varighet. THEALÖZ GEL er skårmsort for eynene siden det er uten konserveringsmiddel. Fraværet av konserveringsmidler beskytter øyevær og forårsaker heller ingen reaksjoner hos brukere som er følsomme overfor konserveringsmidler.

5. FORDELER, EFFEKT OG VIRKNINGSMEKANISME
THEALÖZ GEL anbefales ved ubehag, stikende følelse, følelse av fremmedlegeme eller iritasjon i eynene. Disse symptomene kan være forårsaket av:


- ytre faktorer som vind, røyk, forurensninger, støv, sol, varme eller kalde forhold, tørr varme, klimaendring, flyreiser, lange arbeidstimer foran dataskjermen;
- øyeparasitter som synskorrigerende eller for grå stær.

THEALÖZ GEL gir viðbætt og eynene, langvarig lindring av symptomene på tørre øyne. Det bidrar til reparasjon av skader på øyeværfylltan og flocrer ubehag på øyeværfylltan som oppstår etter øyeparasitter.
Hovedingrediensene i THEALÖZ GEL er trehalose, hyaluronreys og karbomer (karbopol 974P).
Trehalose er et naturlig stoff som finnes i mange planter og dyr, og som kan overleve under ekstremt tørre forhold. Det gir beskyttende og fuktende egenskaper.
Hyaluronreys, som finnes naturlig i det menneskelige øyet, holder på væske, fukter og smører øyets overflate. Den holder gelen på øyeværfylltan og gir langvarig lindring og reduserer tilhellingssiden til øyeværfylltan.

Karbomer gjør at THEALÖZ GEL blir på øyets overflate i lengre tid, og gir langvarig lindring av tegn og symptomer på tørre øyne. Den spesielle kombinasjonen av trehalose, hyaluronreys og karbomer i THEALÖZ GEL, gir særlig langvarig beskyttelse, fuktning og smøring av øyeværfylltan.

6. GENERELLE ANBEFALINGER FOR BRUK
Doseriing: 1 dråpe i hvert øye, 1-4 ganger daglig.
Siden det er en gel, er THEALÖZ GEL spesielt egnet for brúk om kølden, rett for senged.
Det kreves ingen spesiell oppløring for å bruke THEALÖZ GEL. Hvis du bruker kontaktlinser, må du fjerne dem før du bruker THEALÖZ GEL.
Efter brúk skal du vente minst 30 minutter før du setter inn linser igjen.
Vask hendene godt før brúk.
Ikke bruk noe slags verkøy for å åpne flasken.
Når du bruker den for første gang, før du har en dråpe på øyet, bør du først og fremst øve deg på å bruke dråpeflasken ved å klemme den sakte før å få ut en dråpe borte fra øyet.
Når du er sikker på at du kan påføre en dråpe om gangen, velg den stillingen du synes er mest behagelig for drøppingen av dråpene (du kan sette deg ned, ligge på ryggen eller stå foran et speil).

1) Skru ut hetten.
Ikke la tappen på flasken komme i kontakt med noe som helst for å unngå kontaminering.

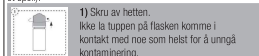

2) Påfør én dråpe i fornn på øyelokket ved å klemme på flasken, mens du forsiktig trekker det nedre lokket ned og ser opp.
Vær oppmerksom på at det kan være noen sekundærers forsøkelse mellom klemning og at dråpen kommer ut. Ikke klem for hardt. Lukk øyet forsiktig etter påføring. Gjerla på det andre øyet.

3) Etter hver brúk og før du tar på igjen hetten, skal flasken ristes kraftig for å kvitte seg med gjenværende oppløsning fra tappen av flasken. Dette er nødvendig for å sikre at de påfølgende dråpene kan påføres.

4) Skru hetten for å lukke flasken

7. FORSIKTIGHETSREGLER

Produkt til fergangbrúk hos én pasient.
For å hindre smitteoverføring skal flasker ikke deles mellom flere personer.

Sjekk at þakningin er intakt for første gang brúk av produktet.
Sjekk at sikkerhetstingin på flasken er intakt for første gang brúk av flasken.

For å unngá forurensning skal flasketuppen ikke berara noe sem helst. Du má kontakta helsepersonell dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.

8. ADVARSLER

Oppbevaras utlígjengelig for barn.
Má ikke injiseres eller svelges.
Ikke kjør eller bruk maskiner dersom du får tåkesyn eller brúk: vent noen minutter til synet blir klart igjen. Vent minst 15 mínútur mellom brúk av to forskjellige øyepreparater.

THEALÖZ GEL skal brúkas síst.
THEALÖZ GEL má ikke fortynnes eller blandes sammen med andre løsninger.
Hvis flasken utsettes for lav atmosfærisk trykk etter første gang brúk, kan den lekkje.

9. BIVIRKNINGER

Følgende bivirkinger er rapportert for tilsvarende utstyr: klissete øyne, tåkesyn, allergiske reaksjoner (som overfølsomhet, hevelse i øyelokket, utslett), rennende øyne, sjeldn forkomst av øymeritagsyn, øyemertor og øyevørðhet. Når du bruker en øyegel kan du i en kort periode oppleve plagsomme symptomer, som svie, stikk og følelse av fremmedlegeme i øyet. Dersom du merker bivirkinger eller uvanlige fornemmelser etter brúk av dette produktet, kontakt helsepersonell og meld opplysningene til den lokale distributøren, til tilvirkeren eller til din lokale helsemyndighet (se kontakter på slutten av denne bruksanvisningen).

10. OPPBEVARINGS- OG AVHENDINGSBETINGELSER

Oppbevaras ved 2 °C og 25 °C.
Skal ikke utsettes for direkte sollys eller fuktighet.
Produktet kan brúkas inn til 3 máneðir etter første åpning av flasken. Etter dette skal eventuelle rester av produktet kastes på forsvarlig vis.
Skal ikke brúkas etter utløpsdatoen som er angitt på flasken og esken.

Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte máneðen så lenge þakningin er intakt og har blitt oppbevart riktig.
Kast produktet på forsvarlig vis i overensstemmelse med lokale krav (flasken skal kastes sammen med husholdningsavfall, ytteresken og þakningsvegglettið kan gjenvinnas).

Bruksanvisningens utgivelsesdato og versjonsnummer:
Ver. 3 – 06/2025

Tilvirkar:
Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Frankríki
www.laboratoires-thea.com
+Contact us - avsnitt

Distributar:
Thea Nordic AB
Frisöndaväjs Allé 1
169 70 Schae, Sverige
www.thea-nordic.com

Helsemyndigheter:
Direktoratet for medisinske produkter, Postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: +47 22 89 77 00
e-post: mso@dmp.no
www.dmp.no

© 2024, Laboratoires Théa. Alle rettigheter forbeholdes.
THEALÖZ® er et varemærke som tilhører Laboratoires Théa.


CE 0459

PIKTÖGRAMMER PÁ ÞAKNINGUN

SKÝRINGAR Á MYNDTÁKNUNUM Á UMBÖÐUNUM

BETYDNINGEN AV PIKTÖGRAMMENE PÁ FORÞAKNINGUN

	Fremstiller Framleiðandi
	Þinkar Batchnummer Lotunúmer Batchkode
	Fremstillingsdato Framleiðingardagsetning Þringingardato
	Dato for sidste anvendelse Notist fyrir Brúkas innan-dato
	Temperaturgrænser Hlötisgrænir Temperaturgrænser
	Steriliseret i henhold til aseptiske teknikker Dauðhreinsað með antíqitarteknikker Steriliserat ved brúk av aseptiske teknikker
	Medicinsk utstyr Lækningsteki Medisinsk utstyr
	Læs indlagssiden Skoðó notkunarleiðbeiningar Les þakningsvegglettið
	Má ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget. Se brúksanvisningina. Notið ekki ef umböðir eru skemmdar, sjá notkunarleiðbeiningar
	Skal ikke bruges hvis pakningen er skadet. Sjekk brúksanvisningina.
	Advarsel Varó Advarsel
	Produktet må ikke udsættes for direkte sollys Geymið þarf stísljósí Beskyttes mot sollys
	Opbevares tørt Geymið á þurrum stað Hóðles turr
	Katalognummer Vínulistanúmer Delenummer
	Unik enhedsidentifikator Einvakmið auðkenni tákis Unik enhedsidentifikator
	Enkelt sterilt barriersystem med beskyttende emballage udenfor Stakt dauðhreinsað vamaerki með ytri hlífbarumbúðum
	Enkelt sterilt barriersystem med beskyttende emballasje utenpå
	Steriliseret ved hjælp af damp eller tørt varme Dauðhreinsað með gufu eða þurrum hita Steriliserat ved hjalp av damp eller turr varme
	Kun til brug på en enkelt patient - fergangbrúk Einn sjúklingur - Fjótta Enkeltþasientin - fergangbrúk

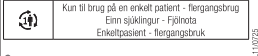

100007525110205