

AL PETIT BUDGET ENURESIS ALARM



Behandling med AL-enuresis apparat løser problemet med ufrivillig vandladning om natten. Undersøgelser viser, at over 83% af samtlige børn, behandlet med AL-enuresis apparat, bliver tørre.

Metoden er testet af læger verden over og ledende børnelæger og urologer er enige om at anbefale alarmbehandling, som første behandling af enuresis nocturna (ufrivillig natlig vandladning).

AL-enuresis apparat består af en alarmenhed, som via en ledning forbindes til føleren. Ved blot få dråber urin aktiveres alarmeren og vækker barnet, som så skal gå på toilettet og tømme blæren. På denne måde optrænes de reflekser, som barnet ikke har fået udviklet i den tidlige barndom. Børnene bliver bevidste om, at de selv har kontrollen over deres blærefunktion.

En typisk behandling varer 6-12 uger. Alarmeren kan med fordel anvendes fra 5 års alderen og opefter. AL-enuresis apparatet er også med succes anvendt af voksne.

Hvad er vigtigt at vide for at få et positivt resultat: Det er vigtigt, at apparatet bruges hver nat i behandlingsperioden. Barnet skal omhyggeligt instrueres i anvendelsen af apparatet f.eks selv være med til at afprøve alarmeren før brug.

Barnet skal føle sig tryk ved apparatet og forældrene være villige til at støtte og motivere barnet gennem hele behandlingsperioden. Man må ikke hindre barnet i at drikke i løbet af aftenen, men derimod gerne opmuntre barnet til at drikke i timerne før sengetid. AL anbefaler derudover, at man undlader at tage barnet op, men blot lader det tisse af før sengetid. Dette er med til at sikre et stabilt resultat.

Ideer til at holde børnene aktive i behandlingen
Generelt for både større og mindre børn:

Det er vigtigt, at forældrene hjælper børnene med at være aktive og motivere i behandlingsperioden. Sæt behandlingskortet med Mariehønen op over barnets seng og udfyld skemaet hver morgen.

Generelt til forældre:
Sov i nærheden af barnet så De også kan høre alarmeren. Væk barnet hurtigst muligt, hvis det ikke selv hører det og hjælp det ud på toilettet.

Hos de børn, der ikke er begyndt at høre alarmeren indenfor de første 14 dage anbefaler vi, at en voksen sover i samme rum og får barnet op i det øjeblik alarmeren går i gang.

Herefter vil børnene selv begynde at høre alarmeren, pletterne i sengen bliver mindre og børnene begynder at få spredte tørre nætter, hvor de enten står op uden alarm eller sover igennem.

Efter 21 på hinanden følgende tørre nætter i træk, kan man fjerne apparatet, men det er vigtigt at de tre uger overholdes for at undgå tilbagefald.

Vi ønsker Dem held og lykke med behandlingen.

Med venlig hilsen


A handwritten signature in black ink that reads "Astrid Leisner". The signature is written in a cursive, flowing style.

Hvordan fungerer alarmeren:
Før alarmeren tages i brug trækkes den lille plaststrimmel ud fra apparatet og apparatet er nu parat til brug.


AL anbefaler, at apparatet afprøves før brug. Dette gøres lettest ved at dyppe føleren i saltvand.

Når vandladningen starter aktiveres alarmeren og udsender en beep-lyd. Barnet vækkes og skal herefter fjerne føleren fra den våde trusse, husk at tørre følerhovedet af, inden der slukkes for apparatet, ved at trykke på den grønne knap på siden af apparatet.


Batteri skift:

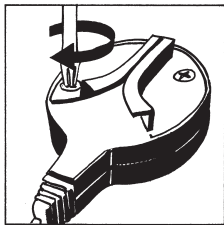

1. Skruerne på bagsiden af alarmer fjernes.

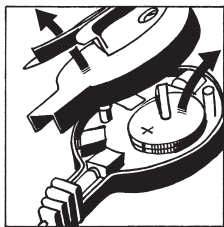

2. Klemmen tages væk og alarmer kan nu åbnes.
3. Batterierne skubbes forsigtigt ud.

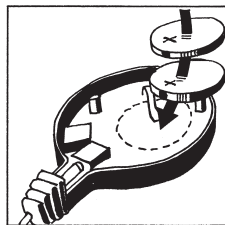

4. Plus-siderne på de nye Lithium batterier skal vende opad, disse skubbes forsigtigt ind under bøjlen.
5. Når bagsiden sættes på plads tilpasses batteribrønden varsomt over batterierne. Undgå kraftige tryk.
6. Klemmen lægges på og skruerne skrues i igen.

Hvordan anvendes alarmer Påsætning af alarmer:



1. AL Petit Budget alarm hæftes på nattøjen i skulderhøjde ved hjælp af klemmen på bagsiden af alarmer. Lav en fold i nattøjet, hvor apparatet skal sidde (som et læg), og før apparatet nedefter over folden. Apparatet sidder nu fast.
2. Føleren clipses på trussen ved at anbringe den på ydersiden af trussen og dreje den lille låsering ned over fra indersiden af trussen. Låseringen kan kun føres ned over føleren, når stroppen på låseringen er vinkelret på følerens ledning. Når låseringen er ført ned over føleren låses føleren til trussen ved at dreje låseringen en kvart omgang nedad således, at stroppen og ledningen er parallelle. (Hos piger anbefales det at anbringe ringen i skridtet af trussen og hos drenge foran på trussen, gerne på stramtsiddende trusser).



Hvis De oplever at føleren falder af i løbet af natten, er det en god idé at give barnet et par ekstra trusser på, der holder på føleren, som sidder på det indreste par trusser.

Det er vigtigt at vaske føleren flere gange ugentligt i sulfovand, da der kan ligge en film af urin på føleren.

Husk barnet må ikke rykke føleren af trussen, men skal løsne den med fingrene. Forældre anbefales at lære barnet dette inden alarmer tages i brug.

Hvis der kommer urin i selve apparatet skal det renses med vand, kontakt Astrid Leisner & Søn.

Tekniske data:

Størrelse alarm: 70 x 50 x 20 mm

Størrelse føler: 15 x 20 x 10 mm

Samlet vægt: 42 gr.

Batteri: 2 stk. Lithium 2430

Garanti: Apparatet:
2 års reklamationsret.

Føleren: En behandlingsperiode (max. 20 uger)



Er CE-mærket.
Kontakt os for en kopi af overensstemmelseserklæring.



Astrid Leisner & Son ApS
Korsvangcentret
DK-5610 Assens

