



ALLEVYN® Classic

ALLEVYN® Kiinnittävä hydrocellulaarivaahtosidos
STERILE R Steriloitu gamma säteilyllä. Ei saa käyttää uudestaan. Sisältöä ei saa käyttää, jos pussi on avattu tai vaurioitunut. Säilytettävä kuivassa paikassa <25 °C. Suojattava valolta.

Kuvaus
ALLEVYN Adhesive -sidoksella on edistynyt kolmikierroksinen rakenne, jossa on imevä hydrocellulaarivahvosidos, tarttuvan haavakontaktipinnan ja erittäin hyvin läpäisevän vedenkestävän ulkovaalon välissä. Ulkovaalo auttaa estämään bakteerien pääsyn haavaan.

Toimintatapa
ALLEVYN Adhesive -sidoksen edistynyt kolmikierroksinen rakenne mahdollistaa dynaamisen nesteekäsitteilyn ja optimaalisen haavaympäristön, joka edistää paranemista ja saattaa auttaa maseraattoriksin pienentämisessä. Taustakalvo auttaa estämään nesteen ja bakteerien pääsyn haavaan. Sidos voidaan jättää paikalleen ilman toissijaisia kiinnityksiä, ja se on helppo asettaa ja poistaa.

Käyttöohjeet
Granuloivat pinta haavat sekä krooniset ja akuutit erittävät haavat, kun paraneminen tapahtuu ilman kirurgista sukua. Tuote sopii paine haavoille, säärivaivoille, diateettisiin laikkahaavoille, pahanlaatuisille haavoille, leikkaukshaavoille, ensimmäisen ja toisen asteen palovammoille, ihonotokoidille sekä fungaalisille haavoille. ALLEVYN Adhesive -sidosta voidaan käyttää yhdessä INTRASITE® Gel-geelin kanssa nekroottisten tai rtrtoisten kuolokudosten siistittäessä haavoissa. ALLEVYN Adhesive -sidosta voidaan käyttää tulehduksissa haavoissa. Jos tuotetta käytetään tulehduksissa haavoissa, niitä on hoidettava paikallisen käytännön mukaisesti.

Vaihtoehtoiset
Haavanhoitoon akuutissa ALLEVYN Adhesive -sidos on tarkistettava paikallisen käytännön mukaisesti. Jos tuotetta käytetään tulehduksissa haavoissa, infektio on tutkittava maseraattoriksin pienentämisessä. Haavojen hoitoon ALLEVYN Adhesive -sidos voidaan käyttää yhdessä INTRASITE® Gel-geelin kanssa nekroottisten tai rtrtoisten kuolokudosten siistittäessä haavoissa. ALLEVYN Adhesive -sidosta voidaan käyttää tulehduksissa haavoissa. Jos tuotetta käytetään tulehduksissa haavoissa, niitä on hoidettava paikallisen käytännön mukaisesti.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte ALLEVYN Adhesive tillsammans med oxiderande ämnen såsom hypokloritdioxiner (t.ex. EUSOLU eller vätesuperoxid). Sådana ämnen kan bryta ner den absorberande polyuretanbeläggningen av förbandet.
• Som med alla häftande produkter kan irritation och/eller maceration av huden runt såret inträffa. Sällsynta fall av sensibilisering för förbandet har rapporterats. Sluta använda förbandet om rodnad eller sensibilisering uppträder, och rådfråga läkaren.
• Det bör noteras att olämplig användning eller alltför frekventa omläggningar, särskilt på patienter med skör hud, kan få huden att fläna av.
• ALLEVYN Adhesive är en produkt för engångsbruk. Om det används på mer än en patient, kan korskontaminering eller infektion inträffa. Om förbandsförpackningen öppnas riskerar man att den sterila barriären bryts.

Sidosken poisto
Poista ALLEVYN Adhesive -sidos kottamattoma sidoksen reunaa ja vetämällä sitten sidos hitaasti kokonaan pois haavasta. Sakralisidokset on poistettava yläreunasta alaspäin peräaukko kohden, jotta haava ei pääse kontaminoitumaan ulosteista.
Pussin asteikko on tarkoitettu vain avuksi sidoksen valinnassa, ja riskikontaminaatio on välttävää.

Tuotteen saatavuus	Koko	Saataavuus
66000043	7,5 cm x 7,5 cm	10 kp/pakkaus
66000059	10 cm x 10 cm	10 kp/pakkaus
66000044	12,5 cm x 12,5 cm	10 kp/pakkaus
66000045	17,5 cm x 17,5 cm	10 kp/pakkaus
66000744	12,5 cm x 22,5 cm	10 kp/pakkaus
66000046	22,5 cm x 22,5 cm	10 kp/pakkaus
66000045	Sacrum 22 cm x 22 cm	10 kp/pakkaus
66000700	Sacrum 17 cm x 17 cm	10 kp/pakkaus

Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hessel Road, Hull HU3 2BN England.
*Varumärken som tillhör Smith & Nephew
*Smith & Nephew's tavamerkit ©Smith & Nephew Julkaisupäivämäärä 02/2014



ALLEVYN® Classic

ALLEVYN® Vidhäftande hydrocellulär skumförband
STERILE R Steriliserat med gammastrålning. Återanvänd inte. Använd inte innehållat om påsen är öppnad eller skadad. Förvaras på torr plats <25°C. Skyddas för ljus.

Beskrivning
ALLEVYN Adhesive har en avancerad konstruktion i tre lager, med en absorberande hydrocellulär dynga mellan ett perforerat häftande särkontaktlager och en starkt luftgenomsläpplig väntefält yttre yta som bidrar till att förhindra att sår kontamineras med bakterier.

Användningsanvisning
ALLEVYN Adhesive förbandets avancerade konstruktion i tre lager underlätta dynamisk sårhantering genom att ge en optimal sämålning, som bidrar till att ge en likt sämålning och minska macerationsrisken. Den täckande ytan bidrar till att förhindra att vätska och bakterier läcker ut. Förbandet hålls på plats utan behov av ett sekundärförband och är enkelt att applicera och ta bort.

Indikationer
Sårhantering genom sekundärläkning på yttiga granulerande, kroniska och akuta vätskande sår, sår av partiell eller fullt djup som ligger, bensår, diabetessår, cancersår, postoperativa sår, brännår av första och andra graden, tagställen och fängs sår. ALLEVYN Adhesive kan användas tillsammans med INTRASITE® Gel för nekrotiska eller gulsmetiga sår. ALLEVYN Adhesive kan användas på infekterade sår. Om produkten används på infekterade sår måste sårer behandlas enligt lokala kliniska rutiner.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte ALLEVYN Adhesive tillsammans med oxiderande ämnen såsom hypokloritdioxiner (t.ex. EUSOLU eller vätesuperoxid). Sådana ämnen kan bryta ner den absorberande polyuretanbeläggningen av förbandet.
• Som med alla häftande produkter kan irritation och/eller maceration av huden runt såret inträffa. Sällsynta fall av sensibilisering för förbandet har rapporterats. Sluta använda förbandet om rodnad eller sensibilisering uppträder, och rådfråga läkaren.
• Det bör noteras att olämplig användning eller alltför frekventa omläggningar, särskilt på patienter med skör hud, kan få huden att fläna av.
• ALLEVYN Adhesive är en produkt för engångsbruk. Om det används på mer än en patient, kan korskontaminering eller infektion inträffa. Om förbandsförpackningen öppnas riskerar man att den sterila barriären bryts.

Sidosken poisto
Poista ALLEVYN Adhesive -sidos kottamattoma sidoksen reunaa ja vetämällä sitten sidos hitaasti kokonaan pois haavasta. Sakralisidokset on poistettava yläreunasta alaspäin peräaukko kohden, jotta haava ei pääse kontaminoitumaan ulosteista.
Pussin asteikko on tarkoitettu vain avuksi sidoksen valinnassa, ja riskikontaminaatio on välttävää.

Storlekar och förpackningar	Storlek	Förpackningar
Artikel nr 66000043	7,5 cm x 7,5 cm	Kartong om 10
66000059	10 cm x 10 cm	Kartong om 10
66000044	12,5 cm x 12,5 cm	Kartong om 10
66000045	17,5 cm x 17,5 cm	Kartong om 10
66000044	12,5 cm x 22,5 cm	Kartong om 10
66000046	22,5 cm x 22,5 cm	Kartong om 10
66000045	Sacrumförband 22 cm x 22 cm	Kartong om 10
66000070	Sacrumförband 17 cm x 17 cm	Kartong om 10

Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hessel Road, Hull HU3 2BN England.
*Varumärken som tillhör Smith & Nephew
*Smith & Nephew Texten reverider den 02/2014



ALLEVYN® Classic

ALLEVYN® Pensó de espuma hidrocélular adesivo
STERILE R Esterilizado por radiação gama. Não reutilizar. Não utilizar o conteúdo se a embalagem estiver aberta ou danificada. Conservar num local seco <25°C. Proteger da luz.

Descrição
ALLEVYN Adhesive possui uma estrutura avançada trilaminar que combina uma camada adesiva perfurada de contacto com a ferida e uma película externa à prova de água e altamente permeável, que auxilia a prevenir a contaminação bacteriana da ferida.

Mecanismo de ação
A estrutura avançada trilaminar do ALLEVYN Adhesive facilita a gestão dinâmica de fluidos de modo a proporcionar um ambiente ótimo para feridas que promova a cicatrização e ajude a minimizar o risco de maceração. A película exterior auxilia na prevenção da penetração bacteriana e de fluidos. O penso pode permanecer no local de aplicação mas não cobrir todo o penso.


Indicações
Tratamento de feridas crônicas e agudas, de espessura total, parcial ou superficial, em granulação, exsudativas, por segunda intenção, tais como úlceras por pressão, úlceras de perna, úlceras do pé diabético, feridas malignas, incisões cirúrgicas, queimaduras de primeiro e segundo grau, locais dadores e úlceras fúngicas. ALLEVYN Adhesive pode ser utilizado com INTRASITE® Gel em feridas necróticas ou com fibrina. ALLEVYN Adhesive pode ser utilizado em feridas infecciosas. Nos casos em que o produto é utilizado em feridas infeccadas, estas devem ser tratadas de acordo com o protocolo clínico local.

Precauções
• Não utilize ALLEVYN Adhesive com agentes oxidantes, tais como soluções de hipoclorito (p. ex.: EUSOLU ou de peróxido de hidrogênio, porque estas podem decompor o componente absorvente de poliuretano do penso.

Remoção do penso
Para remover ALLEVYN Adhesive, levante um dos cantos do penso e puxe lentamente para trás até ter sido completamente removido da ferida. Os penos na região sagrada devem ser removidos a partir do bordo superior na direção do ânus para minimizar o potencial de contaminação fecal.

Apresentação do produto
Código Tamanho
66000043 7,5 cm x 7,5 cm
66000059 10 cm x 10 cm
66000044 12,5 cm x 12,5 cm
66000045 17,5 cm x 17,5 cm
66000044 12,5 cm x 22,5 cm
66000046 22,5 cm x 22,5 cm
66000451 Sacrum 22 cm x 22 cm
66000700 Sacrum 17 cm x 17 cm

Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hessel Road, Hull HU3 2BN Inglaterra.
*Marcas registradas da Smith & Nephew ©Smith & Nephew Data de emissão 02/2014

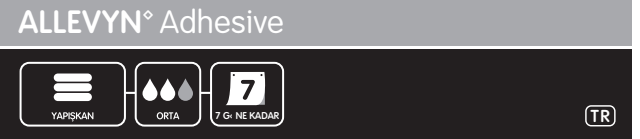

ALLEVYN® Classic

ALLEVYN® Yapışkan Hidroselüller Köpük Örtü
STERILE R Gama ışımasıyla sterilize edilmiştir. Tek kullanımlıktır. Ambalajı açık veya hasarlıysa ürünü kullanmayın. Kuru bir yerde saklayın <25°C'de. Işıktan koruyun.

Etki şekli
ALLEVYN Adhesive gelişmiş üç katmanlı yapısı, optimal yara örtmesini sağlamak için yaranın iyileşmesine destek olacak ve maserasyon riskini azaltacak şekilde dinamik bir sıvı yönetimi sağlamaktadır. Destekleyici film, sıvı ve bakterilerin önlenmesini yardımı olur. Pansuman, iklinci bir sabiliteyiye gerek olmaksızın yerinde bırakılabilir ve bu sebeple uygulaması da yerinden çıkarması da kolaydır.

Endikasyonları
Derin olmayan, granüle yaralar, kronik ve akut eksüdatif yaralar, bası ülserleri, bacak ülserleri, diyabetik ayak ülserleri, habis yaralar, cerrahi yaralar, birinci ve ikinci derece yanıklar, donor alanları ve mantar benzeri ülserler gibi tam ve kısmi kanlılıkta yaralarda ikincil intesiyonda yara yönetimi ALLEVYN Adhesive, nekrotik veya kabuklu yaralarda INTRASITE® Gel ile birlikte kullanılabilir. ALLEVYN Adhesive, enfeksiyonlu yaralarda kullanılabilir. Ürün enfeksiyonlu yaralarda kullanıldığında, yara yerli klinik protokole göre tedavi edilmelidir.

Önemler
• ALLEVYN Adhesive'i, hipoklorit solüsyonları (örn. EUSOLU veya hidrojen peroksit gibi oksitleyici maddelerle birlikte kullanmayın, çünkü bunlar pansumanın emici polietilen bülününü bozabilirler).
• Tüm yarıların ünlründe olduğu gibi, yarayı çevreyelen cilti irtılayın ve/veya maserasyon meydana gelebilir. Seyrek olarak pansumana karşı hassaslık vakaları bildirilmiştir. Kızamı ya da hassaslığı meydana gelirse, kullanımı bırakın ve bir sağlık uzmanına başvurun.
• Uygun olmayan kullanımı ya da özellikle hassas cilde sahip hastalarda pansumanın çok sık değırltirilmesi cilti soyulmasına neden olabilir.
• ALLEVYN Adhesive yalnızca tek kullanımlık bir üründür. Birden fazla hastada kullanılması halinde cizap kontaminasyon veya enfeksiyon olabilir. Pansuman ambalajının açılması sterili bariyeri bozar, bu nedenle kullanılamayan pansumanları daha sonra kullanılı için saklamamanız gerekir.

Önemler
• ALLEVYN Adhesive'i, hipoklorit solüsyonları (örn. EUSOLU veya hidrojen peroksit gibi oksitleyici maddelerle birlikte kullanmayın, çünkü bunlar pansumanın emici polietilen bülününü bozabilirler).
• Tüm yarıların ünlründe olduğu gibi, yarayı çevreyelen cilti irtılayın ve/veya maserasyon meydana gelebilir. Seyrek olarak pansumana karşı hassaslık vakaları bildirilmiştir. Kızamı ya da hassaslığı meydana gelirse, kullanımı bırakın ve bir sağlık uzmanına başvurun.
• Uygun olmayan kullanımı ya da özellikle hassas cilde sahip hastalarda pansumanın çok sık değırltirilmesi cilti soyulmasına neden olabilir.
• ALLEVYN Adhesive yalnızca tek kullanımlık bir üründür. Birden fazla hastada kullanılması halinde cizap kontaminasyon veya enfeksiyon olabilir. Pansuman ambalajının açılması sterili bariyeri bozar, bu nedenle kullanılamayan pansumanları daha sonra kullanılı için saklamamanız gerekir.

Apresentação do produto
Código Tamanho
66000043 7,5 cm x 7,5 cm
66000059 10 cm x 10 cm
66000044 12,5 cm x 12,5 cm
66000045 17,5 cm x 17,5 cm
66000044 12,5 cm x 22,5 cm
66000046 22,5 cm x 22,5 cm
66000451 Sacrum 22 cm x 22 cm
66000700 Sacrum 17 cm x 17 cm

Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hessel Road, Hull HU3 2BN Inglaterra.
*Marcas registradas da Smith & Nephew ©Smith & Nephew Data de emissão 02/2014



ALLEVYN® Classic

ALLEVYN® Samoprzetylny hydrokomórkowy opatrunek piankowy
STERILE R Wyjaławiany promieniami Gammą. Do jednorazowego użytku. Nie używać jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Przechowywać w suchym miejscu <25°C. Chronić przed światłem słonecznym.

Opis
ALLEVYN Adhesive posiada zaawansowaną budowę trójwarstwową, w skład której wchodzi chłonna hydrokomórkowa pianka zlokalizowana pomiędzy perforowaną, samoprzetylną warstwą kontaktową z powierzchnią rany, a zewnętrzną wodoodporną folią o wysokiej paroprzepuszczalności, wspomagającą profilaktykę zakażenia rany.

Używanie
Zaawansowana trójwarstwową budowa opatrunku ALLEVYN Adhesive umożliwia aktywne zarządzanie wysiękiem w celu zapewnienia wilgotnego środowiska w ranie, które może wspomagać gojenie i może pomóc w zmniejszeniu ryzyka maceracji. Folia zabezpieczająca pomaga zapobiegać przenikaniu pyłów i bakterii. Opatrunek może pozostać na swoim miejscu bez konieczności zastosowania dodatkowego przyklepca oraz jest łatwy zarówno w aplikacji, jak i w usuwaniu.

Wskazania
Do leczenia poprzez złamowanie ran płtykch, przewlekłych ran zlamniugących i ostych ran z wysiękiem, ran na pełnej i niepełnej grubości, takich jak odleżyny, owrozdzenia podudzi, owrozdzenia stopy cukrzycowej, rany nowotworowe, rany pooperacyjne, oparzenia I i II stopnia, przeszczepz skóry i owrozdzenia nowotworowe. Opatrunek samoprzetylny ALLEVYN Adhesive można stosować w połączeniu z żelem INTRASITE® Gel przeznaczonym do ran z martwicą suchą i rozległą. Opatrunek samoprzetylny ALLEVYN Adhesive można stosować na rany zakażone. W przypadku zastosowania produktu na zakażone rany, leczenie rany powinno przebiegać zgodnie z lokalnym protokołem klinicznym.

Środki ostrożności
• Nie używać opatrunku ALLEVYN Adhesive ze środkami utleniającymi, takimi jak roztwory podchlorynu (np. EUSOLU lub wodę utlenioną), ponieważ mogą one naruszyć chłonną poliuretanową część opatrunku.
• Podobnie, jak w przypadku innych produktów samoprzetylnych, może wystąpić podrażnienie skóry maceracji skóry wokół rany. Zgłoszone zostały rzadkie przypadki nadrażnienia skóry opatrunkiem. W przypadku zanieczyszczenia rany, należy podjąć na podstawie oceny klinicznej i z uwzględnieniem lokalnych protokołów klinicznych.

Używanie opatrunku
Aby zdjąć opatrunek ALLEVYN Adhesive należy podnieść brzoż opatrunku i powoli odciągnąć do momentu całkowitego usunięcia ze skóry. Opatrunek ALLEVYN Adhesive Sacrum przeznaczony do stosowania na odcinku krzyżowym należy zdjąć, podciągając za górną krawędź opatrunku w kierunku odbytu, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia kałem.

Używanie opatrunku
Aby zdjąć opatrunek ALLEVYN Adhesive należy podnieść brzoż opatrunku i powoli odciągnąć do momentu całkowitego usunięcia ze skóry. Opatrunek ALLEVYN Adhesive Sacrum przeznaczony do stosowania na odcinku krzyżowym należy zdjąć, podciągając za górną krawędź opatrunku w kierunku odbytu, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia kałem.

Dostępność produktu		
Kod	Rozmiar	Dostępność
66000043	7,5 cm x 7,5 cm	Karton 10 szt.
66000059	10 cm x 10 cm	Karton 10 szt.
66000044	12,5 cm x 12,5 cm	Karton 10 szt.
66000045	17,5 cm x 17,5 cm	Karton 10 szt.
66000744	12,5 cm x 22,5 cm	Karton 10 szt.
66000046	22,5 cm x 22,5 cm	Karton 10 szt.
66000451	Sacrum 22 cm x 22 cm	Karton 10 szt.
66000700	Sacrum 17 cm x 17 cm	Karton 10 szt.

Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hessel Road, Hull HU3 2BN Anglia.
*Znaki Handlowe Smith & Nephew ©Smith & Nephew, data wydania 02/2014



ALLEVYN® Classic

ALLEVYN® Vidhäftande hydrocellulär skumförband
STERILE R Gamma irradiation sterilised. Do not reuse. Do not use contents if pouch is opened or damaged. Store in a dry place <25°C/77°F. Protect from light.

Description
ALLEVYN Adhesive has an advanced triple layer construction which combines an absorbent hydrocellular pad between a perforated adhesive wound contact layer and a highly permeable waterproof outer film that aids in the prevention of bacterial contamination of the wound.

Mode of action
The advanced triple layer construction of ALLEVYN Adhesive facilitates dynamic fluid management to provide the optimal wound environment, which promotes healing and may help minimise the risk of maceration. The backing film aids in the prevention of fluid and bacterial strike through. The dressing can be left in place without the need for secondary fixation and is both easy to apply and remove.

Indications
Wound management by secondary intention on shallow, granulating wounds chronic and acute exudative wounds, full and partial thickness wounds such as pressure ulcers, leg ulcers, diabetic foot ulcers, malignant ulcers, surgical wounds, first and second degree burns, donor sites and fungating ulcers. ALLEVYN Adhesive can be used in conjunction with INTRASITE® Gel for necrotic or sloughy wounds. ALLEVYN Adhesive may be used on infected wounds. Where the product is used on infected wounds the wounds should be treated as per local clinical protocol.

Frequency of change
During the early stages of wound management ALLEVYN Adhesive should be inspected according to local clinical protocol. Where the product is used on infected wounds the infection should be inspected and treated as per local clinical protocol. Dressings can be left in place for up to 7 days depending on the condition of the wound and the surrounding skin or until exudate is visible and approaches to within 0.5cm (1/4in.) of the edge of the dressing pad, whichever is sooner. If dressings are applied to the sacral area, they may be left in place for up to 5 days, however, due to the increased potential for contamination and infection in this area, increased monitoring of dressing adherence may be required as per local clinical protocols. The decision of when to change should be dependent upon clinical assessment and local protocols should also be taken into consideration.

Precautions
• Do not use ALLEVYN Adhesive with oxidising agents such as hypochlorite solutions (eg. EUSOLU or hydrogen peroxide, as these can break down the absorbent polyurethane component of the dressing.
• In common with all adhesive products, irritation and/or maceration of the skin surrounding the wound may occur. Infrequently cases of sensitivity to the dressing have been reported. If reddening or sensitisation occur, discontinue use and consult a healthcare professional.
• It should be noted that inappropriate use, or too frequent dressing changes, particularly on patients with fragile skin, can result in skin stripping.
• ALLEVYN Adhesive is a single use product. If used on more than one patient, cross-contamination or infection may occur.
Opening the dressing pack compromises the sterile barrier therefore any unused dressing should not be retained for use at a later date.

Dressing removal
To remove ALLEVYN Adhesive, lift one edge of the dressing and slowly peel back until the completey remaining dressing is removed. Sacral dressings should be removed from the toe edge down towards the anus to minimise the potential for faecal contamination.

Product Availability	Size	Availability
66000043	7.5cm x 7.5cm / 3in. x 3in.	Carton of 10
66000059	10cm x 10cm / 4in. x 4in.	Carton of 10
66000044	12.5cm x 12.5cm / 5in. x 5in.	Carton of 10
66000045	17.5cm x 17.5cm / 7in. x 7in.	Carton of 10
66000044	12.5cm x 22.5cm / 5in. x 9in.	Carton of 10
66000046	22.5cm x 22.5cm / 9in. x 9in.	Carton of 10
66000451	Sacrum Dressing 22cm x 22cm / 9in. x 9in.	Carton of 10
66000700	Sacrum Dressing 17cm x 17cm / 6 3/4in. x 6 3/4in.	Carton of 10

Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hessel Road, Hull HU3 2BN Anglia.
*Trade Marks of Smith & Nephew ©Smith & Nephew Date of issue 02/2014



ALLEVYN® Classic

ALLEVYN® Adhesive Hydrocellular Foam Dressing
STERILE R Gamma irradiation sterilised. Do not reuse. Do not use contents if pouch is opened or damaged. Store in a dry place <25°C/77°F. Protect from light.

Description
ALLEVYN Adhesive has an advanced triple layer construction which combines an absorbent hydrocellular pad between a perforated adhesive wound contact layer and a highly permeable waterproof outer film that aids in the prevention of bacterial contamination of the wound.

Mode of action
The advanced triple layer construction of ALLEVYN Adhesive facilitates dynamic fluid management to provide the optimal wound environment, which promotes healing and may help minimise the risk of maceration. The backing film aids in the prevention of fluid and bacterial strike through. The dressing can be left in place without the need for secondary fixation and is both easy to apply and remove.

Indications
Wound management by secondary intention on shallow, granulating wounds chronic and acute exudative wounds, full and partial thickness wounds such as pressure ulcers, leg ulcers, diabetic foot ulcers, malignant ulcers, surgical wounds, first and second degree burns, donor sites and fungating ulcers. ALLEVYN Adhesive can be used in conjunction with INTRASITE® Gel for necrotic or sloughy wounds. ALLEVYN Adhesive may be used on infected wounds. Where the product is used on infected wounds the wounds should be treated as per local clinical protocol.

Frequency of change
During the early stages of wound management ALLEVYN Adhesive should be inspected according to local clinical protocol. Where the product is used on infected wounds the infection should be inspected and treated as per local clinical protocol. Dressings can be left in place for up to 7 days depending on the condition of the wound and the surrounding skin or until exudate is visible and approaches to within 0.5cm (1/4in.) of the edge of the dressing pad, whichever is sooner. If dressings are applied to the sacral area, they may be left in place for up to 5 days, however, due to the increased potential for contamination and infection in this area, increased monitoring of dressing adherence may be required as per local clinical protocols. The decision of when to change should be dependent upon clinical assessment and local protocols should also be taken into consideration.

Precautions
• Do not use ALLEVYN Adhesive with oxidising agents such as hypochlorite solutions (eg. EUSOLU or hydrogen peroxide, as these can break down the absorbent polyurethane component of the dressing.
• In common with all adhesive products, irritation and/or maceration of the skin surrounding the wound may occur. Infrequently cases of sensitivity to the dressing have been reported. If reddening or sensitisation occur, discontinue use and consult a healthcare professional.
• It should be noted that inappropriate use, or too frequent dressing changes, particularly on patients with fragile skin, can result in skin stripping.
• ALLEVYN Adhesive is a single use product. If used on more than one patient, cross-contamination or infection may occur.
Opening the dressing pack compromises the sterile barrier therefore any unused dressing should not be retained for use at a later date.

Dressing removal
To remove ALLEVYN Adhesive, lift one edge of the dressing and slowly peel back until the completey remaining dressing is removed. Sacral dressings should be removed from the toe edge down towards the anus to minimise the potential for faecal contamination.

Product Availability	Size	Availability
66000043	7.5cm x 7.5cm / 3in. x 3in.	Carton of 10
66000059	10cm x 10cm / 4in. x 4in.	Carton of 10
66000044	12.5cm x 12.5cm / 5in. x 5in.	Carton of 10
66000045	17.5cm x 17.5cm / 7in. x 7in.	Carton of 10
66000044	12.5cm x 22.5cm / 5in. x 9in.	Carton of 10
66000046	22.5cm x 22.5cm / 9in. x 9in.	Carton of 10
66000451	Sacrum Dressing 22cm x 22cm / 9in. x 9in.	Carton of 10
66000700	Sacrum Dressing 17cm x 17cm / 6 3/4in. x 6 3/4in.	Carton of 10

Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hessel Road, Hull HU3 2BN Anglia.
*Trade Marks of Smith & Nephew ©Smith & Nephew Date of issue 02/2014

©Smith & Nephew Utgivelsesdato 02/2014 10601170 1860 0008 44056